



Science **made** smarter

Οδηγίες χρήσης – EL

Sera™



D-0140505-D – 2026/05



Interacoustics

Πίνακας περιεχομένων

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
1.1	Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο	1
1.2	Ενδεδειγμένη χρήση	1
1.3	Αντενδείξεις	1
1.4	Περιγραφή προϊόντος	1
1.5	Κλινικά οφέλη	3
1.6	Προειδοποιήσεις	4
1.7	Δυσλειτουργία	4
1.8	Διάθεση του προϊόντος	4
2	ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	5
2.1	Γενικά	5
2.2	Προσοχή - γενικά	5
2.3	Περιβαλλοντικοί παράγοντες	7
2.4	Ηλεκτρική και ηλεκτροστατική ασφάλεια	7
2.5	Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)	7
2.6	Κίνδυνοι έκρηξης	7
2.7	Χρήση σε οικιακό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης	8
2.8	Μέτρηση της ασφάλειας και του κλινικού οφέλους	8
2.9	Διάφορα	8
2.10	Χρήση του εξοπλισμού κατόπιν μεταφοράς και αποθήκευσης	8
3	ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	9
3.1	Άνοιγμα συσκευασίας και επιθεώρηση	9
3.2	Σήματα	10
3.3	Εγκατάσταση της βάσης	11
3.4	Εγκατάσταση του εκτυπωτή ετικετών HM-E200 (προαιρετικά)	12
3.4.1	Φόρτιση μπαταρίας	13
3.4.2	Τοποθέτηση χαρτιού ετικετών στον εκτυπωτή	13
3.4.3	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εκτυπωτή	13
3.4.4	Σύνδεση του ασύρματου εκτυπωτή στο Sera™	13
3.4.5	Εκτυπωτής εκτός σύνδεσης	14
3.5	Το υλισμικό Sera™	15
3.6	Σύνδεση του καλωδίου του ανιχνευτή στο Sera™	16
3.7	Σύνδεση των μετατροπέων στον προενισχυτή	16
3.8	Σύνδεση των καλωδίων ηλεκτροδίων στον προενισχυτή	17
3.9	Χρήση του μορφοτροπέα IP30 με ακροφύσια ή κάψες (μόνο ABRIS)	17
3.10	Σύνδεση με τον προαιρετικό ελεγκτή διέλευσης	18
3.11	Μορφοτροπείς και βαθμονόμηση	18
3.12	Φόρτιση και τροφοδοσία του Sera™	19
3.12.1	Η μπαταρία	19
3.13	Διάρκεια ζωής της μπαταρίας και χρόνος φόρτισης	19
3.13.1	Ενδεικτικές λυχνίες στο Sera™	20
3.14	Πακέτο λογισμικού HearSIM™	21
3.15	Άδεια χρήσης	21
3.15.1	Προσθήκη νέας άδειας χρήσης στο Sera™	21
3.16	Ενημέρωση του υλικολογισμικού	22
4	ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	23
4.1	Γενικές προφυλάξεις	23
4.2	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Sera™	24
4.3	Δοκιμές κατά τη διάρκεια της φόρτισης	24
4.4	Ένδειξη κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας	24
4.5	Επισκόπηση λειτουργίας και κουμπιών Sera™	25
4.5.1	Η μορφή οθόνης Sera™	25
4.5.2	Κοινά κουμπιά λειτουργίας	26
4.5.3	Πληκτρολόγιο (ειδικοί χαρακτήρες)	26

4.5.4	Αρχική οθόνη	28
4.5.5	Προσθήκη ενός νέου ασθενούς	29
4.5.6	Σύγκρουση αναγνωριστικού ασθενούς	30
4.5.7	Επιλογή από τη λίστα ασθενών	31
4.6	Γενικές πληροφορίες δοκιμής	32
4.6.1	Προετοιμασία ασθενούς - Αυτοματοποιημένη δοκιμή ABR	32
4.6.2	Προετοιμασία ασθενούς - δοκιμή OAE	32
4.6.3	Χειρισμός και επιλογή ακροφυσίων αυτιού	33
4.6.4	Χρήση των EarCups	33
4.6.5	Έναρξη μιας δοκιμής	34
4.6.6	Επιλέξτε τύπο δοκιμής	35
4.6.7	Καταχώρηση πεδίου που σχετίζεται με τη δοκιμή	35
4.6.8	Σύμβολα αποτελεσμάτων εξέτασης	36
4.6.9	Λόγος διακοπής για ελλιπή δοκιμή	36
4.6.10	Εκτύπωση κατόπιν δοκιμής	37
4.7	Αυτοματοποιημένη δοκιμή ABR	38
4.7.1	Αυτοματοποιημένη οθόνη αρχικής δοκιμής ABR	38
4.7.2	Οθόνη ελέγχου εμπέδησης	39
4.7.3	Αυτοματοποιημένη οθόνη μέτρησης ABR	40
4.7.3.1	Γραμμή θορύβου	41
4.7.3.2	Γραμμή χρόνου	41
4.7.3.3	Οθόνη δοκιμής που έγινε	41
4.8	Δοκιμή OAE	44
4.8.1	Αρχική οθόνη δοκιμής OAE	44
4.8.2	Οθόνη ελέγχου ανιχνευτή	45
4.8.3	Οθόνη μέτρησης OAE	47
4.8.3.1	Μπάρα σταθερότητας ανιχνευτή	48
4.8.3.2	Γραμμή θορύβου	49
4.8.3.3	Γραμμή χρόνου	49
4.8.3.4	Οθόνη δοκιμής που έγινε	49
4.8.3.5	Σταθερότητα ανιχνευτή % (μόνο DPOAE)	52
4.8.3.6	Σταθερότητα ερεθίσματος % (μόνο ΤΕΟΑΕ)	52
4.8.3.7	Σφάλμα %	52
4.8.3.8	Χρόνος	52
4.9	Σύντομη δοκιμή	53
4.9.1	Γενικά	53
4.9.2	Αποθήκευση μιας σύντομης δοκιμής	53
4.10	Εκτύπωση	54
4.10.1	Τρόποι εκτύπωσης	54
4.10.2	Μορφή εκτύπωσης ετικέτας	54
4.11	Ανασκόπηση ασθενών και αποθηκευμένων συνεδριών	55
4.11.1	Επιλογή ασθενή	55
4.11.2	Αναζήτηση ασθενούς	55
4.11.3	Κουμπί δοκιμής	55
4.11.4	Προβολή αποθηκευμένων δοκιμών	55
4.11.4.1	Εκτύπωση αποθηκευμένης δοκιμής	56
4.11.5	Ανασκόπηση μιας αποθηκευμένης δοκιμής	57
4.12	Διαχείριση χρηστών στη συσκευή	58
4.12.1	Γενικά	58
4.12.2	Επιλογή του χρήστη (προαιρετικά)	58
4.12.3	Εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης	58
4.12.4	Λανθασμένος κωδικός πρόσβασης	59
4.13	Setup (Ρύθμιση)	60
4.13.1	Οθόνη Language (Γλώσσα)	60
4.13.2	Συσκευή	61
4.13.3	Ήχος	61
4.13.4	Εκτυπωτής	62
4.13.5	Πληροφορίες	62
5	ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)	63

5.1	Γενικά	63
5.2	Ελεγκτή διέλευσης για αυτοματοποιημένο ABR (προαιρετικό)	63
5.3	Δοκιμή ακεραιότητας ανιχνευτή για ΤΕΟΑΕ	65
5.4	Δοκιμή ακεραιότητας ανιχνευτή για DΡΟΑΕ	66
6	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	67
6.1	Διαδικασίες γενικής συντήρησης	67
6.2	Διαδικασίες γενικού καθαρισμού	67
6.3	Καθαρισμός του Sera™	68
6.3.1	Οθόνη αφής	68
6.3.2	Θήκη, βάση και καλώδια	68
6.3.3	Αναλώσιμα	68
6.4	Καθαρισμός του ακροφυσίου του ανιχνευτή OWA	69
6.5	Καθαρισμός του SnapPROBE™	71
6.6	Εξαρτήματα/ανταλλακτικά	72
6.7	Αντικατάσταση μπαταρίας	72
6.7.1	Αποσυναρμολόγηση Sera™	72
6.7.2	Άνοιγμα του περιβλήματος	72
6.7.3	Αποσυναρμολόγηση του περιβλήματος	73
6.7.4	Αποσυναρμολόγηση της πλακέτας PCA	75
6.7.5	Αντικατάσταση της μπαταρίας	77
6.7.6	Αντικατάσταση της μπαταρίας του ελεγκτή περάσματος ABRIS	79
6.8	Επισκευή	80
6.9	Εγγύηση	80
7	ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	82
7.1	Όργανο Sera™ – τεχνικές προδιαγραφές	82
7.2	Προδιαγραφές συνδέσεων εισόδου/εξόδου	86
7.3	Τιμές αναφοράς βαθμονόμησης για το ερέθισμα CE-Chirp®	87
7.4	Τιμές αναφοράς βαθμονόμησης για το ερέθισμα κλικ	87
7.5	Τύποι ζεύξεων που χρησιμοποιούνται για βαθμονόμηση	87
7.6	Γενικές πληροφορίες περί προδιαγραφών	88
7.7	Προσάρτημα Α: Ερέθισμα	88
7.8	Παράρτημα Β: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)	89
8	ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	94



1 Εισαγωγή

1.1 Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο ισχύει για την έκδοση 1.31 του Sera™. Το συγκεκριμένο προϊόν κατασκευάζεται από την:

Interacoustics A/S
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Δανία
Τηλ.: +45 6371 3555
E-mail: info@interacoustics.com
Web: www.interacoustics.com

Οδηγίες χρήσης/Πρόσθετες πληροφορίες:

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία αυτού του οργάνου.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις Πρόσθετες πληροφορίες στον ιστότοπο της Interacoustics.

1.2 Ενδειγμένη χρήση

Το Sera™ με DPOAE προορίζεται για χρήση σε διαγνωστικές αξιολογήσεις της ακοής και στην καταγραφή ωτολογικών διαταραχών με τη χρήση Ωτοακουστικών Εκπομπών Προϊόντων Παραμόρφωσης (DPOAE). Ο πληθυσμιακός στόχος του Sera™ με DPOAE περιλαμβάνει όλες τις ηλικίες.

Το Sera™ με TEOAE προορίζεται για χρήση σε διαγνωστικές αξιολογήσεις της ακοής και στην καταγραφή ωτολογικών διαταραχών με τη χρήση Παροδικά Προκλητών Ωτοακουστικών Εκπομπών (TEOAE). Ο πληθυσμιακός στόχος του Sera™ με TEOAE περιλαμβάνει όλες τις ηλικίες.

Το Sera™ με ABRIS προορίζεται για χρήση στην ωτολογική αξιολόγηση και καταγραφή ωτολογικών και νευρικών διαταραχών με τη χρήση του ακουστικού προκλητικού δυναμικού από το εσωτερικό αυτί, το ακουστικό νεύρο και το εγκεφαλικό στέλεχος. Ο πληθυσμός-στόχος του Sera™ με ABRIS είναι τα νεογνά.

Το Σύστημα Sera™ για χρήση μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό όπως ακοολόγους, χειρουργούς ΩΡΛ, ιατρούς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ακοής ή προσωπικό με εφάμιλλο επίπεδο κατάρτισης. Η συσκευή δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς την απαραίτητη γνώση και εκπαίδευση για την κατανόηση της χρήσης της και της μεθόδου ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Το Sera™ προορίζεται για νοσοκομείο, κλινική, μονάδα υγειονομικής περίθαλψης ή άλλο κατάλληλο ήσυχο περιβάλλον.

1.3 Αντενδείξεις

Στις αντενδείξεις της εξέτασης συγκαταλέγονται η χειρουργική επέμβαση στο έξω ους, η πρόσφατη αναβολεκτομή, οι εκκρίσεις από το αυτί, ο οξύς τραυματισμός του έξω ακουστικού πόρου, η δυσφορία (π.χ. σοβαρή εξωτερική ωτίτιδα) ή η απόφραξη του έξω ακουστικού πόρου. Η εξέταση θα πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με ανάλογα συμπτώματα χωρίς την έγκριση του εκάστοτε θεράποντος ιατρού.

1.4 Περιγραφή προϊόντος

Το Sera™ είναι μια πολυλειτουργική φορητή συσκευή ελέγχου που μπορεί να εκτελέσει και να καταγράψει τους ακόλουθους τύπους ελέγχου ανάλογα με τις εγκατεστημένες άδειες χρήσης:

- Ωτοακουστικές Εκπομπές Προϊόντων Παραμόρφωσης (DPOAE)



- Παροδικά Προκλητές Ωτοακουστικές Εκπομπές (ΤΕΟΑΕ)
- Αυτόματα Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά Εγκεφαλικού Στελέχους (ΑΒΡΙΣ)

Οι διαθέσιμες διαμορφώσεις είναι:

- Sera™ με ΑΒΡΙΣ
- Sera™ με ΑΒΡΙΣ και Παροδικά Προκλητές Ωτοακουστικές Εκπομπές (ΤΕΟΑΕ)
- Sera™ με ΑΒΡΙΣ και Ωτοακουστικές Εκπομπές Προϊόντων Παραμόρφωσης (DΡΟΑΕ)
- Sera™ με ΑΒΡΙΣ, Παροδικά Προκλητές Ωτοακουστικές Εκπομπές (ΤΕΟΑΕ) και Ωτοακουστικές Εκπομπές Προϊόντων Παραμόρφωσης (DΡΟΑΕ)
- Sera™ με Παροδικά Προκλητές Ωτοακουστικές Εκπομπές (ΤΕΟΑΕ)
- Sera™ με Ωτοακουστικές Εκπομπές Προϊόντων Παραμόρφωσης (DΡΟΑΕ)
- Sera™ με Παροδικά Προκλητές Ωτοακουστικές Εκπομπές (ΤΕΟΑΕ) και Ωτοακουστικές Εκπομπές Προϊόντων Παραμόρφωσης (DΡΟΑΕ)

Οι διαμορφώσεις άδειας μπορούν να προστεθούν ακόμη και μετά την αγορά και τη χρήση της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 3.14 Άδειες.

Το Sera™ λειτουργεί με διαφορετικούς μορφοτροπίες και διαμορφώσεις καλωδίων. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποιες διαμορφώσεις μορφοτροπιών και καλωδίων είναι δυνατές για χρήση με το Sera™.

ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑΣ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	DΡΟΑΕ	ΤΕΟΑΕ	ΑΒΡΙΣ
SnapPROBE™ απευθείας συνδεδεμένο στο Sera™	Ναι	Ναι	Όχι
Ανιχνευτής OWA απευθείας συνδεδεμένος στο Sera™	Ναι	Ναι	Όχι
SnapPROBE™ και Ανιχνευτής OWA συνδεδεμένος απευθείας στο καλώδιο προενισχυτή	Ναι	Ναι	Ναι
IP30 απευθείας συνδεδεμένο με καλώδιο προενισχυτή	Όχι	Όχι	Ναι

Το σύστημα αποτελείται από τα ακόλουθα και προαιρετικά εξαρτήματα:

Τυποποιημένα συστατικά στοιχεία, Γενικά	Διαμορφώσεις		
	ΑΒΡΙΣ	ΑΒΡΙΣ + ΟΑΕ	DΡΟΑΕ και/ή ΤΕΟΑΕ
Συσκευή χειρός Sera™	•	•	•
Βάση Sera™	•	•	•
Βάση τροφοδοτικού	•	•	•
Προενισχυτής ¹	•	•	-
Καλώδιο USB τύπου A-B Micro	•	•	•
Θήκη μεταφοράς	•	•	•
Προσομοιωτής αυτιού βρέφους	-	•	•
Πιαστράκια καλωδίων για ηλεκτρόδια που ασφαλίζουν ¹	•	•	-
Οδηγίες χρήσης	•	•	•
Πακέτο λογισμικού HearSIM™	•	•	•
Κιτ ανιχνευτή Sera™	Προαιρετικά	•	•
Κιτ ακροφύσεων ελέγχου Sera™ ADI	•	•	•

¹ Εφαρμοζόμενο μέρος σύμφωνα με το IEC 60601-1



Κιτ καθαρισμού ανιχνευτή Sera™	•	•	•
IP/Κιτ ¹ εξαρτημάτων ανιχνευτή	•	•	•
Κιτ ¹ εξαρτημάτων EarCup	Προαιρετικά	Προαιρετικά	-
Τυποποιημένα συστατικά στοιχεία, Γενικά	Διαμορφώσεις		
	ABRIS	ABRIS + OAE	DPOAE και/ή TEOAE
Γραφίδα	•	•	•
Πανί καθαρισμού για την οθόνη αφής	•	•	•
Ιμάντας λαιμού για προενισχυτή ¹	•	•	-
Μορφοτροπίες			
SnapPROBE™ ¹	Προαιρετικά	•	•
Ανιχνευτής OWA 500 mm ¹	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Προαιρετικά
Ανιχνευτής OWA 1200 mm ¹	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Προαιρετικά
Ένθετο ακουστικό IP 30 (50 Ω) με κιτ προσαρμογών ακροφύσιου ¹	•	•	-
Ένθετο ακουστικό IP 30 (50 Ω) με κιτ προσαρμογών EarCup ¹	Προαιρετικά	Προαιρετικά	-
Προαιρετικά εξαρτήματα			
Sera™ ABRIS Pass Checker	Προαιρετικά	Προαιρετικά	-
Κιτ εκτυπωτή ετικετών HM-E200 (περιλαμβάνει εκτυπωτή, τροφοδοτικό και 2 ρολά θερμικού χαρτιού ετικετών)	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Προαιρετικά
Αναλώσιμα			
Συλλογή ακροφυσίων	Προαιρετικά	•	•
Βρεφικές κάψες	Προαιρετικά	-	-
Ηλεκτρόδια που ασφαλίζουν	•	Προαιρετικά	-
Ηλεκτρόδια καρτέλα	Προαιρετικά	Προαιρετικά	-
Επιθέματα γάζας	Προαιρετικά	-	-
Γέλη αγωγιμότητας	Προαιρετικά	-	-
Επιθέματα αλκοόλης	•	Προαιρετικά	-
Χαρτί ετικέτας εκτυπωτή	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Προαιρετικά
Κιτ ακροφύσιου ανιχνευτή	•	•	•

Τα αναλώσιμα είναι μόνο μιας χρήσης! Η επανάχρηση των αναλώσιμων υλικών μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και την ασφάλεια του ασθενούς. Ανατρέξτε στην ενότητα 2.7 Προφυλάξεις ασφαλείας. Όλα τα αναλώσιμα μιας χρήσης που περιλαμβάνονται στο Sera™ παρέχονται από την Sanibel Supply®. Το σύστημα έχει υποβληθεί σε δοκιμές μόνο με αναλώσιμα που κατασκευάζονται από την Sanibel Supply®. Η χρήση αναλώσιμων άλλων εμπορικών σημάτων ενδεχομένως να αλλοιώσει τη συμπεριφορά και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τη συσκευή και δεν συνιστάται.

1.5 Κλινικά οφέλη

Η μη διαγνωσμένη απώλεια ακοής στα βρέφη μπορεί να επηρεάσει πολλούς αναπτυξιακούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης της γλώσσας, των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, των συναισθημάτων, των γνωστικών ικανοτήτων, των ακαδημαϊκών επιδόσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Επομένως, η διάγνωση της απώλειας ακοής μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για τα άτομα καθώς και για τους συγγενείς τους.



1.6 Προειδοποιήσεις

Σε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο, ισχύουν οι ακόλουθες σημασίες για τις προειδοποιήσεις, τις ενδείξεις προσοχής και τις σημειώσεις:



Η ετικέτα **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προσδιορίζει συνθήκες ή πρακτικές που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο τον ασθενή ή/και τον χρήστη.



Η ετικέτα **ΠΡΟΣΟΧΗ** προσδιορίζει συνθήκες και πρακτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόκληση ζημίας στον εξοπλισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ένδειξη **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση πρακτικών που δεν έχουν σχέση με τραυματισμό προσώπων.

1.7 Δυσλειτουργία



Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του προϊόντος, είναι σημαντικό να προστατέψετε ασθενείς, χρήστες και άλλα άτομα από βλάβες. Επομένως, εάν το προϊόν προκάλεσε ή ενδέχεται να προκαλέσει τέτοια βλάβη, πρέπει να τεθεί αμέσως σε καραντίνα.

Τόσο οι βλαβερές όσο και οι αβλαβείς δυσλειτουργίες, που σχετίζονται με το ίδιο το προϊόν ή με τη χρήση του, πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον διανομέα από όπου αποκτήθηκε το προϊόν. Θυμηθείτε να συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, π.χ. τον τύπο βλάβης, τον σειριακό αριθμό του προϊόντος, την έκδοση λογισμικού, τα συνδεδεμένα εξαρτήματα και οποιοσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

Σε περίπτωση θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, το συμβάν πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην Interacoustics και στην τοπική αρμόδια αρχή.

1.8 Διάθεση του προϊόντος

Η Interacoustics δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα μας απορρίπτονται με ασφάλεια όταν πλέον δεν είναι χρήσιμα. Η συνεργασία του χρήστη είναι σημαντική για να διασφαλιστεί αυτό. Η Interacoustics συνεπώς, αναμένει ότι τηρούνται οι τοπικοί κανονισμοί διαλογής και απορριμμάτων, για την απόρριψη του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και ότι η συσκευή δεν απορρίπτεται με μη διαλεγμένα απόβλητα μαζί.

Σε περίπτωση που ο διανομέας του προϊόντος προσφέρει κάποιο σχέδιο επιστροφής, αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να διασφαλιστεί η σωστή απόρριψη του προϊόντος.



2 Προφυλάξεις ασφαλείας

2.1 Γενικά

Πάντοτε πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας. Κατά τη λειτουργία του ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να τηρούνται οι γενικές προφυλάξεις ασφαλείας. Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και τραυματισμό του χειριστή ή του ασθενούς.

Ο εργοδότης θα πρέπει να εκπαιδεύει κάθε εργαζόμενο στην αναγνώριση και στην αποφυγή μη ασφαλών συνθηκών και στους κανονισμούς που ισχύουν για το εργασιακό του περιβάλλον, ώστε να ελέγχει ή να εξαλείφει τυχόν κινδύνους ή άλλη έκθεση σε ασθένεια ή τραυματισμό.

Η Interacoustics γνωρίζει ότι οι κανόνες ασφαλείας στους επιμέρους οργανισμούς διαφέρουν. Εάν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου και των κανόνων του οργανισμού που χρησιμοποιεί αυτό το όργανο, θα πρέπει να υπερισχύουν οι αυστηρότεροι κανόνες.

Το Sera™ προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας ακοής (π.χ. ωτορινολαρυγγολόγους, ακοολόγους), νοσηλευτές ή τεχνικούς που έχουν εκπαιδευτεί στη σωστή χρήση της συσκευής.

2.2 Προσοχή - γενικά



Εάν το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά, μην το χειρίζεστε έως ότου πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες επισκευές και μέχρι να ελεγχθεί και να βαθμονομηθεί η μονάδα για κατάλληλη λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Interacoustics.

Μην αφήνετε τη συσκευή να πέσει και μην την υποβάλετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε κρούσεις. Εάν το όργανο υποστεί ζημιά, επιστρέψτε το στον κατασκευαστή για επισκευή ή/και βαθμονόμηση. Μην χρησιμοποιείτε το όργανο σε περίπτωση υποψίας για ύπαρξη ζημιάς.

Το εν λόγω προϊόν και τα τμήματά του θα λειτουργούν αξιόπιστα μόνο όταν ο χειρισμός και η συντήρησή τους διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, τις συνοδευτικές ετικέτες ή/και τα ένθετα. Ένα ελαττωματικό προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις στα εξωτερικά εξαρτήματα έχουν ασφαλιστεί κατάλληλα. Μέρη που έχουν σπάσει ή λείπουν ή είναι εμφανώς φθαρμένα, παραμορφωμένα ή μολυσμένα θα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως με καθαρά, αυθεντικά μέρη αντικατάστασης, τα οποία κατασκευάζονται ή διατίθενται από την Interacoustics.

Ο εξοπλισμός δεν είναι επισκευάσιμος από τον χρήστη. Οι επισκευές θα πρέπει να διενεργούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο συντήρησης. Δεν επιτρέπεται ουδεμία τροποποίηση του εξοπλισμού από οποιονδήποτε άλλον εκτός του ειδικευμένου αντιπροσώπου της Interacoustics. Η τροποποίηση του εξοπλισμού θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη.

Η Interacoustics θα καταστήσει διαθέσιμα, κατόπιν αιτήματος, διαγράμματα κυκλωμάτων, καταλόγους εξαρτημάτων, περιγραφές, οδηγίες βαθμονόμησης ή άλλες πληροφορίες που θα βοηθήσουν το εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης να επισκευάσει τα μέρη του οργάνου που η Interacoustics έχει χαρακτηρίσει ως επισκευάσιμα από το προσωπικό συντήρησης.

Κανένα μέρος του εξοπλισμού δεν δύναται να επισκευαστεί ή να συντηρηθεί κατά τη χρήση του από τον ασθενή.



Συνδέστε στο Sera™ μόνο εξαρτήματα αγορασμένα από την Interacoustics. Μόνο τα εξαρτήματα, τα οποία έχουν δηλωθεί από τη Interacoustics ως συμβατά επιτρέπεται να συνδεθούν στη συσκευή ή στη βάση.



2.3 Περιβαλλοντικοί παράγοντες



Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε το όργανο μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Συνιστάται η λειτουργία του οργάνου σε εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος από 5 °C / 41 °F έως 40 °C / 104 °F και σε σχετική υγρασία μεταξύ 15% και 93% (χωρίς συμπύκνωση).



Για τις συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην ενότητα 6.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία υγρού που μπορεί να αγγίξει οποιοδήποτε από τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή τις καλωδιώσεις. Εάν ο χρήστης υποπτεύεται ότι υγρά έχουν έλθει σε επαφή με τα μέρη του εξαρτήματος του συστήματος, η μονάδα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται έως ότου κριθεί ασφαλής από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.

2.4 Ηλεκτρική και ηλεκτροστατική ασφάλεια



Πριν από την εκτέλεση οποιοδήποτε σέρβις στα ένθετα ακουστικά, πρέπει να αποσυνδέσετε τους μορφοτροπείς και τα ηλεκτρόδια Sera™ από τον ασθενή.



Μην αγγίζετε ταυτόχρονα τις επαφές στο κάτω μέρος του οργάνου και τον ασθενή. Η συνέπεια μπορεί να είναι ένα πολύ υψηλό ρεύμα διαρροής προς τον ασθενή.

Μην ανοίγετε τη θήκη του οργάνου. Αναθέστε τη συντήρηση σε ειδικευμένο προσωπικό.

2.5 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)



Παρόλο που το όργανο πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις της ΗΜΣ, θα πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ούτως ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανεπιθύμητη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, π.χ. από κινητά τηλέφωνα κ.λπ. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε άλλο εξοπλισμό, θα πρέπει να ελεγχθεί ώστε να μην υπάρχει μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Παρακαλείσθε επίσης να ανατρέξετε στο παράρτημα που αφορά την ΗΜΣ.

2.6 Κίνδυνοι έκρηξης



Κίνδυνος έκρηξης.

Να μη χρησιμοποιείται παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών ή άλλων αερίων.

Να ΜΗ χρησιμοποιείται παρουσία εύφλεκτων αέριων μιγμάτων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν την πιθανότητα έκρηξης ή πυρκαγιάς κατά τη χρήση της παρούσας συσκευής κοντά σε εύφλεκτα αναισθητικά αέρια.



ΜΗ χρησιμοποιείτε το Sera™ σε περιβάλλον εμπλουτισμένο με υψηλές ποσότητες οξυγόνου, όπως ο θάλαμος συμπίεσης, η τέντα οξυγόνου κ.λ.π.

2.7 Χρήση σε οικιακό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης

Το όργανο είναι κατάλληλο για χρήση σε οικιακά περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης όταν προστατεύεται από την κλειστή θήκη μεταφοράς κατά τη μεταφορά.

2.8 Μέτρηση της ασφάλειας και του κλινικού οφέλους

Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του Sera™ το όργανο πρέπει να ελέγχεται και να βαθμονομείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Το σέρβις και η βαθμονόμηση πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Εάν οι έλεγχοι αυτοί δεν πραγματοποιηθούν, ενδέχεται να παραβιαστούν οι κανονισμοί για τις ιατρικές συσκευές και να ακυρωθούν οι εγγυήσεις.

Η χρήση μη βαθμονομημένων συσκευών μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα δοκιμών και δεν συνιστάται. Λανθασμένα αποτελέσματα δοκιμών μπορεί να οδηγήσουν σε ακατάλληλη θεραπεία των ασθενών.

2.9 Διάφορα

Παρακαλώ σημειώστε:

ΜΗ συνδέσετε στον υπολογιστή τον υλικό εξοπλισμό Sera™ προτού εγκαταστήσετε το λογισμικό!

Η φύλαξη σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C /32°F και άνω των 50°C /122°F μπορεί να προξενήσει μόνιμη βλάβη στο όργανο και στα παρελκόμενά του.

Μην τοποθετείτε το όργανο δίπλα σε μια πηγή θερμότητας οποιουδήποτε είδους.

Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό των μορφοτροπέων, επειδή ο κακός χειρισμός, όπως λόγου χάρη όταν πέσουν σε σκληρή επιφάνεια, μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή ζημιά στα εξαρτήματα.

2.10 Χρήση του εξοπλισμού κατόπιν μεταφοράς και αποθήκευσης

Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι το όργανο λειτουργεί σωστά. Εάν το όργανο έχει αποθηκευτεί σε ψυχρό περιβάλλον (έστω και για μικρό χρονικό διάστημα), αφήστε το όργανο να εγκλιματισθεί. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες (όπως η υγρασία του περιβάλλοντος). Ως διάρκεια εγκλιματισμού, συνιστάται περίπου 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Επίσης, συνιστάται η φύλαξη του οργάνου στην αρχική του συσκευασία, στην ταξιδιωτική του θήκη και η αποφυγή απότομων μεταβολών της θερμοκρασίας. Εάν το όργανο είναι αποθηκευμένο σε θερμότερες συνθήκες από τις πραγματικές συνθήκες χρήσης, δεν απαιτείται ιδιαίτερη προφύλαξη πριν από τη χρήση. Ωστόσο, συνιστάται ακόμη ένας σύντομος εγκλιματισμός. Διασφαλίζετε πάντοτε τη σωστή λειτουργία του οργάνου ακολουθώντας τις συνήθεις διαδικασίες ελέγχου του ακοομετρικού εξοπλισμού.



3 Άνοιγμα συσκευασίας και εγκατάσταση

3.1 Άνοιγμα συσκευασίας και επιθεώρηση

Ελέγξτε για ζημιές

Επιθεωρήστε το κουτί αποστολής και τα περιεχόμενα για σημάδια ζημιάς. Εάν διαπιστωθεί ζημιά, φυλάξτε τη συσκευασία και επικοινωνήστε με τον διανομέα σας.

Κρατήστε το κουτί

Η συσκευή διατίθεται σε ειδικά σχεδιασμένο κουτί αποστολής. Φυλάξτε το κουτί σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστραφεί η συσκευή για επισκευή/συντήρηση.

Ελέγξτε πριν από τη χρήση

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε για γρατσουνιές, εξαρτήματα που λείπουν ή άλλες ζημιές.

Αναφορά βλαβών

Αναφέρετε αμέσως στον προμηθευτή σας τυχόν ελαττώματα ή ελλείποντα είδη. Συμπεριλάβετε το τιμολόγιο, τον σειριακό αριθμό και μια περιγραφή του προβλήματος.









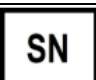



Χρησιμοποιήστε την "Αναφορά Επιστροφής"

Συμπληρώστε την Αναφορά Επιστροφής (βρίσκεται στο τέλος αυτού του εγχειριδίου) κατά την επιστροφή της συσκευής. Αυτό βοηθά στην εξασφάλιση της ακριβούς και έγκαιρης εξυπηρέτησης.



3.2 Σήματα

Επάνω στο όργανο υπάρχουν τα ακόλουθα σήματα:

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Εφαρμοζόμενα τμήματα τύπου Β. Σύμφωνα με το IEC 60601-1. Τμήματα που εφαρμόζονται στους ασθενείς, τα οποία δεν είναι αγωγίμα και μπορούν να αφαιρεθούν αμέσως από τον ασθενή.
	Το τμήμα που εφαρμόζεται είναι τύπου ΒF σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC60601-1.
	Προσοχή.
	Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης.
	Ακολουθείστε τις Οδηγίες χρήσης.
	ΑΗΗΕ (οδηγία ΕΕ) Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως μη διαλεγμένο απόβλητο, αλλά πρέπει να αποστέλλεται σε εγκαταστάσεις ξεχωριστής συλλογής για ανάκτηση και ανακύκλωση.
	Το σήμα CE σε συνδυασμό με το σύμβολο MD υποδεικνύει ότι η Interacoustics A/S πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, Παράρτημα Ι. Η έγκριση του συστήματος ποιότητας γίνεται από την TÜV - αριθμός αναγνώρισης 0123.
	Ιατρική συσκευή.
	Σειριακός αριθμός.
	Ημερομηνία κατασκευής.
	Κατασκευαστής.
	Αριθμός αναφοράς.



Σύμβολο	Επεξήγηση
	Μην επαναχρησιμοποιείτε. Τα ακροφύσια αυτιού και τα παρεμφερή είναι για μία και μόνο χρήση.
	Να διατηρείται στεγνό.
	Μεταφορά και εύρος υγρασίας φύλαξης.
	Μεταφορά και εύρος θερμοκρασίας φύλαξης.
	Λογότυπο.
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του οργάνου. Πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιησετε. Πατήστε σύντομα για να αφυπνίσετε τη συσκευή από τη λειτουργία αναστολής λειτουργίας (απενεργοποιημένη οθόνη).
IP20	Βαθμός προστασίας που παρέχει το περίβλημα κατά της εισόδου αντικειμένων. Αποτελεσματικό έναντι αντικειμένων μεγαλύτερων των 12,5 mm.
IP02	Βαθμός προστασίας που παρέχει το περίβλημα έναντι εισροής υγρών. Αποτελεσματικό κατά της στάλαξης νερού όταν η θήκη έχει κλίση 15°.
	Παραπομπή στο Sera™ Πρόσθετες πληροφορίες.

3.3 Εγκατάσταση της βάσης

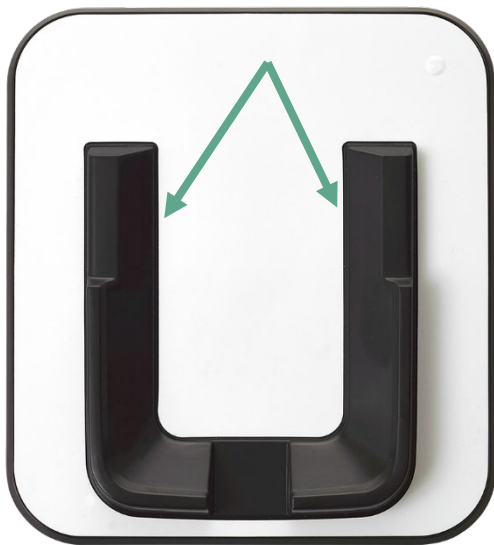


Συνδέστε το βύσμα Micro USB τύπου A-B του τροφοδοτικού στο πίσω μέρος της βάσης (1).




ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ UES12LCP-050160SPA - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ.

Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο τροφοδοτικό. Μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας για τον χειριστή ή τον ασθενή.



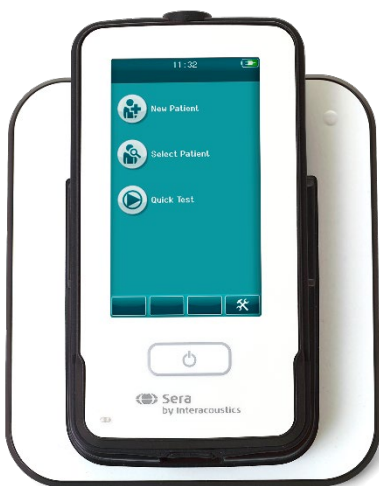Τοποθετήστε τη βάση σε όρθια θέση στο γραφείο σας. Υπάρχουν δύο οδηγοί εισαγωγής για τη σωστή τοποθέτηση του οργάνου στη βάση.



Τοποθετήστε το Sera™ στη βάση έτσι ώστε να βρίσκεται μέσα στους οδηγούς τοποθέτησης σχήματος U. Η σωστή τοποθέτηση στη βάση είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η φόρτιση της μπαταρίας.

Πιάστε το επάνω τμήμα του Sera™ πάνω από τους οδηγούς τοποθέτησης της βάσης και ανασηκώστε το από τη βάση.

3.4 Εγκατάσταση του εκτυπωτή ετικετών HM-E200 (προαιρετικά)

Η σύνδεση του Sera™ και του εκτυπωτή ετικετών HM-E200 γίνεται μέσω ασύρματης σύζευξης. Χρησιμοποιήστε μόνο τον συνιστώμενο εκτυπωτή της Interacoustics.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μόνο οι εκτυπωτές που προμηθεύονται μέσω των διανομών της Interacoustics ή της Sanibel Supply® είναι συμβατοί με το Sera™.



3.4.1 Φόρτιση μπαταρίας



Ο εκτυπωτής τροφοδοτείται από μια μπαταρία ιόντων λιθίου.

Για να φορτίσετε την μπαταρία, πρέπει να τοποθετήσετε το βύσμα του φορτιστή στην πλευρικά τοποθετημένη υποδοχή και να συνδέσετε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα ή να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε έναν υπολογιστή. Εναλλακτικά, ο εκτυπωτής μπορεί να τοποθετηθεί στη βάση του, ενώ η βάση είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα ρεύματος. Η πράσινη λυχνία στην μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή θα αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι εκτελείται φόρτιση. Εάν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η πράσινη λυχνία θα είναι σταθερή.

3.4.2 Τοποθέτηση χαρτιού ετικετών στον εκτυπωτή



Για να τοποθετήσετε ένα νέο ρολό ετικέτας στον εκτυπωτή ετικετών, ανοίξτε τον εκτυπωτή σύροντας το κουμπί στην αριστερή πλευρά του εκτυπωτή προς τα κάτω.

Τοποθετήστε το ρολό ετικετών στον εκτυπωτή με το άκρο του χαρτιού τοποθετημένο προς την οθόνη του εκτυπωτή.

Μόλις τοποθετηθεί το ρολό ετικέτας, κλείστε το κάλυμμα.

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας στην αριστερή πλευρά, ώστε ο εκτυπωτής να μπορεί να ευθυγραμμίσει σωστά τις ετικέτες με την κεφαλή εκτύπωσης.

Προαιρετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί θερμικό χαρτί με τον θερμικό εκτυπωτή HM-E200. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του εκτυπωτή HM-E200 για οδηγίες εγκατάστασης.

3.4.3 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εκτυπωτή

Πιέστε το κουμπί POWER για δύο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η πράσινη ένδειξη λειτουργίας είναι αναμμένη ενώ ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Μόλις ο εκτυπωτής τεθεί σε κατάσταση αναμονής, η πράσινη ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει, ενώ η οθόνη γίνεται μαύρη. Πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να βγάλετε τον εκτυπωτή από τη λειτουργία αναμονής.

3.4.4 Σύνδεση του ασύρματου εκτυπωτή στο Sera™

Η σύζευξη του εκτυπωτή με το Sera™ είναι απαραίτητη για να είναι δυνατή η ασύρματη εκτύπωση.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να εκτελέσετε τη ζεύξη του εκτυπωτή:

1. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα
2. Στη μονάδα χειρός Sera™, μεταβείτε στο **Setup | Printer** και πατήστε **Search**



3. Περιμένετε όσο το όργανο αναζητά ασύρματες συσκευές. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 1 λεπτό
4. Στη λίστα των συσκευών θα πρέπει να εμφανιστεί μια συσκευή με όνομα HM-E200
5. Πατήστε **Select** (Επιλογή) για να ολοκληρωθεί η ζεύξη

Παρακαλώ σημειώστε: Μην απενεργοποιείτε το Sera™ κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.

Είναι δυνατή η κοινή χρήση ενός εκτυπωτή με πολλές συσκευές Sera™. Ωστόσο, μόνο μία συσκευή μπορεί να συνδεθεί με τον εκτυπωτή κάθε φορά. Αυτό σημαίνει ότι μόνο ένα Sera™ μπορεί να ενεργοποιηθεί στην εμβέλεια του εκτυπωτή και ότι ο εκτυπωτής πρέπει να απενεργοποιηθεί μετά τη χρήση με ένα Sera™ για να συνδεθεί στη συνέχεια με επιτυχία με την άλλη συσκευή Sera™.

Εάν θέλετε να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα των μετρήσεων στον συνδεδεμένο εκτυπωτή, συνιστάται να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή πριν από τις μετρήσεις. Έτσι ο εκτυπωτής θα έχει αρκετό χρόνο για να συνδεθεί και θα είναι έτοιμος για εκτύπωση όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι μετρήσεις.

3.4.5 Εκτυπωτής εκτός σύνδεσης



Η προσπάθεια εκτύπωσης όταν ο ασύρματος εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται εκτός εμβέλειας του Sera™ θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός μηνύματος σφάλματος.

Απορρίψτε το μήνυμα επιλέγοντας το κουμπί ελέγχου στην κάτω γραμμή ελέγχου. Δοκιμάστε εκ νέου αφού ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή ή μετακινηθείτε εντός της εμβέλειας.



3.5 Το υλισμικό Sera™

Η μονάδα χειρός Sera™ αποτελείται από μια ανθεκτική οθόνη αφής, η οποία ανταποκρίνεται στην πίεση της αφής των εικονιδίων.



Βλέποντας το Sera™ σας από την μπροστινή πλευρά, θα δείτε την οθόνη αφής (1) και το κουμπί On/Off/Home (2), καθώς και μια φωτεινή ένδειξη φόρτισης (LED) (3).



Στο επάνω μέρος της συσκευής τοποθετείται ένα φως καλωδίου προενισχυτή ABR/OAE (1).



Στη βάση της συσκευής υπάρχει μια υποδοχή micro-USB (1) και η ενσωματωμένη υποδοχή για την τοποθέτηση ενός κορδονιού λαιμού (2) για τη μεταφορά της συσκευής.



3.6 Σύνδεση του καλωδίου του ανιχνευτή στο Sera™

Ο ανιχνευτής που χρησιμοποιείται με το Sera™ ονομάζεται SnapPROBE™. Το SnapPROBE™ μπορεί να συνδεθεί με δύο τρόπους στη συσκευή:

- 1) Άμεση σύνδεση με τη συσκευή (μόνο για OAE)
- 2) Μέσω του καλωδίου προενισχυτή (για OAE & αυτόματο ABR)



Βεβαιωθείτε ότι το Sera™ είναι απενεργοποιημένο πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τον ανιχνευτή ή το καλώδιο του προενισχυτή από το Sera™.

Ευθυγραμμίστε την ανυψωμένη κουκκίδα στο βύσμα του καλωδίου του αισθητήρα/προενισχυτή με την αντίστοιχη στο μπροστινό μέρος της υποδοχής στο επάνω μέρος του Sera™. Τοποθετήστε το βύσμα και πιέστε το με ασφάλεια στη θέση του. Το Sera™ έχει σχεδιαστεί για να οδηγεί το βύσμα του ανιχνευτή/προενισχυτή στη σωστή θέση.

3.7 Σύνδεση των μετατροπών στον προενισχυτή

Το καλώδιο προενισχυτή απαιτείται για τις αυτοματοποιημένες δοκιμές ABR και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με όλες τις άλλες μονάδες.



Ευθυγραμμίστε το βύσμα του καλωδίου ανιχνευτή/ένθετου ακουστικού/EarCup με την υποδοχή στην άκρη του καλωδίου του προενισχυτή που επισημαίνεται με το γράφημα. Τοποθετήστε το βύσμα και πιέστε το με ασφάλεια στη θέση του. Το Sera™ έχει σχεδιαστεί για να οδηγεί το βύσμα του ανιχνευτή/προενισχυτή στη σωστή θέση.



3.8 Σύνδεση των καλωδίων ηλεκτροδίων στον προενισχυτή



Συνδέστε τα τρία καλώδια των ηλεκτροδίων με ασφάλεια στις υποδοχές ηλεκτροδίων στην άκρη του προενισχυτή, ταιριάζοντας το χρώμα του καλωδίου με την υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή.

3.9 Χρήση του μορφοτροπέα IP30 με ακροφύσια ή κάψες (μόνο ABRIS)

Υπάρχουν δύο εκδόσεις του μορφοτροπέα IP30 για χρήση με τη μονάδα ABRIS.

Στερεοφωνικό ακουστικό ID IP30



Τα στερεοφωνικά ακουστικά ID IP30 προορίζονται για χρήση με ένθετα ακροφύσια αυτιών και. Το μορφοτροπέας φέρει τη σήμανση «Έχει βαθμονομηθεί για χρήση με ένθετα».

Στερεοφωνικά ακουστικά ID EarCups IP30

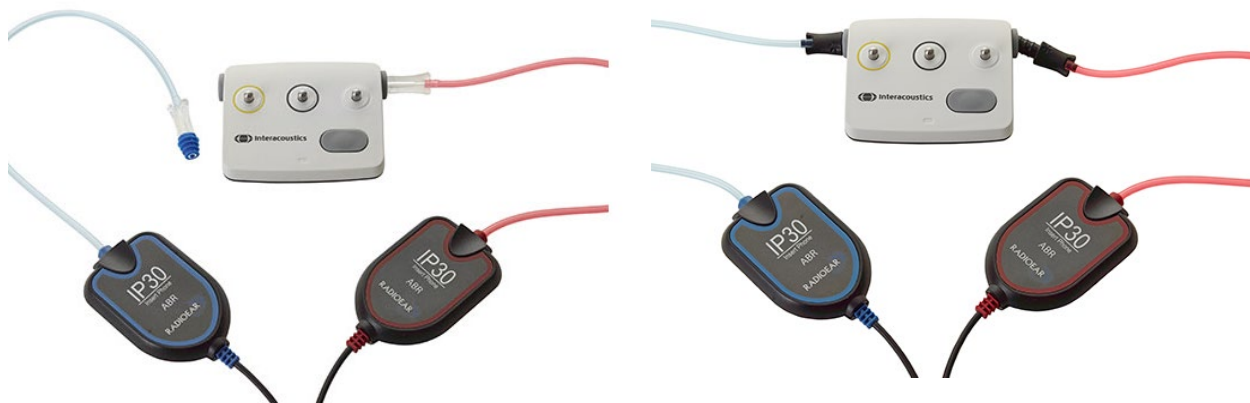


Ο στερεοφωνικός μορφοτροπέας IP30 ID EarCups προορίζεται για χρήση με EarCups μίας χρήσης μέσω προσαρμογέα. Ο μορφοτροπέας φέρει τη σήμανση «Έχει βαθμονομηθεί για χρήση με EarCups».

Παρόλο που οι μορφοτροπέες φαίνονται να είναι ίδιοι, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον μορφοτροπέα με τα αναλώσιμα (ακροφύσια ή EarCups) για τα οποία έχει βαθμονομηθεί. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να επιφέρει εσφαλμένα αποτελέσματα λόγω των διαφορών στη βαθμονόμηση. Το Sera™ ανιχνεύει αυτόματα ποιος μετατροπέας IP30 έχει συνδεθεί και επιλέγει τις σωστές ρυθμίσεις.



3.10 Σύνδεση με τον προαιρετικό ελεγκτή διέλευσης



Ο ελεγκτής διέλευσης ABRIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ακεραιότητας του υλισμικού, των καλωδίων ηλεκτροδίων και του μορφοτροπέα.

Στερεοφωνικό ακουστικό ID IP30 - τοποθετήστε ένα μπλε ακροφύσιο με φλάντζα στο άκρο του προσαρμογέα ακροφύσιου και εισαγάγετε το στις οπές του ελεγκτή διέλευσης.

Το στερεοφωνικό ID EarCups IP30 - τοποθετήστε τους μαύρους προσαρμογείς του EarCup απευθείας στις οπές του ελεγκτή διέλευσης.

(Για την εξέταση των ασθενών δεν απαιτείται ο ελεγκτής διέλευσης.)

3.11 Μορφοτροπείς και βαθμονόμηση

Οι μορφοτροπείς που χρησιμοποιούνται με το Sera™ χρησιμοποιούν ένα ειδικό βύσμα Omnetics που επιτρέπει την αποθήκευση των δεδομένων βαθμονόμησης εντός του καλωδίου/βύσματος (επίσης γνωστό ως ένας μορφοτροπέας ID). Οι μορφοτροπείς (ανιχνευτές, ένθετα ακουστικά κ.λπ.) μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ των συσκευών χωρίς να απαιτείται επαναβαθμονόμηση σε μια συγκεκριμένη συσκευή Sera™. Το Sera™ θα ανιχνεύσει αυτόματα τον τύπο του μορφοτροπέα και θα διαβάσει τα δεδομένα βαθμονόμησης από τον μορφοτροπέα ID.



3.12 Φόρτιση και τροφοδοσία του Sera™

3.12.1 Η μπαταρία

Το όργανο τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion). Η μπαταρία φορτίζεται τοποθετώντας το όργανο στη βάση που τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα.

Η μπαταρία μπορεί επίσης να φορτιστεί:

- Συνδέοντας το όργανο σε έναν τροφοδοτούμενο Η/Υ χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. Η φόρτιση κατ' αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο αργή από τη φόρτιση με τη βάση.
- Συνδέοντας τη συσκευή στο δίκτυο με τη χρήση του τροφοδοτικού από τη βάση που είναι απευθείας συνδεδεμένο στη θύρα micro USB του Sera™.
- Συνιστάται να μην πραγματοποιείτε καμία εξέταση ενώ η συσκευή βρίσκεται στη βάση, καθώς αυτό μπορεί να επιφέρει τεχνικά σφάλματα στην εξέταση, επηρεάζοντας την ποιότητα του αποτελέσματος αυτής.



Ο εν λόγω εξοπλισμός προορίζεται για σύνδεση σε άλλον εξοπλισμό σχηματίζοντας με αυτό τον τρόπο ένα ιατρικό ηλεκτρικό σύστημα. Ο εξωτερικός εξοπλισμός που προορίζεται για σύνδεση στην είσοδο σήματος, στην έξοδο σήματος ή σε άλλες υποδοχές πρέπει να συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο προϊόντος, π.χ. IEC 60950-1 για εξοπλισμό πληροφορικής και τη σειρά IEC 60601

για ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό. Επιπλέον, όλοι οι παρόμοιοι συνδυασμοί –ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα– θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στο γενικό πρότυπο IEC 60601-1, έκδοση 3, ρήτρα 16. Οποιοσδήποτε εξοπλισμός δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του IEC 60601-1 για τα ρεύματα διαρροής θα πρέπει να διατηρείται εκτός του περιβάλλοντος του ασθενούς δηλ. σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 m από το στήριγμα του ασθενούς ή θα πρέπει να παρέχεται μέσω μετασχηματιστή διαχωρισμού για μείωση των ρευμάτων διαρροής. Οποιοδήποτε άτομο συνδέει εξωτερικό εξοπλισμό σε είσοδο σήματος, έξοδο σήματος, ή άλλους συνδέσμους σχηματίζει ιατρικό ηλεκτρικό σύστημα και ως εκ τούτου φέρει ευθύνη για τη συμμόρφωση του συστήματος με τις προδιαγραφές. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τεχνικό καταρτισμένο σε ιατρικό εξοπλισμό ή με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Εάν το όργανο είναι συνδεδεμένο σε Η/Υ (ή κάποιο σύστημα πληροφοριακού εξοπλισμού), διασφαλίστε ότι δεν αγγίζετε τον ασθενή κατά τον χειρισμό του Η/Υ.

Εάν το όργανο είναι συνδεδεμένο σε έναν Η/Υ (σχηματισμός συστήματος πληροφοριακού εξοπλισμού), η συναρμολόγηση και οι τροποποιήσεις θα αξιολογούνται από εξειδικευμένο τεχνικό ιατρικών οργάνων σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας του IEC 60601.

Σημείωση! Η σύνδεση USB του οργάνου διαθέτει προστασίες μόνωσης στις συνδέσεις του ασθενούς.

Η συνέπεια της μη τήρησης της προφύλαξης αυτής, μπορεί να είναι ένα πολύ υψηλό ρεύμα διαρροής προς τον ασθενή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστούμε την αντικατάσταση της εσωτερικής μπαταρίας μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Ζημιές στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που οφείλονται στην προσπάθεια αντικατάστασης της μπαταρίας από κάποιον άλλον εκτός από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, δεν μπορούν να επισκευαστούν στο πλαίσιο της εγγύησης του προϊόντος.

3.13 Διάρκεια ζωής της μπαταρίας και χρόνος φόρτισης

Παρακαλώ σημειώστε:

Εφαρμόστε τα εξής προληπτικά μέτρα:

Η μπαταρία μπορεί να συντηρηθεί μόνο από προσωπικό συντήρησης.

- Διατηρείτε την μπαταρία πλήρως φορτισμένη
- Μην αφήνετε την μπαταρία να εξαντληθεί πλήρως
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε φωτιά και μην εφαρμόζετε θερμότητα στην μπαταρία
- Μην προκαλείτε ζημιά στην μπαταρία και μην χρησιμοποιείτε μια φθαρμένη μπαταρία
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε νερό



- Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία και μην αντιστρέφετε την πολικότητα
- Η μπαταρία αρχίζει αυτόματα να φορτίζεται όταν το Sera™ τοποθετηθεί σωστά στη βάση που τροφοδοτείται από εναλλασσόμενο ρεύμα ή όταν συνδεθεί μέσω USB στον Η/Υ
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που παρέχεται μαζί με το Sera™

- Το Sera™ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για να υποστηρίξει τη συνέχιση της λειτουργίας.
- Η μπαταρία περιέχει μια δικλείδα ασφαλείας για υπερφόρτιση της μπαταρίας. Ως εκ τούτου, η μπαταρία θα σταματήσει να φορτίζει μόλις φορτιστεί πλήρως, ακόμη και αν εξακολουθεί να παραμένει συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος. Εάν παραμείνει συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος, η μπαταρία μπορεί επομένως να χάσει τη φόρτιση της.

Όταν η μπαταρία του Sera™ είναι πλήρως φορτισμένη, διαρκεί για μία ολόκληρη ημέρα δοκιμών υπό κανονικές συνθήκες δοκιμής και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η προεπιλεγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και απενεργοποίησης.

Ο πίνακας 1 παρέχει μια εκτίμηση του χρόνου φόρτισης της μπαταρίας (ct) σε ώρες. Οι παρακάτω τιμές προϋποθέτουν ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Πίνακας 1: Εκτιμώμενος χρόνος φόρτισης (ct) του Sera™ σε ώρες.

	ct μέσω βάσης έως 90%	ct μέσω USB (H/Y) έως 90%
Off (Απενεργοποίηση)	6	9

3.13.1 Ενδεικτικές λυχνίες στο Sera™

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα χρώματα των ενδεικτικών λυχνιών LED που εμφανίζονται στο Sera™ υπό διαφορετικές συνθήκες (βλ. Πίνακας 32).

Πίνακας 2: Κατάσταση LED στο Sera™ και στη βάση.

Κατάσταση οργάνου:	OFF (Απενεργοποίηση)		ON (Ενεργοποίηση)		Εξοικονόμηση ενέργειας (αναμονή)	
Κατάσταση μπαταρίας:	Φόρτιση μπαταρίας	Η μπαταρία δεν φορτίζει / είναι πλήρης	Η μπαταρία δεν είναι πλήρης	Μπαταρία πλήρης	Φόρτιση μπαταρίας	Η μπαταρία δεν φορτίζει
Φόρτιση μέσω USB	Μπλε στερεό	Πράσινο στερεό	Off (Απενεργοποίηση)	Off (Απενεργοποίηση)	Μπλε αναβόσβημα	Πράσινο αναβόσβημα
Βάση φόρτισης	Μπλε στερεό	Πράσινο στερεό	Off (Απενεργοποίηση)	Off (Απενεργοποίηση)	Μπλε αναβόσβημα	Πράσινο αναβόσβημα
Δεν φορτίζει	Off (Απενεργοποίηση)	Off (Απενεργοποίηση)	Off (Απενεργοποίηση)	Off (Απενεργοποίηση)	–	Πράσινο αναβόσβημα
Βλάβη μπαταρίας	Πράσινο+μπλε στερεό	Πράσινο+μπλε στερεό	Off (Απενεργοποίηση)	Off (Απενεργοποίηση)	Πράσινο+μπλε αναβόσβημα	Πράσινο+μπλε αναβόσβημα



3.14 Πακέτο λογισμικού HearSIM™

Το Sera™ μπορεί να συνδεθεί σε έναν Η/Υ μέσω ενός καλωδίου USB για χρήση σε συνδυασμό με το HearSIM™. Το λογισμικό HearSIM™ επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόζει τις ρυθμίσεις της συσκευής Sera™, να διαχειρίζεται τα δεδομένα διαλογής και να τα εξάγει σε άλλα συστήματα βάσεων δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο HearSIM™.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τους σκοπούς της προστασίας δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με όλα τα παρακάτω σημεία:

1. Χρήση υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων Microsoft
2. Διασφάλιση ότι τα λειτουργικά συστήματα διαθέτουν τις κατάλληλες ενημερώσεις ασφάλειας
3. Ενεργοποίηση κρυπτογράφησης βάσης δεδομένων
4. Χρήση μεμονωμένων λογαριασμών χρήστη και κωδικών πρόσβασης
5. Διασφάλιση φυσικής και δικτυακής πρόσβασης στους υπολογιστές με τοπικό χώρο αποθήκευσης δεδομένων
6. Χρήση ενημερωμένου αντικού, τείχους προστασίας και λογισμικού προστασίας από κακόβουλο λογισμικό
7. Εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής εφεδρικών αντιγράφων
8. Εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής διατήρησης αρχείων καταγραφής
9. Φροντίστε να αλλάξετε τυχόν προεπιλεγμένους κωδικούς πρόσβασης διαχείρισης

Η χρήση λειτουργικών συστημάτων για τα οποία η Microsoft έχει σταματήσει την υποστήριξη λογισμικού και ασφάλειας θα αυξήσει τον κίνδυνο για ιούς και κακόβουλο λογισμικό, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε διακοπές λειτουργίας, απώλεια δεδομένων και κλοπή ή κατάχρηση δεδομένων.

Η Interacoustics A/S δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τα δεδομένα σας. Ορισμένα προϊόντα της Interacoustics A/S υποστηρίζουν ή ενδέχεται να λειτουργούν με λειτουργικά συστήματα που δεν υποστηρίζονται από τη Microsoft. Η Interacoustics A/S σας συνιστά να χρησιμοποιείτε πάντα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα της Microsoft, τα οποία διατηρούνται πλήρως ενημερωμένα όσον αφορά την ασφάλεια.

3.15 Άδεια χρήσης

Κατά την παραλαβή του Sera™, περιέχει ήδη την άδεια χρήσης (τις άδειες χρήσης) για το(α) δομοστοιχείο(α) που έχετε αγοράσει. Εάν θέλετε να προσθέσετε έναν άλλο τύπο δοκιμής στη συσκευή (π.χ. DPOAE, TEOAE ή ABRIS), επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για να αγοράσετε μια νέα άδεια χρήσης.

3.15.1 Προσθήκη νέας άδειας χρήσης στο Sera™

Για να προσθέσετε μια νέα άδεια:

1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισμικού Sera™.
2. Συνδέστε τη συσκευή Sera™ στον Η/Υ μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB.
3. Εκτελέστε το αρχείο FirmwareUpgradeSera.exe που βρίσκεται στο φάκελο «Tools» (εργαλεία) στο στικάκι Sera™ USB.
4. Πατήστε Upgrade (Αναβάθμιση) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η συσκευή σας τρέχει την τελευταία έκδοση υλικολογισμικού. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί μια προγενέστερη έκδοση του νέου τύπου δοκιμής που έλαβε άδεια.
5. Εκτελέστε το αρχείο ErisLicenseManager.exe που βρίσκεται στο φάκελο Sera Tools στο στικάκι Sera™ USB.
6. Εισάγετε το νέο κλειδί άδειας που παρέχεται και πατήστε το κουμπί Set license (Ρύθμιση άδειας)
7. Το υλικολογισμικό είναι πλέον ενημερωμένο και ο νέος τύπος δοκιμής θα πρέπει τώρα να είναι διαθέσιμος στη συσκευή Sera™.



3.16 Ενημέρωση του υλικολογισμικού

Η Interacoustics θα κυκλοφορεί περιοδικά νέο υλικολογισμικό για τη συσκευή Sera™. Η συσκευή θα πρέπει να περιέχει πάντα το τελευταίο διαθέσιμο υλικολογισμικό, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία της συσκευής.

Για να ελέγξετε την έκδοση του υλικολογισμικού:

Από την αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί Setup (Ρύθμιση)



1. Πατήστε About (Σχετικά)
2. Ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού της συσκευής εμφανίζεται μαζί με τα δεδομένα καταγραφής MCU και DSP.

Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό της συσκευής σας:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισμικού Sera™.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή Sera™ στον Η/Υ μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB.
- 3 Εκτελέστε το αρχείο FirmwareUpgradeSera.exe που βρίσκεται στο φάκελο «Tools» (εργαλεία) στο στικάκι Sera™ USB.
- 4 Πατήστε Upgrade (Αναβάθμιση) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



4 Οδηγίες λειτουργίας

4.1 Γενικές προφυλάξεις

Κατά τη λειτουργία του οργάνου, τηρείτε τις ακόλουθες γενικές προφυλάξεις:



1. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
2. Να χρησιμοποιείτε μόνο τα αναλώσιμα ακροφύσια αυτιού Sanibel™ που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με αυτό το όργανο.
3. Πάντα να χρησιμοποιείτε νέο ακροφύσιο αυτιού, αφρώδες ένθετο ή EarCup για κάθε ασθενή για να αποφύγετε την επιμόλυνση. Τα ακροφύσια αυτιών, τα αφρώδη ένθετα, ή τα EarCups δεν έχουν σχεδιαστεί για επανάχρηση.
4. Ποτέ μην εισάγετε την άκρη του ανιχνευτήρα στον ακουστικό πόρο, εάν προηγουμένως δεν έχετε προσαρτήσει ένα ακροφύσιο αυτιού, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στον ακουστικό πόρο του ασθενή.
5. Διατηρείτε το κουτί με τα ακροφύσια αυτιού μακριά από την περιοχή προσέγγισης του ασθενούς.
6. Φροντίστε να εισαγάγετε το ακροφύσιο του ανιχνευτήρα διασφαλίζοντας την αεροστεγή εφαρμογή, χωρίς να προκαλέσετε βλάβη στον ασθενή. Η χρήση κατάλληλου και καθαρού ακροφυσίου αυτιού είναι υποχρεωτική.
7. Βεβαιωθείτε ότι οι εντάσεις των ερεθισμάτων που χρησιμοποιείτε είναι αποδεκτές για τον ασθενή.
8. Συνιστάται η διεξαγωγή ενός ελέγχου ακεραιότητας στην αρχή κάθε ημέρας για να διασφαλιστεί ότι οι μορφοτροπίες, ο ανιχνευτής ή/και το καλώδιο λειτουργούν σωστά για τις αυτοματοποιημένες μετρήσεις ABR, TEOAE και DPOAE.
9. Καθαρίζετε το ακροφύσιο του ανιχνευτήρα τακτικά ώστε να διασφαλίζεται ότι το κερί ή άλλα υπολείμματα που έχουν κολλήσει στο ακροφύσιο του ανιχνευτήρα δεν επηρεάζουν τη μέτρηση.

Παρακαλώ σημειώστε:

1. Πρέπει να δίνεται υψηλή προτεραιότητα στον προσεκτικό χειρισμό του οργάνου όποτε αυτό έρχεται σε επαφή με τον ασθενή. Για βέλτιστη ακρίβεια, πρέπει να προτιμάται μια ήσυχη και σταθερή θέση κατά την εξέταση.
2. Το Sera™ πρέπει να λειτουργεί σε ήσυχο περιβάλλον, ώστε οι μετρήσεις να μην επηρεαστούν από εξωτερικούς ακουστικούς θορύβους. Αυτό μπορεί να προσδιοριστεί από κατάλληλα εξειδικευμένα άτομα στην ακουστική. Στην ενότητα 11 του Προτύπου ISO 8253 δίνεται ο ορισμός για ένα ήσυχο δωμάτιο για ακουομετρική δοκιμή.
3. Ποτέ μην καθαρίζετε το περίβλημα του μορφοτροπέα με νερό και μην εισάγετε μη προσδιοριζόμενα όργανα εντός του μορφοτροπέα.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή να πέσει και μην την υποβάλλετε με άλλο τρόπο σε μη απαραίτητες κρούσεις. Εάν το όργανο πέσει ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, επιστρέψτε το στον κατασκευαστή για επισκευή ή/και βαθμονόμηση. Μη χρησιμοποιείτε το όργανο σε περίπτωση υποψίας για ύπαρξη ζημιάς.



Ανατρέξτε στις Πρόσθετες πληροφορίες Sera™ για τα συμπτώματα, τις πιθανές αιτίες και την προτεινόμενη αντιμετώπιση προβλημάτων.



4.2 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Sera™



Ενεργοποιήστε το Sera™ πατώντας το πλήκτρο home. Για να απενεργοποιήσετε το Sera™, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο home για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Το Sera™ θα ξεκινά πάντα στην αρχική οθόνη.

Παρακαλώ σημειώστε: Για την εκκίνηση του Sera™ χρειάζονται περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 2.10 όταν το όργανο χρησιμοποιείται αμέσως μετά τη μεταφορά.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης ενδέχεται να εμφανιστούν σημαντικές πληροφορίες ή υπενθυμίσεις. Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

- Υπενθύμιση λήξης βαθμονόμησης
- Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας

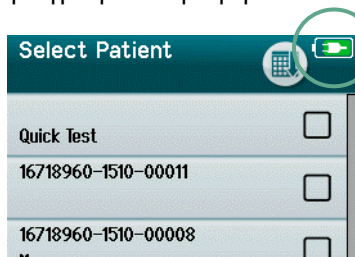
4.3 Δοκιμές κατά τη διάρκεια της φόρτισης

Η δοκιμή μπορεί να πραγματοποιηθεί ενώ το Sera™ φορτίζει στη βάση, μόλις η φόρτιση είναι επαρκής για την υποστήριξη της δοκιμής.

Η δοκιμή μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί όταν το Sera™ είναι συνδεδεμένο με τον τροφοδοτούμενο Η/Υ μέσω του καλωδίου USB ή με το τροφοδοτικό συνδεδεμένο απευθείας στη συσκευή. Ωστόσο, οι ηλεκτρικές παρεμβολές ενδέχεται να εισαγάγουν θόρυβο στην καταγραφή, παρατείνοντας το χρόνο δοκιμής και αυξάνοντας τις πιθανότητες αναφορικού αποτελέσματος. Ως εκ τούτου, δεν συνιστάται η δοκιμή ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε Η/Υ ή σε δίκτυο ρεύματος.

4.4 Ένδειξη κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας Sera™ μειωθεί, η πρώτη ένδειξη που θα δείτε είναι ότι το σύμβολο της μπαταρίας στην επάνω δεξιά γωνία της φορητής μονάδας αλλάζει χρώμα. Όταν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας μειωθεί τόσο πολύ ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η εκτέλεση μετρήσεων, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση στην οθόνη, θα διακοπεί η μέτρηση και θα αποθηκευτούν όλα τα καταγεγραμμένα δεδομένα. Θα πρέπει να τοποθετήσετε το Sera™ στη βάση ή να το συνδέσετε σε έναν Η/Υ μέσω καλωδίου USB προκειμένου να μπορέσετε να συνεχίσετε τις δοκιμές. Κατά την επανεκκίνηση του Sera™, τα δεδομένα των προηγούμενων μετρήσεων θα ανακτηθούν και μπορείτε να συνεχίσετε τις μετρήσεις σας χωρίς νέα δοκιμή.



Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας απεικονίζεται γραφικά στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης αφής Sera™ όταν αυτή είναι ενεργοποιημένη.

Η επεξήγηση των συμβόλων κατάστασης φόρτισης δίνεται στον Πίνακα 1.



Πίνακας 1: Επεξήγηση των συμβόλων κατάστασης φόρτισης.

Σύμβολο	Κατάσταση φόρτισης
	Φόρτιση
	100%
	75 %
	50 %
	25 %
	10% (Υπολείπονται περίπου 30 λεπτά ενεργού χρόνου δοκιμής)
	5% (Η δοκιμή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί· επαναφόρτιση το συντομότερο δυνατό)
	3% (Αυτόματη διακοπή λειτουργίας)

4.5 Επισκόπηση λειτουργίας και κουμπιών Sera™

4.5.1 Η μορφή οθόνης Sera™

Η γενική μορφή οθόνης Sera™ περιλαμβάνει:

1. Τίτλος οθόνης
2. Κατάσταση/υποεπικεφαλίδα
3. Κύρια οθόνη
4. Ένδειξη μπαταρίας
5. Κουμπί λειτουργίας
6. Γραμμή ελέγχου με κουμπιά λειτουργίας



4.5.2 Κοινά κουμπιά λειτουργίας

Τα κοινά κουμπιά λειτουργίας επεξηγούνται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Κοινά κουμπιά λειτουργίας.

	OK (αποδοχή/αποθήκευση)		Πίσω (προηγούμενη οθόνη)		Ακύρωση
	Εκτύπωση		Αναζήτηση		Προσθήκη σχολίου
	Σελίδα προς τα πάνω		Σελίδα προς τα κάτω		Εμφάνιση λίστας δοκιμών
	Προβολή πεδίων δοκιμών		Προχωρήστε στη δοκιμή/ξεκινήστε τη δοκιμή		Παύση (δοκιμής)
	Διακοπή (δοκιμής)		Περίληψη (δοκιμής)		Γρήγορη προσθήκη νέου ασθενούς
	Και τα δύο αυτιά (δοκιμή)		Δεξί αυτί		Αριστερό αυτί
	Σειρά ταξινόμησης (αλφαβητική)		Σειρά ταξινόμησης (χρονολογική)		Αλλαγή διαλογοέα
	Οθόνη κώδικα QR [μόνο για ABR Quick Test (γρήγορη δοκιμή ABR)]				

4.5.3 Πληκτρολόγιο (ειδικοί χαρακτήρες)

Το προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί το σύνολο χαρακτήρων της αγγλικής γλώσσας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ειδικούς χαρακτήρες από άλλες γλώσσες, πατήστε παρατεταμένα το πιο παρόμοιο γράμμα με τον ειδικό χαρακτήρα που προσπαθείτε να εισαγάγετε. Θα εμφανιστούν οι διαθέσιμοι εναλλακτικοί χαρακτήρες για επιλογή.



Οι ειδικοί χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι από τους ακόλουθους χαρακτήρες του αγγλικού αλφαβήτου:

A à á â ã ä å æ ç ã

C ç ć ĉ

D d' đ

E è é ê ë ê ę

G ğ ğ

I ì í î ï

L ł

O ó õ

O õ ö ó ô ø

R ř ř

S ß ş ś ș

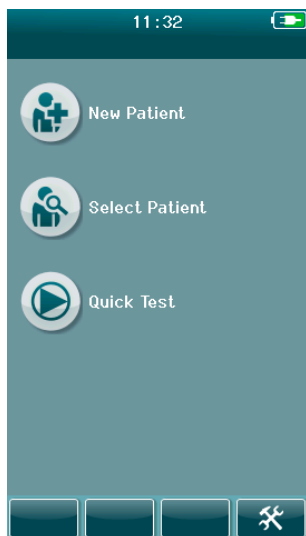
T t

U ú û ü

Z ź ż ž



4.5.4 Αρχική οθόνη



Συνήθως, το Sera™ ξεκινά στην αρχική οθόνη. Στην αρχική οθόνη εμφανίζονται τα κουμπιά που ελέγχουν την είσοδο στις κύριες λειτουργίες του Sera™.

Στην οθόνη μπορείτε να δείτε τις εξής πληροφορίες:

- Επιλέξτε **New Patient** (Νέος ασθενής) για να εισαγάγετε τα δημογραφικά στοιχεία ενός νέου ασθενούς. Κατόπιν εισαγωγής των στοιχείων του ασθενούς, μπορείτε να αποθηκεύσετε το όνομα στη βάση δεδομένων για μεταγενέστερη δοκιμή ή να προχωρήσετε αμέσως στη δοκιμή.
- **Select Patient** (Επιλέξτε Ασθενής) για να επανεξετάσετε τη λίστα των ασθενών που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή. Επιλέξτε έναν ασθενή για να επανεξετάσετε λεπτομερείς δημογραφικές πληροφορίες και πληροφορίες δοκιμής για αυτόν τον ασθενή ή για να ξεκινήσετε μια δοκιμή.
- Επιλέξτε **Quick Test** (Γρήγορη δοκιμή) για να προχωρήσετε αμέσως στην εκτέλεση μιας δοκιμής χωρίς την εισαγωγή πληροφοριών ασθενούς. Οι γρήγορες δοκιμές αποθηκεύονται προσωρινά με το όνομα του ασθενούς Quick Test (Γρήγορη δοκιμή). Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε μια συνεδρία γρήγορης δοκιμής σε έναν συγκεκριμένο ασθενή μετά τη δοκιμή, μπορείτε να την αποθηκεύσετε επεξεργαζόμενοι τις πληροφορίες ασθενούς.
- Το στοιχείο ελέγχου **Change User** (Αλλαγή χρήστη) δεν θα είναι διαθέσιμο για επιλογή εάν η σύνδεση χρήστη είναι απενεργοποιημένη. Επιλέξτε **Change User** (Αλλαγή χρήστη) για να αποσυνδεθείτε από τον τρέχοντα χρήστη και να εμφανίσετε τη λίστα User (Χρήστης) για την επιλογή ενός νέου χρήστη.
- Επιλέξτε **Setup** (Ρύθμιση) για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα με τις ρυθμίσεις της συσκευής που μπορούν να αλλάξουν απευθείας στο Sera™. Ορισμένες ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν μόνο με τη χρήση του HearSIM™.



4.5.5 Προσθήκη ενός νέου ασθενούς



Οι πληροφορίες του ασθενούς μπορούν να εισαχθούν χειροκίνητα στο Sera™ μέσω της οθόνης New Patient (Νέος ασθενής). Επιλέξτε το κουμπί New Patient (Νέος ασθενής) από την αρχική οθόνη.

Στην οθόνη New Patient (Νέος ασθενής), επιλέξτε ένα πεδίο για εισαγωγή δεδομένων αγγίζοντας το επιθυμητό πεδίο. Θα ανοίξει το κατάλληλο στοιχείο ελέγχου εισαγωγής δεδομένων, όπως το πληκτρολόγιο, το ημερολόγιο ή η αναπτυσσόμενη λίστα. Εισαγάγετε τα δεδομένα του ασθενούς για τα επιθυμητά πεδία:

- Αναγνωριστικό ασθενούς (υποχρεωτικό πεδίο)
- Επώνυμο
- Όνομα
- Ώρα και ημερομηνία γέννησης
- Φύλο
- Παράγοντες κινδύνου
- Άλλος παράγοντας κινδύνου

Πρόσθετα πεδία δεδομένων ασθενούς μπορούν να προστίθενται μέσω του λογισμικού HearSIM™:

- Συναίνεση για τον έλεγχο
- Συγκατάθεση παρακολούθησης
- Εθνικότητα


Επιλέξτε και εισαγάγετε δεδομένα έως ότου συμπληρωθούν όλα τα επιθυμητά πεδία.

Το πεδίο Patient ID (Αναγνωριστικό ασθενούς) πρέπει να συμπληρωθεί για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ή να προχωρήσετε σε δοκιμή.

Είναι δυνατό να ρυθμίσετε τη συσκευή να εισαγάγει έναν αυτόματα αναγνωριστικό αριθμό σε αυτό το πεδίο, ώστε να μην χρειάζεται να εισαγάγετε ένα αναγνωριστικό. Η μορφή του αυτόματου αναγνωριστικού θα περιλαμβάνει τον σειριακό αριθμό της συσκευής ακολουθούμενο από το έτος και τον μήνα σε μορφή EEMM και έναν αύξοντα αριθμό από το 1 έως το 65550. Αυτό το αναγνωριστικό μπορεί να αντικατασταθεί κατά την εισαγωγή των δεδομένων του ασθενούς.

Η διαμόρφωση του Sera™ για τη χρήση ενός αυτόματα εισαγόμενου αριθμού αναγνώρισης επιτυγχάνεται μέσω του HearSIM™.



Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των δεδομένων, μπορείτε να προχωρήσετε αμέσως στη δοκιμή του ασθενούς ή να πατήσετε το κουμπί 'quick add' (γρήγορη προσθήκη) .

4.5.6 Σύγκρουση αναγνωριστικού ασθενούς



Το αναγνωριστικό του ασθενούς πρέπει να είναι μοναδικό. Εάν επιχειρήσετε να εισαγάγετε ένα διπλό αναγνωριστικό ασθενούς στη βάση δεδομένων, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σύγκρουσης αναγνωριστικών. Αφού απορρίψετε το μήνυμα επιλέγοντας το **σημάδι ελέγχου** στην κάτω γραμμή ελέγχου, αλλάξτε το αναγνωριστικό σε έναν διαφορετικό μοναδικό αριθμό.



4.5.7 Επιλογή από τη λίστα ασθενών

Ένας ασθενής μπορεί να επιλεγεί από τη λίστα ασθενών. Επιλέξτε το κουμπί **Select Patient** (Επιλογή ασθενούς) στην αρχική οθόνη.



Μπορείτε να βρείτε τον επιθυμητό ασθενή στη λίστα με διάφορους τρόπους:

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **Search** (Αναζήτηση) για να ανοίξετε μια οθόνη στην οποία μπορείτε να εισαγάγετε ολόκληρο ή μέρος του αναγνωριστικού, του επωνύμου ή του ονόματος του ασθενούς για να αναζητήσετε ασθενείς που ταιριάζουν. Ο κατάλογος των ασθενών θα συντομευτεί ώστε να περιλαμβάνει μόνο τις αντίστοιχες καταχωρήσεις
- Σύρετε τη σελίδα προς τα κάτω ή προς τα πάνω χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους για να βρείτε το επιθυμητό όνομα ασθενούς
- Επιλέξτε τον ασθενή που σας ενδιαφέρει για να ανοίξει η οθόνη πληροφοριών ασθενούς

Αφού επιλέξετε τον ασθενή, μπορείτε να προχωρήσετε σε:

- **Ανασκόπηση** του ιστορικού εξετάσεων του ασθενούς
- **Εξετάστε** τον ασθενή

Στη λίστα Select Patient (Επιλογή ασθενούς), υπάρχει ένα τετράγωνο στη δεξιά πλευρά του ονόματος/αναγνωριστικό του ασθενούς. Η εμφάνιση του τετραγώνου αντικατοπτρίζει την κατάσταση της δοκιμής (Πίνακας 3).

Πίνακας 3: Κατάσταση δοκιμής του ασθενούς.

16718960-1510-00008 Meyer	<input type="checkbox"/>
16718960-1510-00003	<input checked="" type="checkbox"/>
16718960-1510-00003	<input checked="" type="checkbox"/>

Δεν έχουν αποθηκευτεί δοκιμές στη συσκευή για αυτόν τον ασθενή.

Οι δοκιμές αποθηκεύονται στη συσκευή (μεταξύ 1 και 49 δοκιμών).

Αποθηκεύεται ο μέγιστος αριθμός δοκιμών (50). Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν πρόσθετες δοκιμές για αυτόν τον ασθενή.



4.6 Γενικές πληροφορίες δοκιμής

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η συγκατάθεση του ασθενούς ή, σε περίπτωση που ο ασθενής είναι ανήλικος, των γονέων ή του κηδεμόνα του ασθενούς. Επιπλέον, συνιστάται να δοθεί στον ασθενή και στους συγγενείς του ασθενούς μια γενική περιγραφή της διαδικασίας της δοκιμής, τι να περιμένουν και πώς να ερμηνεύσουν το αποτέλεσμα της δοκιμής.

4.6.1 Προετοιμασία ασθενούς - Αυτοματοποιημένη δοκιμή ABR

Κατά τη διάρκεια της αυτοματοποιημένης δοκιμής ABR, συλλέγονται ηλεκτρικά σήματα από τη νευρολογική οδό μεταξύ του κοχλίου και του εγκεφαλικού στελέχους μέσω ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στο βρέφος. Καθώς τα σήματα αυτά είναι πολύ μικρά και μπορούν να διαταραχθούν από τα μυογενετικά σήματα, συνιστάται, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, το βρέφος να κοιμάται ή να βρίσκεται σε πολύ ήρεμη κατάσταση. Το βρέφος μπορεί να παραμείνει στην κούνια του, να τοποθετηθεί σε ένα εξεταστικό τραπέζι ή να κρατηθεί από τον γονέα.

Η προετοιμασία του δέρματος βοηθά στην επίτευξη καλής επαφής (δηλ. χαμηλής σύνθετης αντίστασης) μεταξύ του δέρματος και του ηλεκτροδίου. Μετά τον καθαρισμό, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος προετοιμασίας του δέρματος, ώστε το δέρμα να είναι στεγνό. Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί η καλή πρόσφυση του ηλεκτροδίου μίας χρήσης στο δέρμα.



Τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται από το Sera™ με το ABRIS προορίζονται για χρήση σε άθικτο, εξωτερικό δέρμα γύρω από τα αυτιά και στο τριχωτό της κεφαλής. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εάν το δέρμα δεν είναι άθικτο ή εάν το βρέφος έχει κάποια μεταδοτική δερματολογική πάθηση.



Ανατρέξτε στις Πρόσθετες πληροφορίες Sera™ για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας του ασθενούς και τη συναρμογή ηλεκτροδίων που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.



Κίνδυνος στραγγαλισμού.
Κρατήστε τα καλώδια μακριά από το λαιμό του βρέφους.



Κίνδυνος πνιγμού.
Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα, όπως τα ακροφύσια και τα ηλεκτρόδια, μακριά από τον ασθενή.



Αποφύγετε την επαφή μεταξύ των μη χρησιμοποιούμενων ηλεκτροδίων και οποιωνδήποτε άλλων αγωγίμων μερών.

4.6.2 Προετοιμασία ασθενούς - δοκιμή OAE

Οι αποκρίσεις OAE είναι πολύ μικρές και συνιστάται το βρέφος να κοιμάται ή να βρίσκεται σε πολύ ήρεμη κατάσταση για τη δοκιμή. Το βρέφος μπορεί να παραμείνει στην κούνια του, να τοποθετηθεί σε ένα εξεταστικό τραπέζι ή να κρατηθεί από τον γονέα κατά τη διάρκεια της δοκιμής.



Για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας του ασθενούς για την δοκιμή, ανατρέξτε στις Πρόσθετες πληροφορίες Sera™.



4.6.3 Χειρισμός και επιλογή ακροφυσίων αυτιού

Τα ακροφύσια αυτιού Sanibel™ προορίζονται για μία και μόνο χρήση και δε θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται. Η εκ νέου χρήση των ακροφυσίων αυτιού μπορεί να προκαλέσει τη διάδοση λοιμώξεων μεταξύ ασθενών.

Ο ανιχνευτής και τα ένθετα ακουστικά πρέπει να τοποθετηθούν με ένα ακροφύσιο αυτιού κατάλληλου τύπου και μεγέθους πριν από τη δοκιμή. Η επιλογή σας θα εξαρτάται από το μέγεθος και το σχήμα του ακουστικού πόρου και του αυτιού. Η επιλογή σας μπορεί επίσης να εξαρτάται από την προσωπική προτίμηση και τη μέθοδο εκτέλεσης της δοκιμής.



Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο αυτιού εισέρχεται πλήρως στον ακουστικό πόρο πριν ξεκινήσετε μια δοκιμή. Τα ακροφύσια αυτιών του ανιχνευτή OWA σε σχήμα φλάντζας και μανιταριού, καθώς και εκείνα για το SnapPROBE™, σας επιτρέπουν να επιτύχετε μια καλή εφαρμογή στο ακουστικό πόρο για να δοκιμάσετε «χωρίς χέρια» (χωρίς να κρατάτε τον ανιχνευτή ή το ένθετο ακουστικό στη θέση του). Η δοκιμή χωρίς χέρια μειώνει την πιθανότητα να διαταράξει τη μέτρηση ο θόρυβος επαφής.

Παρακαλώ σημειώστε: Όλα τα αναλώσιμα μιας χρήσης που περιλαμβάνονται στο Sera™ κατασκευάζονται από την Sanibel Supply®. Το σύστημα έχει υποβληθεί σε δοκιμές μόνο με αναλώσιμα που κατασκευάζονται από την Sanibel Supply®. Η χρήση αναλώσιμων άλλων εμπορικών σημάτων ενδεχομένως να αλλοιώσει τη συμπεριφορά και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τη συσκευή και δεν συνιστάται. Τα αναλώσιμα Sanibel™ δεν περιέχουν λατέξ, DEHP και BPA και συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα βιοσυμβατότητας.



Ανατρέξτε στο Σύντομο οδηγό «Επιλογή του σωστού ακροφυσίου αυτιού» που περιλαμβάνεται στο έγγραφο με τις Πρόσθετες πληροφορίες του Sera™ για επισκόπηση των μεγεθών και της διαλογής ακροφυσίων αυτιού.



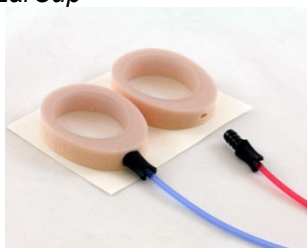
Κίνδυνος πνιγμού.
Φυλάσσετε πάντα τα ακροφύσια αυτιών και παρόμοια μικρά αντικείμενα μακριά από το βρέφος.

4.6.4 Χρήση των EarCups

Τα Sanibel™ Infant EarCups™ είναι μόνο για μία χρήση και δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται. Η επαναχρησιμοποίηση των EarCups μπορεί να οδηγήσει στην εξάπλωση της μόλυνσης μεταξύ των ασθενών και ενδεχομένως να επηρεάσει την παροχή του σωστού επιπέδου ερεθίσματος στο αυτί του ασθενούς.

Βεβαιωθείτε ότι το EarCup είναι σωστά τοποθετημένα στον προσαρμογέα EarCup και προσαρτημένα στους σωλήνες ακουστικών πριν από τη δοκιμή. Η αφαίρεση του EarCup επιτυγχάνεται καλύτερα χρησιμοποιώντας ένα αλκοολούχο μαντηλάκι ή νερό για να μειωθεί ο ερεθισμός του δέρματος του βρέφους.

EarCup



Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας EarCup έχει εισαχθεί πλήρως στο EarCup μίας χρήσης πριν από τη δοκιμή. Η λανθασμένη εισαγωγή μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένο επίπεδο ερεθίσματος στο αυτί του ασθενούς, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της εξέτασης.

Παρακαλώ σημειώστε: Όλα τα αναλώσιμα μιας χρήσης που περιλαμβάνονται στο Sera™ παράγονται από την Sanibel Supply®. Το σύστημα έχει δοκιμαστεί μόνο με αναλώσιμα που παρέχονται από την Sanibel Supply®. Η χρήση αναλώσιμων άλλων εμπορικών σημάτων ενδεχομένως να αλλοιώσει τη συμπεριφορά και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τη συσκευή και δεν συνιστάται. Τα αναλώσιμα Sanibel™ δεν περιέχουν λατέξ,



DEHP και BPA και συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα βιοσυμβατότητας.


4.6.5 Έναρξη μιας δοκιμής

Μια δοκιμή μπορεί να ξεκινήσει με διάφορους τρόπους:



1. Αφού εισαγάγετε τις πληροφορίες για τον **Νέο ασθενή**.
2. Από την οθόνη Patient Information (Πληροφορίες ασθενούς) αφού έχετε επιλέξει έναν ασθενή από τη λίστα **Select Patient** (Επιλογή ασθενούς).
3. **Quick Test** (Σύντομη δοκιμή) (στην αρχική οθόνη).
Η λειτουργία σύντομης δοκιμής μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί από έναν Διαχειριστή μέσω του HearSIM™. Εάν το Quick Test (Σύντομη δοκιμή) είναι απενεργοποιημένο στη συσκευή σας, τότε το κουμπί **Quick Test** (Σύντομη δοκιμή) δεν θα εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

Οι ακόλουθες διαδικασίες είναι οι ίδιες ανεξάρτητα από τον τύπο της δοκιμής (Αυτοματοποιημένη ABR ή OAE) που εκτελείτε.

Η επιλογή του κουμπιού **Test** (Δοκιμή)  εκκινεί τη διαδικασία προς τη δοκιμή. Ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής σας, ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένες οθόνες πριν από την εμφάνιση της πραγματικής οθόνης δοκιμής.



4.6.6 Επιλέξτε τύπο δοκιμής

Εάν η συσκευή σας διαθέτει τόσο τη λειτουργία Automated ABR όσο και τη λειτουργία OAE ή εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα πρωτόκολλα του ίδιου τύπου δοκιμής στη συσκευή, τότε μπορεί να εμφανιστεί η οθόνη Select Test (Επιλογή δοκιμής) για να επιλέξετε ποια δοκιμή θέλετε να εκτελέσετε.

Κάτω από τον τύπο της δοκιμής (π.χ. TEOAE), αναγράφεται το όνομα του πρωτοκόλλου.

Οι εμφανιζόμενες δοκιμές εξαρτώνται επίσης από τον συνδεδεμένο μορφοτροπέα. Για παράδειγμα, εάν μόνο ο ανιχνευτής είναι συνδεδεμένος στο Sera™, τότε οι αυτοματοποιημένες δοκιμές ABR δεν θα εμφανίζονται στη λίστα. Ο προενισχυτής πρέπει να συνδεθεί με ένα κατάλληλο μορφοτροπέα για να δείτε αυτοματοποιημένες δοκιμές ABR.



Ανατρέξτε στις Πρόσθετες πληροφορίες Sera™ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρωτόκολλα.

4.6.7 Καταχώρηση πεδίου που σχετίζεται με τη δοκιμή

Το Sera™ σας μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του HearSIM™ ώστε να αποθηκεύει πληροφορίες με κάθε δοκιμή που αφορά:

- Ονομασία εγκατάστασης για την εξέταση
- Κατάσταση νοσηλευτικής μονάδας
- Όνομα του εξεταστή
- Στάδιο εξέτασης
- Λόγος που δεν εξετάστηκε
- Ιατρός
- Αναγνωριστικό ανίχνευσης
- Τύπος βρεφικού δωματίου
- Ασφάλιση
- Όνομα μητέρας
- Μονάδα τοκετού

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανιστεί μια οθόνη εισαγωγής πεδίου δοκιμής, ώστε να μπορείτε να συμπληρώσετε σωστά αυτά τα πεδία για τον τρέχοντα ασθενή. Δεδομένου ότι αυτά τα πεδία είναι συχνά τα ίδια για κάθε ασθενή, η επιλογή σας θα ανακληθεί έτσι ώστε να χρειάζεται να επιβεβαιώσετε την καταχώρηση συνεχίζοντας με την επιλογή του κουμπιού **Test** (Δοκιμή) μόνο εάν τα τρέχοντα στοιχεία που εμφανίζονται στα πεδία είναι σωστά.

Εάν έχετε συνδεθεί στη συσκευή κατά την εκκίνηση, τότε το όνομά σας θα αποθηκευτεί επίσης με τη δοκιμή και η οθόνη εισαγωγής πεδίου δοκιμής εμφανίζει το όνομά σας σε μορφή μόνο για ανάγνωση.




4.6.8 Σύμβολα αποτελεσμάτων εξέτασης

Επεξήγηση των συμβόλων των αποτελεσμάτων του ελέγχου παρέχεται στον Πίνακας 3.

Πίνακας 3: Σύμβολα αποτελεσμάτων εξέτασης.

Σύμβολο	Αποτέλεσμα εξέτασης
✓	Πέρασε
✗	Αναφορά
?	Ελλιπής

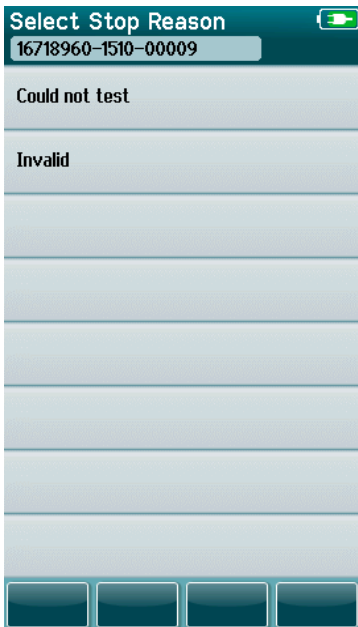
4.6.9 Λόγος διακοπής για ελλιπή δοκιμή



Ο διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει μια λειτουργία στο Sera™ μέσω του HearSIM™ για την αυτόματη εμφάνιση της οθόνης Select Stop Reason (Επιλογή αιτίας διακοπής) όταν μια δοκιμή διακόπτεται χειροκίνητα. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται μαζί με το αρχείο της δοκιμής.



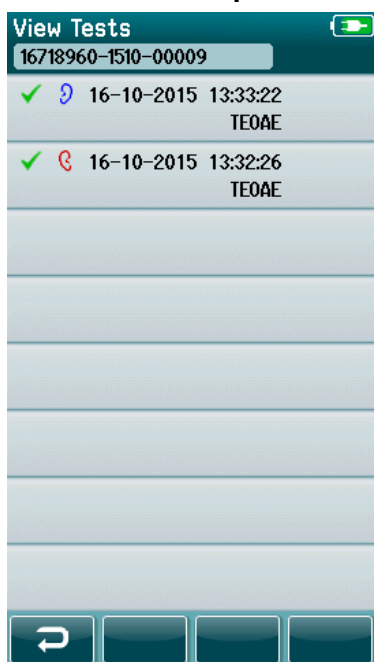4.6.10 Εκτύπωση κατόπιν δοκιμής



Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων των δοκιμών στον εκτυπωτή ετικετών μπορεί να πραγματοποιηθεί στην οθόνη Test Done (Τέλος δοκιμής) επιλέγοντας το κουμπί **Test List** (Λίστα δοκιμών) στην κάτω γραμμή ελέγχου. Η πλήρης λίστα των δοκιμών που διενεργήθηκαν για αυτόν τον ασθενή θα εμφανιστεί με αντίστροφη χρονολογική σειρά.

Για τη διευκόλυνσή σας, το πιο πρόσφατο αποτέλεσμα της δοκιμής δεξιού και αριστερού αυτιού στην τρέχουσα συνεδρία θα είναι προεπιλεγμένο για εκτύπωση, όπως φαίνεται από ένα μικρό πράσινο σημάδι ελέγχου που εμφανίζεται σε ένα εικονίδιο εκτυπωτή στη δεξιά πλευρά της γραμμής. Μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή μιας δοκιμής αγγίζοντας το σύμβολο. Μπορείτε να επιλέξετε άλλες δοκιμές στη λίστα για εκτύπωση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Εάν στη λίστα έχει επιλεγεί για εκτύπωση μόνο ένα αποτέλεσμα δοκιμής για το δεξί και ένα για το αριστερό αυτί, τότε τα αποτελέσματα και των δύο αυτιών θα εκτυπωθούν σε μία μόνο ετικέτα. Όταν επιλέγονται περισσότερες από 2 εξετάσεις για ένα αυτί, τότε κάθε αποτέλεσμα της εξέτασης θα εκτυπώνεται σε ξεχωριστή ετικέτα.

Παρακαλώ σημειώστε: Τα εικονίδια εκτύπωσης δεν θα εμφανιστούν στο Sera™ υπό τις ακόλουθες συνθήκες.

1. Εάν η εκτύπωση ετικετών ή η ασύρματη επικοινωνία είναι απενεργοποιημένη στη συσκευή μέσω HearSIM™ ή
2. Εάν δεν έχει συζευχθεί ένας εκτυπωτής ετικετών με το Sera™.



4.7 Αυτοματοποιημένη δοκιμή ABR

Κατά τη διάρκεια των αυτοματοποιημένων δοκιμών ABR, οι οθόνες θα αλλάζουν για να αντικατοπτρίζουν τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο ελεγκτής.

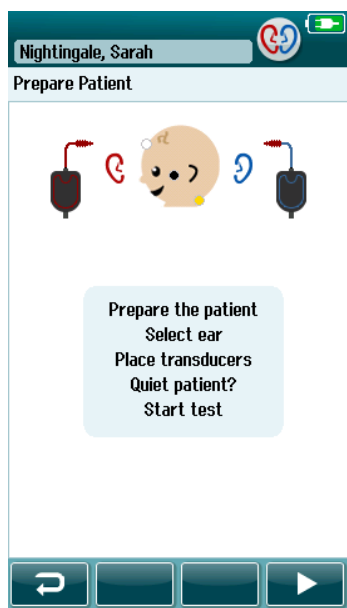
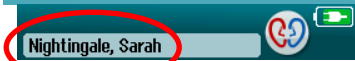

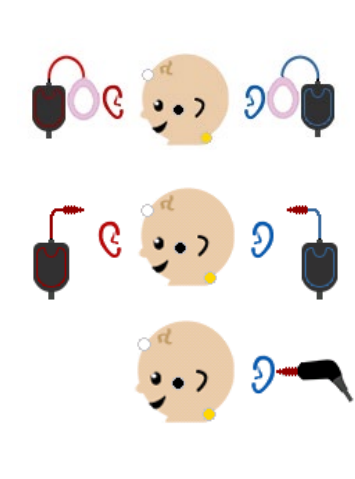
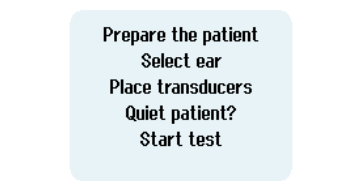




Παρακαλείστε να ανατρέξετε στις πρόσθετες πληροφορίες Sera™ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτοματοποιημένη ABR και τα πρωτόκολλα.

4.7.1 Αυτοματοποιημένη οθόνη αρχικής δοκιμής ABR

Στην αρχική οθόνη του αυτοματοποιημένου ABR εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες (Πίνακας 4).

Πίνακας 4: Αρχική αυτοματοποιημένη οθόνη ABR.






	Προβαλλόμενο γραφικό	Ονομασία λειτουργίας	Περιγραφή
		Πληροφορίες για τον ασθενή.	Εμφανίζει το επιλεγμένο όνομα ασθενούς.
		Κουμπί επιλογής αυτιού.	Εναλλαγή για την επιλογή του αυτιού δοκιμής.
		Τύπος μορφοτροπείας.	Η εικόνα του μορφοτροπείας που εμφανίζεται δίπλα στο κεφάλι του βρέφους αντικατοπτρίζει τον συνδεδεμένο μορφοτροπείας (EarCups, ένθετα ή ανιχνευτή).
		Οδηγίες χρήσης.	Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες δοκιμής.
		Κουμπί έναρξης.	Ξεκινά τον έλεγχο εμπέδησης.
		Κουμπί επιστροφής.	Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.



4.7.2 Οθόνη ελέγχου εμπέδησης

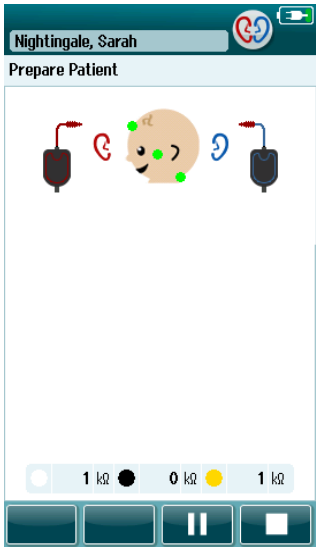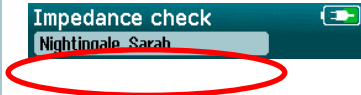Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εμπέδησης, τα σύμβολα των ηλεκτροδίων στο γραφικό του κεφαλιού του βρέφους θα εμφανίζονται με πράσινο ή πορτοκαλί χρώμα, ενώ η τιμή της εμπέδησης kΩ θα εμφανίζεται προς το κάτω μέρος της οθόνης (Πίνακας 5). Μόλις οι τιμές εμπέδησης σε όλες τις θέσεις παραμείνουν «πράσινες» (<50 kOhms) για μερικά συνεχόμενα δευτερόλεπτα, ο έλεγχος εμπέδησης τερματίζεται και η φάση ανίχνευσης απόκρισης ξεκινά αυτόματα.

Πίνακας 5: Αυτοματοποιημένη οθόνη ελέγχου εμπέδησης ABR.

Προβαλλόμενο γραφικό	Ονομασία λειτουργίας	Περιγραφή
	Impedance check Nightingale, Sarah	Πληροφορίες κατάστασης δοκιμής. Υποδεικνύει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ελέγχου εμπέδησης.
	Impedance check Nightingale, Sarah	Πληροφορίες για τον ασθενή. Εμφανίζει το επιλεγμένο όνομα ασθενούς.
	Ανατροφοδότηση ελέγχου εμπέδησης.	Παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με τις τιμές εμπέδησης: Πράσινο = καλή εμπέδηση. Κίτρινο = χαμηλή εμπέδηση. Εμφανίζονται οι τιμές εμπέδησης σε kOhms.
	Κουμπί διακοπής.	Σταματά τον έλεγχο της εμπέδησης.
	Κουμπί παύσης/συνέχισης.	Παύση/συνέχιση του ελέγχου εμπέδησης.

Εάν κάποια ένδειξη εμπέδησης παραμένει «πορτοκαλί», βελτιώστε την εμπέδηση σε αυτή τη θέση ηλεκτροδίου με:

- Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο έχει τοποθετηθεί σωστά στην προετοιμασμένη θέση του δέρματος
- Εάν η χαμηλή εμπέδηση επιμένει, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το ηλεκτρόδιο και να χρησιμοποιήσετε το προϊόν προετοιμασίας του δέρματος για να καθαρίσετε ξανά το δέρμα ή να χρησιμοποιήσετε αγώγιμο τζελ. Μπορεί να είναι δυνατή η επανατοποθέτηση του ίδιου ηλεκτροδίου, αλλά εάν η επικόλληση είναι ανεπαρκής τότε μπορεί να απαιτηθεί νέο ηλεκτρόδιο.



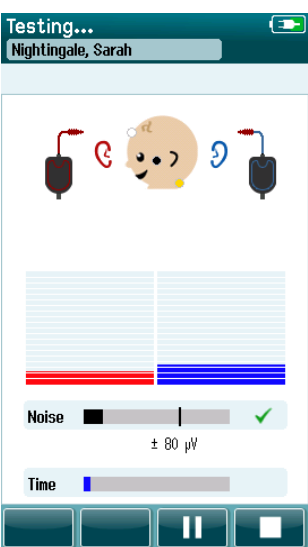







Εάν η εμπέδηση παραμένει χαμηλή, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα χρονικού ορίου εμπέδησης μετά από περίπου 180 δευτερόλεπτα ελέγχου της εμπέδησης. Μετά την απόρριψη του μηνύματος, θα εμφανιστεί και πάλι η αρχική οθόνη δοκιμής.

4.7.3 Αυτοματοποιημένη οθόνη μέτρησης ABR

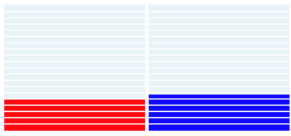Κατά τη διάρκεια της αυτοματοποιημένης μέτρησης ABR, ένα ραβδόγραμμα δείχνει την πρόοδο προς το αποτέλεσμα Pass (επιτυχία) (Πίνακας 6). Μια κόκκινη μπάρα αντικατοπτρίζει την πρόοδο της δοκιμής για το δεξί αυτί. Μια μπλε μπάρα απεικονίζει την πρόοδο της δοκιμής για το αριστερό αυτί.

Μετά το πέρας της εξέτασης, το σύμβολο του αποτελέσματος της εξέτασης εμφανίζεται στην κορυφή του ραβδογράμματος.

Πίνακας 6: Αυτοματοποιημένη οθόνη μέτρησης ABR.

Testing...	Προβαλλόμενο γραφικό	Ονομασία λειτουργίας	Περιγραφή
		Πληροφορίες κατάστασης δοκιμής.	Υποδεικνύει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία δοκιμής.
		Πληροφορίες για τον ασθενή.	Εμφανίζει το επιλεγμένο όνομα ασθενούς.
		Γραμμές προόδου δοκιμής.	Παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδο της δοκιμής για την επίτευξη του αποτελέσματος Pass (επιτυχία).
		Γραμμή θορύβου με σημάδι ελέγχου εάν ο θόρυβος είναι αποδεκτός.	Δείχνει την ποιότητα του εισερχόμενου ΗΕΓ.
		Γραμμή χρόνου.	Χρόνος δοκιμής που παρήλθε.
		Κουμπί διακοπής.	Διακόπτει τη δοκιμή· αποδίδει ένα ατελές αποτέλεσμα.
		Κουμπί παύσης/συνέχισης.	Παύση/συνέχιση της μέτρησης.



4.7.3.1 Γραμμή θορύβου

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η **Γραμμή θορύβου** θα εμφανίζει το πλάτος των εισερχόμενων δειγμάτων ΗΕΓ. Ένα σημάδι ελέγχου θα εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά της γραμμής όταν τα εισερχόμενα σήματα είναι αρκετά ήσυχα ώστε να γίνουν αποδεκτά και να επεξεργαστούν από τον αλγόριθμο ανίχνευσης απόκρισης. Εάν τα εισερχόμενα δείγματα ΗΕΓ περιέχουν υψηλό θόρυβο λόγω μυογενετικού ή ηλεκτρικού θορύβου, το σημάδι ελέγχου θα εξαφανιστεί και η γραμμή θορύβου θα αντικατοπτρίζει θόρυβο που υπερβαίνει το επίπεδο απόρριψης.

Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει να διακόψετε τη διαδικασία δοκιμής και να αντιμετωπίσετε το θόρυβο ηρεμώντας το βρέφος ή διαχειριζόμενοι άλλες πηγές θορύβου (ηλεκτρικές).

4.7.3.2 Γραμμή χρόνου


Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η **Γραμμή χρόνος ή πρόοδος** θα γεμίζει, καθώς λαμβάνονται καλά δείγματα δεδομένων. Όταν ληφθούν 180 δευτερόλεπτα (3 λεπτά) αποδεκτών δειγμάτων ΗΕΓ, η μπάρα θα γεμίσει και η δοκιμή θα τερματιστεί αυτόματα.

4.7.3.3 Οθόνη δοκιμής που έγινε

Κατά την ολοκλήρωση μιας δοκιμής, το αποτέλεσμα της πιο πρόσφατα ολοκληρωμένης δοκιμής θα συνεχίσει να είναι ορατό (Πίνακας 7). Το χειριστήριο επιλογής αυτιού γίνεται και πάλι ενεργό, ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει το άλλο αυτί για δοκιμή ή να επαναλάβει μια δοκιμαστική μέτρηση στο ίδιο αυτί.

Το χειριστήριο επιλογής αυτιού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εναλλαγή μεταξύ της τελευταίας αυτοματοποιημένης δοκιμής ABR που πραγματοποιήθηκε στο δεξί και στο αριστερό αυτί κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Πίνακας 7: Αυτοματοποιημένη οθόνη ABR δοκιμής που έγινε.

Προβαλλόμενο γραφικό	Ονομασία λειτουργίας	Περιγραφή
	Done! Nightingale, Sarah	Πληροφορίες κατάστασης δοκιμής.
	Done! Nightingale, Sarah	Πληροφορίες για τον ασθενή.
	Done! Nightingale, Sarah	Κουμπί επιλογής αυτιού.
	Done! Nightingale, Sarah	Γραμμές αποτελεσμάτων δοκιμών, σύμβολα αποτελεσμάτων και πρόσθετες πληροφορίες δοκιμών.
	Done! Nightingale, Sarah	Κουμπί έναρξης.



Κουμπί εμφάνισης λίστας δοκιμών.

Ανοίγει λίστα με όλες τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή τη συνεδρία.

Η εκτύπωση είναι διαθέσιμη εάν έχει ρυθμιστεί ο εκτυπωτής.



Κουμπί προσθήκης σχολίου.

Επιλέξτε για να προσθέσετε ένα σχόλιο σχετικά με τη δοκιμή που μόλις εκτελέστηκε.



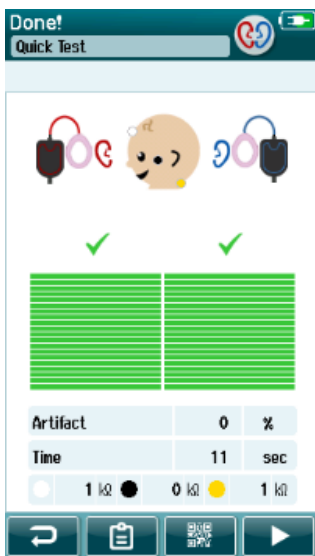
Κουμπί επιστροφής.

Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη (Επιλογή τύπου δοκιμής ή Προετοιμασία ασθενούς).




Κουμπί QR Code



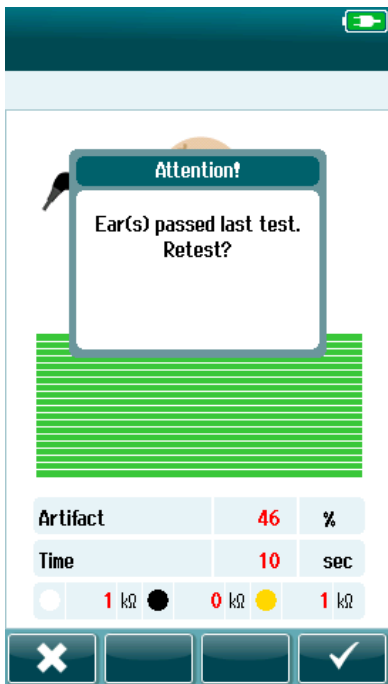Πρέπει να ενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις της συσκευής. Θα εμφανιστεί ένας κωδικός QR των αποτελεσμάτων της δοκιμής



Εάν ο χρήστης ξεκινήσει μια άλλη δοκιμή στο ίδιο αυτί που μόλις πέρασε, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:



Αυτό το μήνυμα ειδοποιεί τον χρήστη ότι η δοκιμή του αυτιού μόλις πέρασε και ζητά επιβεβαίωση της επιθυμίας του να επανεξετάσει το ίδιο αυτί ξανά.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το σήμα ελέγχου  για να προχωρήσουν με την επανάληψη της δοκιμής ή να επιλέξουν το κουμπί ακύρωσης  για να ακυρώσουν την επανάληψη της δοκιμής και να επιστρέψουν στην οθόνη Test Done (Ολοκληρώθηκε η δοκιμή).



4.8 Δοκιμή ΟΑΕ

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών ΟΑΕ, οι οθόνες θα αλλάζουν για να αντικατοπτρίζουν τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο εξεταστής.



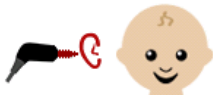
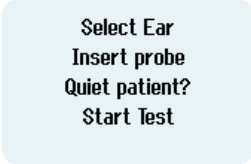




Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ΤΕΟΑΕ και DPOAE και τα πρωτόκολλα, ανατρέξτε στις Πρόσθετες πληροφορίες Sera™.

4.8.1 Αρχική οθόνη δοκιμής ΟΑΕ

Στην αρχική οθόνη του ΟΑΕ εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες (Πίνακας 8).

Πίνακας 8: Αρχική οθόνη δοκιμής ΟΑΕ.







Προβαλλόμενο γραφικό	Ονομασία λειτουργίας	Περιγραφή
	Πληροφορίες για τον ασθενή.	Εμφανίζει το επιλεγμένο όνομα ασθενούς.
	Κουμπί επιλογής αυτιού.	Εναλλαγή για την επιλογή του αυτιού δοκιμής.
	Μορφοτροπείας.	Η εικόνα του μορφοτροπέα που εμφανίζεται δίπλα στο κεφάλι του βρέφους αντικατοπτρίζει τον συνδεδεμένο μορφοτροπέα.
	Οδηγίες χρήσης.	Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες δοκιμής.
	Κουμπί έναρξης.	Εκκινεί τον έλεγχο του ανιχνευτή.
	Κουμπί επιστροφής.	Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.



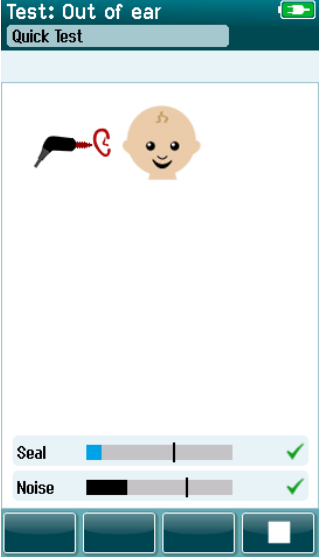4.8.2 Οθόνη ελέγχου ανιχνευτή






Κατά τη διάρκεια του ελέγχου του ανιχνευτή, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα της προσαρμογής του ανιχνευτή στον ακουστικό πόρο. (DPOAE στο Πίνακα 9 και TEOAE στον πίνακα 10). Μόλις η προσαρμογή του ανιχνευτή είναι καλή, ο έλεγχος του ανιχνευτή τερματίζεται και η φάση μέτρησης ΟΑΕ αρχίζει αυτόματα.

Πίνακας 9: Οθόνη ελέγχου ανιχνευτή DPOAE.

Προβαλλόμενο γραφικό	Ονομασία λειτουργίας	Περιγραφή
		Κατάσταση ελέγχου ανιχνευτή. Εμφανίζει την κατάσταση ελέγχου του ανιχνευτή - στο αυτί, εκτός αυτιού ή φραγή.
	Πληροφορίες για τον ασθενή.	Εμφανίζει το επιλεγμένο όνομα ασθενούς.
	Γραμμές κατάστασης.	Εμφανίζει την κατάσταση του ανιχνευτή στο αυτί. Για την έναρξη μιας δοκιμής πρέπει να πληρούνται όλα τα κριτήρια.
	Κουμπί διακοπής.	Διακόπτει τον έλεγχο του ανιχνευτή.
	Κουμπί παύσης/συνέχισης.	Παύση/συνέχιση του ελέγχου του ανιχνευτή.

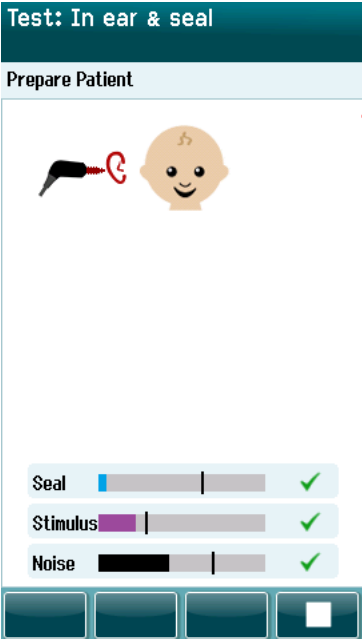

Πίνακας 10: Οθόνη ελέγχου ανιχνευτή ΤΕΟΑΕ.

Test: In ear & seal	Προβαλλόμενο γραφικό	Ονομασία λειτουργίας	Περιγραφή
		Κατάσταση ελέγχου ανιχνευτή.	Εμφανίζει την κατάσταση ελέγχου του ανιχνευτή - στο αυτί, εκτός αυτιού ή φραγή.
		Πληροφορίες για τον ασθενή	Εμφανίζει το επιλεγμένο όνομα ασθενούς.
		Γραμμές κατάστασης.	Εμφανίζει την κατάσταση του ανιχνευτή στο αυτί. Για την έναρξη μιας δοκιμής πρέπει να πληρούνται όλα τα κριτήρια.
		Κουμπί διακοπής.	Διακόπτει τον έλεγχο του ανιχνευτή.

Εάν η προσαρμογή του ανιχνευτή δεν είναι αποδεκτή, θα πρέπει να βελτιώσετε την κατάσταση πριν από την έναρξη των δοκιμών:

- Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του ανιχνευτή έχει εισαχθεί με ασφάλεια στον ακουστικό πόρο.
- Βεβαιωθείτε ότι το βρέφος είναι χαλαρό και ήσυχο ή ότι κοιμάται και/ή προσέξτε τυχόν ακουστικούς θορύβους στο περιβάλλον δοκιμής.

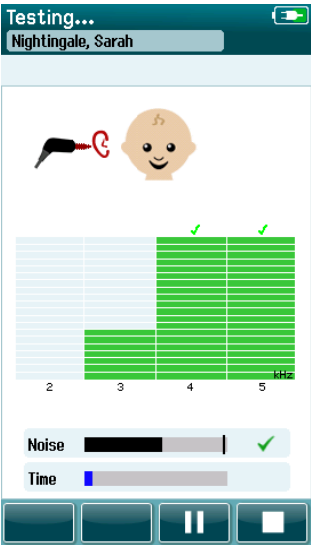



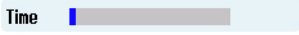




4.8.3 Οθόνη μέτρησης ΟΑΕ

Κατά τη διάρκεια της μέτρησης ΟΑΕ, ένα ραβδόγραμμα για κάθε μία από τις συχνότητες του πρωτοκόλλου δοκιμής αντικατοπτρίζει την πρόοδο προς μια επιτυχή εξέταση (Πίνακας 11). Η μπάρα θα γεμίσει πλήρως με χρώμα και ένα σήμα ελέγχου θα εμφανιστεί πάνω από τη μπάρα όταν τα κριτήρια για την επίτευξη ενός επιτυχούς αποτελέσματος στη συγκεκριμένη συχνότητα επιτευχθούν.









Επιπλέον, εμφανίζονται οριζόντιες μπάρες για τη σταθερότητα του ανιχνευτή, το θόρυβο και την πρόοδο της δοκιμής. Όταν ο θόρυβος και η σταθερότητα του ανιχνευτή είναι αποδεκτά, εμφανίζεται ένα σήμα ελέγχου δίπλα στην οριζόντια γραμμή.

Πίνακας 11: Οθόνη μέτρησης DPOAE.

Περιοχή οθόνης/γραφικό	Ονομασία λειτουργίας	Περιγραφή
	Testing... Nightingale, Sarah	Πληροφορίες κατάστασης δοκιμής. Υποδεικνύει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία δοκιμής.
	Testina... Nightingale, Sarah	Πληροφορίες για τον ασθενή. Εμφανίζει το επιλεγμένο όνομα ασθενούς.
	Γραμμές προόδου δοκιμής.	Παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδο της δοκιμής για την επίτευξη του αποτελέσματος Pass (επιτυχία).
	Γραμμή θορύβου με σημάδι ελέγχου εάν ο θόρυβος είναι αποδεκτός.	Υποδεικνύει το αποδεκτό επίπεδο απόρριψης θορύβου και την κατάσταση.
	Γραμμή χρόνου.	Χρόνος δοκιμής που παρήλθε.
	Κουμπί διακοπής.	Διακόπτει τη δοκιμή· αποδίδει ένα ατελές αποτέλεσμα.
	Κουμπί παύσης/συνέχισης της προβολής.	Παύση/συνέχιση της μέτρησης.



Πίνακας 12: Οθόνη μέτρησης ΤΕΟΑΕ.

Περιοχή οθόνης/γραφικό	Ονομασία λειτουργίας	Περιγραφή
	Πληροφορίες κατάστασης δοκιμής.	Υποδεικνύει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία δοκιμής.
	Πληροφορίες για τον ασθενή.	Εμφανίζει το επιλεγμένο όνομα ασθενούς.
	Γραμμές προόδου δοκιμής.	Παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδο της δοκιμής για την επίτευξη του αποτελέσματος Pass (επιτυχία).
	Ανιχνευτής.	Δείχνει την κατάσταση προσαρμογής του ανιχνευτή.
	Γραμμή θορύβου με σημάδι ελέγχου εάν ο θόρυβος είναι αποδεκτός.	Υποδεικνύει το αποδεκτό επίπεδο απόρριψης θορύβου και την κατάσταση.
	Γραμμή χρόνου.	Χρόνος δοκιμής που παρήλθε.
	Κουμπί διακοπής.	Διακόπτει τη δοκιμή· αποδίδει ένα ατελές αποτέλεσμα.
	Κουμπί παύσης/συνέχισης της προβολής.	Παύση/συνέχιση της μέτρησης.

4.8.3.1 Μπάρα σταθερότητας ανιχνευτή

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η **μπάρα σταθερότητας του ανιχνευτή** θα αντικατοπτρίζει την κατάσταση του ανιχνευτή στον ακουστικό πόρο. Ένα σήμα ελέγχου θα εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά της γραμμής όταν η σταθερότητα του ανιχνευτή είναι αποδεκτή. Εάν η σταθερότητα του ανιχνευτή πέσει κάτω από ένα αποδεκτό επίπεδο, αυτό υποδηλώνει ότι ο ανιχνευτής πέφτει από το αυτί και το σήμα ελέγχου θα εξαφανιστεί. Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει να ελέγξετε την εφαρμογή του ανιχνευτή στο αυτί.



4.8.3.2 Γραμμή θορύβου

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η **Γραμμή θορύβου** θα εμφανίζει το πλάτος του εισερχόμενου ακουστικού θορύβου. Ένα σημάδι ελέγχου θα εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά της γραμμής όταν τα εισερχόμενα σήματα είναι αρκετά ήσυχα ώστε να γίνουν αποδεκτά και να επεξεργαστούν από τον αλγόριθμο ανίχνευσης απόκρισης. Εάν το εισερχόμενο δείγμα δεδομένων περιέχει υψηλό θόρυβο, το σήμα ελέγχου θα εξαφανιστεί και η μπάρα θορύβου θα αντικατοπτρίζει το θόρυβο που υπερβαίνει το επίπεδο απόρριψης.

Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει να διακόψετε τη δοκιμή και να αντιμετωπίσετε το θόρυβο ηρεμώντας το βρέφος ή ελέγχοντας άλλες πηγές περιβαλλοντικού θορύβου. Θα πρέπει επίσης να ελέγχεται η εφαρμογή του ανιχνευτή.

4.8.3.3 Γραμμή χρόνου

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, η **Γραμμή χρόνου ή προόδου** θα γεμίζει καθώς επεξεργάζονται καλά δείγματα δεδομένων. Όταν συμπληρωθεί ο μέγιστος χρόνος δοκιμής, η γραμμή θα συμπληρωθεί εντελώς και η δοκιμή θα τερματιστεί αυτόματα.

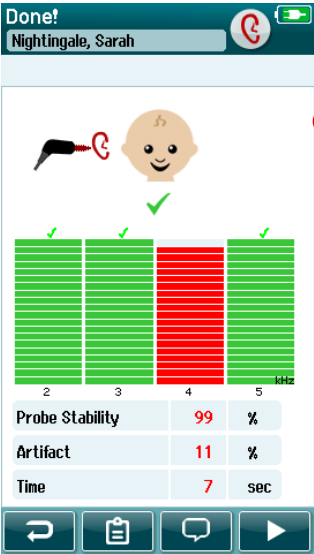



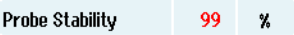
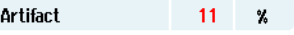




4.8.3.4 Οθόνη δοκιμής που έγινε

Κατά την ολοκλήρωση μιας εξέτασης, το αποτέλεσμα της πιο πρόσφατης εξέτασης θα συνεχίσει να είναι ορατό. Ο έλεγχος επιλογής αυτιού θα επανέλθει, ώστε ο χρήστης να επιλέξει το άλλο αυτί για δοκιμή ή να επαναλάβει ένα μέτρο ελέγχου στο ίδιο αυτί.

Το χειριστήριο επιλογής αυτιού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εναλλαγή μεταξύ της τελευταίας δοκιμής ΟΑΕ που πραγματοποιήθηκε στο δεξί και στο αριστερό αυτί κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.



Πίνακας 13: Οθόνη ολοκλήρωσης δοκιμής DPOAE.

Περιοχή οθόνης/γραφικό	Ονομασία λειτουργίας	Περιγραφή
	Done! Nightingale, Sarah	Πληροφορίες ασθενούς και κατάσταση «Test Done» (Ολοκληρωμένη δοκιμή).
	Done! Nightingale, Sarah	Εμφανίζει τον τρέχοντα ασθενή.
	Done! Nightingale, Sarah	Επιλέξτε αυτή για δοκιμή ή εναλλαγή για να δείτε τα αποτελέσματα για το αντίθετο αυτί που δοκιμάστηκε σε αυτή τη συνεδρία.
	Done! Nightingale, Sarah	Ανατροφοδότηση σχετικά με τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης εξέτασης που διεξήχθη σε αυτή τη συνεδρία εξέτασης. Το συνολικό αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κορυφή. Τα αποτελέσματα για τις επιμέρους συχνότητες εμφανίζονται πάνω από τη γραμμή του αυτιού.
	99 %	Σταθερότητα ανιχνευτή %.
	11 %	Δείχνει την ποιότητα της προσαρμογής του ανιχνευτή καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμής.
	7 sec	Δείχνει το ποσοστό των σφαλμάτων που μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
	Κουμπί έναρξης.	Χρόνος. Συνολικός χρόνος δοκιμής.
	Κουμπί έναρξης.	Ξεκινά τον έλεγχο προσαρμογής του ανιχνευτή OAE.
	Προβολή λίστας δοκιμών.	Ανοίγει τη λίστα όλων των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή τη συνεδρία· μπορεί να εκτυπωθεί από εδώ, εάν έχει



Κουμπί επιστροφής.

Σχόλιο.

ρυθμιστεί ο εκτυπωτής.

Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη (πριν από την αρχική οθόνη δοκιμής). Επιλέξτε για να ανοίξετε μια οθόνη για την εισαγωγή ενός σχολίου σχετικά με τη δοκιμή που μόλις εκτελέστηκε

Πίνακας 14: Οθόνη ολοκλήρωσης δοκιμής ΤΕΟΑΕ.

Περιοχή οθόνης/γραφικό	Ονομασία λειτουργίας	Περιγραφή
	Πληροφορίες ασθενούς και κατάσταση «Test Done» (Ολοκληρωμένη δοκιμή).	Εμφανίζει τον τρέχοντα ασθενή.
	Τα κουμπί επιλογής αυτιών επιστρέφουν μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής.	Επιλέξτε αυτί για δοκιμή ή εναλλαγή για να δείτε τα αποτελέσματα για το αντίθετο αυτί που δοκιμάστηκε σε αυτή τη συνεδρία.
	Γραμμές και σύμβολα αποτελεσμάτων της δοκιμής και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμή.	Ανατροφοδότηση σχετικά με τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης εξέτασης που διεξήχθη σε αυτή τη συνεδρία εξέτασης. Το συνολικό αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κορυφή. Τα αποτελέσματα για τις επιμέρους συχνότητες εμφανίζονται πάνω από τη γραμμή του αυτιού.
	Σταθερότητα ερεθισμάτων %.	Δείχνει τη σταθερότητα του ερεθίσματος καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμής.
	Σφάλμα %.	Δείχνει το ποσοστό των σφαλμάτων που μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια της δοκιμής.



	Χρόνος.	Συνολικός χρόνος δοκιμής.
	Κουμπί έναρξης.	Ξεκινά τον έλεγχο προσαρμογής του ανιχνευτή ΟΑΕ.
	Προβολή λίστας δοκιμών.	Ανοίγει τη λίστα όλων των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή τη συνεδρία· μπορεί να εκτυπωθεί από εδώ, εάν έχει ρυθμιστεί ο εκτυπωτής.
	Κουμπί επιστροφής.	Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη (πριν από την αρχική οθόνη δοκιμής).
	Σχόλιο.	Επιλέξτε για να ανοίξετε μια οθόνη για την εισαγωγή ενός σχολίου σχετικά με τη δοκιμή που μόλις εκτελέστηκε

4.8.3.5 Σταθερότητα ανιχνευτή % (μόνο DPOAE)

Κατά την ολοκλήρωση της μέτρησης, η ένδειξη **Σταθερότητα ανιχνευτή %** παρέχει μια ένδειξη του πόσο σταθερή ήταν η τοποθέτηση του ανιχνευτή καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμής. Μια χαμηλή σταθερότητα % υποδεικνύει ότι ο ανιχνευτής κινείται κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

4.8.3.6 Σταθερότητα ερεθίσματος % (μόνο ΤΕΟΑΕ)

Όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση, η ένδειξη **Σταθερότητα ερεθίσματος %** παρέχει μια ένδειξη του πόσο σταθερό ήταν το επίπεδο ερεθίσματος καθ' όλη τη διάρκεια της μέτρησης. Μια χαμηλή τιμή σταθερότητας υποδηλώνει συνήθως ότι ο αισθητήρας κινείται κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

4.8.3.7 Σφάλμα %

Όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση, θα εμφανιστεί η συνολική ποσότητα του σφάλματος που μετρήθηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

4.8.3.8 Χρόνος

Όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση, ο συνολικός χρόνος δοκιμής θα παρουσιαστεί εδώ.



4.9 Σύντομη δοκιμή

4.9.1 Γενικά



Η επιλογή **Quick Test** (Σύντομη δοκιμή) από το Home (Αρχική οθόνη) παρακάμπτει την εισαγωγή πληροφοριών του ασθενούς ή την επιλογή ενός ασθενούς από τη βάση δεδομένων.

Η διαδικασία ενός **Quick Test** (Σύντομη δοκιμή) είναι πανομοιότυπη με εκείνη μιας τυπικής δοκιμής.

Τα Quick tests (Σύντομες δοκιμές) μπορούν να εκτυπωθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, αλλά στην εκτύπωση δεν θα εμφανιστούν πληροφορίες αναγνώρισης.

Μόνο η τελευταία συνεδρία Quick Test (Σύντομη δοκιμή) αποθηκεύεται προσωρινά στο Sera™ μέχρι την επόμενη φορά που θα επιλεγεί το κουμπί Quick Test (Σύντομη δοκιμή) στην αρχική οθόνη. Όταν επιλέγεται Quick Test (Σύντομη δοκιμή), η προηγούμενη συνεδρία Quick Test (Σύντομη δοκιμή) διαγράφεται αμέσως και μόνιμα από το Sera™.

Εάν είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις της συσκευής, το ABR Quick Tests (γρήγορες δοκιμές ABR) θα σας δώσει τη δυνατότητα να προβάλετε έναν κωδικό QR που περιέχει το αποτέλεσμα της δοκιμής. Ο κωδικός QR δεν θα γίνει μη διαθέσιμος μόνο όταν βγείτε από την οθόνη δοκιμής/εμφάνισης του κωδικού QR.

Παρακαλώ σημειώστε: Η λειτουργία σύντομης δοκιμής μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί από έναν Διαχειριστή μέσω του HearSIM™. Εάν το Quick Test (Σύντομη δοκιμή) είναι απενεργοποιημένο στη συσκευή σας, τότε το κουμπί **Quick Test** (Σύντομη δοκιμή) δεν θα εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

4.9.2 Αποθήκευση μιας σύντομης δοκιμής

Εάν είναι η συνήθης πρακτική σας να αποθηκεύετε διαγνωστικές εξετάσεις, συνιστάται ιδιαίτερα να εισάγετε πρώτα τα στοιχεία του ασθενούς ή να επιλέξετε έναν υπάρχοντα ασθενή στη βάση δεδομένων **πριν** από την εκτέλεση της διαγνωστικής εξέτασης.

Ωστόσο, αν θέλετε να αποθηκεύσετε μια συνεδρία Quick Test (Σύντομη δοκιμή) αμέσως μετά την εκτέλεσή της, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Select Patient** (Επιλογή ασθενούς)
2. Επιλέξτε **"Quick Test"** (Σύντομη δοκιμή) ασθενούς
3. Επεξεργαστείτε τα δεδομένα του ασθενούς στην οθόνη Patient Information (Πληροφορίες ασθενούς)
4. Επιλέξτε το Σήμα ελέγχου στην κάτω γραμμή ελέγχου

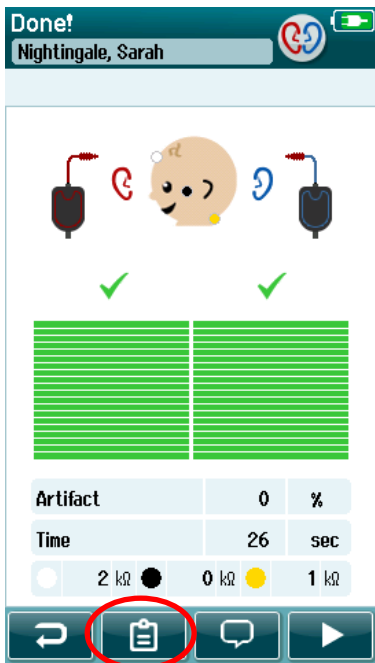
Η συνεδρία Quick Test (Σύντομη δοκιμή) αποθηκεύεται τώρα με το αναγνωριστικό και το όνομα του ασθενούς που εισαγάγατε.





4.10 Εκτύπωση

4.10.1 Τρόποι εκτύπωσης

Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων στον εκτυπωτή ετικέτας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από την οθόνη Test List (Λίστα εξετάσεων), στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση είτε από την οθόνη Test Done! (Η εξέταση ολοκληρώθηκε) είτε από την οθόνη Patient Information (Πληροφορίες ασθενούς).



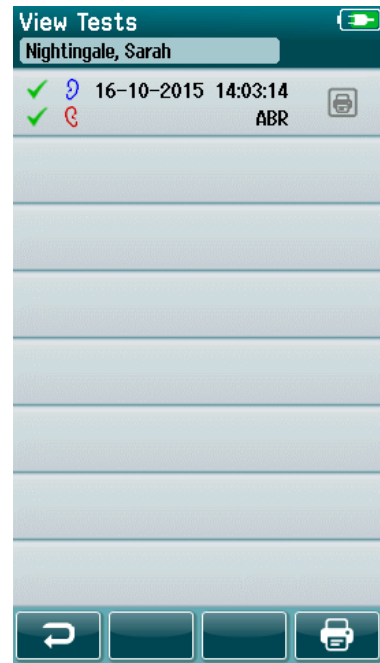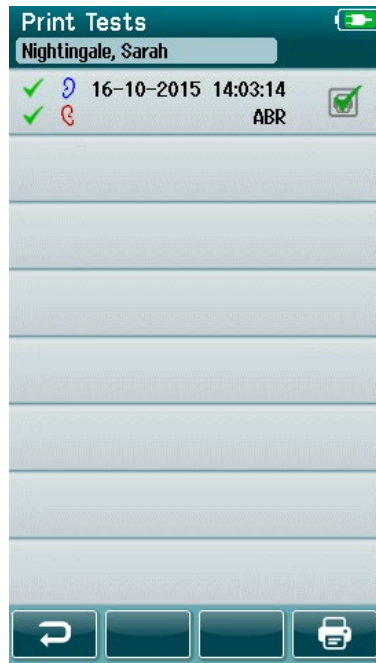Εκτύπωση από την οθόνη Test Done! (Η εξέταση ολοκληρώθηκε)



Εκτύπωση από το Patient Information Screen (Οθόνη πληροφοριών ασθενούς)

4.10.2 Μορφή εκτύπωσης ετικέτας

Η εκτύπωση της ετικέτας εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Όνομα
- Επώνυμο
- Αναγνωριστικό
- Φύλο
- Ημερομηνία γέννησης
- Αποτέλεσμα του αριστερού αυτιού, ημερομηνία και ώρα
- Αποτέλεσμα του δεξιού αυτιού, ημερομηνία και ώρα



4.11 Ανασκόπηση ασθενών και αποθηκευμένων συνεδριών

Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφονται τα βήματα για την αναζήτηση ενός ασθενούς που είναι αποθηκευμένος στη συσκευή, την επεξεργασία πληροφοριών ασθενούς, την προβολή δοκιμών (αποθηκευμένες συνεδρίες), την επιλογή μιας συνεδρίας για εκτύπωση και την προβολή πληροφοριών δοκιμών.

4.11.1 Επιλογή ασθενή



Επιλέξτε το κουμπί **Select Patient** (Επιλογή ασθενούς) στην αρχική οθόνη για να προβάλετε τη λίστα με τα ονόματα των ασθενών που περιέχονται στη βάση δεδομένων της συσκευής. Ο κατάλογος μπορεί να ταξινομηθεί αλφαβητικά με βάση το επώνυμο ή με βάση την ημερομηνία δοκιμής σε αντίστροφη χρονολογική σειρά χρησιμοποιώντας το εικονίδιο ταξινόμησης στην επάνω δεξιά γωνία.



Χρησιμοποιήστε τα βέλη **Πάνω** και **Κάτω** στην κάτω γραμμή ελέγχου για να μετακινηθείτε στη λίστα.

4.11.2 Αναζήτηση ασθενούς

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **Search** (Αναζήτηση) στη γραμμή ελέγχου για να ανοίξετε μια οθόνη πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε ολόκληρο ή μέρος του επωνύμου ή του αριθμού αναγνώρισης του ασθενούς και επιλέξτε εκ νέου Search (Αναζήτηση) για να επιστρέψετε σε μια συντομευμένη λίστα που περιέχει μόνο τους ασθενείς που ταιριάζουν. Επιλέξτε τον επιθυμητό ασθενή από τη λίστα για να μεταβείτε στην οθόνη Patient Information (Πληροφορίες ασθενούς) με τα στοιχεία αυτού του ασθενούς.

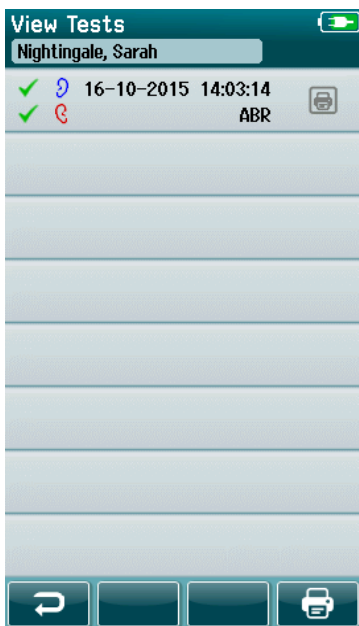
Όταν έχετε επιλέξει έναν ασθενή από τη λίστα, θα εμφανιστούν τα στοιχεία του εν λόγω ασθενούς για επισκόπηση.

4.11.3 Κουμπί δοκιμής

Επιλέξτε το κουμπί **Test** (Δοκιμή) από τη γραμμή ελέγχου για να προχωρήσετε στη δοκιμή αυτού του ασθενούς.

4.11.4 Προβολή αποθηκευμένων δοκιμών


Επιλέξτε το κουμπί **Test List** (Λίστα δοκιμών) από τη γραμμή ελέγχου της οθόνης Patient Information (Πληροφορίες ασθενούς) για να δείτε μια λίστα με τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτόν τον ασθενή.



Ο κατάλογος εξετάσεων ταξινομείται χρονολογικά με την πιο πρόσφατη δοκιμή στην κορυφή. Κάθε σειρά αντιπροσωπεύει μία δοκιμή.


Εάν έχουν αποθηκευτεί περισσότερες από 8 δοκιμές, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους **Πάνω** και **Κάτω** στην κάτω γραμμή ελέγχου για να μετακινηθείτε στη λίστα.

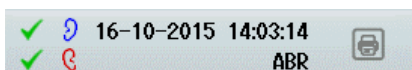Κάθε γραμμή στη λίστα δοκιμών εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:



- Σύμβολο αποτελέσματος για Pass (πέρασε), Refer (αναφορά) ή Incomplete (ελλιπής)
- Σύμβολο δοκιμαστικού αυτιού για το Δεξί, το Αριστερό ή και τα Δύο αυτιά
- Ημερομηνία & ώρα δοκιμής
- Τύπος δοκιμής (Αυτοματοποιημένο ABR, DPOAE ή TEOAE)

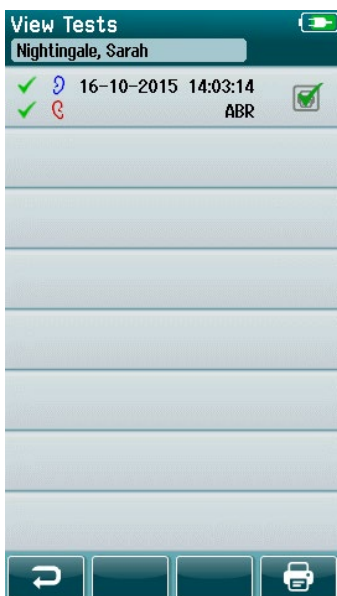4.11.4.1 Εκτύπωση αποθηκευμένης δοκιμής



Πιέστε το πλαίσιο Printer (Εκτυπωτής) στα δεξιά της δοκιμής για να επιλέξετε τη δοκιμή για εκτύπωση. Όταν είναι επιλεγμένο, το πλαίσιο του εικονιδίου εκτύπωσης θα περιέχει ένα πράσινο σήμα ελέγχου. Επιλέξτε όσες δοκιμές θέλετε να εκτυπώσετε. Στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση) στη γραμμή ελέγχου.

Κάθε δοκιμή θα εκτυπωθεί σε ξεχωριστή ετικέτα, εκτός από την περίπτωση που έχετε επιλέξει μόνο μία δοκιμή για το δεξί και μία για το αριστερό αυτί του ίδιου τύπου δοκιμής. Στην περίπτωση αυτή, και οι δύο δοκιμές θα εκτυπωθούν σε μία μόνο ετικέτα.

Παρακαλώ σημειώστε: Τα πλαίσια εκτυπωτή και το κουμπί **Print** (Εκτύπωση) εμφανίζονται στην οθόνη μόνο εάν το Sera™ σας έχει ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης και εκτυπωτή μέσω του HearSIM™ και εφόσον έχει συζευχθεί ένας εκτυπωτής HM-E200 με τη συσκευή. Διαφορετικά, αυτά τα στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατά.



4.11.5 Ανασκόπηση μιας αποθηκευμένης δοκιμής

Επιλέξτε τη δοκιμή που επιθυμείτε να ελέγξετε για να δείτε τα **αποτελέσματα της δοκιμής** και τις πληροφορίες των **πεδίων της δοκιμής**.

Επιλέξτε το κουμπί **View Test Fields** (Προβολή πεδίων δοκιμής) στον πίνακα ελέγχου για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το πεδίο δοκιμής. Αυτή η οθόνη θα είναι διαθέσιμη μόνο εάν η επιλογή Test Fields (Πεδία δοκιμής) είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή μέσω του HearSIM™.

Τα πεδία που σχετίζονται με τη δοκιμή δεν μπορούν να επεξεργαστούν στο Sera™. Εάν απαιτούνται επεξεργασίες, τα δεδομένα της δοκιμής πρέπει να μεταφερθούν πρώτα στο HearSIM™ και να επεξεργαστούν από εκεί.



4.12 Διαχείριση χρηστών στη συσκευή

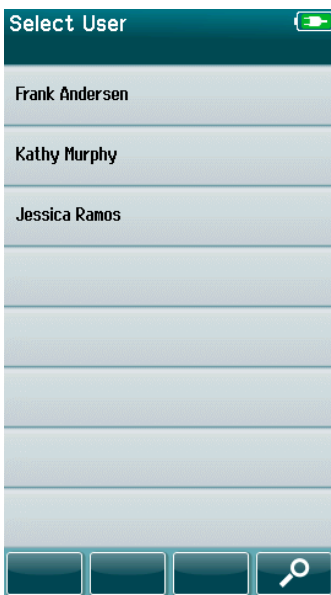
4.12.1 Γενικά

Το Sera™ μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να απαιτεί σύνδεση χρήστη στη συσκευή μέσω του HearSIM™. Αυτό είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή.



Μόλις ενεργοποιηθεί η είσοδος, στην αρχική οθόνη υπάρχει ένα κουμπί για την αλλαγή του χρήστη.

4.12.2 Επιλογή του χρήστη (προαιρετικά)




Το Sera™ μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να απαιτεί σύνδεση χρήστη στη συσκευή μέσω του HearSIM™. Αυτό είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση χρήστη, μετά την εκκίνηση της συσκευής θα εμφανιστεί μια οθόνη λίστας χρηστών που δημιουργήσατε στο HearSIM™ και μεταφέρατε στο Sera™.

Επιλέξτε το όνομα χρήστη σας από τη λίστα για να προχωρήσετε στην οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Τα βέλη προς τα **πάνω** και προς τα **κάτω** στη γραμμή ελέγχου σας επιτρέπουν να μετακινηθείτε σε σελίδες με ονόματα, εάν υπάρχουν περισσότεροι από 8 χρήστες στη λίστα.

Επιλέξτε το **κουμπί Search** (Αναζήτηση) στη γραμμή ελέγχου για να πληκτρολογήσετε τους χαρακτήρες του ονόματος χρήστη σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Στη συνέχεια, επιλέξτε το **σήμα ελέγχου** στη γραμμή ελέγχου για να επιστρέψετε στην προβολή μιας συντομευμένης λίστας χρηστών.

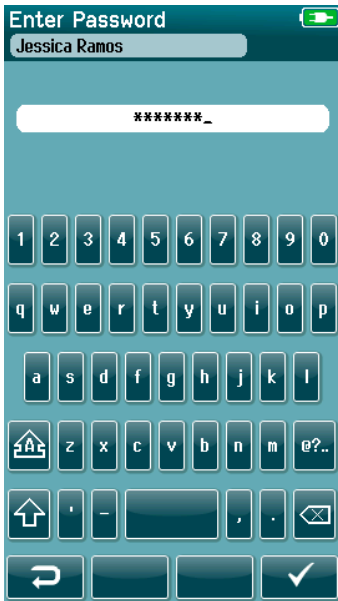
4.12.3 Εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης



Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας στην οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης και επιλέξτε το κουμπί **σήμα ελέγχου** στη γραμμή ελέγχου.

Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστός, θα εμφανιστεί η οθόνη **Home** (Αρχική οθόνη).

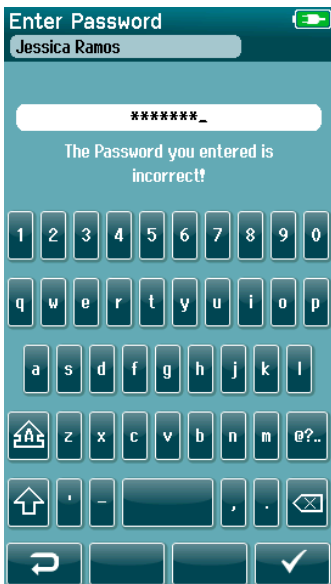4.12.4 Λανθασμένος κωδικός πρόσβασης



Εάν εισαγάγετε λανθασμένο κωδικό πρόσβασης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα υποδεικνύει ότι ο κωδικός πρόσβασης που εισαγάγατε ήταν λανθασμένος.

Το μήνυμα θα εμφανιστεί για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα εξαφανιστεί, καθαρίζοντας το πεδίο εισαγωγής, ώστε να μπορείτε να προσπαθήσετε να εισαγάγετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης.

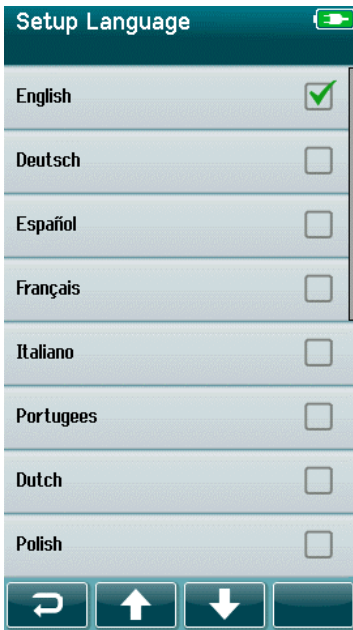


4.13 Setup (Ρύθμιση)



Επιλέξτε το κουμπί **Setup** (Ρύθμιση) στη γραμμή ελέγχου της οθόνης **Home** (Αρχική οθόνη) για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα με τις ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν απευθείας στο Sera™.

4.13.1 Οθόνη Language (Γλώσσα)



Χρησιμοποιήστε τα βέλη **Πάνω** και **Κάτω** για να μετακινηθείτε στη λίστα των γλωσσών.

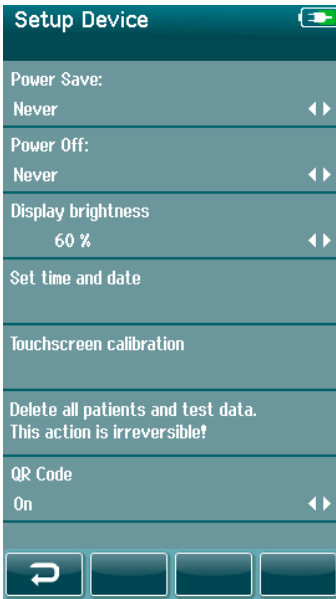
Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα έτσι ώστε να εμφανιστεί ένα σήμα ελέγχου στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στη γλώσσα.

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και να βγείτε από την οθόνη Language (Γλώσσα), επιλέξτε το κουμπί **ελέγχου** στη γραμμή ελέγχου.

Οι διαθέσιμες γλώσσες είναι αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, πορτογαλικά, ολλανδικά, πολωνικά, φινλανδικά, ρωσικά, κινέζικα, κορεατικά, νορβηγικά, τουρκικά, ιαπωνικά, καζακικά και τσεχικά.



4.13.2 Συσσκευή



Ορίστε την χρονική σας προτίμηση για τις λειτουργίες **Power Save** (Εξοικονόμηση ενέργειας) και **Power Off** (Απενεργοποίηση).

- Η επιλογή **Power Save** (Εξοικονόμηση ενέργειας) μπορεί να ρυθμιστεί σε Never (Ποτέ), 1-5 λεπτά ή 10 λεπτά
- Η επιλογή **Power Off (Απενεργοποίηση)** (Εξοικονόμηση ενέργειας) μπορεί να οριστεί σε Never (Ποτέ) ή σε 1, 5, 10, 15 ή 30 λεπτά

Επιλέξτε το κουμπί **σήμα ελέγχου** στη γραμμή ελέγχου για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να κλείσετε την οθόνη Device Setup (Ρύθμιση συσκευής).

Ρυθμίστε τη **φωτεινότητα της οθόνης** που προτιμάτε.

Ορίστε τις προτιμήσεις σας για την **ώρα και την ημερομηνία**.

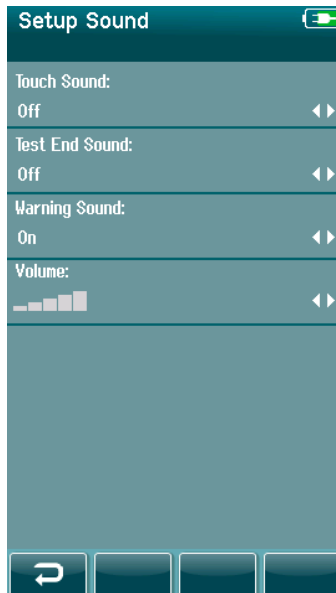
- Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας
- Επιλέξτε μεταξύ λειτουργίας ρολογιού 24 ωρών ή ρολογιού 12 ωρών

Δυνατότητα **διαγραφής όλων των ασθενών και των δεδομένων δοκιμών** από τη συσκευή.

- Η διαγραφή δεδομένων είναι μη αναστρέψιμη. Μια προειδοποιητική ειδοποίηση θα εμφανιστεί πριν ολοκληρωθεί η διαγραφή

Επιλογή για την εμφάνιση ενός κωδικού QR για τα ABR Quick Tests (γρήγορες δοκιμές ABR).

4.13.3 Ήχος



Ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας για το άκουσμα ενός ήχου ως ανατροφοδότηση υπό διάφορες συνθήκες. Η στάθμη της έντασης ήχου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί εδώ. Οι συνθήκες στις οποίες μπορείτε να επιλέξετε να ακούγεται έναν ήχο είναι οι εξής:

- **Ήχος αφής** – ακούγεται ένας ήχος για όλα τα πατήματα κουμπιών στη συσκευή
- **Ήχος ολοκλήρωσης δοκιμής** – ένας ήχος ακούγεται όταν ολοκληρώνεται μια δοκιμή
- **Προειδοποιητικός ήχος** – ένας προειδοποιητικός ήχος ακούγεται όταν ένα ηλεκτρόδιο αποκολλάται κατά τη διάρκεια της αυτοματοποιημένης δοκιμής ABR ή όταν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλή

Επιλέξτε το **σήμα ελέγχου** στη γραμμή ελέγχου για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να κλείσετε την οθόνη Sound Setup (Ρύθμιση ήχου).



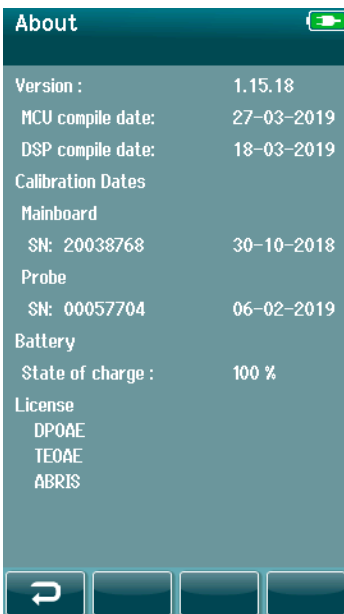
4.13.4 Εκτυπωτής



Για τη σύζευξη με τον προαιρετικό ασύρματο εκτυπωτή HM-E200, επιλέξτε το κουμπί **Search** (Αναζήτηση) στη γραμμή ελέγχου. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Το όνομα "HM-E200" θα εμφανιστεί όταν ο εκτυπωτής συνδεθεί επιτυχώς με το Sera™.

Επιλέξτε το **σήμα ελέγχου** στη γραμμή ελέγχου για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να κλείσετε την οθόνη Printer Setup (Ρύθμιση εκτυπωτή).

4.13.5 Πληροφορίες



Επιλέξτε το στοιχείο **About** (Πληροφορίες) για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το Sera™, όπως:

- Έκδοση υλικολογισμικού
- Σειριακοί αριθμοί και ημερομηνίες βαθμονόμησης
- Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία
- Άδεια χρήσης



5 Έλεγχοι εξοπλισμού (ακεραιότητας)

5.1 Γενικά

Η απόδοση του ανιχνευτή και των καλωδίων ηλεκτροδίων είναι καθοριστικής σημασίας για τα αποτελέσματα της δοκιμής. Συνιστούμε να διενεργείτε έναν έλεγχο του εξοπλισμού στην αρχή κάθε ημέρας πριν ξεκινήσετε τη δοκιμή σε ασθενείς ώστε να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί σωστά.

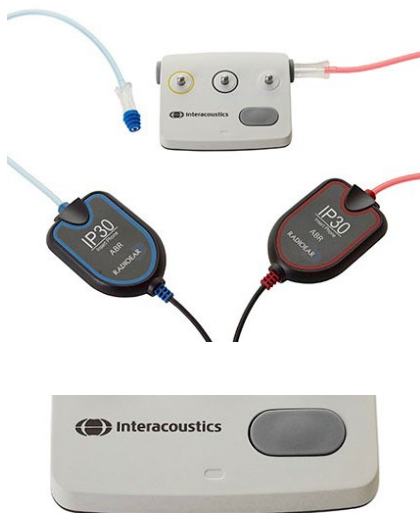
- Προτού εκτελέσετε τον έλεγχο ακεραιότητας, βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο του ανιχνευτή ή ο προσαρμογέας ακροφύσιου είναι καθαρός και απαλλαγμένος από κερί ή/και υπολείμματα
- Πραγματοποιείτε πάντα τον έλεγχο του εξοπλισμού σε ήσυχο περιβάλλον ελέγχου
- Για τις δοκιμές, χρησιμοποιείτε μόνο το συνιστώμενο ελεγκτή διέλευσης ή τη κοιλότητα δοκιμής. Η χρήση διαφορετικού τύπου συσκευής ή κοιλότητας μπορεί να μην εντοπίσει βλάβες του εξοπλισμού ή του μορφοτροπέα

5.2 Ελεγκτή διέλευσης για αυτοματοποιημένο ABR (προαιρετικό)

Το προαιρετικό εξάρτημα Ελεγκτή διέλευσης (Pass-Checker) Sera™ ABRIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ακεραιότητας των καλωδίων ηλεκτροδίων και του μορφοτροπέα που χρησιμοποιούνται για τις αυτοματοποιημένες δοκιμές ABR με Sera™. Ο έλεγχος ακεραιότητας μπορεί να γίνεται σε τακτική βάση ή να εκτελείται εφόσον υποψιάζεστε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το υλισμικό του Sera™, τα καλώδια ηλεκτροδίων ή τον μορφοτροπέα. Ο ελεγκτής διέλευσης μπορεί να προμηθευτεί από τον αντιπρόσωπο της Interacoustics.

1. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια των ηλεκτροδίων και τα ένθετα ακουστικά/EarCups/ανιχνευτής είναι συνδεδεμένα στο καλώδιο προενισχυτή Sera™ και ότι το καλώδιο προενισχυτή είναι συνδεδεμένο στο Sera™.
2. Συνδέστε τα 3 χρωματιστά καλώδια ηλεκτροδίων στα αντίστοιχα μεταλλικά κουμπιά του ελεγκτή διέλευσης - βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα των καλωδίων ταιριάζουν με το δαχτυλίδι γύρω από τα μεταλλικά κουμπιά).
3. Για έναν μορφοτροπέα EarCups, εισαγάγετε τους μαύρους προσαρμογείς EarCup πλήρως στις οπές σε κάθε πλευρά.





Όταν χρησιμοποιείτε ένθετα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας ακροφύσιου είναι συνδεδεμένος με ένα ακροφύσιο μίας χρήσης (συνιστάται το πράσινο των 9 mm). Εισαγάγετε τα ακροφύσια εντός των οπών έως ότου το εξωτερικό άκρο του μανιταριού εφαρμόσει στο ίδιο επίπεδο με το εξωτερικό άκρο της οπής. Μην πιέζετε πολύ προς τα μέσα το ακροφύσιο, καθώς μπορεί να σφηνωθεί στο εσωτερικό του αυτιού.

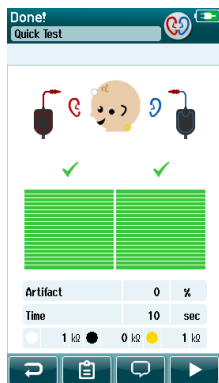
Εάν χρησιμοποιείτε τον ανιχνευτή, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο ένα ακροφύσιο μιας χρήσης (συνιστάται το μπλε) πριν το εισάγετε στην οπή. Αποκλείστε την άλλη οπή του ελεγκτή διέλευσης πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμής.

4. Ενεργοποιήστε τον ελεγκτή διέλευσης πατώντας το κουμπί λειτουργίας. Η πορτοκαλί λυχνία LED ανάβει όταν ο ελεγκτής διέλευσης είναι ενεργοποιημένος.

Ο ελεγκτής διέλευσης διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Εάν εκτελείτε επαναλαμβανόμενες δοκιμές κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης προβλημάτων, βεβαιωθείτε ότι ο ελεγκτής διέλευσης εξακολουθεί να είναι ενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια των δοκιμών σας.

ABR

(CE-Chirp 35dB nHL)



5. Εκτελέστε μια τυπική αμφίπλευρη ή μονόπλευρη (για ανιχνευτή) αυτοματοποιημένη δοκιμή ABR.
6. Η δοκιμή θα πρέπει να διεξάγεται γρήγορα μέσω των φάσεων εμπέδησης και μέτρησης και να καταλήγει σε αποτέλεσμα Pass (πέρασε) και για τα δύο αυτιά (το ένα αν χρησιμοποιείται ανιχνευτής). Αν η δοκιμή δεν είναι επιτυχής ή αν η δοκιμή δεν μπορεί να προχωρήσει από τον έλεγχο εμπέδησης, ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το σύστημα.



Ανατρέξτε στις Πρόσθετες πληροφορίες Sera™ για τα συμπτώματα, τις πιθανές αιτίες και την προτεινόμενη αντιμετώπιση προβλημάτων.

Παρακαλώ σημειώστε: Η μπαταρία του ελεγκτή διέλευσης πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Interacoustics. Οι ζημιές στα ηλεκτρονικά του ελεγκτή διέλευσης που οφείλονται σε προσπάθεια αλλαγής της μπαταρίας από κάποιον άλλον εκτός από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, δεν μπορούν να επιδιορθωθούν στο πλαίσιο της εγγύησης του προϊόντος.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος ελεγκτής διέλευσης για να εκτελέσει τον αυτοματοποιημένο έλεγχο ακεραιότητας ABR, μπορείτε να εκτελέσετε τον έλεγχο μόνοι σας.



5.3 Δοκιμή ακεραιότητας ανιχνευτή για ΤΕΟΑΕ

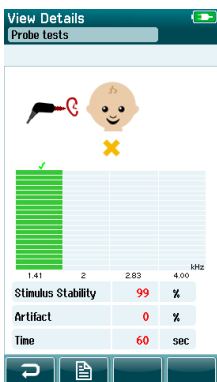
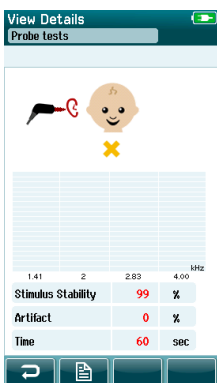
Μια δοκιμαστική κοιλότητα που ονομάζεται Infant Ear Simulator (Προσομοιωτής βρεφικού αυτιού) παρέχεται με το Sera™ για τη διεξαγωγή δοκιμής ακεραιότητας του ανιχνευτή για τις μονάδες ΟΑΕ.

Η δοκιμή ακεραιότητας του ανιχνευτή εξασφαλίζει ότι δεν δημιουργούνται παραμορφώσεις του συστήματος από τον ανιχνευτή ή το υλισμικό. Η άκρη του ανιχνευτή πρέπει να επιθεωρείται για κερύ ή υπόλοιπα πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμής. Και οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σε ήσυχο περιβάλλον.



ΤΕΟΑΕ

(15 – 4 kHz)



1. Εισαγάγετε τον ανιχνευτή OWA με το κόκκινο φλαντζωτό ακροφύσιο των 3 mm ή το SnapPROBE™ με οποιοδήποτε ακροφύσιο προσαρτημένο στον προσομοιωτή αυτιού βρέφους που παρέχεται με το Sera™.
2. Στην κύρια οθόνη, επιλέξτε την επιλογή σύντομης δοκιμής και εκτελέστε μια τυπική δοκιμή ΤΕΟΑΕ. Αφήστε τη δοκιμή να εκτελεστεί έως ότου σταματήσει αυτόματα. Μη σταματάτε τον έλεγχο χειροκίνητα.
3. Εάν ο ανιχνευτήρας λειτουργεί σωστά (καμία ζώνη TE δεν φέρει σημείο ελέγχου), η καθημερινή δοκιμή μπορεί να συνεχιστεί.
4. Εάν κατά τη διάρκεια της δοκιμής εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων ή μία ή περισσότερες από τις ζώνες TE φέρει σημάδι ελέγχου επάνω της στο τέλος της δοκιμής, η δοκιμή ακεραιότητας του ανιχνευτή έχει αποτύχει. Ελέγξτε και καθαρίστε το ακροφύσιο του ανιχνευτή για κερύ ή υπολείμματα και επαναλάβετε τη δοκιμή. Εάν η δοκιμή του ανιχνευτή αποτύχει για δεύτερη φορά, το Sera™ **δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για δοκιμή σε ασθενείς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για βοήθεια.**

Ανατρέξτε στις Πρόσθετες πληροφορίες Sera™ για τα συμπτώματα, τις πιθανές αιτίες και την προτεινόμενη αντιμετώπιση προβλημάτων.

Παρακαλώ σημειώστε: Εάν ένας ανιχνευτής χειριστεί με πρόχειρο τρόπο (π.χ. πέσει σε σκληρή επιφάνεια), μπορεί να χρειαστεί εκ νέου βαθμονόμησή του. Οι τιμές βαθμονόμησης του ανιχνευτή αποθηκεύονται στο βύσμα του ανιχνευτή. Ως εκ τούτου, οι ανιχνευτές μπορούν πάντα να αντικατασταθούν.



5.4 Δοκιμή ακεραιότητας ανιχνευτή για DPOAE

Μια δοκιμαστική κοιλότητα που ονομάζεται Infant Ear Simulator (Προσομοιωτής βρεφικού αυτιού) παρέχεται με το Sera™ για τη διεξαγωγή δοκιμής ακεραιότητας του ανιχνευτή για τις μονάδες OAE.

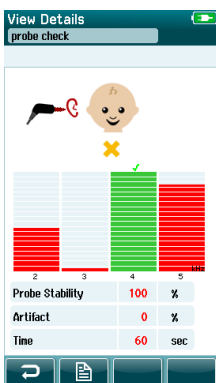
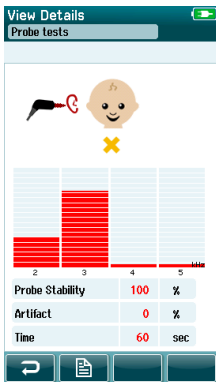
Η δοκιμή ακεραιότητας του ανιχνευτή εξασφαλίζει ότι δεν δημιουργούνται παραμορφώσεις του συστήματος από τον ανιχνευτή ή το υλισμικό. Η άκρη του ανιχνευτή πρέπει να επιθεωρείται για κερή ή υπόλοιπα πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμής. και οι δοκιμές θα πρέπει να διεξάγονται πάντα σε ήσυχο περιβάλλον



DPOAE

(2 – 5 kHz)

1. Εισαγάγετε τον ανιχνευτή OWA με το κόκκινο φλαντζωτό ακροφύσιο των 3 mm ή το SnapPROBE™ με οποιοδήποτε ακροφύσιο προσαρτημένο στον προσομοιωτή αυτιού βρέφους που παρέχεται με το Sera™.
2. Στην κύρια οθόνη, επιλέξτε την επιλογή σύντομης δοκιμής και εκτελέστε μια τυπική δοκιμή ΤΕΟΑΕ. Αφήστε τη δοκιμή να εκτελεστεί έως ότου σταματήσει αυτόματα. Μη σταματάτε τον έλεγχο χειροκίνητα.
3. Εάν ο ανιχνευτής λειτουργεί σωστά (κανένα σημείο συχνότητας DP δεν φέρει ένα σήμα ελέγχου), μπορείτε να συνεχίσετε με τις καθημερινές δοκιμές.



4. Εάν κατά τη διάρκεια της δοκιμής εμφανιστούν μηνύματα σφάλματος ή εάν ένα ή περισσότερα από τα σημεία συχνότητας DP φέρουν ένα σήμα ελέγχου στο τέλος της δοκιμής, η δοκιμή ακεραιότητας του ανιχνευτή έχει αποτύχει. Ελέγξτε και καθαρίστε το ακροφύσιο του ανιχνευτή για κερή ή υπολείμματα και επαναλάβετε τη δοκιμή. Εάν η δοκιμή του ανιχνευτή αποτύχει για δεύτερη φορά, το Sera™ **δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για δοκιμή σε ασθενείς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για βοήθεια.**

Ανατρέξτε στις Πρόσθετες πληροφορίες Sera™ για τα συμπτώματα, τις πιθανές αιτίες και την προτεινόμενη αντιμετώπιση προβλημάτων.

Παρακαλώ σημειώστε: Εάν ένας ανιχνευτής χειριστεί με πρόχειρο τρόπο (π.χ. πέσει σε σκληρή επιφάνεια), μπορεί να χρειαστεί εκ νέου βαθμονόμησή του. Οι τιμές βαθμονόμησης του ανιχνευτή αποθηκεύονται στο βύσμα του ανιχνευτή. Ως εκ τούτου, οι ανιχνευτές μπορούν πάντα να αντικατασταθούν.



6 Συντήρηση

6.1 Διαδικασίες γενικής συντήρησης

Η απόδοση και η ασφάλεια του οργάνου θα είναι διασφαλισμένες εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες συστάσεις σχετικά με τη φροντίδα και τη συντήρηση:

1. Συνιστάται το όργανο να υποβάλλεται σε τουλάχιστον μία ετήσια συντήρηση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθότητα των ακουστικών, ηλεκτρικών και μηχανικών ιδιοτήτων. Αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένο εργαστήριο για να διασφαλίζεται η ορθή συντήρηση και επισκευή.
2. Προσέξτε για τυχόν ζημιά στη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο ή στους συνδετήρες και βεβαιωθείτε ότι δεν εκτίθενται σε μηχανικό φορτίο οποιουδήποτε είδους, που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη.
3. Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του οργάνου, συνιστούμε στον χειριστή να προβαίνει ανά τακτά διαστήματα, για παράδειγμα μία φορά την ημέρα, στην εκτέλεση μιας δοκιμής σε άτομο με γνωστά δεδομένα. Το άτομο αυτό θα μπορούσε να είναι ο ίδιος ο χειριστής. Για τη δοκιμή ΟΑΕ, συνιστάται η καθημερινή δοκιμή ακεραιότητας του ανιχνευτή για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του ανιχνευτή πριν από τη δοκιμή σε ασθενείς.
4. Εάν η επιφάνεια ή τμήματα του οργάνου μολυνθούν, μπορούν να καθαριστούν χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί που έχει εμποτιστεί σε ήπιο διάλυμα νερού και απορρυπαντικού ή συναφούς προϊόντος. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού αποσυνδέετε πάντοτε το μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος και προσέξτε ιδιαίτερα να μην εισέλθει υγρό στο εσωτερικό του οργάνου ή των εξαρτημάτων του.
5. Μετά από κάθε εξέταση ασθενή, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή δεν έχουν επιμολυνθεί. Πρέπει να τηρούνται γενικές προφυλάξεις για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης της νόσου από τον ένα ασθενή στον άλλο. Τα μη αναλώσιμα μέρη του συστήματος που συναντούν τον ασθενή θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά τη χρήση, ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη μόλυνση.
6. Για τακτικό καθαρισμό θα πρέπει να χρησιμοποιείται νερό, αλλά σε περίπτωση σοβαρής μόλυνσης ενδέχεται να είναι απαραίτητη η χρήση απολυμαντικού.



Παρακαλείστε να ανατρέξετε στις Πρόσθετες πληροφορίες Sera™ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό και τη συντήρηση του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων.

6.2 Διαδικασίες γενικού καθαρισμού



- Πριν από τον καθαρισμό, να απενεργοποιείτε πάντοτε το όργανο και να το αποσυνδέετε από την τροφοδοσία
- Χρησιμοποιείτε ένα πανί, ελαφρώς νοτισμένο σε καθαριστικό διάλυμα, για τον καθαρισμό όλων των εκτεθειμένων επιφανειών
- Μην αφήνετε το υγρό να έρθει σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη στο εσωτερικό των ακουστικών/κεφαλόφωνων
- Μην τοποθετείτε σε αυτόκλειστο, μην αποστειρώνετε και μη βυθίζετε το όργανο ή οποιοδήποτε εξάρτημά σε οποιοδήποτε υγρό
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος ή εξάρτημα του οργάνου
- Μην αφήνετε τμήματα που έχουν έρθει σε επαφή με υγρά να στεγνώσουν προτού τα καθαρίσετε
- Τα λαστιχένια ακροφύσια ή τα ακροφύσια από αφρώδες υλικό είναι είδη μίας χρήσης



- Εάν η απολύμανση κρίνεται απαραίτητη, συνιστάται η χρήση απολυμαντικού χωρίς αλκοόλη. Τα προϊόντα χωρίς αλκοόλη περιέχουν το ενεργό συστατικό που αναφέρεται ως τεταρτοταγής ένωση αμμωνίας.

Συνιστώμενα διαλύματα καθαρισμού και απολύμανσης:

- Ζεστό νερό με ήπιο, μη λειαντικό καθαριστικό διάλυμα (σαπούνι)

6.3 Καθαρισμός του Sera™

6.3.1 Οθόνη αφής

Καθαρίστε το όργανο σκουπίζοντας την εξωτερική θήκη με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι και το οποίο έχει εμποτιστεί ελαφρώς σε καθαριστικό διάλυμα. Χρησιμοποιήστε ένα πανί καθαρισμού φακών ή πανί μικροϊνών για να καθαρίσετε την οθόνη αφής Sera™.

6.3.2 Θήκη, βάση και καλώδια



Προσοχή κατά τον καθαρισμό.

- Πριν από τον καθαρισμό, αφαιρέστε το Sera™ από τη βάση και αποσυνδέστε τη βάση από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με ένα ήπιο διάλυμα νερού και απορρυπαντικού για να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη του Sera™ και της βάσης.
- Εάν απαιτείται απολύμανση, χρησιμοποιήστε απολυμαντικό μαντηλάκι και όχι προϊόν ψεκασμού. Βεβαιωθείτε ότι η περίσσεια υγρού από το μαντηλάκι δεν εισχωρεί σε ευαίσθητες περιοχές, όπως οι σύνδεσμοι και οι συγκολλήσεις όπου συνδέονται πλαστικά κομμάτια, όπως κάτω από το ελαστικό χείλος γύρω από το Sera™.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν απολύμανσης.

6.3.3 Αναλώσιμα

Χρησιμοποιείτε μόνο τα αναλώσιμα Sanibel™ μιας χρήσης που παρέχονται με το Sera™ σας. Τα ακροφύσια, τα EarCups και τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια προορίζονται μόνο για μία χρήση. Αυτά θα πρέπει να απορρίπτονται μετά τη χρήση. Δεν μπορούν να απολυμανθούν.



Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης των αναλώσιμων μιας χρήσης, αυξάνετε τον κίνδυνο αλληλομόλυνσης!



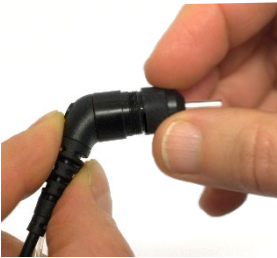
6.4 Καθαρισμός του ακροφυσίου του ανιχνευτή OWA

Για να εξασφαλίσετε σωστές μετρήσεις, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ανιχνευτή διατηρείται πάντα καθαρό. Ως εκ τούτου, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσης π.χ. της κυψελίδας από τα μικρά κανάλια ακουστικών του ακροφυσίου του ανιχνευτή.



Χρησιμοποιήστε το νήμα Thornton Bridge & Implant Floss ή το νήμα Thornton 3 σε 1 για τον καθαρισμό.

Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο οδοντικό νήμα μετά τη χρήση.




Ποτέ μην καθαρίζετε το ακροφύσιο του ανιχνευτή ενώ αυτό είναι ακόμα συνδεδεμένο με το σώμα του ανιχνευτή.


Ξεβιδώστε το καπάκι του ανιχνευτή περιστρέφοντας το αριστερόστροφα και αφαιρέστε το ακροφύσιο του ανιχνευτή από το σώμα του ανιχνευτή.



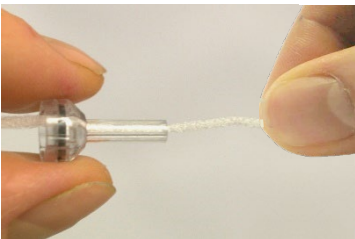Περάστε το νήμα καθαρισμού σε ένα από τα κανάλια από τη βάση του ακροφυσίου του ανιχνευτή.



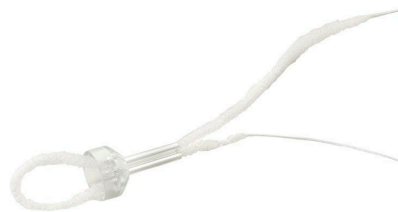Τραβήξτε ολόκληρο το νήμα καθαρισμού μέσα από τον σωλήνα του ακροφυσίου του ανιχνευτή. Επαναλάβετε για κάθε κανάλι, εάν απαιτείται.



Για να καθαρίσετε το μεγαλύτερο κανάλι, συνιστάται να διπλασιάσετε το νήμα για να καθαρίσετε αποτελεσματικά όλες τις γωνίες.



Για να έχετε πρόσβαση και να καθαρίσετε το μεγαλύτερο κανάλι, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το παρέμβυσμα από την άκρη του ανιχνευτή. Μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας μια λεπτή πινέζα. Σπρώξτε ξανά το περίβλημα μετά τον καθαρισμό.



Επανατοποθετήστε το ακροφύσιο του ανιχνευτή στον ανιχνευτή και βιδώστε το παρέμβυσμα στη θέση του.



ΜΗΝ προσπαθήσετε να καθαρίσετε το ακροφύσιο του ανιχνευτή ενώ είναι τοποθετημένο στον ανιχνευτή.

Εισαγάγετε το νήμα καθαρισμού ή το σύρμα μόνο στη βάση του ανιχνευτή για να διασφαλίσετε ότι το κερί/υπόλειμμα απομακρύνεται από το ακροφύσιο του ανιχνευτή αντί να εισέρχεται σε αυτό. Αυτό προστατεύει επίσης το παρέμβυσμα από το να καταστραφεί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εργαλεία για να στερεώσετε το καπάκι του ανιχνευτήρα!



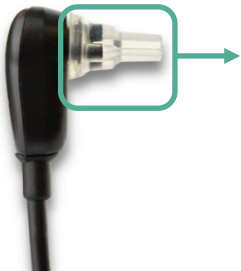
Ανατρέξτε στις πρόσθετες πληροφορίες Sera™ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό του ανιχνευτή.



6.5 Καθαρισμός του SnapPROBE™

Τα ακροφύσια για το SnapPROBE™ έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν την απόσταση μεταξύ των ευαίσθητων εξαρτημάτων του ανιχνευτή και του ακουστικού πόρου του βρέφους. Το επίμηκες σχήμα συλλέγει συνήθως το μεγαλύτερο μέρος της κυψελίδας, το οποίο απορρίπτεται μαζί με το ακροφύσιο μετά τη χρήση, περιορίζοντας έτσι τη συχνότητα αντικατάστασης των φίλτρων του ανιχνευτή. Είναι σημαντικό το ακροφύσιο του ανιχνευτή να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από κυψελίδα ή άλλα υπολείμματα πριν από τη διεξαγωγή μιας δοκιμής. Η ύπαρξη κυψελίδας ή υπολειμμάτων στο ακροφύσιο του ανιχνευτή μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη παρουσίαση της διέγερσης ή της καταγραφής. Επομένως, πριν από κάθε μέτρηση θα πρέπει να γίνεται οπτικός έλεγχος του ανιχνευτή και των φίλτρων του.

Εάν υπάρχουν ίχνη κυψελίδας, υπολείμματα ή παρόμοια, τα φίλτρα του ανιχνευτή πρέπει να αντικατασταθούν.



Αφαιρέστε το ακροφύσιο από τον ανιχνευτή για να αποκτήσετε πρόσβαση στα τρία φίλτρα του SnapPROBE™.



Τα φίλτρα μπορούν να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο αντικατάστασης φίλτρου από το κιτ αντικατάστασης φίλτρου.



Για την αφαίρεση ενός φίλτρου από τον ανιχνευτή, χρησιμοποιήστε την κενή υποδοχή του κιτ ανταλλακτικών φίλτρων.



Τοποθετήστε το νέο φίλτρο που παρέχεται στο εργαλείο στην κενή υποδοχή φίλτρου. Απορρίψτε αμέσως το παλιό φίλτρο για να αποφύγετε την ανάμειξή του με τα νέα φίλτρα αντικατάστασης.



6.6 Εξαρτήματα/ανταλλακτικά

Κάποια εξαρτήματα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν υπόκεινται σε φθορά με τη χρήση με την πάροδο του χρόνου. Συνιστούμε να διατηρείτε αυτά τα ανταλλακτικά διαθέσιμα (ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής σας Sera™).

6.7 Αντικατάσταση μπαταρίας

Συνιστούμε η αντικατάσταση της εσωτερικής μπαταρίας να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion) στη συσκευή Sera, παρακαλείστε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν δύο τρόποι αντικατάστασης της μπαταρίας, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Sera (με ή χωρίς σύνδεσμο).

6.7.1 Αποσυναρμολόγηση Sera™

Για την πρόσβαση στην μπαταρία, απαιτείται το άνοιγμα και η αποσυναρμολόγηση του περιβλήματος.

6.7.2 Άνοιγμα του περιβλήματος



Ξεκινώντας από το κάτω μέρος, αφαιρέστε τον ελαστικό δακτύλιο και απομακρύνετε τον από το περίβλημα.



Υπάρχει ένα σετ από βίδες σε κάθε πλευρά του οργάνου, οι οποίες συγκρατούν τα επάνω και κάτω τμήματα του περιβλήματος.



Αυτές οι 4 βίδες πρέπει να αφαιρεθούν πριν μπορέσουν να διαχωριστούν τα δύο τμήματα.



Αφού αφαιρεθούν οι βίδες, διαχωρίστε προσεκτικά τα επάνω και κάτω τμήματα του περιβλήματος χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο αποκόλλησης, π.χ. ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή.

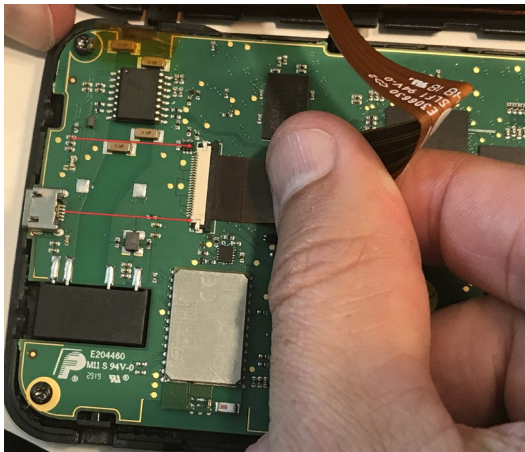
Υπάρχουν 12 σημεία ασφάλισης κατανεμημένα σε όλες τις πλευρές του περιβλήματος, τα οποία εξασφαλίζουν μια σταθερή συναρμολόγηση.



Όταν όλα τα σημεία ασφάλισης έχουν αποδεσμευτεί με το κατσαβίδι, τα δύο τμήματα του περιβλήματος είναι έτοιμα για περαιτέρω αποσυναρμολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δύο τμήματα του περιβλήματος εξακολουθούν να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω του εύκαμπτου κυκλώματος (flex print),

6.7.3 Αποσυναρμολόγηση του περιβλήματος




Για να διαχωρίσετε το επάνω και το κάτω τμήμα του περιβλήματος, τοποθετήστε το επάνω τμήμα σε σταθερή επιφάνεια και ανασηκώστε προσεκτικά το επάνω μέρος.

Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να σύρετε τον μηχανισμό ασφάλισης που συγκρατεί το καλώδιο στη θέση του.


Μόλις ανοίξει η ασφάλεια, μπορείτε να αποδεσμεύσετε το εύκαμπτο κύκλωμα από τη θέση του.

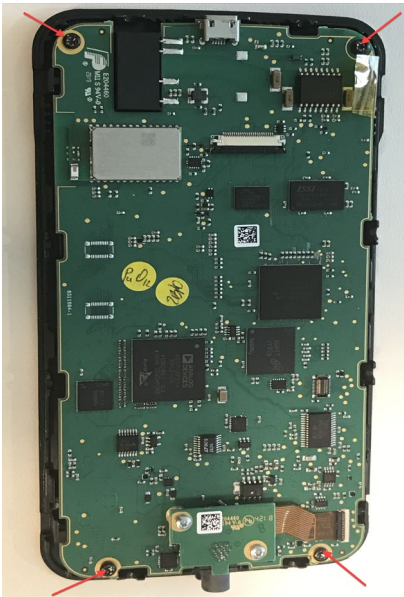Το επάνω και το κάτω τμήμα του περιβλήματος δεν είναι πλέον συνδεδεμένα μεταξύ τους.



Αφαιρέστε τις 4 βίδες.

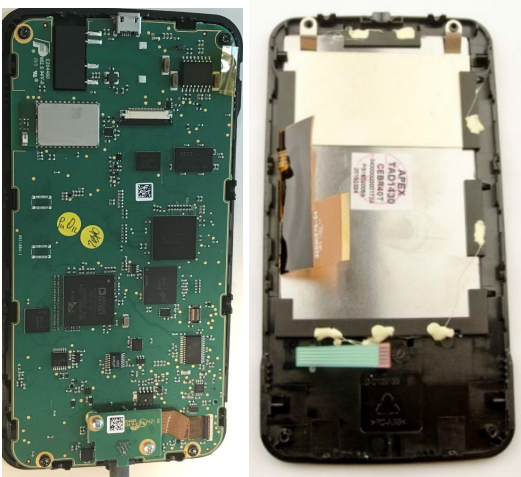Κάτω από το μονωτικό φύλλο, οι ίδιες 4 βίδες συγκρατούν επίσης την πλακέτα PCA και το μονωτικό υλικό.




Το κάτω τμήμα του περιβλήματος με την πλακέτα PCA και την μπαταρία (αριστερά).

Το επάνω τμήμα με την οθόνη (δεξιά).



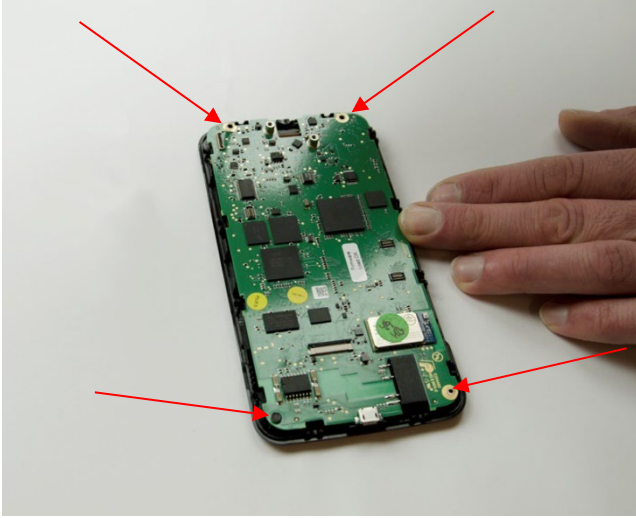6.7.4 Αποσυναρμολόγηση της πλακέτας PCA




Οι τέσσερις βίδες που αφαιρέθηκαν στο προηγούμενο βήμα, επιτρέπουν την αποσύνδεση της πλακέτας PCA από το περίβλημα.




Αν αναστρέψετε την πλακέτα PCA, θα διαπιστώσετε ότι είναι συνδεδεμένη στο κάτω τμήμα του περιβλήματος με ένα καλώδιο.

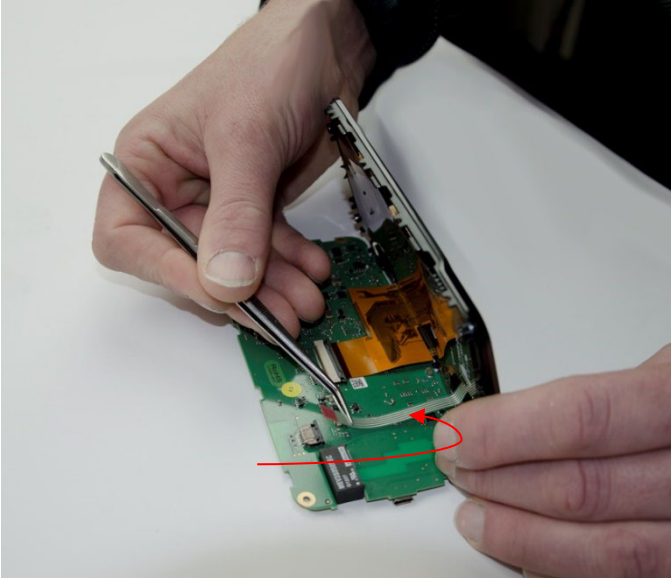Τοποθετήστε την πλακέτα PCA επίπεδα σε μια σταθερή επιφάνεια, κρατώντας με το ένα χέρι το κάτω τμήμα του περιβλήματος.



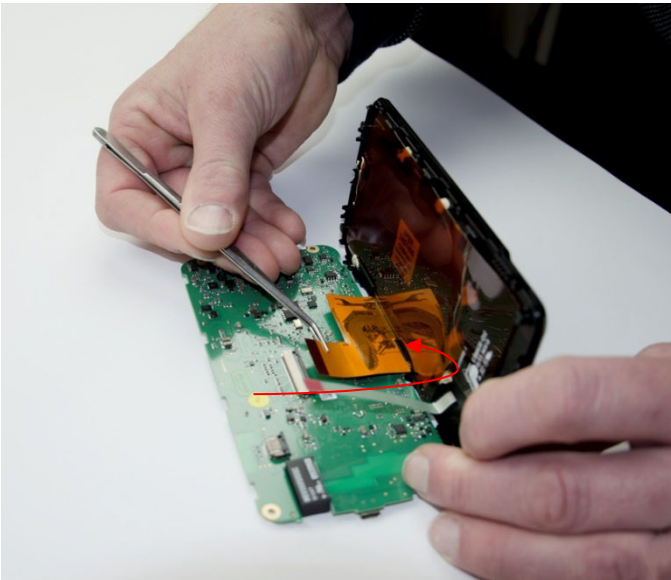Με τα δύο ρυθμιστικά ξεκλειδωμένα, πρώτα, απελευθερώστε το καλώδιο από το ρυθμιστικό.




Στη συνέχεια, αφαιρέστε προσεκτικά το εύκαμπτο κύκλωμα από το ρυθμιστικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφαιρείτε το εύκαμπτο κύκλωμα (flex print) με δύναμη, καθώς υπάρχει κίνδυνος φθοράς του.

Η πλακέτα PCA και το κάτω περίβλημα έχουν πλέον διαχωριστεί.




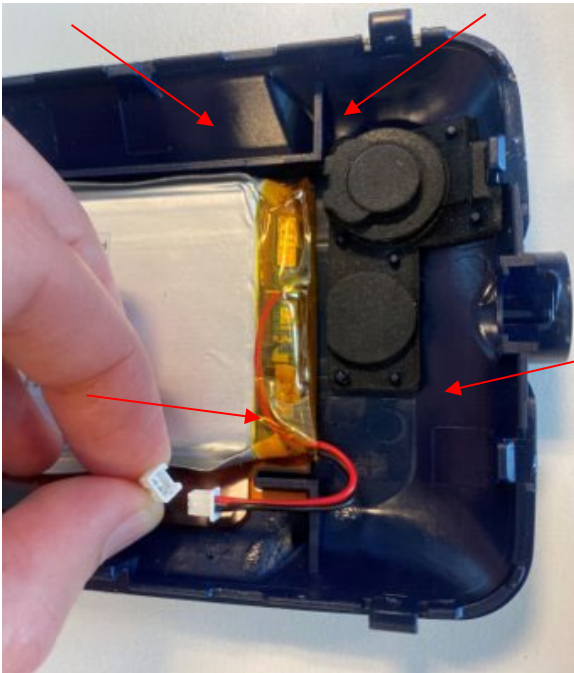6.7.5 Αντικατάσταση της μπαταρίας




Αποσυνδέστε την μπαταρία.

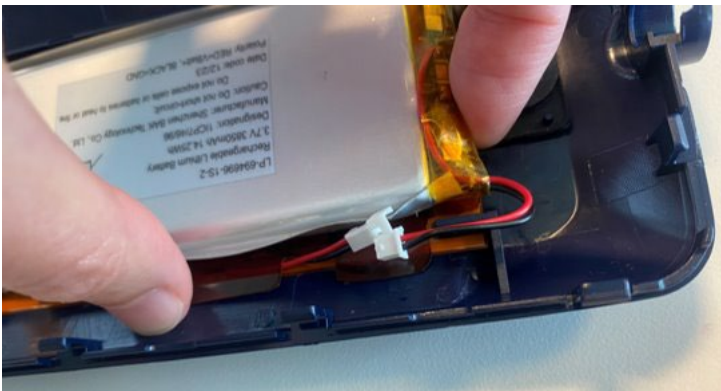
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η μπαταρία δεν διαθέτει σύνδεσμο, απαιτείται η αντικατάσταση ολόκληρου του πίσω τμήματος της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας (το κιτ κάτω τμήματος μπορεί να παραγγελθεί ξεχωριστά).



Ανασηκώστε τη μπαταρία από την επάνω πλευρά.

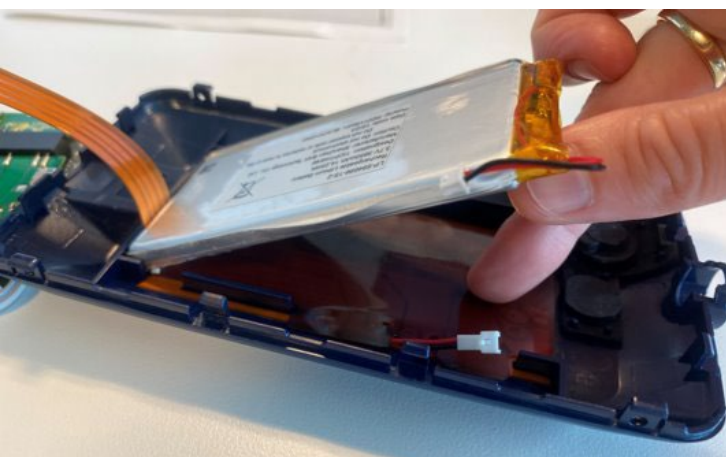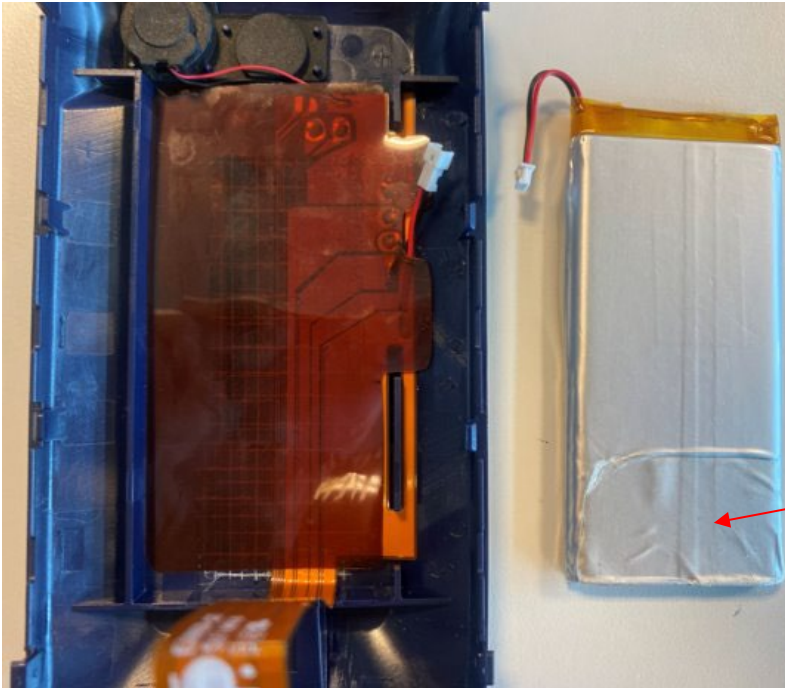
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε σταθερά το μονωτικό φύλλο ώστε να αποφευχθεί φθορά ή αποσυναρμολόγηση των υποκείμενων εξαρτημάτων.





Βεβαιωθείτε ότι η παλιά ταινία παραμένει κολλημένη επάνω στη μπαταρία. Εάν είναι κολλημένη στο μονωτικό φύλλο, αφαιρέστε την πριν τοποθετήσετε τη νέα μπαταρία.


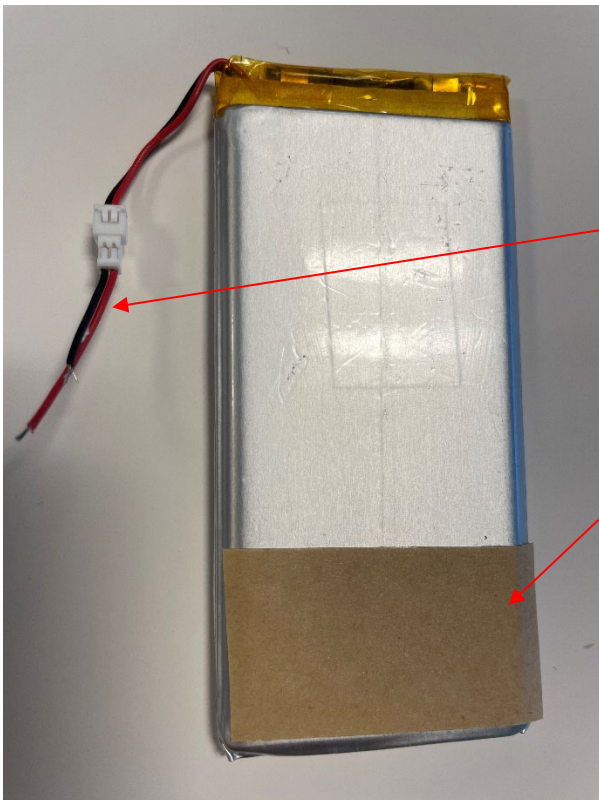
Επαληθεύστε ξανά ότι η παλιά ταινία εξακολουθεί να βρίσκεται επάνω στη μπαταρία. Εάν όχι, αφαιρέστε την από το μονωτικό φύλλο στο κάτω μέρος



Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με αντίστροφη σειρά από την αφαίρεση.

Εάν η νέα μπαταρία συνοδεύεται από επιπλέον σύνδεσμο, αφαιρέστε τον και απορρίψτε τον πριν από την τοποθέτηση.

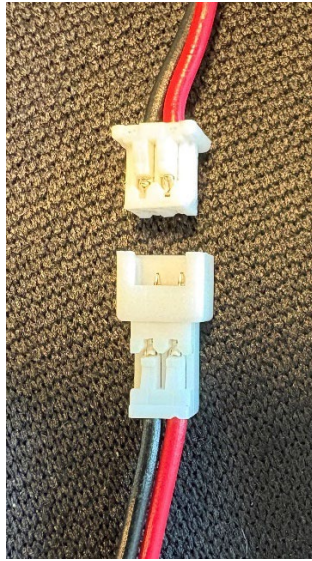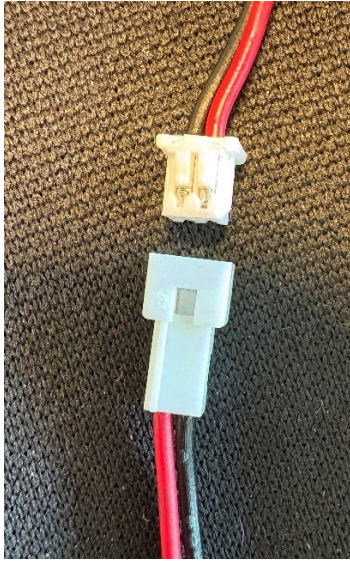Η νέα μπαταρία διαθέτει ήδη ταινία στο πίσω μέρος. Αφαιρέστε το καφέ προστατευτικό κάλυμμα πριν την τοποθέτηση.



Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος είναι σωστά ευθυγραμμισμένος.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ενεργοποιήστε τη συσκευή για να επιβεβαιώσετε ότι η τοποθέτηση έγινε σωστά.

6.7.6 Αντικατάσταση της μπαταρίας του ελεγκτή περάσματος ABRIS

Για την αντικατάσταση της μπαταρίας στον ελεγκτή περάσματος ABRIS, αφαιρέστε πρώτα τις δύο βίδες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής.



Στη συνέχεια, διαχωρίστε το εμπρόσθιο και το οπίσθιο περίβλημα και αφαιρέστε την παλιά μπαταρία.

Τοποθετήστε μία νέα μπαταρία τύπου p23ga 12v.





6.8 Επισκευή

Η Interacoustics είναι υπεύθυνη για την εγκυρότητα του σήματος CE, τις επιδράσεις στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και την απόδοση της συσκευής μόνον εφόσον:

1. Οι λειτουργίες συναρμολόγησης, οι προεκτάσεις, οι εκ νέου ρυθμίσεις, οι μετατροπές ή οι επισκευές πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένα άτομα
2. Διατηρείται ένα διάστημα συντήρησης 1 έτους
3. Η ηλεκτρική εγκατάσταση του σχετικού χώρου πληροί τις ανάλογες απαιτήσεις, και
4. Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την τεκμηρίωση που παρέχεται από την Interacoustics.

Ο πελάτης πρέπει να απευθυνθεί στον τοπικό διανομέα, για να ενημερωθεί για τις δυνατότητες σέρβις/επισκευής συμπεριλαμβανομένου του σέρβις στον χώρο του πελάτη. Είναι σημαντικό ο πελάτης (μέσω του τοπικού διανομέα) να συμπληρώνει την **ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ** κάθε φορά που το εξάρτημα/προϊόν αποστέλλεται για σέρβις/επισκευή στην Interacoustics.

6.9 Εγγύηση

Η Interacoustics εγγυάται ότι:

- Το Sera™ δεν θα εμφανίσει ελαττώματα υλικού και εργασίας υπό φυσιολογική χρήση και λειτουργία για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης από την Interacoustics στον πρώτο αγοραστή
- Τα εξαρτήματα δεν θα εμφανίσουν ελαττώματα υλικού και εργασίας υπό φυσιολογική χρήση και λειτουργία για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης από την Interacoustics στον πρώτο αγοραστή

Εάν κάποιο προϊόν χρειαστεί συντήρηση κατά τη διάρκεια της ισχύουσας περιόδου εγγύησης, ο αγοραστής πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης της Interacoustics για τον εντοπισμό του κατάλληλου εργαστηρίου επισκευών. Η επισκευή ή η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με επιβάρυνση της Interacoustics, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εγγύησης. Το προϊόν που χρήζει συντήρησης πρέπει να επιστραφεί αμέσως, σε κατάλληλη συσκευασία και με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη. Τυχόν απώλεια ή ζημιά σε φορτίο που επιστρέφεται στην Interacoustics επιβαρύνει τον αγοραστή.

Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του οργάνου είναι 7 έτη. Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής των συνοδευτικών ανιχνευτών και μετατροπέων είναι 3 έτη.

Σε καμία περίπτωση η Interacoustics δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε τυχαία, έμμεση ή παρεπόμενη ζημιά που έχει σχέση με την αγορά ή χρήση οποιουδήποτε προϊόντος της Interacoustics.

Η παρούσα ισχύει αποκλειστικά για τον αρχικό αγοραστή. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για οποιονδήποτε μετέπειτα ιδιοκτήτη ή κάτοχο του προϊόντος. Επιπλέον, η παρούσα εγγύηση δεν θα ισχύει, και η Interacoustics δεν θα είναι υπεύθυνη, για οποιαδήποτε απώλεια που απορρέει σε σχέση με την αγορά ή τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος της Interacoustics, το οποίο:

- επισκευάστηκε από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο συντήρησης της Interacoustics ·
- τροποποιήθηκε κατά οποιονδήποτε τρόπο ώστε, κατά την κρίση της Interacoustics, να επηρεάζεται η σταθερότητα ή η αξιοπιστία του ·
- υποβλήθηκε σε κακή χρήση ή αμέλεια ή ατύχημα, ή του οποίου ο αριθμός σειράς ή παρτίδας τροποποιήθηκε, διαγράφηκε ή αφαιρέθηκε · ή
- συντηρήθηκε με ακατάλληλο τρόπο ή χρησιμοποιήθηκε με άλλον τρόπο σε αντίθεση με όσα αναφέρονται στις οδηγίες που παρασχέθηκαν από την Interacoustics.

Η παρούσα εγγύηση αντικαθιστά κάθε άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και κάθε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη της Interacoustics. Η Interacoustics δεν παρέχει ούτε παραχωρεί, άμεσα ή έμμεσα, εξουσιοδότηση σε




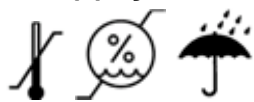
οποιοδήποτε αντιπρόσωπο ή άλλο άτομο να αναλάβει εκ μέρους της Interacoustics οποιαδήποτε άλλη ευθύνη σε σχέση με την πώληση των προϊόντων της Interacoustics.

Η Interacoustics αποποιείται κάθε αλλης εγγυησης, ρητης ή σιωπηρης, συμπεριλαμβανομενων τυχον εγγυησεων εμπορευσιμοτητας ή καταλληλοτητας για συγκεκριμενο σκοπο ή εφαρμογη.



7 Γενικές τεχνικές προδιαγραφές

7.1 Όργανο Sera™ – τεχνικές προδιαγραφές

Ιατρικό σήμα CE 	Το σήμα CE σε συνδυασμό με το σύμβολο MD δηλώνει ότι η Interacoustics A/S πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (EE) 2017/745. Η έγκριση του συστήματος ποιότητας παρέχεται από την TÜV αριθ. 0123.	
Πρότυπα	Ασφάλεια:	IEC 60601-1:2012, Εσωτερικά τροφοδοτούμενα, εφαρμοσμένα μέρη τύπου BF
	ΗΜΣ:	IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 60601-2-40:2016
	Βαθμονόμηση:	ISO 389-2:1994 ISO 389-6:2007
	Σήμα δοκιμής:	IEC 60645-3:2007
	ΟΑΕ:	IEC 60645-6:2022, Τύπος 2
	ABR:	IEC 60645-7:2009, Τύπος 2
Βάση	Ασφάλεια: Power Τάσεις και συχνότητες κεντρικού ρεύματος: Έξοδος:	IEC 60601-1:2012, Κατηγορία II UES12LCP-050160SPA Αριθμός προϊόντος 8515473 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 400 mA 5,0V DC, 1,6A MAX
Περιβάλλον λειτουργίας 	Θερμοκρασία: Σχετική υγρασία: Πίεση περιβάλλοντος: Χρόνος εκκίνησης: Χρόνος προθέρμανσης:	5 – 40°C, + 41°F... + 104°F 15 – 93% (χωρίς υδρατμούς) 98 kPa – 104 kPa < 5 δευτ. Nil
Μεταφορά & Περιβάλλον αποθήκευσης	Θερμοκρασία μακροχρόνιας αποθήκευσης (αποστολή, αποθήκευση κ.λπ.): Θερμοκρασία βραχυπρόθεσμης μεταφοράς (μεταφορά μεταξύ χρήσης): Αποθήκευση και μεταφορά σχετ. Υγρασία:	0°C – 50°C, - 4°F... + 122°F -25 – 70°C, - 13°F... + 158°F Μέγιστο 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Εκτίμηση υψομέτρου	Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας:	2000 m / 6561 ft πάνω από την στάθμη της θάλασσας
Σήματα IP02 IP20	Η σήμανση IP είναι μια σήμανση προστασίας από την εισχώρηση. Η σήμανση προσδιορίζει την παρεχόμενη προστασία από την εισχώρηση σωματιδίων και υγρών. Αυτό το όργανο έχει διαφορετική σήμανση IP με τον ακόλουθο αντίκτυπο: IP02: Για την προστασία του οργάνου από τη βροχή και το νερό χρησιμοποιείτε πάντα την τσάντα μεταφοράς κατά τη μεταφορά. IP20: Αυτή η σήμανση μπορεί να βρεθεί στα μέρη του οργάνου και σημαίνει ότι τα μέρη δεν προστατεύονται από το νερό ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φορτιστής, το τροφοδοτικό και η βάση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε οικιακά περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης.	




Γενικά		
Διαστάσεις Sera™		15,8 x 8,3 x 1,9 εκ. / 6,2 x 6,2 x 0,7 ίντσες
Βάρος Sera™		265 g / 0.5 lbs
Διεπαφή χρήστη:		Αντιστατική οθόνη αφής
Μέγεθος οθόνης:		9,5 x 5,6 cm, έγχρωμο, ανάλυση 272 x 480
Διασυνδέσεις δεδομένων:		Ασύρματο Συχνότητα εκπομπής: 2402 – 2480 MHz Τύποι διαμόρφωσης: GFSK, π/4-DQPSK και 8DPSK Ισχύς ακτινοβολίας: έως 12 dBm
Ανατροφοδότηση χρήστη:		Ενσωματωμένο μεγάφωνο
Ρυθμίσεις γλώσσας:		Αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, πορτογαλικά, ολλανδικά, πολωνικά, φινλανδικά, ρουμανικά, ρωσικά, κινέζικα, κορεατικά, τουρκικά, νορβηγικά, ιαπωνικά, καζακικά, τσεχικά, Σουηδικά και Ουκρανικά.
Μπαταρία	Τύπος:	Μπαταρία ιόντων λιθίου 44794; Χωρητικότητα: 3,7V/3850 mAh
	Αναμενόμενη διάρκεια ζωής:	Ανάλογα με τη χρήση - συνήθως πάνω από 3 έτη
Μνήμη		1 GB (μπορούν να αποθηκευτούν έως 250 ασθενείς με 50 δοκιμές ο καθένας)
Σύνδεσμος		Σύνδεσμος 12 ακίδων της Omnetics
Βάρος προενισχυτή		85 g / 0.19 lbs
Διαστάσεις προενισχυτή		8,5 x 0,5 x 2,5 cm / 3,4 x 0,2 x 0,9 ίντσες

Εκτυπωτής		
Θερμικός εκτυπωτής (προαιρετικά)	Τύπος:	HM-E200
	Σύνδεση:	Ασύρματο
	Μπαταρία:	Επαναφορτιζόμενη Li-polymer, DC 7,4 V, 1300 mAh
	Φορτιστής:	AC 100 - 240 V, ~50/60 Hz, 1,0 A
	Βάρος:	234 g / 8,3 oz
	Χαρτί:	Θερμικό χαρτί Θερμικές ετικέτες (103 ανά ρολό)
	Πλάτος χαρτιού:	58 mm (πλάτος) σε θερμικό εκτυπωτή 56 mm x 60 mm (πλάτος x μήκος) σε εκτυπωτή ετικετών
	Χρόνος εκτύπωσης:	Μέγ. 100mm/s. Ο χρόνος εκτύπωσης εξαρτάται από το μέγεθος του χρησιμοποιούμενου πρωτοκόλλου.


ABRIS		
Προενισχυτής	Ένα κανάλι:	3 ηλεκτρόδια, 51 cm, 20"
	Αύξηση:	65 dB (72 dB nom.)
	Συχνοτική απόκριση:	0,5 - 5000 Hz
	Θόρυβος:	<25 nV/√Hz
	Αναλογία CMR:	> 100 dB στα 100 Hz
	Ρυθμός δειγματοληψίας:	22,05 kHz
	Μέγιστη τάση αντιστάθμισης εισόδου:	2,5 V
	Εμπέδηση εισόδου:	10 MΩ/ 250 pF




	Ισχύς από κεντρική μονάδα:	Απομονωμένο τροφοδοτικό
Μέτρηση ηλεκτρικής εμπέδησης	Συχνότητα μέτρησης:	33 Hz
	Κυματομορφή:	Ορθογώνια
	Ρεύμα μέτρησης:	11,25 μ A
	Εύρος:	0,5 k Ω – 50 k Ω \pm 10 %
	Ερέθισμα	Ερεθίσματα: CE-Chirp® (200 Hz – 11 kHz), Click (200 Hz – 11 kHz)
	Ρυθμός ερεθίσματος:	90 Hz
	Μετατροπείς: (Βαθμονομημένο στα πρότυπα)	IP30 ένθετο ακουστικό IP30 EarCup Ανιχνευτής OWA SnapPROBE™
	Στάθμη:	25, 30, 35, 40, 45 dB nHL
	Εύρος ζώνης:	22,05 kHz
Καταγραφή	Χρόνος ανάλυσης:	3 λεπτά
	Ανάλυση A/D:	24 bit
	Σύστημα απόρριψης τεχνάσματος:	Επίπεδο απόρριψης (κορυφή, ελάχιστο RMS, μέγιστο RMS) & περικοπή (κορεσμός)
Οθόνη		Μορφοτροπέας, μπάρες αποτελεσμάτων δοκιμής, σύμβολα αποτελεσμάτων (πέρασε/αναφορά/ατελής), χρόνος δοκιμής, σφάλμα, σύνθετες αντιστάσεις ηλεκτροδίων.
Ακρίβεια μέτρησης	Αλγοριθμική ευαισθησία (προεπιλεγμένο πρωτόκολλο):	>99,99%  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα πρωτόκολλα δοκιμών, τις ρυθμίσεις του πρωτοκόλλου δοκιμών και την ευαισθησία και την ειδικότητα, παρακαλείστε να ανατρέξετε στις Πρόσθετες πληροφορίες Sera™.

DPOAE		
Ερέθισμα	Εύρος συχνοτήτων:	Από 1500 έως 6000 Hz
	Ονομαστική συχνότητα:	f2
	αναλογία f2/f1:	1,22
	Στάθμη:	50 – 65 dB SPL
	Μορφοτροπέας:	Αυτόματη ανίχνευση SnapPROBE™, αυτόματη βαθμονόμηση Αντικαταστάσιμο ακροφύσιο καθετήρα Ανιχνευτής OWA αυτόματης ανίχνευσης, αυτόματης βαθμονόμησης Αντικαταστάσιμο ακροφύσιο ανιχνευτή
Εγγραφή	Χρόνος ανάλυσης:	60 δευτερόλεπτα
	Ανάλυση A/D:	Ανάλυση 24 bit, 5,38 Hz
	Σύστημα απόρριψης σφάλματος (θορύβου):	30 dB SPL
	Μόνιμος θόρυβος:	Μέση μέτρηση RMS στην περιοχή συχνοτήτων DP-bin (26 bins σε συχνότητες < 2500 Hz & 60 bins \geq 2500 Hz).
	Πίεση δοκιμής:	Περιβάλλον
Οθόνη		Μορφοτροπέας, μπάρες αποτελέσματος δοκιμής, σύμβολα αποτελέσματος (πέρασε/αναφορά/ατελής), σταθερότητα ανιχνευτή, χρόνος δοκιμής, σφάλμα.
Ακρίβεια μέτρησης:	Αλγοριθμική ευαισθησία	\geq 99,6%



	(προεπιλεγμένο πρωτόκολλο):	 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα πρωτόκολλα δοκιμών, τις ρυθμίσεις του πρωτοκόλλου δοκιμών και την ευαισθησία και την ειδικότητα, παρακαλείστε να ανατρέξετε στις Πρόσθετες πληροφορίες Sera™.
--	------------------------------------	--

Το Sera™ με DPOAE χρησιμοποιεί μια βελτιωμένη μέθοδο ελέγχου του επιπέδου των ερεθισμάτων, η οποία αποδίδει με μεγαλύτερη ακρίβεια την καθορισμένη ένταση σε όλο το εύρος των ακουστικών πόρων, από βρέφη έως ενήλικες. Η εφαρμοσιμότητα του προτύπου IEC 60645-6 περιορίζεται επί του παρόντος στα αυτιά των ενηλίκων. Ως εκ τούτου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς με ένα προϊόν που παρέχει πιο ακριβή επίπεδα ερεθισμάτων σε ένα ευρύ φάσμα όγκων του ακουστικού πόρου (ειδικά σε βρέφη), επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη διαδικασία βαθμονόμησης για τα DPOAE που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του IEC 60645-6 για ορισμένα πρωτόκολλα. Όλα τα πρωτόκολλα που περιλαμβάνουν το IEC στο όνομα χρησιμοποιούν την καθορισμένη μέθοδο βαθμονόμησης IEC.


ΤΕΟΑΕ		
Ερέθισμα	Εύρος συχνοτήτων:	1500 έως 4000 Hz
	Τύπος ερεθίσματος:	Μη γραμμικό (σύμφωνα με το IEC 60645-6:2009)
	Στάθμη:	60 - 83 dBre SPL, βαθμονομημένο από κορυφή σε κορυφή, ελεγχόμενο AGC
	Ρυθμός κλικ:	71/δευτερόλεπτο
	Μορφοτροπέας:	Αυτόματη ανίχνευση SnapPROBE™, αυτόματη βαθμονόμηση Αντικαταστάσιμο ακροφύσιο καθετήρα Ανιχνευτήρας OWA αυτόματης ανίχνευσης, αυτόματης βαθμονόμησης Αντικαταστάσιμο ακροφύσιο καθετήρα
Εγγραφή	Χρόνος ανάλυσης:	60 δευτερόλεπτα
	Παράθυρο καταγραφής:	2,5 – 14,1 ms
	Ανάλυση A/D:	24 bit
	Σύστημα απόρριψης σφάλματος (θορύβου):	55 dB SPL
	Πίεση δοκιμής:	Περιβάλλον
	Μόνιμος θόρυβος:	Μια τιμή RMS για κάθε ζώνη οκτάβας, με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο κατά Bayes για το καθορισμένο χρονικό παράθυρο OAE.
Ακρίβεια μέτρησης	Αλγοριθμική ευαισθησία (προεπιλεγμένο πρωτόκολλο):	≥ 99,6%  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα πρωτόκολλα δοκιμών, τις ρυθμίσεις του πρωτοκόλλου δοκιμών και την ευαισθησία και την ειδικότητα, παρακαλείστε να ανατρέξετε στις Πρόσθετες πληροφορίες Sera™.
Οθόνη		Μορφοτροπέας, μπάρες αποτελεσμάτων δοκιμής, σύμβολα αποτελεσμάτων (πέρασε/αναφορά/ατελής), σταθερότητα ερεθίσματος, χρόνος δοκιμής, σφάλμα.




7.2 Προδιαγραφές συνδέσεων εισόδου/εξόδου

	Σύνδεσμος Sera™ ABR/OAE για ανιχνευτή, προενισχυτή	Προενισχυτής, ανιχνευτής, σύνδεσμος μορφοτροπέα
Pin	Περιγραφή	Περιγραφή
1	CH1 out	CH1 out
2	CH1 GND	CH1 GND
3	DGND	DGND
4	ΓΕΙΩΣΗ A / ΓΕΙΩΣΗ Μικροφώνου	ΓΕΙΩΣΗ A / ΓΕΙΩΣΗ Μικροφώνου
5	Μικρόφωνο - είσοδος / Είσοδος αναλογικής εξισορρόπησης	Μικρόφωνο - είσοδος / Είσοδος αναλογικής εξισορρόπησης
6	Μικρόφωνο + είσοδος / Είσοδος αναλογικής εξισορρόπησης	Μικρόφωνο + είσοδος / Είσοδος αναλογικής εξισορρόπησης
7	Τροφοδοσία +3/+5V	Τροφοδοσία +3/+5V
8	CH2 out	CH2 out
9	CH2 GND	CH2 GND
10	I2C CLK	I2C CLK
11	I2C DATA	I2C DATA
12	I2C Interrupt	I2C Interrupt

Είσοδος/έξοδος δεδομένων	
USB τύπου A-B micro	Θύρα USB για επικοινωνία

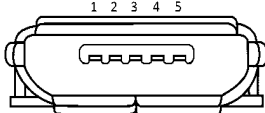ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ	 <p>MICRO USB 5V/1.6A</p>

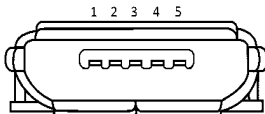ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SERA™		MICRO USB (IN)	
	1		1. +5 VDC 2. NC 3. NC 4. NC 5. Γείωση

Ιδιότητες βαθμονόμησης

Ακρίβεια	
ABRIS	±2 dB για κάθε τύπο ερεθίσματος

DPOAE	±1,5 dB για 1000 έως 4000Hz και ±3 dB εκτός εύρους
-------	--



ΤΕΟΑΕ	±2 dB για ερέθισμα από κλικ
--------------	-----------------------------

7.3 Τιμές αναφοράς βαθμονόμησης για το ερέθισμα CE-Chirp®

Τα ερεθίσματα ανιχνευτήρα και υποδοχής βαθμονομούνται σε τιμές SPL χρησιμοποιώντας ζεύκτη προσομοιωτή αυτιού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60318-4.

Μορφοτροπείας	peRETSPL [dB re. 20 μPa]
RadioEar IP30 με ακροφύσια	31,5 dB SPL
RadioEar IP30 με EarCups	58,5 dB SPL
Ανιχνευτής OWA	35 dB SPL
SnapPROBE™	34,1 dB SPL

Οι τιμές αναφοράς για το ερέθισμα CE-Chirp® είναι οι τυπικές τιμές της Interacoustics.

7.4 Τιμές αναφοράς βαθμονόμησης για το ερέθισμα κλικ

Τα ερεθίσματα ανιχνευτήρα και υποδοχής βαθμονομούνται σε τιμές SPL χρησιμοποιώντας ζεύκτη προσομοιωτή αυτιού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60318-4.

Μορφοτροπείας	peRETSPL [dB re. 20 μPa]
RadioEar IP30 με ακροφύσια	35 dB SPL
RadioEar IP30 με EarCups	61,5 dB SPL
Ανιχνευτής OWA	33,5 dB SPL
SnapPROBE™	37,4 dB SPL

7.5 Τύποι ζεύξεων που χρησιμοποιούνται για βαθμονόμηση

ABRIS:

Τα ερεθίσματα του ανιχνευτή και υποδοχής βαθμονομούνται σε τιμές SPL χρησιμοποιώντας έναν συζεύκτη προσομοίωσης αυτιού που κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60318-4.

DPOAE:

Τα ερεθίσματα του ανιχνευτή L1 και L2 βαθμονομούνται μεμονωμένα σε τιμές SPL χρησιμοποιώντας το ζεύκτη προσομοίωσης αυτιού IEC 711 που κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60318-4.

ΤΕΟΑΕ:

Το ερέθισμα του ανιχνευτή βαθμονομείται σε τιμές peSPL χρησιμοποιώντας το ζεύκτη προσομοίωσης αυτιού IEC 711 που κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60318-4.



7.6 Γενικές πληροφορίες περί προδιαγραφών

Η Interacoustics προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τα προϊόντα της και την απόδοσή τους. Ως εκ τούτου, οι προδιαγραφές δύναται να υποστούν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η απόδοση και οι προδιαγραφές του οργάνου διασφαλίζονται μόνο εφόσον το όργανο υποβάλλεται σε τεχνική συντήρηση τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η συντήρηση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται από εργαστήριο, εξουσιοδοτημένο από την Interacoustics.

Η Interacoustics διαθέτει τα σχεδιαγράμματα και τα εγχειρίδια συντήρησης στις εξουσιοδοτημένες εταιρίες σέρβις.

Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τους εμπορικούς αντιπροσώπους και τα προϊόντα μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση:

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1

5500 Middelfart

Δανία

Τηλ.: +45 6371 3555

E-mail: info@interacoustics.com

Web: www.interacoustics.com

7.7 Προσάρτημα A: Ερέθισμα

Για ορισμένα αυτοματοποιημένα πρωτόκολλα ABR χρησιμοποιείται άλλο ερέθισμα από αυτό που καθορίζεται στο πρότυπο IEC 60645-3. Αυτό το ερέθισμα CE-Chirp® έχει την ίδια γραμμική απόκριση συχνότητας μεγέθους με το ερέθισμα κλικ που καθορίζεται στο πρότυπο. Ωστόσο, έχει σχεδιαστεί ως άθροισμα συναρτήσεων συνημίτονου στο πεδίο της συχνότητας. Οι συχνότητες των συνημίτονων είναι πολλαπλάσια του ρυθμού επανάληψης του ερεθίσματος. Με ίση ένταση για κάθε συχνότητα, ώστε να επιτευχθεί η ίδια γραμμική απόκριση συχνότητας μεγέθους. Ωστόσο, η φάση των συνιστωσών συνημίτονου καθυστερεί σύμφωνα με την κοχλιακή καθυστέρηση της αντίστοιχης συχνότητας για να επιτευχθεί αποτελεσματικότερος σχεδιασμός του ερεθίσματος. Το εύρος συχνοτήτων του ερεθίσματος κυμαίνεται από 200 Hz έως 11 kHz.



7.8 Παράρτημα Β: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)

Αυτός ο εξοπλισμός είναι κατάλληλο για νοσοκομειακά και κλινικά περιβάλλοντα όχι, όμως, κοντά σε ενεργό χειρουργικό εξοπλισμό υψηλής συχνότητας και θαλάμους προστατευόμενους από ραδιοσυχνότητες συστημάτων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, όπου η ένταση της ηλεκτρομαγνητικής διαταραχής είναι υψηλή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗ για τον εν λόγω εξοπλισμό ορίζεται από τον κατασκευαστή ως εξής:

Αυτός ο εξοπλισμός δεν διαθέτει ΟΥΣΙΩΔΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. Η απουσία ή η απώλεια ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιονδήποτε μη αποδεκτό άμεσο κίνδυνο.

Η τελική διάγνωση θα βασίζεται πάντα στην κλινική γνώση.

Η χρήση του εν λόγω εξοπλισμού κοντά σε άλλο εξοπλισμό θα πρέπει να αποφεύγεται επειδή θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακατάλληλη λειτουργία. Εάν μια τέτοια χρήση είναι απαραίτητη, το εν λόγω εξοπλισμό και ο υπόλοιπος εξοπλισμός θα πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι λειτουργούν κανονικά.

Η χρήση εξαρτημάτων και καλωδίων διαφορετικών από αυτών που καθορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή του εν λόγω εξοπλισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ανοσία του εν λόγω εξοπλισμού και να οδηγήσει σε ακατάλληλη λειτουργία. Η λίστα των εξαρτημάτων και των καλωδίων μπορεί να βρεθεί στην ενότητα αυτή.

Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες (συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών όπως τα καλώδια κεραιών και οι εξωτερικές κεραίες) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση όχι μικρότερη από 30 cm (12 ίντσες) από οποιοδήποτε μέρος του εν λόγω εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Διαφορετικά, η υποβάθμιση της απόδοσης αυτού του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη λειτουργία.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC60601-1-2:2014+AMD1:2020, κατηγορία εκπομπών Β ομάδα 1.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν υπάρχουν αποκλίσεις από το συμπληρωματικό πρότυπο και τις χρήσεις των αποζημιώσεων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλες οι απαραίτητες οδηγίες συντήρησης συμμορφώνονται με το ΗΜΣ και μπορείτε να βρείτε στην ενότητα γενικής συντήρησης σε αυτήν την οδηγία. Δεν απαιτούνται επιπλέον βήματα.

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, όπως ορίζονται στο πρότυπο IEC 60601-1-2, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε μόνο τα ακόλουθα εξαρτήματα, ανάλογα με την περίπτωση:

Στοιχείο	Κατασκευαστής	Μοντέλο
Προενισχυτής	Interacoustics	-
Ανιχνευτήρας OWA	RadioEar	-
Ανιχνευτής Snap	RadioEar	-
Στερεοφωνικά ακουστικά ID IP30 50Ohm	RadioEar	IP30
Στερεοφωνικά ακουστικά με μαξιλάρι ID IP30	RadioEar	IP30

Όσοι συνδέουν πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού είναι υπεύθυνοι για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης του συστήματος κατά το πρότυπο IEC 60601-1-2.

Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ΗΜΣ που ορίζονται στο IEC 60601-1-2 διασφαλίζεται εφόσον οι τύποι και οι διαστάσεις των καλωδίων συμφωνούν με όσα ορίζονται παρακάτω:

Περιγραφή	Μήκος (μέτρα)	Ελεγμένο (Ναι/Όχι)
Τροφοδοσία	1,5	Ο
Ασύρματος φορτιστής/βάση	-	-
Ένθετα ακουστικά ακοομέτρησης (IP30)	0,25	N



Ανιχνευτές αυτιού (OWA / Snap)	0,50	Μερικό
Προενισχυτής	1,15	Μερικό
Καλώδια ηλεκτροδίων	0,51	0

Η χρήση των εξαρτημάτων, των μορφοτροπέων και των καλωδίων με ιατρικό εξοπλισμό/σύστημα διαφορετικό από αυτόν τον εξοπλισμό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες εκπομπές ή μειωμένη ατρωσία του ιατρικού εξοπλισμού/συστήματος.



Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Το Sera™ προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται κατωτέρω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του Sera θα πρέπει να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή εκπομπών	Ενδοτικότητα	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση
Εκπομπές ραδιοσυχνότητων (RF) CISPR 11	Ομάδα 1	Το Sera χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνότητων (RF) μόνο για την εσωτερική του λειτουργία. Ως εκ τούτου, οι εκπομπές ραδιοσυχνότητων (RF) του Titan είναι εξαιρετικά ασθeneίς και είναι απίθανο να προκαλέσουν παρεμβολές σε γειτονικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Εκπομπές ραδιοσυχνότητων (RF) CISPR 11	Κλάση Β	Το Sera είναι κατάλληλο προς χρήση σε κάθε εμπορικό, βιομηχανικό, επαγγελματικό και οικιστικά περιβάλλοντα.
Αρμονικές εκπομπές IEC 61000-3-2	Δεν ισχύει	
Διακυμάνσεις τάσης / εκπομπές αναλαμπών IEC 61000-3-3	Δεν ισχύει	

Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών ραδιοσυχνότητων (RF) και του Sera.

Το Sera προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο ελέγχονται οι ακτινοβολούμενες διαταραχές ραδιοσυχνότητων (RF). Ο πελάτης ή ο χρήστης του Sera μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών ραδιοσυχνότητων (RF) (πομπούς) και του Sera, όπως συνιστάται παρακάτω, ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.

Ονομαστική μέγιστη ισχύς εξόδου πομπού [W]	Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού [m]		
	150 kHz έως 80 MHz $d = 1.17\sqrt{P}$	80 MHz έως 800 MHz $d = 1.17\sqrt{P}$	800 MHz έως 2,7 GHz $d = 2.23\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,70	3,70	7,37
100	11,70	11,70	23,30

Για πομπούς των οποίων η ονομαστική μέγιστη ισχύς εξόδου δεν αναγράφεται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί, εάν χρησιμοποιηθεί η εξίσωση που αναλογεί στη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική τιμή ισχύος εξόδου του πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.

Σημείωση 1 Στα 80 MHz και τα 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνότητων.

Σημείωση 2 Αυτές οι οδηγίες ενδεχομένως να μην ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση σε επιφάνειες, αντικείμενα και άτομα.



Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή — ηλεκτρομαγνητική ατρωσία


Το Sera προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται κατωτέρω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του Sera θα πρέπει να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή ατρωσίας	Επίπεδο δοκιμής IEC 60601	Ενδοτικότητα	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση
Ηλεκτροστατική Εκφόρτιση IEC 61000-4-2	+8 kV επαφή +15 kV αέρας	+8 kV επαφή +15 kV αέρας	Τα δάπεδα θα πρέπει να είναι από ξύλο, σκυρόδεμα ή κεραμικά πλακίδια. Αν τα δάπεδα καλύπτονται με συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία θα πρέπει να υπερβαίνει το 30%.
Ανοχή σε πεδία εγγύτητας από εξοπλισμό ασύρματων επικοινωνιών ραδιοσυχνότητας (RF) IEC 61000-4-3	Σημ. συχνότητας 385-5,785 MHz Επίπεδα και διαμόρφωση που ορίζονται στον πίνακα 9	Όπως ορίζεται στον πίνακα 9	Ο εξοπλισμός ασύρματων επικοινωνιών ραδιοσυχνότητας (RF) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε μέρη του Sera.
Ηλεκτρική ταχεία μετάβαση/ριπή IEC61000-4-4	+2 kV για γραμμές τροφοδοσίας +1 kV για γραμμές εισόδου/εξόδου	Δεν ισχύει +1 kV για γραμμές εισόδου/εξόδου	Η ποιότητα του κεντρικού δικτύου παροχής θα πρέπει να είναι αυτή του τυπικού εμπορικού ή οικιακού περιβάλλοντος.
Υπέρταση IEC 61000-4-5	+1 kV γραμμή σε γραμμή +2 kV Γραμμή προς γη	Δεν ισχύει	Η ποιότητα του κεντρικού δικτύου παροχής θα πρέπει να είναι αυτή του τυπικού εμπορικού ή οικιακού περιβάλλοντος.
Βυθίσεις τάσης, σύντομες διακοπές και διακυμάνσεις τάσης σε γραμμές τροφοδοσίας IEC 61000-4-11	0% UT (100% Βύθιση σε UT) για 0,5 κύκλο, @ 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 και 315° 0% UT (Βύθιση >100% σε UT) για 1 κύκλο 40% UT (Βύθιση >60% σε UT) για 5 κύκλους 70% UT (Βύθιση >30% σε UT) για 25 κύκλους 0% UT (Βύθιση >100% σε UT) για 250 κύκλους	Δεν ισχύει	Η ποιότητα του κεντρικού δικτύου παροχής θα πρέπει να είναι αυτή του τυπικού εμπορικού ή οικιακού περιβάλλοντος. Εάν ο χρήστης του Sera απαιτεί συνεχή λειτουργία κατά τη διάρκεια διακοπών του ηλεκτρικού δικτύου, συνιστάται η τροφοδοσία του Sera από ένα αδιάλειπτο τροφοδοτικό ή την μπαταρία του.
Συχνότητα ισχύος (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Τα μαγνητικά συχνοτικά πεδία ισχύος πρέπει να βρίσκονται σε επίπεδα χαρακτηριστικά μιας τυπικής τοποθεσίας σε συνηθισμένο επαγγελματικό ή οικιακό περιβάλλον.
Πεδία ακτινοβολίας σε κοντινή απόσταση — Δοκιμή ατρωσίας IEC 61000-4-39	9 kHz έως 13,56 MHz. Συχνότητα, επίπεδο και διαμόρφωση που ορίζονται του AMD 1: 2020, Πίνακας 11	Όπως ορίζεται στον πίνακα 11 του AMD 1: 2020	Εάν το Sera περιέχει μαγνητικά ευαίσθητα εξαρτήματα ή κυκλώματα, τα μαγνητικά πεδία εγγύτητας δεν πρέπει να είναι υψηλότερα από τα επίπεδα δοκιμής που καθορίζονται στον πίνακα 11
Σημείωση: Η τιμή UT είναι η τάση του εναλλασσόμενου ρεύματος (A.C.) του κεντρικού δικτύου παροχής πριν από την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.			



Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή — ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Το Sera προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του Sera θα πρέπει να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή ατρωσίας	Επίπεδο δοκιμής IEC / EN 60601	Επίπεδο ενδοτικότητας	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση
Αγώγιμες ραδιοσυχνότητες (RF) IEC / EN 61000-4-6	3 Vrms 150kHz έως 80 MHz 6 Vrms Στις ζώνες ISM (και στις ραδιοερασιτεχνικές ζώνες για το περιβάλλον της οικιακής υγειονομικής περιθάλψης.)	3 Vrms 6 Vrms	<p>Η απόσταση ανάμεσα στον φορητό και τον κινητό εξοπλισμό επικοινωνίας μέσω ραδιοσυχνότητων (RF) που χρησιμοποιείται και τα τμήματα του Sera, όπως μεταξύ άλλων τα καλώδια, δε θα πρέπει να είναι μικρότερη από τη συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού που έχει υπολογιστεί με την εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού.</p> <p>Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού:</p> $d = \frac{3,5}{V_{rms}} \sqrt{P}$
Ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες (RF) IEC / EN 61000-4-3	3 V/m 80 MHz έως 2,7 GHz 10 V/m 80 MHz έως 2,7 GHz Μόνο για περιβάλλον οικιακής υγειονομικής περιθάλψης	3 V/m 10 V/m (Εάν πρόκειται για οικιακή υγειονομική περιθάλψη)	$d = \frac{3,5}{V/m} \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz έως } 800 \text{ MHz}$ $d = \frac{7}{V/m} \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz έως } 2,7 \text{ GHz}$ <p>Όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού και d είναι η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m).</p> <p>Οι τιμές ισχύος των πεδίων από σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνότητων (RF), όπως καθορίζονται από μια ηλεκτρομαγνητική επισκόπηση της θέσης εγκατάστασης,^a δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το όριο συμμόρφωσης σε κάθε εύρος συχνοτήτων.^b</p> <p>Υπάρχει ενδεχόμενο παρεμβολών πλησίον εξοπλισμού που έχει σημανθεί με το ακόλουθο σύμβολο:</p> 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και τα 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι οδηγίες ενδεχομένως να μην ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση σε επιφάνειες, αντικείμενα και άτομα.

^{a)} Οι τιμές ισχύος των πεδίων από σταθερούς πομπούς, όπως βάσεις για ασύρματα τηλέφωνα (κινητά/ασύρματα) και επίγεια κινητά συστήματα ραδιοεπικοινωνίας, ερασιτεχνικούς ραδιοφωνικούς πομπούς, ραδιοφωνική εκπομπή AM και FM και τηλεοπτική εκπομπή, θεωρητικά δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν με ακρίβεια. Για την αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος λόγω σταθερών πομπών ραδιοσυχνότητων (RF), θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής ηλεκτρομαγνητικής επισκόπησης της θέσης εγκατάστασης. Εάν η μετρηθείσα ένταση του πεδίου στη θέση όπου χρησιμοποιείται το Sera υπερβαίνει το παραπάνω ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης RF, το Sera θα πρέπει να παρατηρηθεί για να επαληθευτεί η κανονική λειτουργία. Εάν παρατηρηθεί μη φυσιολογική απόδοση, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, όπως ο επαναπροσανατολισμός ή η μετεγκατάσταση του Sera.

^{b)} Πέραν του εύρους συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, οι τιμές ισχύος πεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3 V/m.



8 Συχνές ερωτήσεις/Επίλυση προβλημάτων



Σε περίπτωση που δεν βρείτε απάντηση στην ερώτησή σας που παρατίθεται εδώ στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων, για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις Πρόσθετες πληροφορίες Sera™.

Πρόβλημα	Επεξήγηση	Λύση
Η συσκευή δηλώνει ότι, ενώ υπάρχει συνδεδεμένος ανιχνευτής, κανένας ανιχνευτής δεν είναι συνδεδεμένος.	Όταν η μπαταρία του Sera™ είναι σχεδόν άδεια, διακόπτει την τροφοδοσία του ανιχνευτή.	Φορτίστε την μπαταρία Sera™
	Το καλώδιο του ανιχνευτή δεν έχει εισαχθεί πλήρως στο βύσμα.	Αποσυνδέστε και επανατοποθετήστε τον ανιχνευτή διασφαλίζοντας ότι είναι σταθερά συνδεδεμένος στο βύσμα.
Το Sera™ εμφανίζει έναν κωδικό σφάλματος στην οθόνη.	Παρόλο που το Sera™ έχει ελεγχθεί διεξοδικά, μπορεί να αντιμετωπίσατε ένα άγνωστο πρόβλημα υλικολογισμικού.	Αφού εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος υλικολογισμικού, συνιστάται να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε εκ νέου το Sera™. Εάν το πρόβλημα επιμένει, η Interacoustics θα εκτιμούσε δεόντως εάν αναφέρατε το πρόβλημα και την κατάσταση που προκλήθηκε.
Μήνυμα «Επανάσυνδεση ηλεκτροδίου» κατά τη διάρκεια της αυτοματοποιημένης δοκιμής ABR.	Το ηλεκτρόδιο δεν έρχεται σε επαφή με το δέρμα.	Επανατοποθετήστε το ηλεκτρόδιο στην προετοιμασμένη περιοχή του δέρματος.
Μήνυμα «Έλεγχος καλωδίων» κατά διάρκεια της αυτοματοποιημένης εξέτασης ABR.	Η επαφή με το ηλεκτρόδιο μπορεί να είναι ανεπαρκής.	Ελέγξτε την επαφή του ηλεκτροδίου με το δέρμα.
Μήνυμα «Θόρυβος δικτύου ρεύματος» κατά τη διάρκεια της δοκιμής ABR.	Στο περιβάλλον υπάρχει θόρυβος δικτύου ρεύματος (50 Hz).	Απομακρυνθείτε από το τρέχον περιβάλλον ελέγχου που είναι μολυσμένο με παρεμβολές θορύβου δικτύου ρεύματος.
Μήνυμα «Πολύ θορυβώδες» κατά τη διάρκεια της δοκιμής OAE.	Υψηλός ακουστικός θόρυβος κατά τη διάρκεια της δοκιμής OAE.	Ηρεμήστε το μωρό ή το περιβάλλον.
Μήνυμα «Εκτός αυτιού» κατά τη διάρκεια της δοκιμής OAE.	Ο ανιχνευτής βγαίνει από το αυτί ή έχει πέσει τελείως.	Συνιστάται να διακόψετε τη δοκιμή και να ξεκινήσετε εκ νέου, καθώς η επανατοποθέτηση του ανιχνευτή στο αυτί απαιτεί νέα διαδικασία βαθμονόμησης στο αυτί πριν από τη δοκιμή.



Πρόβλημα	Επεξήγηση	Λύση
Μήνυμα «Εκτός επιπέδων» κατά τη διάρκεια της δοκιμής ΟΑΕ.	Ο ανιχνευτής βγαίνει από το αυτί του μωρού ή η θέση του ανιχνευτή έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια της δοκιμής, με αποτέλεσμα τα επίπεδα διέγερσης να βρίσκονται εκτός του αποδεκτού εύρους.	Ελέγξτε τη θέση του ανιχνευτή στο αυτί του μωρού. Ενδέχεται να είναι απαραίτητο να σταματήσετε την εξέταση και να την ξεκινήσετε εκ νέου αφού στερεώσετε τον ανιχνευτή στον ακουστικό πόρο του μωρού.
Η οθόνη αφής δεν ανταποκρίνεται στο άγγιγμα.	Το λογισμικό είναι κολλημένο σε μια διαδικασία.	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας του Sera™ για 10 δευτερόλεπτα για να αναγκάσετε το σύστημα να απενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, να επανεκκινηθεί.
Η μπαταρία Sera™ δεν φορτίζει όταν η συσκευή βρίσκεται στη βάση.	Κακή σύνδεση με την παροχή ρεύματος· λανθασμένη παροχή ρεύματος.	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό τροφοδοτικό για το Sera™ και ότι είναι σωστά συνδεδεμένο.
Μήνυμα «Εκτός αυτιού» κατά τη διάρκεια της δοκιμής ΟΑΕ.	Ο ανιχνευτής βγαίνει από το αυτί ή έχει πέσει τελείως.	Συνιστάται να διακόψετε τη δοκιμή και να ξεκινήσετε εκ νέου, καθώς η επανατοποθέτηση του ανιχνευτή στο αυτί απαιτεί νέα διαδικασία βαθμονόμησης στο αυτί πριν από τη δοκιμή.

Return Report – Form 001



Opr. dato: 2014-03-07 af: EC Rev. dato: 30.01.2023 af: MHNG Rev. nr.: 5

Company: _____

Address: _____

Phone: _____

e-mail: _____

Address
DGS Diagnostics Sp. z o.o.
Rosówek 43
72-001 Kolbaskowo
Poland

Mail:
rma-diagnostics@dgs-diagnostics.com

Contact person: _____ Date: _____

Following item is reported to be:

- returned to INTERACOUSTICS for: repair, exchange, other: _____
- defective as described below with request of assistance
- repaired locally as described below
- showing general problems as described below

Item: _____ **Type:** _____ **Quantity:** _____

Serial No.: _____ Supplied by: _____

Included parts: _____

Important! - Accessories used together with the item must be included if returned (e.g. external power supply, headsets, transducers and couplers).

Description of problem or the performed local repair:

Returned according to agreement with: Interacoustics, Other : _____

Date : _____ Person : _____

Please provide e-mail address to whom Interacoustics may confirm reception of the returned goods: _____

The above mentioned item is reported to be dangerous to patient or user ¹

In order to ensure instant and effective treatment of returned goods, it is important that this form is filled in and placed together with the item.
Please note that the goods must be carefully packed, preferably in original packing, in order to avoid damage during transport. (Packing material may be ordered from Interacoustics)

¹ EC Medical Device Directive rules require immediate report to be sent, if the device by malfunction deterioration of performance or characteristics and/or by inadequacy in labelling or instructions for use, has caused or could have caused death or serious deterioration of health to patient or user.