



Science **made** smarter

取扱説明書 - JA

VisualEyes™

Micromedical
by Interacoustics



Interacoustics

Copyright © Interacoustics[®] : All rights reserved.本書の内容は、製造元に所有権があります。本書の内容は、予告なく変更されることがあります。 本書の内容は、いかなる形式または手段によっても製造元からの書面による事前の許可なしに複製または伝送することを禁止します。

FireWire[®]は、米国およびその他の国における **Apple** 社の登録商標です。 **Windows[®]**は、米国およびその他の国における **Microsoft Corporation** の登録商標です。

目次

1	はじめに	1
1.1	本取扱説明書について	1
1.2	使用目的	1
1.3	禁忌	2
1.4	製品概要	3
1.4.1	標準の製品構成（回転椅子なし）	3
1.4.2	標準の製品構成（回転椅子あり）	5
1.4.3	標準構成部品・オプション付属品	7
1.4.4	オプション付属品－VNG ゴーグル	8
1.4.5	オプション付属品－回転椅子関連	8
1.4.6	オプション付属品－オプションモジュール関連	9
1.5	安全上の注意事項	10
1.6	製品の廃棄	12
1.7	苦情・安全報告	13
1.7.1	苦情・安全報告：	13
1.7.2	製品の安全機能	13
1.7.2.1	回転椅子（全モデル）	13
1.7.2.2	Orion Reclining/System 2000 Reclining	13
1.7.2.3	Orion Auto-Traverse / Comprehensive	13
2	開梱と設置	15
2.1	開梱と点検	15
2.2	使用記号	16
2.3	設置前の確認事項	18
2.4	PCのセットアップ	18
2.4.1	電源設定	18
2.4.2	PCI Expresscard	19
2.4.3	USB接続	19
2.5	ソフトウェアのインストール	19
2.5.1	デモ被検者	21
2.5.2	VisualEyes™のアンインストール	22
2.6	ハードウェアの構成部品と設定	22
2.6.1	VNG/vHIT用ゴーグル	23
2.6.1.1	サイドマウント式ゴーグル	23
2.6.1.2	トップマウント式ゴーグル	25
2.6.1.3	フロントマウント式ゴーグル	25
2.6.1.4	EyeSeeCam ゴーグル	26
2.6.2	検査風景用カメラ	27
2.6.3	フットスイッチとRFリモートコントローラー	28
2.6.4	カロリック刺激装置（オプション）	29
2.6.5	デジタルバーライト（オプション）	30
2.6.6	VORTEQ™ IMU（オプション）	31
2.6.6.1	Optotype設定	32
2.6.7	回転椅子（オプション）	33
2.6.7.1	リクライニング式回転椅子	34
2.6.7.2	回転椅子 Auto-Traverse/Comprehensive	35
2.6.7.3	Auto-Traverse/Comprehensive（オプション）	38
2.6.7.4	回転椅子のキャリブレーションと検証	39
2.6.7.5	Auto-Traverse/Comprehensive設置の追加手順	41
2.6.8	DataLink（オプション）	44
2.6.8.1	DataLink設定－Orion Reclining/System 2000 Reclining/System 2000 Comprehensive	45

2.6.9	TRV Chair (オプション)	46
2.7	回転椅子と DataLink 用 DAQ ハードウェアドライバのインストール	47
2.8	ハードウェアとライセンス	48
2.9	ディスプレイの構成	50
2.9.1	テレビに関する考慮事項	50
2.9.2	Windows のディスプレイ設定	50
2.9.3	VisualEyes™ ソフトウェアの設定	51
2.9.3.1	刺激	51
2.9.3.2	ハードウェアの遅延	52
2.9.3.3	Optotype 設定	55
2.10	対応言語	56
2.11	データとビデオの保存	57
2.11.1	検査データ	57
2.11.2	ビデオ記録	57
2.11.3	セッションレポート	58
3	操作方法	60
3.1	起動	60
3.2	メイン画面	61
3.3	システムの初期設定	63
3.4	プロトコル管理	64
3.4.1	VisualEyes™ 製品搭載の標準プロトコル	65
3.4.2	カスタマイズしたプロトコル	67
3.5	被検者の準備	68
3.5.1	リクライニング式回転椅子への被検者の配置	69
3.5.2	Auto-Traversal/Comprehensive への被検者の配置	70
3.5.2.1	Auto-Traversal/Comprehensive への小児被検者の配置	70
3.5.3	ENG 電極配置と電極抵抗値の確認	70
3.5.4	被検者へのゴーグル装着	71
3.6	眼部の映像調整	71
3.6.1	眼部映像の中央揃え	71
3.6.2	カメラ映像のピント調整	72
3.6.3	眼部ツールバー	73
3.7	キャリブレーション	73
3.7.1	眼位キャリブレーション (標準)	75
3.7.2	回旋キャリブレーション	76
3.7.3	EyeSeeCam 眼位キャリブレーション	77
3.7.4	ENG キャリブレーションと電極抵抗値の確認	79
3.8	検査画面	81
3.9	検査の実施	83
3.9.1	VisualEyes 505/ 515/525	83
3.9.1.1	ビデオフレンツェル検査	83
3.9.1.2	自発眼振検査	83
3.9.1.3	眼球運動検査	83
3.9.1.3.1	注視眼振検査	83
3.9.1.3.2	追跡眼球運動検査 (ETT)	84
3.9.1.3.3	ランダムサッケード	84
3.9.1.3.4	Self-Paced Saccades	85
3.9.1.4	視運動性眼振検査 (OKN)	85
3.9.1.5	眼球反対回旋 (OCR)	85
3.9.1.6	頭位変換眼振検査 (Dix Hallpike 法)	86
3.9.1.7	頭位眼振検査	86
3.9.1.8	温度刺激検査 (カロリック検査)	87
3.9.1.9	回転刺激検査	88
3.9.2	VORTEQ 評価モジュール	89
3.9.2.1	SVA (静止視力) 検査	89

3.9.2.2	Visual Process Time Test.....	89
3.9.2.3	未完了メッセージ：	90
3.9.2.4	DVA (Dynamic Visual Acuity)	90
3.9.2.5	GST (Gaze Stabilization)	90
3.9.2.6	Functional Vision Head Impulse Test (fvHIT)	91
3.9.2.7	頭位変換眼振詳細検査 (Advanced Dix Hallpike)	91
3.9.2.8	LHR (Lateral Head Roll)	92
3.9.3	VORTEQ 評価モジュール	93
3.9.4	VORTEQ 診断モジュール	93
3.9.4.1	VORTEQ vHIT	93
3.9.4.2	AHR (Active Head Rotation)	93
3.9.5	EyeSeeCam vHIT	93
3.9.5.1	Lateral vHIT.....	93
3.9.5.2	Left Anterior Right Posterior (LARP) / Right Anterior Left Posterior (RALP) vHIT	94
3.9.5.3	検査の実施.....	94
3.10	検査レビュー画面.....	99
3.10.1	編集ツール	100
3.11	過去のセッションレビュー	100
3.11.1	セッションレビュー	101
3.12	ビデオデータの参照	102
3.13	リサーチモジュール.....	104
3.13.1	眼振設定	104
3.13.2	データのエクスポート	104
3.14	シャットダウン	105
4	清掃とメンテナンス.....	106
4.1	製品の清掃手順.....	106
4.2	保証とアフターサービス	106
4.3	回転椅子のエラーメッセージ	107
4.4	カメラの接続解除	109
5	製品仕様.....	110
5.1	PC の推奨最小 要件	110
5.2	Standards.....	110
5.3	ゴーグル	111
5.4	付属品	115
5.5	TRV Chair	117
5.6	回転椅子.....	118
5.7	Orion Auto-Traverse/Comprehensive 付属品	120
5.8	カロリック刺激装置.....	120
5.9	電磁適合性 (EMC)	121
6	返送手順.....	126



1 はじめに

1.1 本取扱説明書について

本書は、VisualEyes™ 505、VisualEyes™ 515、VisualEyes™ 525、Orion Reclining、Orion Comprehensive、Orion Auto-Traverse、VisualEyes™ EyeSeeCam に適用されます。日本では、VisualEyes™ 515、VisualEyes™ 525、VisualEyes™ EyeSeeCam 3.2 を販売しています。製造元：

Interacoustics A/S
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Denmark
Tel : +45 6371 3555
Email : info@interacoustics.com
Web : <http://www.interacoustics.com/>

概要：

本書では、VisualEyes™ 505、VisualEyes™ 515、VisualEyes™ 525、VisualEyes™ EyeSeeCam の総称として「VisualEyes™製品」と記載します。本書における「検査者」とは、本製品を操作する医師、検査技師、言語聴覚士、または該当する資格を有する者を示します。「回転椅子」と記載がある場合は、特定のモデルが指定されない限り、その種類を限定しません。また、回転椅子の説明では、「Reclining」、「Auto-Traverse」、「Comprehensive」をそれぞれ「R」、「AT」、「C」と略しています。「VORTEQ™ IMU」とは、第2世代または最新世代のVORTEQ™ IMUを指します。

取扱説明書と詳細説明書（英語版）：

「取扱説明書」には、本製品を安全かつ効果的に操作するための情報がすべて含まれています。それ以外の詳細については「詳細説明書（英語版）」を参照してください。検査画面のヘルプメニューから「取扱説明書」および「詳細説明書」を参照できます。また、製造元の公式Webサイトでもこれらの説明書を参照できます。

1.2 使用目的

本製品は、医師、検査技師、言語聴覚士、または該当する資格を有する者が使用することを前提としています。製品の用途や結果を解釈するための必要な知識や訓練なく使用しないでください。

ビデオ眼振検査（VNG / VOG）

本製品は、前庭障害の眼振運動記録による評価、診断、記録に役立つ情報を提供します。ビデオ眼振検査（VNG / VOG）では、カメラを取付けたゴーグルで眼振を評価します。撮影した眼振を測定、記録、表示し、VisualEyes™ソフトウェアに保存できます。この情報は、医師が前庭障害の診断に使用できます。検査対象は、5歳以上です。

電気眼振図（ENG）

本製品は、前庭障害の電気眼振記録による評価、診断、記録に役立つ情報を提供します。電気眼振図（ENG）では、電極を使用して眼振を評価します。眼球運動を解析、表示、記録し、VisualEyes™ソフトウェアに保存できます。検査対象の年齢制限はありません。



Video Head Impulse Test (vHIT)

VisualEyes™ EyeSeeCam vHITは、頭部回転刺激方向におけるVORゲインを頭部回転速度に対する眼球運動速度の客観的な測定値として提供することで、前庭機能に関する情報を提示するために使用します。

本製品は、耳鼻咽喉科医師や神経科医師、検査技師、言語聴覚士、または該当する資格を有する者が使用することを前提にしています。

検査対象は、5歳以上です。検査には物理的な刺激や動作を含むため、被検者は身体的に健康な状態で検査を受けていただくようにしてください。また、被検者は眼鏡を使用せずに視標を見る必要があります。

1.3 禁忌

VNG/VOG および vHIT では、以下の症状のある被検者には禁忌となる場合があります。

- ・ 失明
- ・ 鼻骨折
- ・ その他の顔面・頭部外傷
- ・ 直近の眼科手術
- ・ 弱視

ENG では、電気機器が本製品の機能を妨げる可能性があるため、心臓ペースメーカーやその他の電気・磁気式の埋め込み機器を使用している被検者には推奨されません。

強度の視覚障害、眼瞼下垂、異常な瞬きのある被検者の場合、これらの条件によってアーチファクトが発生する可能性があるため、注意して検査する必要があります。背中や頸部に重度の問題がある被検者は、頭位眼振検査や vHIT では除外されることがあります。検査を開始する前に、関連する被検者の病歴または薬歴を確認して考慮する必要があります。また、追加の注意が必要な臨床状態に関する詳細情報または説明については、専門家に相談する必要があります。



1.4 製品概要

本製品は、VNG/VOG、ENG、vHIT に使用するソフトウェア製品です。

1.4.1 標準の製品構成（回転椅子なし）

本製品は、回転椅子の有無にかかわらず、さまざまな構成で使用できます。回転椅子を含まない標準の製品構成は、VisualEyes™ 505、VisualEyes™ 515、VisualEyes™ 525、VisualEyes™ EyeSeeCam です。日本では VisualEyes™ 505 に対応していません。VisualEyes™ 製品に含まれる検査の概要については、Table 1.4-1 を参照してください。

- **VisualEyes™ 505**
VisualEyes™ 505 は、ビデオ録画と客観的な緩徐相速度データを提供する、自発眼振の検出を含むビデオフレンツェル製品です。
- **VisualEyes™ 515**
VisualEyes™ 515 は、自発眼振検査、頭位眼振検査、温度刺激検査（カロリック検査）を実施するための VNG 製品です。また、回転椅子 Orion Reclining と組み合わせて、回転刺激検査を実施することも可能です。日本では回転椅子に対応していません。
- **VisualEyes™ 525**
VisualEyes™ 525 は、VisualEyes™ 505/515 の検査もすべて含む VNG 製品で、高度な眼球運動検査項目と回旋性眼振の追跡を備えた眼球反対回旋（OCR: Ocular Counter Roll）の検査を搭載しています。また、回転椅子 Orion Reclining/Orion Comprehensive/Orion Auto-Traverse と組み合わせて、回転刺激検査を実施することも可能です。日本では回転椅子に対応していません。
- **VisualEyes™ EyeSeeCam**
VisualEyes™ EyeSeeCam は、Lateral、RALP、LARP、SHIMP の検査項目によって、前庭-眼反射（VOR）を迅速かつ客観的に測定するための vHIT 製品です。さらに、本製品には、客観的な緩徐相速度データを提供する自発眼振検査も含まれています。VisualEyes™ EyeSeeCam は、他の VisualEyes™ 製品と組み合わせることで、VNG/VOG および vHIT を同一の VisualEyes™ ソフトウェアに統合できます。

標準モジュールに加えて、さまざまなオプションモジュールを追加できます。

- **VORTEQ™ Assessment (VisualEyes™ 505/515/525)**
VORTEQ™ Assessment は、頭位と速度を追跡する VORTEQ™ IMU とヘッドバンドを含むオプションモジュールです。
本モジュールには、既存の検査項目に加えて、以下の検査項目が追加されます。
 - BPPV モジュール
 - 頭位変換眼振検査－詳細（Advanced Dix Hallpike）
 - Lateral Head Roll（LHR）
 - Dynamic Visual Acuity（DVA）
 - GST（注視固定化検査）
- **VORTEQ™ 機能評価モジュール**
VORTEQ™ 機能評価モジュールは、頭部の位置と速度を追跡する VORTEQ™ IMU とヘッドバンドを含むスタンドアロンモジュールです。
このモジュールは以下の検査で構成されています：
 - DVA（Dynamic Visual Acuity）
 - GST（注視固定化検査）
 - 機能ビデオヘッドインパルス検査（fvHIT™）



- VORTEQ™ Diagnostic (VisualEyes™ 525)**
 VORTEQ™ Diagnostic は、頭位と速度を追跡する VORTEQ™ IMU を含むオプションモジュールです。
 本モジュールには、既存の検査項目に加えて、以下の検査項目が追加されます。
 - VORTEQ™ vHIT
 - Active Head Rotation (AHR)
- リサーチモジュール**
 リサーチモジュールは、眼振設定とともに、生データを簡単にエクスポートできるオプションモジュールです。
- 外部 Sync**
 OtoAccess® API を介した通信を可能にするオプションです。
- VNG 用 EOG 付属品セット (VisualEyes™ 515/525)**
 VNG 用 EOG 付属品セットは、ENG に使用する DataLink を含むオプションモジュールです。日本では ENG、DataLink に対応していません。

表 1.4-1 ライセンス概要 (回転椅子なし) :

	VisualEyes 505	VisualEyes 515	VisualEyes 525	VisualEyes EyeSeeCam
Video Frenzel	X		X	
自発眼振	X	X	X	X
注視			X	
頭位変換眼振		X	X	
頭位眼振		X	X	
温度刺激 (Bithermal Caloric) *		X	X	
視機性眼球反応			X	
滑動性眼運動			X	
Self-Paced Saccades			X	
Smooth Pursuit Neck Torsion			X	
Cervical Gaze			X	
サッケード			X	
OCR (眼球反対回旋) 捻転追跡を含む			X	
Saccadometry			X	
EyeSeeCam vHIT				X
オプション : VORTEQ 評価モジュール**				
- DVA (Dynamic Visual Acuity)				
- 頭位変換眼振検査 - 詳細 (Advanced Dix Hallpike)	X	X	X	
- LHR (Lateral Head Roll)				
- GST (注視固定化検査)				



	VisualEyes 505	VisualEyes 515	VisualEyes 525	VisualEyes EyeSeeCam
- 機能ビデオヘッドインパルス検査				
オプション：VORTEQ™診断モジュール**			X	
- 新回転（Active Head Rotation）				
- vHIT VORTEQ™				
オプション：リサーチモジュール	X	X	X	X
オプション：VNG用 EOG 付属品セット		X	X	
オプション：静的 SVV モジュール	X	X	X	
オプション：外部 Sync	X	X	X	X

* 別でカロリック刺激装置が必要

** トップマウント式 / サイドマウント式ゴーグルのみと互換性あり

1.4.2 標準の製品構成（回転椅子あり）

回転椅子は、以下のとおり VisualEyes™ 515/525 と組み合わせて使用することができます。さらに、Orion Comprehensive/Orion Auto-Traverse は、それぞれ Orion Comprehensive Basic/Orion Auto-Traverse Basic として構成できます。これらには、回転椅子の内側で実施できる検査のみ含まれています。VisualEyes™ 製品に含まれる検査の概要については、Table 1.4-2 を参照してください。

- **Orion Reclining**
Orion Reclining は、カロリック検査や頭位眼振検査の実施で使用するリクライニング式回転椅子です。
- **Orion Comprehensive**
Orion Comprehensive は、ブース内にある回転椅子で、内蔵レーザーと視覚刺激用 OKN ドラムが備わっています。
- **Orion Auto-Traverse**
Orion Auto-Traverse は、ブース内にある回転椅子で、内蔵レーザーと視覚刺激用 OKN ドラムが備わっています。さらに、この回転椅子は動的な自覚的視性垂直位検査（SVV）に使用される軸外の水平方向の動きにも対応しています。
- **その他の回転椅子**
VisualEyes™ 第 3 世代は、以下の回転椅子にも対応しています。
 - System 2000 Reclining
 - System 2000 Comprehensive
 - System 2000 Auto-Traverse



表 1.4-2 : ライセンス概要 (回転椅子あり) :

	Orion R + VE515	Orion R + VE525	Orion C Basic	Orion AT Basic	Orion C + VE525	Orion AT + VE525
Video Frenzel		X			X	X
自発眼振	X	X	X	X	X	X
注視		X	X	X	X	X
頭位変換眼振	X	X			X	X
頭位眼振	X	X			X	X
温度刺激 (Bithermal Caloric) *	X	X			X	X
視機性眼球反応		X	X	X	X	X
滑動性眼運動		X	X	X	X	X
サッケード		X	X	X	X	X
Self-Paced Saccades		X			X	X
Smooth Pursuit Neck Torsion		X			X	X
Cervical Gaze		X			X	X
OCR (眼球反対回旋)		X			X	X
Saccadometry		X			X	X
Step Velocity	X	X	X	X	X	X
SHA (正弦波方式回転)	X	X	X	X	X	X
VOR 抑制 (VOR Suppression)	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X
静的 SVV			X	X	X	X
動的 SVV				X		X
オプション : VORTEQ 評価モジュール**						
- DVA (Dynamic Visual Acuity)						
- 頭位変換眼振検査-詳細 (Advanced Dix Hallpike)	X	X			X	X
- LHR (Lateral Head Roll)						
- GST (注視固定化検査)						
- 機能ビデオヘッドインパルス検査						
オプション : VORTEQ™ 診断モジュール**						
- 新回転 (Active Head Rotation)		X			X	X
- vHIT VORTEQ™						
オプション : リサーチモジュール	X	X	X	X	X	X



オプション：静的 SVV モジュール	X	X				
オプション：外部 Sync	X	X	X	X	X	X
オプション：VNG 用 EOG 付属品セット	X	X			X	X
オプション：Orion C/AT 用 EOG 付属品セット			X	X	X	X
オプション：Orion C/AT 用小児付属品セット			X	X	X	X

* 別でカロリック刺激装置が必要

** トップマウント式 / サイドマウント式ゴーグルのみと互換性あり

1.4.3 標準構成品・オプション付属品

VisualEyes™ TM 505	VisualEyes™ TM 515	VisualEyes™ TM 525	VisualEyes™™ EyeSeeCam	Orion AT/C Basic
標準付属品： <ul style="list-style-type: none"> VNG ゴーグル VisualEyes™ソフトウェア リモートコントローラー / フットスイッチ フル HD 検査風景用カメラ 清掃布 製品説明書 証明書と報告書（検査結果レポート、ライセンス証明書、適合証明書、該当する場合は安全性試験報告書など） 	標準付属品： <ul style="list-style-type: none"> VNG ゴーグル VisualEyes™ソフトウェア リモートコントローラー / フットスイッチ フル HD 検査風景用カメラ 清掃布 製品説明書 証明書と報告書（検査結果レポート、ライセンス証明書、適合証明書、該当する場合は安全性試験報告書など） 	標準付属品： <ul style="list-style-type: none"> VNG ゴーグル VisualEyes™ソフトウェア リモートコントローラー / フットスイッチ フル HD 検査風景用カメラ 清掃布 製品説明書 証明書と報告書（検査結果レポート、ライセンス証明書、適合証明書、該当する場合は安全性試験報告書など） 	標準付属品： <ul style="list-style-type: none"> EyeSeeCam ゴーグルとカメラ VisualEyes™ソフトウェア フル HD 検査風景用カメラ 清掃布 製品概要 証明書と報告書（検査結果レポート、ライセンス証明書、適合証明書、該当する場合は安全性試験報告書など） 	標準付属品： <ul style="list-style-type: none"> Orion Auto-Traverse / Comprehensive トップマウント式ゴーグル VisualEyes™™ソフトウェア リモートコントローラー / フットスイッチ 検査風景用カメラ（フル HD） 清掃布 製品概要 証明書と報告書（検査結果レポート、ライセンス証明書、適合証明書、該当する場合は安全性試験報告書など）
オプション付属品 <ul style="list-style-type: none"> 小児用ゴーグル TRV Chair VORTEQ™ 評価モジュール リサーチモジュール 静的 SVV モジュール 外部 Sync 	オプション付属品 <ul style="list-style-type: none"> 小児用ゴーグル TRV Chair VORTEQ™ 評価モジュール リサーチモジュール 静的 SVV モジュール VNG 用 EOG 付属品セット Orion Reclining AquaStim AirFx 外部 Sync 	オプション付属品 <ul style="list-style-type: none"> 小児用ゴーグル TRV Chair VORTEQ™ Assessment VORTEQ™ Diagnostic リサーチモジュール VNG 用 EOG 付属品セット Orion Reclining Orion Comprehensive Orion Auto-Traverse 	Optional Parts: <ul style="list-style-type: none"> リサーチモジュール 外部 Sync 	オプション付属品： <ul style="list-style-type: none"> リサーチモジュール 回転椅子に適合したオプション付属品 (1.4.4)



		<ul style="list-style-type: none"> • AquaStim • AirFx • デジタルバーライ ト • 静的SVVモジュール • 外部 Sync 		
--	--	--	--	--

1.4.4 オプション付属品－VNG ゴーグル

サイドマウント USB (2D-VOGFW)	サイドマウント FireWire (2D-VOGFW)	トップマウント (BG4.0USB / BG4.0KUSB)	フロントマウント (USBM2.1A / USBM2.1P)
標準付属品： <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 カメラ（両眼用は2個） • ゴーグル用パッド（24個入り） • カメラ固定ネジ用ドライバー（六角 1.5mm） • 7ポート USB3.0 ハブ（外部電源付き） 	標準付属品： <ul style="list-style-type: none"> • FireWire カメラ（両眼用は2個） • ゴーグル用パッド（24個入り） • カメラ固定ネジ用ドライバー（六角 1.5mm） • 4ポート USB3.0 ハブ（外部電源付き） • PCI ExpressCard（デスクトップ PC 用） 	標準付属品： <ul style="list-style-type: none"> • 両眼 USB ゴーグル • 7ポート USB3.0 ハブ（外部電源付き） 	標準付属品： <ul style="list-style-type: none"> • 成人用（USBM2.1A） / 小児用（USBM2.1P）マスク（単眼 USB カメラ用） • 7ポート USB3.0 ハブ（外部電源付き）

1.4.5 オプション付属品－回転椅子関連

Orion Reclining	Orion Comprehensive / Orion Auto-Traverse
標準付属品： <ul style="list-style-type: none"> • Orion Reclining • USBケーブル • 緊急停止ボタン（イーサネット接続端子付き） • 電源ケーブル • 組立て用工具と付属品 • 絶縁トランス 	標準付属品： <ul style="list-style-type: none"> • 回転椅子Orion Comprehensive/Auto-Traverse • OKNドラム • X-Y レーザー部品 • ブースと付属品 • USBケーブル • 緊急停止ボタン（イーサネット接続端子付き） • 電源ケーブル • ブース観察用カメラ • インターホン • SVV用リモートコントローラー • 組立て用工具と付属品 • 絶縁トランス
オプション付属品	オプション付属品 <ul style="list-style-type: none"> • Orion C/AT 用 EOG 付属品セット • Orion C/AT 用小児付属品セット



1.4.6 オプション付属品ーオプションモジュール関連

	VORTEQ™ Diagnostic	VORTEQ™ Assessment	リサーチモジ ュール	静的SVVモジ ュール
以下と互換性 があります。	<ul style="list-style-type: none"> VisualEyes™ 525 (トップマウント式/サイドマウント式ゴーグル) 	<ul style="list-style-type: none"> VisualEyes™ 505 (トップマウント式/サイドマウント式ゴーグル) VisualEyes™ 515 (トップマウント式/サイドマウント式ゴーグル) VisualEyes™ 525 (トップマウント式/サイドマウント式ゴーグル) 	<ul style="list-style-type: none"> VisualEyes 505 VisualEyes 515 VisualEyes 525 VisualEyes EyeSeeCam Orion Auto-Traverse Basic Orion Comprehensive Basic 	<ul style="list-style-type: none"> VisualEyes 505 VisualEyes 515 VisualEyes 525
標準搭載の機能・検査項目	<ul style="list-style-type: none"> 新回転 (Active Head Rotation) vHIT VORTEQ™ 	<ul style="list-style-type: none"> DVA (Dynamic Visual Acuity) 頭位変換眼振検査ー詳細 (Advanced Dix Hallpike) LHR (Lateral Head Roll) GST (注視固定化検査) 機能ビデオヘッド検査 	<ul style="list-style-type: none"> 眼振パラメーターの調整 データのエクスポート 	<ul style="list-style-type: none"> 静的SVV
標準付属品 :	<ul style="list-style-type: none"> VORTEQ™センサー Bluetooth ドングル USB ケーブル (充電または有線接続用) サイドマウント式およびトップマウント式ゴーグル用のゴーグルマウント 	<ul style="list-style-type: none"> VORTEQ™センサー Bluetooth ドングル USB ケーブル (充電/有線接続用) サイドマウント式およびトップマウント式ゴーグル用のゴーグルマウント DVA 用ヘッドバンド 	<ul style="list-style-type: none"> ライセンスのみ 	<ul style="list-style-type: none"> SVV用リモートコントローラー





	VNG用 EOG 付属品 セット	Orion C/AT 用 EOG 付属品セット	Orion C/AT 用小児付 属品セット
以下と互換性が あります。	<ul style="list-style-type: none"> VisualEyes™ 515 VisualEyes™ 525 	<ul style="list-style-type: none"> VisualEyes™ 525 + Orion C/AT Orion Comprehensive Basic Orion Auto-Traverse Basic 	<ul style="list-style-type: none"> VisualEyes™ 525 + Orion C/AT Orion Comprehensive Basic Orion Auto-Traverse Basic
互換性のある機能と検査項目 (ライセンス適用の場合)	<ul style="list-style-type: none"> ENG と互換性のある検査は、以下のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> 自発眼振検査 注視眼振検査 追跡眼球運動検査 (ETT) 急速眼球運動検査 (サッケード/ランダムサッケード) 視運動性眼振検査 (OKN) 頭位眼振検査 頭位変換眼振検査 (Dix Hallpike) カロリック検査 (冷温刺激) Saccadometry 	<ul style="list-style-type: none"> ENG と互換性のある検査は、以下のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> 自発眼振検査 注視眼振検査 追跡眼球運動検査 (ETT) 急速眼球運動検査 (サッケード/ランダムサッケード) 視運動性眼振検査 (OKN) ステップ回転 (Step Velocity) 正弦波方式回転 (SHA) 	<ul style="list-style-type: none"> 回転刺激検査 (小児 1 歳以下)
標準付属品：	<ul style="list-style-type: none"> Datalink 電極ケーブル 7 本 (3 チャンネル) スナップ電極 電極の皮膚処理用付属品 	<ul style="list-style-type: none"> ENG一回転椅子 Orion C/AT 背面搭載 電極ケーブル 7 本 (3 チャンネル) スナップ電極 電極の皮膚処理用付属品 	<ul style="list-style-type: none"> 小児用フロントマウント式ゴーグル (USBM2.1P) チャイルドシート 小児観察用カメラ

1.5 安全上の注意事項

本章では、本製品に関する一般的な警告または重要な基本的注意、注意事項、および注意すべき事項について、適切な記号と併せて説明します。一部の警告または重要な基本的注意については、ユーザーの注意を喚起するため各章で説明します。



本書における警告または重要な基本的注意、注意、注記は、以下の意味を示しています。

	警告または重要な基本的注意： 被検者や検査者に危険が及ぶ可能性のある状況または行為を示します。
	注意： 機器に損傷が生じる可能性のある状況または行為を示します。
注記	注記： 人身傷害を引き起こすおそれのない使用方法を示します。



安全上の注意事項



警告または重要な基本的注意：被検者や検査者に死亡や重大な危険が及ぶ可能性のある状況または行為を示します。

1. 米国限定：米国連邦法により、本製品の販売、流通、または使用は、医師またはその指示による場合に限定されています。
2. 製品の安全性または性能に影響を及ぼすことがあるため、製品を分解または改造しないでください。修理は、専門のサービス業者へ依頼してください。製造元の許可なく、製品および構成部品を改造しないでください。
3. 本製品は、他の機器に接続して医用電気システムを構成する製品です。接続端子（信号入力用、信号出力用等）に接続される外部機器は、IT 機器に関する IEC 62368-1、医用電気機器に関する IEC 60601-シリーズなど、関連する製品規格に準拠している必要があります。つまり、これらによって構成された医用電気システム全体は、IEC 60601-1 第 3.1 版第 16 項の安全要求事項に準拠している必要があります。IEC 60601-1 の漏れ電流に関する要件に準拠していない機器は、被検者の置かれている環境の外に設置する（すなわち、被検者から 1.5m 以上離す）か、漏れ電流を軽減するために分離変圧器を介して給電する必要があります。接続端子（信号入力用、信号出力用等）に外部機器を接続して医用電気システムを構成した場合は、これらの要求事項にシステムを適合させる責任があります。疑わしい場合は、資格を保有した医療技術者または販売代理店に連絡してください。
4. 被検者の置かれた環境の外に設置した機器と被検者の置かれた環境の中に設置した機器を分離するには分離装置（絶縁装置）が必要です。特に、ネットワーク接続を構成した場合は、このような分離装置が必要です。分離装置の要件は、IEC 60601-1 第 3 版第 16 条項で規定されています。
5. 爆発性ガスや可燃性ガスのある場所では使用しないでください。
6. 清掃前に電源を切ってください。
7. 電源タップや延長コードは使用しないでください。
8. カロリック刺激装置については、感電のおそれがあるため、製品は保護接地付き電源に接続してください。
9. 製造元は、回路図、構成部品リスト、仕様書、校正手順書などの情報を要請に応じて製造元が認定した専門のサービス業者へ提供します。これらの情報は、専門のサービス業者が修理可能と判断した製品の部品を修理する際に有用です。
10. 電気的安全性を最大限確保するため、製品を使用しないときは製品の電源を切ってください。
11. 本製品は水やその他液体に対する防水機能はありません。製品に液体をこぼした場合は、同製品を十分に点検してから使用するか、修理に出してください。
12. 製品に目に見える損傷または損傷の疑いがある場合は、同製品を使用しないでください。
13. グレード 2 のレーザー刺激を Orion Auto Traverse/Orion Comprehensive と System 2000 Auto Traverse/System 2000 Comprehensive のブース内で使用します。検査者も被検者も、レーザー光線を見ないようにしてください。レーザーボックスの構成部品には、ユーザーが修理できる部品はありません。
14. 製品を被検者が使用している間は、いかなる部分も修理はできません。





注意：機器に損傷が生じる可能性のある状況または行為を示します。

1. 本製品を使用する前に、取扱説明書、貼付ラベルおよびその他の追加情報を熟読してください。本製品は取扱説明書に記載されている指示に従い使用してください。
2. 本製品は、適切な訓練を受けた資格を有する技術者のみが操作してください。
3. 本製品は、年に1回以上の点検を推奨します。点検には安全性試験が含まれます。
4. 製品の損傷を防ぐため、構成品は慎重に取扱ってください。
5. 製品の使用前に、室温になるまで待ってください。保管していた構成品は、使用前に室温に戻してください。
6. リクライニング位置に対応するため、回転椅子の中心が中心軸から隣接物まで少なくとも1メートルの位置にあることを確認してください。

注記 注記：人身傷害または機器の損傷を引き起こすおそれのない使用方法を示します。

1. クラス1のレーザー刺激をEyeSeeCamゴーグルで使用します。クラス1のレーザーは、通常使用するあらゆる条件下で安全です。裸眼や眼鏡を使用して見た場合に、光線の最大許容露光量（MPE）が超過しないことを意味します。
2. VisualEyes™ソフトウェアを使用して被検者を検査している間は、他のPCプログラムを実行したり最小化したりしないでください。本ソフトウェアに干渉する可能性があります。
3. システムエラーを防ぐために、コンピューターウイルスや同様の問題に対して適切な予防措置をとってください。
4. 本製品は該当するEMC要件を満たしていますが、携帯電話などの電磁界への不要な露出を予防する必要があります。製品が他の機器に隣接して使用される場合は、相互干渉がないか確認しなければなりません。



データ保護

注意：データ保護の一環として、以下の全項目を遵守していることを確認してください：

1. マイクロソフト社がサポートするオペレーティングシステムの使用
2. オペレーティングシステムにセキュリティーパッチの適用
3. データベースの暗号化の有効化
4. 個別のユーザーアカウントとパスワードを使用
5. ローカルデータストレージを備えたPCへの物理的アクセスおよびネットワークアクセスの保護
6. 更新されたウイルス対策ソフトウェア、ファイアウォール、およびマルウェア対策ソフトウェアの使用
7. 適切なバックアップポリシーの実行
8. 適切なログ保持ポリシーの実行
9. デフォルトの管理パスワードの変更

1.6 製品の廃棄

インターアコースティクス社は、製品が使用できなくなった際に安全に廃棄できるよう努めています。これを確保するには、使用者の協力が重要です。よって、インターアコースティクス社は、電気・電子機器の廃棄に関する地域の分別や廃棄物規則に従い、未分別の廃棄物と一緒に機器が廃棄されないと見込んでいます。

また、製品の販売代理店が引き取り制度を実施している場合は、これを利用して正しく廃棄する必要があります。



1.7 苦情・安全報告

1.7.1 苦情・安全報告：



製品の欠陥（ハードウェアの欠陥やソフトウェアのバグ）、または必ずしも製品と因果関係があるわけではない有害事象に関連するインシデントが発生した場合は、販売代理店へ連絡してください。インシデントに関する既知の事実をすべて報告することをお勧めします。被検者や検査者の健康に深刻な影響を与える重大なインシデントの場合は、被検者の母国の管轄当局に通知する必要があります。製造元は、内部手続きに従って製品に関するすべての苦情および有害事象を処理します。

1.7.2 製品の安全機能

本製品は、被検者の安全を確保するためのさまざまな安全機能があり、特にすべての回転椅子オプションでは、検査パフォーマンス向上のためのチェックポイントとしてさまざまなエラーメッセージが表示されます。エラーメッセージの詳細については、第 4.3 章を参照してください。その他の安全対策については、以下のとおりです。

1.7.2.1 回転椅子（全モデル）

回転椅子（Orion Reclining/Auto Traverse/Comprehensive、System 2000 Reclining/Auto Traverse/Comprehensive）にはすべて緊急停止ボタンがあり、検査者がボタンを押すと、椅子、レーザー、OKN ドラムを停止させることができます。緊急停止ボタンを回すと、回転椅子が解除され、作動可能な状態になります。製品のソフトウェアから検査を再開できます。

回転椅子には、検査中に被検者が転倒しないようにシートベルトが付いています。回転刺激検査では被検者に対する追加安全対策として、RF リモートコントローラーに応答しません。詳細については、詳細説明書（英語版）を参照してください。

1.7.2.2 Orion Reclining/System 2000 Reclining

本製品では、リクライニング位置で回転椅子が回転することはなく、検査者は VisualEyes™ソフトウェアからの警告メッセージをすぐに受け取ることができます。

1.7.2.3 Orion Auto-Traverse / Comprehensive

Orion Auto-Traverse/Comprehensive には、ブースが付属しています。ブースは、ブースのドアが検査前に確実に閉じられるように配線されています。ドアが開いていると、検査は開始されません。検査中にドアを開けると、検査は停止し、検査者に警告メッセージが表示されます。

注記：ブースが開いているときは、回転椅子、レーザー、ドラムはどの検査でも無効になっています。

検査者が制御する停止ボタンは、Orion Auto-Traverse/Comprehensive のヘッドサポートの右側に固定されています。検査者は、検査中に停止ボタンを押すことができます。検査中に停止ボタンを押すと、回転椅子、レーザー、OKN ドラムが停止します。



椅子には、VisualEyes™ソフトウェアと回転椅子が通信しているかどうかを確認する監視用タイマーが内蔵されています。通信がない場合、監視用タイマーは回転椅子、レーザー、OKN ドラムを停止します。続いて、検査者は検査を終了するか、メイン画面に移動してください。検査を再開すると、監視用タイマーがリセットされます。詳細については、第 4.3 章を参照してください。エラーが繰り返される場合は、検査を進める前に問題を解決してください。



2 開梱と設置

2.1 開梱と点検

梱包箱の確認

製品が届いた後、梱包箱に粗雑な扱いや損傷がないことを確認してください。製品に不具合がある場合は、販売代理店へ連絡してください。梱包材は、運送業者の調査や保険金の請求に備えて保管しておいてください。

今後の発送のために梱包箱は捨てないでください

本製品は、特別に設計された専用の梱包箱で配送されます。製品の梱包箱は保管しておいてください。製品を修理で返送する際に必要となります。

接続前に点検してください

製品を電源に接続する前に、損傷がないか点検してください。製品の外装と付属品に損傷や部品に不足がないか確認してください。

欠陥品に関しては速やかに連絡してください

部品の不足や不具合に関しては、請求書、シリアル番号および、問題の詳細と併せて速やかに販売代理店へ連絡してください。本書の裏面の「Return Report (返送報告書)」欄に問題の詳細記入欄があります。
(日本では非サポート)

「Return Report (返送報告書)」を使用してください (日本では非サポート)

返送報告書で、問題の調査に関連する情報を専門のサービス業者に提供することができます。詳細情報がないと、問題の特定や製品の修理が難しくなる可能性があります。問題を解決し、お客様に満足していただくため、製品の返送時には記入済みの「Return Report (返送報告書)」を添付してください。

保管

本製品を長期に保管する必要がある場合は、必ず技術仕様の章 5 で各構成部品について記載された条件で保管するようにしてください: *General technical specifications*








2.2 使用記号

製品本体、付属品、梱包箱には、以下の記号が貼付されています。

記号	説明
	BF 形装着部
	B 形装着部
	取扱説明書の参照
	WEEE (EU 指令) この記号は、製品を未分別廃棄物として廃棄するのではなく、回収およびリサイクル施設の分別収集に送る必要があることを示しています。
	CE マークが MD シンボルと併用されている場合は、Interacoustics A/S が医療機器規制 (EU) 2017/745 の付属書、Annex I の要求事項を観たいしていることを示します。 品質システムは TÜV によって認証済みです (識別番号 : 0123)。
	医療機器
	製造元
	製造年
	再使用不可。再使用すると二次感染のリスクがあります。
	形式名称
	デジタルバーライトのような転倒しやすい付属品には、「押すな」の禁止マークを貼付しています。
	製品に含まれる鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの最大濃度値未満の中国の RoHS 準拠規格



記号	説明
	レーザー製品 クラス 1 レーザー光線クラス 1 は、通常使用するあらゆる条件下で安全です。裸眼や眼鏡を使用して見た場合に、光線の最大許容露光量 (MPE) が超過しないことを意味します。
 	本製品には、「レーザー光線クラス 2」の構成部品 (Orion Comprehensive/Auto-Traverse) が含まれています。レーザー光線を直視しないでください。
	水濡れ厳禁
	輸送・保管の温度制限
	輸送・保管の湿度制限
	北米安全認証マーク
	インターアコースティクス社ロゴ



2.3 設置前の確認事項

PCを製造元から購入した場合、すべてのソフトウェア、データベース、ドライバー（例：OtoAccess®データベース、VisualEyes™ソフトウェア、回転椅子ドライバー、PC電源設定）が既に搭載されています。本製品では、ノートPCまたはデスクトップPCのいずれかを選択できます。本製品用に製造元が提供するPCは、互換性が確認されているため、その使用を推奨します。

注記

1. VisualEyes™ソフトウェアをインストールするには、対象PCの管理者権限が必要です。
2. 製造元およびOtoAccess®データベースが提供するソフトウェア以外のソフトウェアをインストールした製品の機能を製造元は一切保証しません。
3. VisualEyes™の古いバージョンのデータは、VisualEyes™第3世代で確認・解析できます。ただし、VisualEyes™第3世代で表示したデータは、それ以前のバージョンのVisualEyes™では再度表示することができません。VisualEyes™が複数インストールされている-製品構成では特に重要です。すべてのVisualEyes™ソフトウェアを最新のバージョンにアップグレードすることを推奨します。

2.4 PCのセットアップ

インストールする前に、PCが第5章の製品仕様に記載されているすべての最小PC要件に準拠していることを確認してください *General technical specifications*

2.4.1 電源設定

PCから製品への十分な電力供給を確保するため、PCの電力設定を正しく行うことが重要です。PCの性能を最大限に発揮できるように設定する必要があります。これには、BIOSでの設定、Windowsの電源オプション、Table 2.4-1に記載されているデバイスマネージャーからの電源管理設定などがあります。PCの機種によっては設定が異なる可能性があり、以下の手順はガイドラインとしてのみ参照してください。

表 2.4-1 : PC 電源設定

PC 電源設定	
BIOS 設定 : PC の BIOS に移動し、同様の設定項目を探してください。	
• Intel SpeedStep Technology	無効
• Adaptive Thermal Management	AC 配列最大性能 バッテリー配列最大性能
• CPU Power Management	無効
• PCI Express Power Management	無効
• USB3.0 モード	無効
• C-State Control	無効



Windows 電源オプション :

「コントロールパネル」 > 「電源オプション」へ移動します。「高性能」電源プランを選択し、「プラン設定の変更」と「詳細電源設定の変更」を開きます。

• 「ハードディスク」 > 「ハードディスクの電源を切る」	バッテリー駆動時なし 電源接続時なし
• 「ワイヤレスアダプターの設定」 > 「省電力モード」	バッテリー駆動時最大性能 電源接続時最大性能
• 「USB 設定」 > 「USB セレクティブサスペンド設定」	バッテリー駆動时无効 電源接続时无効
• [Intel Graphics settings] > [Intel Graphics Power Plan]	バッテリー駆動時最大性能 電源接続時最大性能
• PCI Express > Link State Power Management	バッテリー駆動時オフ 電源接続時オフ

デバイスマネージャーの設定

「デバイスマネージャー」に移動し、すべてのUSB ハブとホストコントローラーを特定します。右クリックして「プロパティ」に移動し、以下の設定をすべてに適用します。

• 電力を節約するため、PC がこのデバイスの電源をオフにすることを許可する	無効
--	----

2.4.2 PCI Expresscard

本製品を FireWire カメラで購入した場合、PC には FireWire 接続用 PCI Expresscard を設定する必要があります。以下の手順に従って設定してください。



実行中のプログラムをすべて終了し、PC をシャットダウンします。電源ケーブルと PC の電源が切断されていることを確認します。

PCI Expresscard を PC の空きスロットに差し込み、PC の電源と PCI Expresscard の間に電源アダプター F3-14/SATA-16 を挿入します。電源ケーブルと PC を再接続し、PC を起動します。

必要なドライバーを Windows が自動的にインストールします。

2.4.3 USB 接続

本製品には、構成に応じて 4 ポートまたは 7 ポートの USB ハブが付属しています。これはアクティブ USB ハブで、付属の 12V 電源から電力を供給する必要があります。VNG 用 / vHIT 用ゴーグルは、外部電源付き USB ハブを介して接続し、製品に十分な電力が供給されるようにする必要があります。

2.5 ソフトウェアのインストール


VisualEyes™ソフトウェアをインストールする前に、OtoAccess®データベースがインストールされていることを確認してください。OtoAccess®データベースの取扱説明書を参照して、OtoAccess®データベースのソフトウェアをインストールしてください。

以前のバージョンの VisualEyes™が PC にインストールされている場合は、第 2.5.2 章の手順に従って、新しいバージョンをインストールする前にアンインストールしてください *Uninstalling VisualEyes™*

VisualEyes™インストール用USBメモリーをPCに挿入します。



インストールが自動開始されない場合は、「スタート」をクリックし、「マイコンピュータ」に移動します。「USBドライブ」をクリックすると、インストールメディアの内容が表示されます。

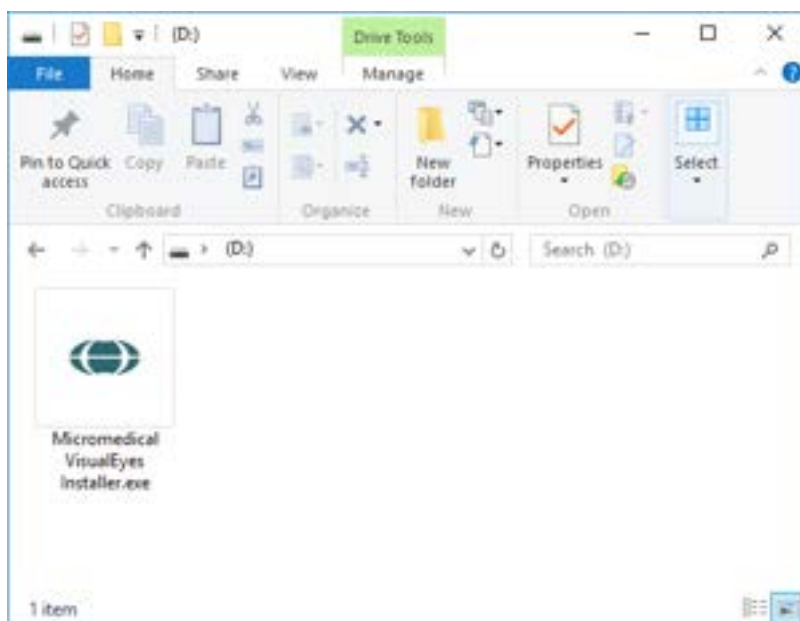

Micromedical VisualEyes™インストーラーをクリックして、インストールを開始します。




VisualEyes™セットアップウィザードが表示されます。

チェックボックスにチェックを入れて、ライセンス条項に同意します。

以前のバージョンのVisualEyes™がPCにインストールされている場合、「Migrate existing VisualEyes™ system settings」にチェックを入れると、インストール時に既存の設定が移行されます。これにはプロトコル、刺激の設定、回転椅子の設定、閾値などが含まれます。

「Install U.S. settings instead of international settings」にチェックを入れると、米国指定のローカル設定でインストールされます。

「インストール」をクリックします。

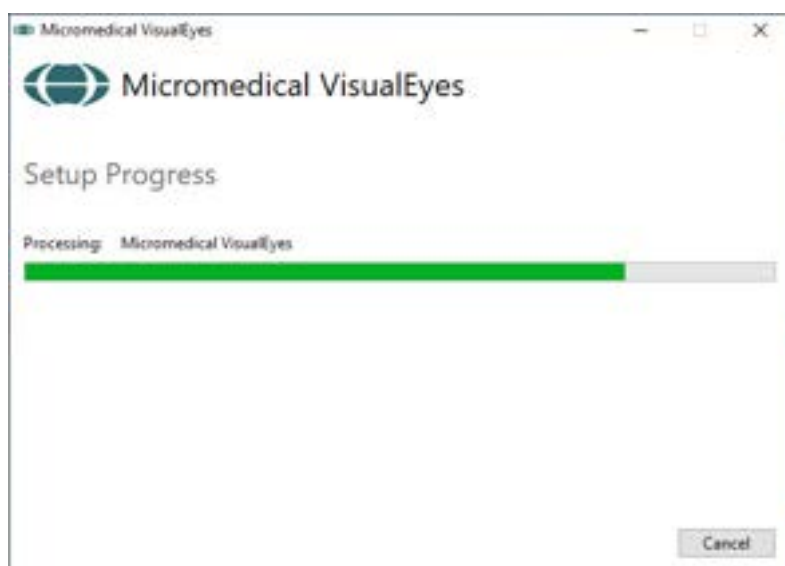

インストールが完了するまで待ちます。



インストールが完了したら、「閉じる」をクリックして終了します。

終了後、インストール媒体をドライブから取外して、適切な場所に保管します。

2.5.1 デモ被検者

VisualEyes™ソフトウェアには、デモ目的で OtoAccess®データベースにインポートできるデモ被検者が含まれています。

デモ被検者は、VisualEyes™ソフトウェアのインストール後、以下のパスで利用できます。 **C:\Program Files (x86)\Interacoustics\Micromedical VisualEyes™\Demo data**

被検者をデータベースにインポートする方法の詳細については、OtoAccess®データベースの取扱説明書を参照してください。



2.5.2 VisualEyes™のアンインストール

Windows® 10 / Windows® 11

VisualEyes™ソフトウェアの削除は、「プログラムと機能」からできます。

- 1 Windows®のコントロールパネルを開き、「プログラムと機能」を選択します。オプション「カテゴリー」を使用する場合は、「プログラム」で「プログラムのアンインストール」を選択します。
- 2 Micromedical VisualEyes™を選択します。「アンインストール」をクリックします。
- 3 インストーラー画面で、「アンインストール」を選択します。プログラムがアンインストールされたら、インストーラーとコントロールパネルの両方を閉じます。

2.6 ハードウェアの構成と設定

VisualEyes™には、構成によっては複数のハードウェアの構成が含まれていますが、これらがすべて正しく接続され、設定されていることが重要です。本章では、さまざまなハードウェアの構成と設定について説明します。構成は、USBでPCに接続します。FireWireカメラを使用するゴーグルの場合、ゴーグルはPCのFireWireプラグインカードに接続します。モニターまたはプロジェクターは、HDMIで接続します。

VisualEyes 製品（回転椅子なし）の構成図については、Figure 2.6-1を参照してください。

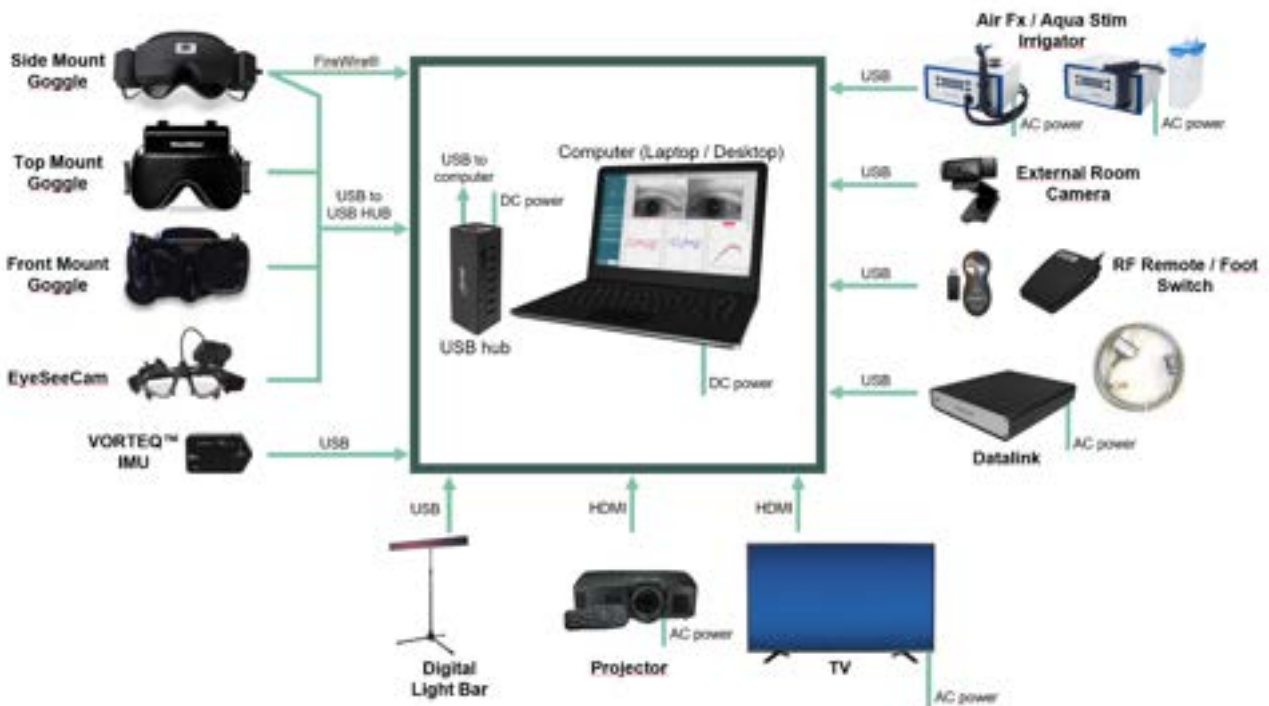


図 2.6-1: 製品構成（回転椅子なし）



2.6.1 VNG/vHIT 用ゴーグル

構成に応じて、VisualEyes™製品には複数の VNG/vHIT 用ゴーグルがあります。

- VisualEyes™ EyeSeeCam : EyeSeeCam ゴーグル
- Orion Auto-Traversal Basic / Comprehensive Basic : トップマウント式ゴーグル
- VisualEyes™ 505/515/525 : サイドマウント式 / トップマウント式 / フロントマウント式ゴーグル

2.6.1.1 サイドマウント式ゴーグル

VisualEyes™サイドマウント式ゴーグルは、視覚刺激の有無にかかわらず、さまざまな検査条件で眼球運動を記録できます。ゴーグルは、カメラ1個または2個、FireWireまたはUSB接続のいずれかで構成できます。ゴーグルには、取外し可能な遮眼カバーが付属しています。これは磁石で固定されており、眼球運動検査では簡単に取り外すことができます。マスクには調整可能なVelcroヘッドストラップが付いており、ゴーグルを被検者に快適に固定できます。



サイドマウント式ゴーグルには交換可能なゴーグル用パッドが付属しています。このパッドは使い捨ての消耗品で、再使用すると二次感染のリスクがあります。使用済みゴーグル用パッドをマスク内側のフックとループパッドから取り外して、新しいパッドをフックとループに装着し、毎回使用後に交換してください。



図 2.6-2 : 左 : サイドマウント式ゴーグル (遮眼カバー付き) 右 : ゴーグル用パッド

カメラはゴーグルの側面に固定されています。カメラは、ゴーグルの上下にある固定ネジで磁石を使用して固定します。付属の六角ドライバーを使用して、固定ネジを緩めたり締めたりできます。

ゴーグルにカメラが 1 個しかない場合、ゴーグルの左右いずれかの側面にカメラを取り付けて、左眼または右眼を記録できます。反対側のカメラスロットに遮眼カバーを挿入して、検査に応じて光を遮断できます。



図 2.6-3 : サイドマウント式ゴーグルの上下にある六角固定ネジ (カメラや遮眼カバー固定用)

サイドマウント式ゴーグルの各カメラには、映像調整用のつまみが 3 個あります。

1. 上部のつまみはカメラを垂直に動かします。
2. 左側のつまみはカメラを水平に動かします。
3. 中央のつまみは映像のピントを調整します。

さらに映像を調整する場合、ゴーグルのミラーを 2 箇所の位置に回転させて、さまざまな瞳孔間距離を調整することもできます。



図 2.6-4 : 左 : 瞳孔間距離の調整が可能な IR ミラー 右 : 1) カメラ垂直調整用つまみ、2) カメラ水平調整用つまみ、3) カメラ焦点調整用つまみ

ハードウェアのセットアップ

1. カメラをゴーグルのカメラスロットに挿入し、付属のドライバーを使用して、カメラが確実に固定されるまで固定ネジを締めます。
2. 単眼の場合は、取付けたカメラの反対側にあるカメラスロットに遮眼カバーを取り付けます。
3. カメラを PC に接続します。
 - a. USB の場合 : USB ケーブルを付属の USB ハブに接続します。USB ハブに外部電源から電力が供給されていることを確認してください。
 - b. FireWire の場合 : FireWire ケーブルを PC の PCI Express カードに接続します。
 - c. 回転椅子と併用する場合、ゴーグルは椅子の接続端子に接続します。
4. 交換可能なゴーグル用パッドをゴーグルに取り付けます。
5. 第 2.8 章の指示に従って、VisualEyes™ソフトウェアでサイドマウント式ゴーグルを「サイドマウント単眼」または「サイドマウント 両眼」として登録します。 *Hardware registration and licensing*



2.6.1.2 トップマウント式ゴーグル

VisualEyes™ トップマウント式ゴーグルには、簡単に取り付けられる遮眼カバーが付属しています。ゴーグルのサイドライトは点滅するようにプログラムされており、カロリック検査中に刺激する耳を検査者に通知する以外に、ゴーグルに遮眼カバーを装着するときの照明としても使用できます。ゴーグルの上部にあるつまみで、映像のピントを調整できます。また、ゴーグルの左側にあるスイッチで、検査を開始および停止できます。トップマウント式ゴーグルには調整可能な Velcro ヘッドストラップが付いており、被検者に快適にゴーグルを固定できます。



図 2.6-5：左：トップマウント式ゴーグル（遮眼カバー付き） 中央：トップマウント式ゴーグル（遮眼カバーなし） 右：開始停止スイッチ

ハードウェアのセットアップ

1. USB mini-B 接続端子を、ゴーグル上部の接続端子に接続します。
2. USB ケーブルのもう一方の端を付属の USB ハブに接続します。USB ハブに外部電源から電力が供給されていることを確認してください。回転椅子と併用する場合、ゴーグルは回転椅子の接続端子に接続します。
3. 第 2.8 章の手順に従って、VisualEyes™ ソフトウェアでトップマウント式ゴーグルを「トップマウントカメラ」として登録します *Hardware registration and licensing*

2.6.1.3 フロントマウント式ゴーグル

フロントマウント式ゴーグルでは、ゴーグルのマスクの前面にあるカメラポータルに押し込まれた USB カメラ 1 個を使用します。カメラはいずれのカメラポータルに配置しても対象の眼を記録でき、カメラ中央にあるつまみで映像のピントを調整できます。ケーブルは、ポータル上のケーブルクリップに固定されています。各ポータルには、視覚遮断用の遮眼カバーが付いています。ゴーグルには調整可能なヘッドストラップが付いており、被検者に快適にゴーグルを固定できます。フロントマウント式ゴーグルには、小児や小さい被検者向けの小型のものがあります。



図 2.6-6：左：フロントマウント式ゴーグル（標準） 右：フロントマウント式ゴーグル（小型）



ハードウェアのセットアップ

1. マスクのポータルにカメラを挿入します。「UP」ラベルを上に向けてカメラを配置し、カメラが正しい方向に配置されていることを確認します。
2. USB mini-B 接続端子を、カメラの接続端子に接続します。
3. USB ケーブルのもう一方の端を付属の USB ハブに接続します。USB ハブに外部電源から電力が供給されていることを確認してください。
4. 第 2.8 章の手順に従って、VisualEyes™ソフトウェアでフロントマウント式ゴーグルを「フロントマウントカメラ」として登録します *Hardware registration and licensing*

2.6.1.4 EyeSeeCam ゴーグル

EyeSeeCam vHIT 用カメラは、vHIT で頭位と眼位の詳細なデータを取得します。vHIT に加えて、VNG 製品と組み合わせて EyeSeeCam を使用している場合、標準的な VOG 検査に EyeSeeCam ゴーグルを使用できるようになりました。カメラは USB で接続されており、眼の上の球形ソケットに取り付けることができます。vHIT では、ゴーグルからレーザー刺激が投光されます。



図 2.6-7 : EyeSeeCam ゴーグル

カメラは、右眼または左眼の玉継手に取り付けられています。これによって検査に適した状態で眼を記録できます。この機能は、義眼や眼瞼下垂の被検者に特に有用です。玉継手により、カメラの角度を調整して眼を映像の中心に配置することができ、カメラのレンズを回転させて映像のピントを調整できます。ピントを合わせた映像は、安定した眼球運動の記録とノイズフリーなデータを得る前提条件です。



図 2.6-8 : EyeSeeCam ゴーグルのピント調整

ゴーグルのブリッジに配置されたキャリブレーション用レーザーにはつまみがあり、レーザー5点が縦横に揃うまでつまみを少しずつ回して、壁の点を配置することができます。キャリブレーション用レーザーを過度に調整しないでください。点が水平または垂直方向にずれた場合にのみ調整してください。



図 2.6-9 : EyeSeeCam ゴーグルのキャリブレーション用レーザー

ハードウェアのセットアップ

1. USB mini-B 接続端子を、カメラの EyeSeeCam 接続端子に接続します。
2. USB ケーブルのもう一方の端を付属の USB ハブに接続します。USB ハブに外部電源から電力が供給されていることを確認してください。
3. 玉継手を使用して、カメラをゴーグルに取り付けます。
4. ゴーグルのブリッジにキャリブレーション用レーザーを取り付けます。
5. 第 2.8 章の手順に従って、VisualEyes™ソフトウェアで EyeSeeCam ゴーグルを「EyeSeeCam」として登録します *Hardware registration and licensing*
6. キャリブレーション用レーザーが水平または垂直に配置されていることを確認し、必要に応じて調整します。

2.6.2 検査風景用カメラ

VisualEyes™製品にはすべて、外付け検査風景用カメラが付属しています。検査環境、検査中の被検者の位置、被検者へのインタビューなどを記録するために使用します。検査風景用カメラの記録と眼球運動の記録は同期しています。



図 2.6-10 : 検査風景用カメラ

ハードウェアのセットアップ

1. 検査環境が適切に記録できる場所にカメラを設置します。
2. USB ケーブルを PC または USB ハブの USB ポートに接続します。
3. 「設定」 > 「システムの初期設定」 > 「入力」に移動し、「検査風景用カメラ」のリストで接続しているカメラを選択します。

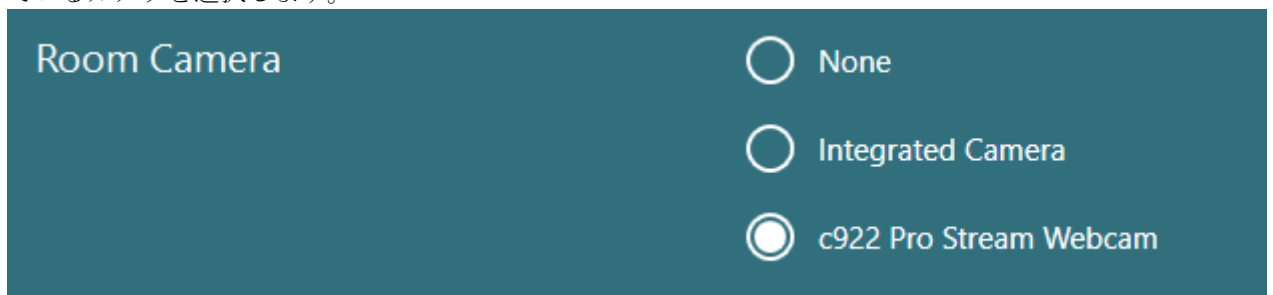


図 2.6-11 : 「システムの初期設定」 > 「入力」で検査風景用カメラの選択



2.6.3 フットスイッチと RF リモートコントローラー

VisualEyes™ 505/515/525、Orion Comprehensive Basic/Orion Auto-Traversal Basic には、フットスイッチまたはリモートコントローラーが付属しています。これらは、PC から離れた場所で検査を開始および停止するために使用します。フロントマウント式ゴーグルの場合、RF リモートコントローラーを使用して、再起動、固定ライトのオン/オフの切替え、カメラ映像の中央揃えを行うこともできます。


1. 上部ボタン：
 - 眼の中央揃え（トップマウント式ゴーグル）
 - トレースの中央揃え（サイドマウント式ゴーグル）
2. 右ボタン：

通常、白背景で示される VisualEyes™ で設定した任意のコマンドを実行できます。以下の例を参考にしてください。

キャリブレーションの前に、白背景で表示されている「キャリブレーション」を選択できます。



キャリブレーションの後に、白背景で表示されている「開始」を選択できます。

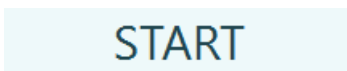

これによって検査者は以下の操作を行うことができます。

- 次へ進む
 - キャリブレーションを開始する
 - キャリブレーション後、ボタンを押して検査を開始する
 - 検査中の場合、検査を停止する
 - 再生モードの場合、ボタンを押してリストの次の検査項目へ進む
3. 左ボタン：
 - 検査を中止する
 4. 下部ボタン：
 - 検査中に固定ライトをオン/オフする

注記 安全上の理由から、回転刺激検査では左右のボタンは作動しません。



図 2.6-12 : 左 : フットスイッチ 右 : RF リモートコントローラー

ハードウェアのセットアップ

1. USB ケーブルおよびドングルを PC または USB ハブの USB ポートに接続します。



2.6.4 カロリック刺激装置（オプション）

AquaStim と AirFx を VisualEyes™ 515/525 に追加して、カロリック検査で灌流や送風による刺激を与えることができます。カロリック刺激は、VisualEyes™ソフトウェアを介して制御できます。



図 2.6-13 : 左 : AquaStim (灌流刺激用) 右 : AirFx (送風刺激用)

充填や設置手順については、AquaStim/AirFx の取扱説明書を参照してください。

ソフトウェアのセットアップ

1. USB type-B 接続端子を刺激装置のバックパネルの接続端子に接続します。USB ケーブルのもう一方の端を PC または外部電源の USB ハブに接続します。
2. VisualEyes™ソフトウェアを起動し、「設定」>「プロトコル管理」>「カロリック」>「検査の編集」に移動します。左パネルの「温度刺激」タブに移動し、接続しているカロリック刺激装置と一致する刺激方法を選択します。

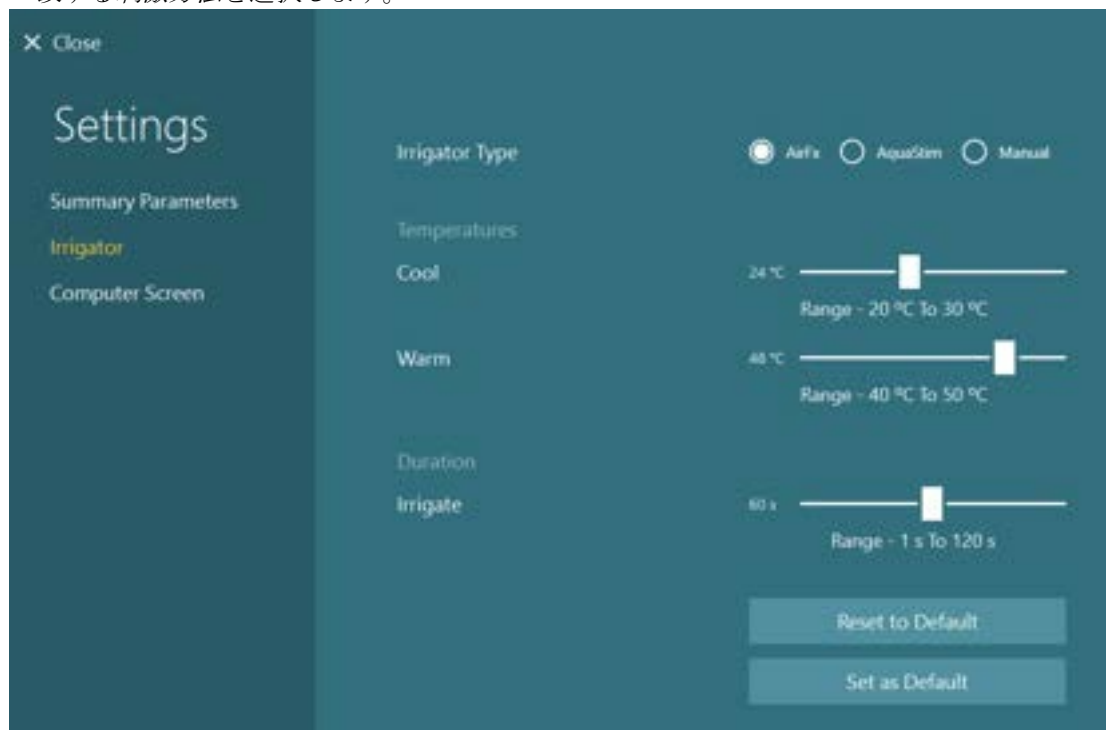


図 2.6-14 : カロリック刺激装置の設定



2.6.5 デジタルバーライト (オプション)

デジタルバーライトは VisualEyes™ 525 で使用できます。眼球運動検査の視覚刺激として使用します。デジタルバーライトは高さ調節可能な三脚に取り付けられており、三脚に接続されたヒンジを使用してデジタルバーライトを回転させることにより、刺激の方向を水平と垂直の間で変更できます。デジタルバーライトは、DLB7.2 以降のモデルではない場合、製品との互換性はありません。



図 2.6-15 : デジタルバーライト

ハードウェアのセットアップ

1. デジタルバーライトを三脚に取り付けます。
2. USB ケーブルを PC または USB ハブの USB ポートに接続します。
3. VisualEyes™ ソフトウェアを起動し、「システムの初期設定」 > 「刺激」に移動します。刺激の種類のパルダウンメニューで「デジタルバーライト」を選択します。



図 2.6-16 : 「システムの初期設定」 > 「刺激」におけるデジタルバーライトの設定

4. モデルに応じてデジタルバーライトの種類を選択します。
5. 被検者との距離を測定して入力します。
6. horizontal and 水平と垂直の角度を調整します。目標の角度にならない場合は、被検者との距離を近づけてください。



2.6.6 VORTEQ™ IMU (オプション)

VORTEQ™ IMU は、VORTEQ™ 評価 モジュールと VORTEQ™ 診断モジュールに付属し、検査中に被検者の頭部の動きと頭位を測定します。VORTEQ™ 評価モジュールは VisualEyes™ 505、515、525 に追加でき、VORTEQ™ 診断モジュールは VisualEyes™ 525 に追加できます。

The VORTEQ™ IMU は、USB ケーブルを使用してコンピューターに接続するか、付属の Bluetooth レシーバードングルを使用して Bluetooth 経由でワイヤレスに接続できます。

IMU をゴーグルマウントにスライドさせることで、IMU を VNG ゴーグルに取り付けられます。VORTEQ™ IMU はフロント式マウントゴーグルに対応していません。

VORTEQ™ 評価モジュールには、DVA、GST、fVHIT™ 検査用ヘッドバンドも付属しています。これには、VNG ゴーグルに取り付けられているものと同様の IMU マウントがあります。



図 2.6-17 : VORTEQ™ IMU 左 : サイドマウント式ゴーグルに取付けた状態 右 : DVA 用ヘッドバンドに取付けた状態

VORTEQ™ IMU には、ステータスを示す 4 種類の LED があります。

- オン : 電源を入れると黄色に点滅する
- 充電中 : 接続した USB ケーブルでバッテリーを充電している場合、青色に点灯する
- BLE ブロードキャスト通信中 : Bluetooth がブロードキャスト通信をしている場合、黄色に点滅する
- BLE 接続 : PC と正常に接続された場合、赤色に点滅する



図 2.6-18 : VORTEQ™ IMU—LED 点灯中の状態

ハードウェアのセットアップ

1. USB ケーブルを VORTEQ™ IMU に接続します。
2. USB ケーブルのもう一方の端を PC または USB ハブに接続します。
3. 電源スイッチをスライドさせて、IMU の電源を入れます。
4. 第 2.8 章の指示に従って、VisualEyes™ ソフトウェアで VORTEQ™ IMU を「VORTEQ™」として登録します。 **Hardware registration and licensing**
注記 : VORTEQ™ IMU を登録する前に、VNG ゴーグルを登録してライセンスを適用しておく必要があります。VORTEQ™ IMU 登録時にライセンスの入力を求められた場合は、空欄のまま「閉じる」をクリックしてください。
5. 「システムの初期設定」 > 「頭部センサー」に移動し、頭部センサーの種類が「Micromedical VORTEQ™」に設定されていることを確認します。



接続タイプを「USB」に設定します。デバイスが正しく接続されていれば、ボードステータスは緑色になっているはずです。

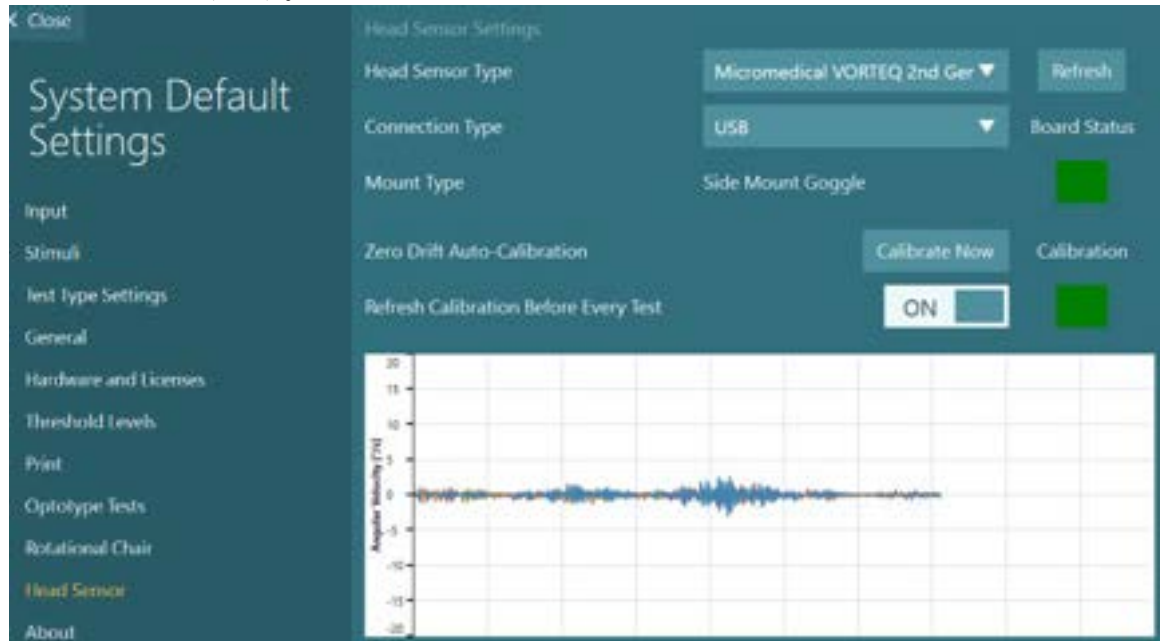



図 2.6-19 : 「システムの初期設定」 > 「頭部センサー」における VORTEQ™ IMU の設定
図 2.6-20 : 「システムの初期設定」 > 「刺激」における VORTEQ IMU の構成

6. ワイヤレス接続する場合は、USB ドングルを PC の USB ポートまたは USB ハブに接続し、接続タイプとして「Bluetooth」を選択してください。
7. 「今すぐキャリブレーションを実行」をクリックすると、VORTEQ™ IMU のキャリブレーションを実行できます。
「検査毎にキャリブレーションを更新」を「ON」に設定している場合、検査前に毎回 VORTEQ™ IMU のキャリブレーションを実行します。この設定は既定で有効になっています。

インストール時に Windows セキュリティによって、Kvaser AB ソフトウェアのインストール許可を要求されることがあります。「Kvaser AB のソフトウェアを常に信頼する」にチェックを入れて、「インストール」を選択します。

2.6.6.1 Optotype 設定

VORTEQ 評価モジュールがある場合、刺激は「システムの初期設定」 > 「Optotype 設定」で構成する必要があります。Optotype 設定画面では、DVA/GST/fvHIT™ で使用する刺激に対して個別の画面測定値が表示されます。モニター画面が DVA/GST/fvHIT™ で使用するには大きすぎる場合は、PC のモニター画面を刺激提示用モニターとして選択できます。検査に使用するモニター画面を選択し、画面の測定値を確認します。PC の画面である可能性もあるため、選択した画面の境界線を入力する必要があります。被検者との距離の値が、選択した画面に対して適切ではない場合、optotype は可能な限り表示されますが、最小の logMAR 値では識別できないことがあります。

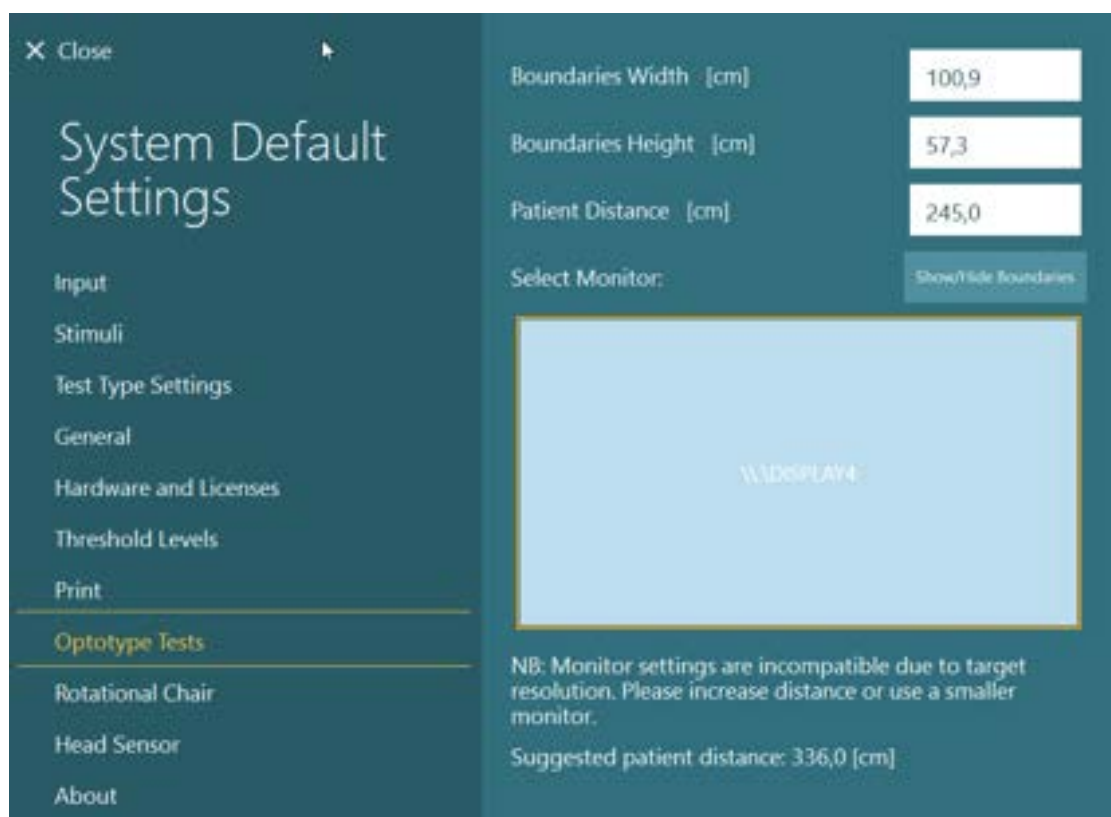

2.6.7 回転椅子（オプション）

VisualEyes™製品では、数種類の回転椅子をオプションで使用できます。日本では回転椅子に対応していません。

VisualEyes™は、以下の回転椅子に対応しています。

- Orion Reclining
- Orion Auto-Traverse
- Orion Comprehensive
- System 2000 Reclining
- System 2000 Auto-Traverse
- System 2000 Comprehensive

回転椅子の設置方法については、別途説明書を参照してください。

ハードウェアのセットアップ

1. 使用する回転椅子の設置手順書の指示に従って、正しく設置・接続してください。
2. 回転椅子の電源が入っていて、PCに接続されていることを確認します。
3. 第2.7章の指示に従って、DAQハードウェアドライバーをインストールします：*Installation of DAQ hardware drivers for Rotary chairs and DataLink*
4. 第2.6.7.4章に従って、回転椅子のキャリブレーションと検証を実行します。*Rotary Chair Calibration & Validation*



2.6.7.1 リクライニング式回転椅子

VisualEyes™ 515/525 は、リクライニング式回転椅子と併せて使用できます。Orion Reclining、System 2000 Reclining に対応しています。リクライニング式回転椅子では、正弦波方式回転 (SHA) による Velocity Step 検査が実施できます。リクライニング式回転椅子は、頭位眼振検査やカロリック検査の検査台としても使用できます。背もたれは水平から 30° までリクライニングでき、カロリック刺激を与えることが可能です。頭位眼振検査は、背もたれを水平 0° までリクライニングした状態で実施できます。頭位変換眼振検査 (Dix-Hallpike) の場合、System 2000 / Orion のヘッドレストを取り外して、頭部をフレーム下に配置することができます。トップマウント式ゴーグルを使用する場合、System 2000 / Orion のヘッドレスト背面にあるストラップをトップマウント式ゴーグル (MMT) のゴーグルストラップに取り付けることで、被検者の頭部を安定させることができます。



図 2.6-21 : 回転椅子 Orion Reclining 左 : 直立位置 右 : リクライニング位置

回転椅子の構成

VNG ゴーグルは、リクライニング式回転椅子に直接接続できます。FireWire カードは、FireWire サイドマウント式 / FireWire トップマウント式ゴーグル、System2000 Reclining。ノート PC を使用する場合は、ノート PC 用 Express カードの電源接続端子を主電源に接続します。カードを後で取り外す必要がある場合は、PC の電源を切ってからカードを取り外すようにしてください。刺激モニターは、HDMI ケーブルで PC の背面に接続します。変換ケーブルが必要な場合もあります。ノート PC の構成では、USB ハブを使用して、外部電源アダプターを使用する機器とノート PC の背面に接続しますが、回転椅子からの USB ケーブルは (USB ハブがある場合はそれを経由せずに) 直接 PC に接続します。DataLink が VisualEyes™ 製品に接続されている場合は、外部電源の USB ハブの USB ポートに接続するか、PC に直接接続する必要があります。

注記 リクライニング式回転椅子を使用した回転刺激検査では、DataLink を使用することはできません。

各回転椅子の構成図については、Figure 2.6-21、Figure 2.6-22 を参照してください。

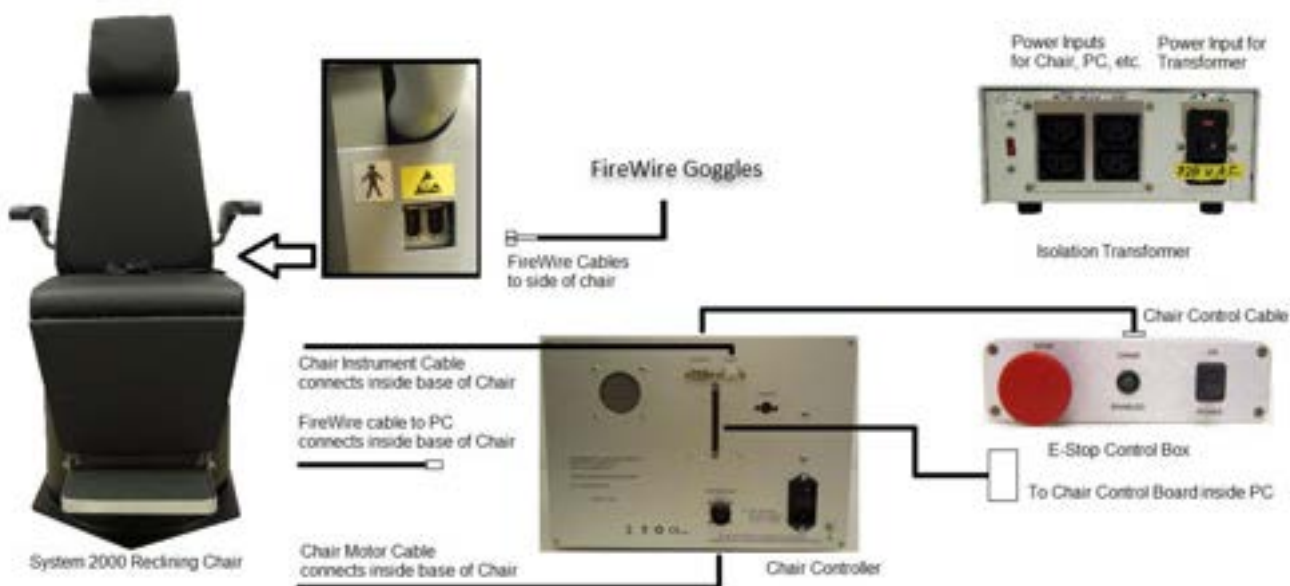


図 2.6-22 : System 2000 Reclining 構成

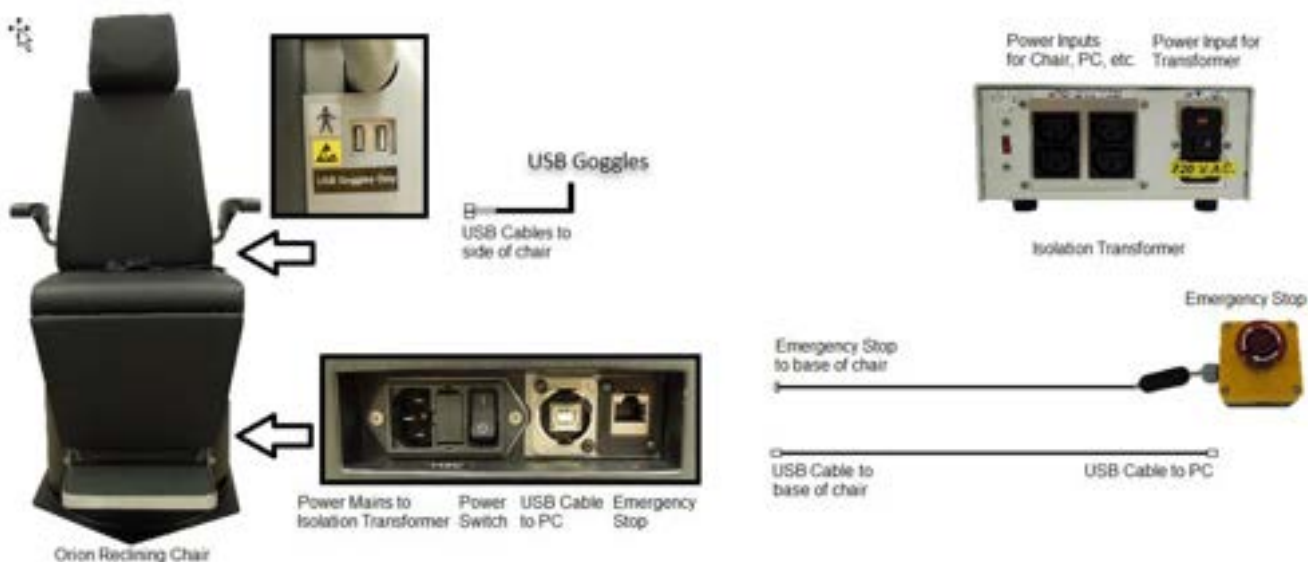


図 2.6-23 : Orion Reclining 構成

2.6.7.2 回転椅子 Auto-Traverse/Comprehensive

回転椅子 Auto-Traverse/Comprehensive は、VisualEyes™ 525、Orion Comprehensive Basic、Orion Auto-Traverse Basic で使用できます。

Orion Auto-Traverse / Comprehensive / System 2000 Auto-Traverse/Comprehensive と組み合わせて VisualEyes™ 製品を使用することで、SHA（正弦波方式回転）や Step Velocity などのオプション検査を実施できます。回転椅子は遮光ブースで囲まれています。レーザープロジェクターは回転椅子のフレーム上部に取り付けられており、眼球運動検査、VOR 固視（VOR Fixation）、自覚的視性垂直位（SVV）のターゲット刺激を投影するために使用します。OKN ドラムがブースの天井に取り付けられており、全視野の縞模様刺激を呈示します。Orion Auto-Traverse は、SVV に使用される軸外の横方向の動きにも対応しています。



図 2.6-24 : 回転椅子 Orion Auto-Traversal/Comprehensive

SVV では、被検者は SVV リモートコントローラーを使用します。これで SVV ライン（直線）を反時計回り（左ボタン）、または時計回り（右ボタン）に 0.1° 回転します。また、ボタンを押したままにすると、ボタンから手を離すまで SVV ラインを段階的に回転させることができます。



図 2.6-25 : Orion Auto-Traversal/Comprehensive 用 SVV リモートコントローラー

Orion Auto-Traversal/Comprehensive の観察用カメラは、回転椅子のブース内に設置され、モニターは検査者の近くに配置されます。これによって検査者は、モニター画面を介してブース内の被検者を観察できます。観察用カメラの映像は、VisualEyes™ソフトウェアには記録・保存されません。



図 2.6-26 : 観察用カメラとモニター画面



Orion Auto-Traverse/Comprehensive の設置

Orion Auto-Traverse/Comprehensive、System2000 Auto-Traverse/Comprehensive の主要構成部品は、回転椅子、ブース、専用カートです。一部のモデルを除いて、すべて同様に構成されます。この 2 種類の回転椅子設置の構成図については、Figure 2.6-27 (Orion Auto-Traverse/Comprehensive) Figure 2.6-28、 - (System 2000 Auto Traverse/Comprehensive) を参照してください。

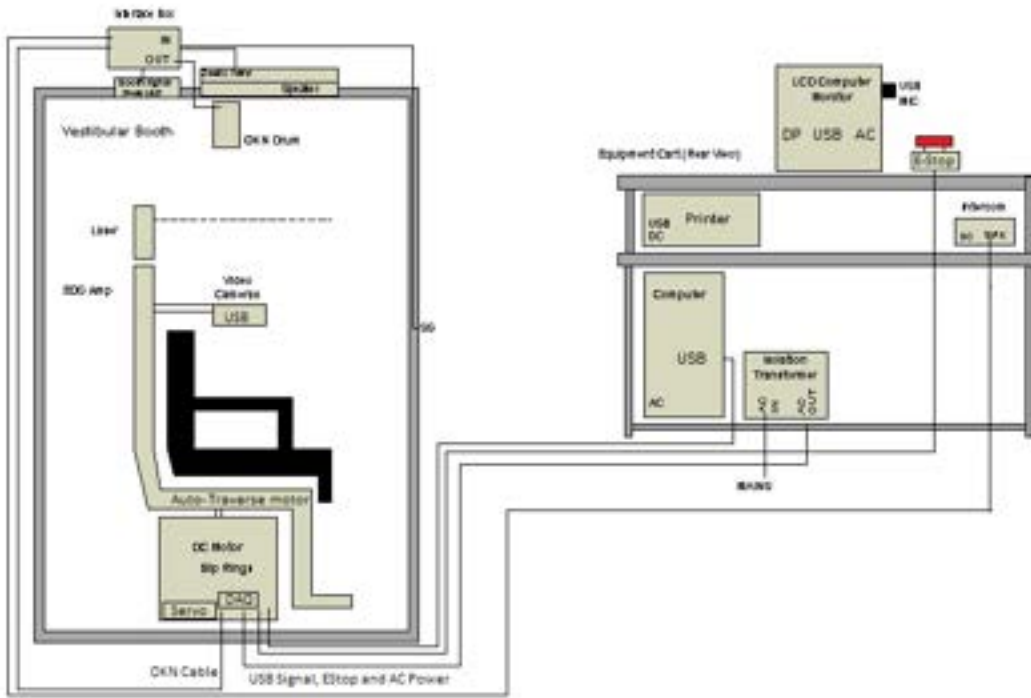


図 2.6-27 : Orion Auto-Traverse/Comprehensive の構成

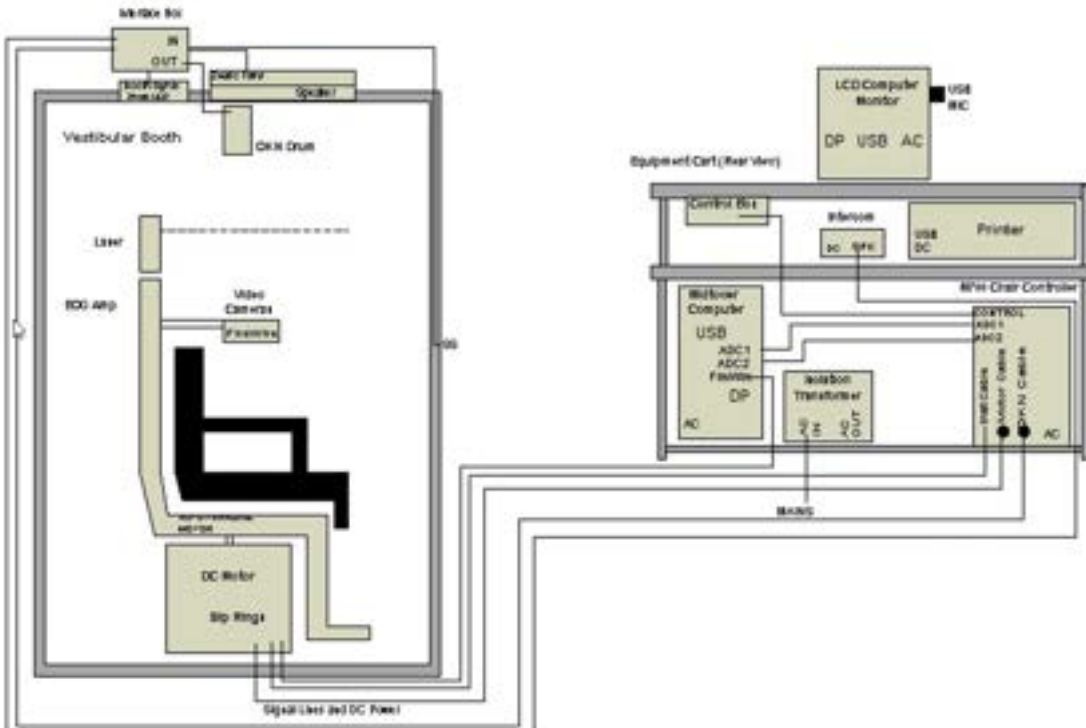


図 2.6-28 : System 2000 Auto-Traverse/Comprehensive の構成



2.6.7.3 Auto-Traverse/Comprehensive (オプション)

Auto-Traverse/Comprehensive には、2つのオプションがあります。

Orion Auto-Traverse/Comprehensive 用小児付属品セット

Auto-Traverse / Comprehensive には、チャイルドシートと小児観察用カメラを含む小児付属品セットがあります。小児観察用カメラは、フットレストのブラケットに収まるポールに取り付けられています。小児観察用カメラで、チャイルドシートに座る小児を観察します。

注記 小児観察用カメラでは、VisualEyes™ソフトウェアでは眼球運動の追跡はできません。これは、あくまでも椅子に座っている被検者の観察と記録にのみ使用されます。

ハードウェアのセットアップ (チャイルドシート) :

1. 回転椅子のヘッドサポートを緩めて取り外します。
2. 回転椅子のシートベルトスロットにフックをスライドさせて、チャイルドシートの両側をフックで固定できるようにします。
3. フックを回転椅子のフレームのアイボルトに取り付けて、チャイルドシートとフォームを回転椅子の座面に固定します。
4. 回転椅子の腰と肩のベルトは外したままにしておくことができます。
5. チャイルドシート用の装具を使用して被検児を固定する必要があります。



図 2.6-29 : Auto-Traverse/Comprehensive へのチャイルドシートの固定手順を示す連続画像 (左から右へ)

ハードウェアのセットアップ (小児観察用カメラ) :

1. 小児観察用カメラをポールに取り付け、これを回転椅子のフットレストのブラケットに取り付けます。
2. USB ケーブルを回転椅子のフレーム背面にある USB ポートに接続します。
3. 第 2.8 章の指示に従って、VisualEyes™ソフトウェアで小児観察用カメラを「小児観察用カメラ」として登録します。 **Hardware registration and licensing**

注記 : 小児観察用カメラを登録する前に、VNG ゴーグルを登録してライセンスを適用しておく必要があります。



図 2.6-29 : 小児観察用カメラ Orion Auto-Traverse/Comprehensive 回転椅子の背面にある USB 接続で取付けた状態

Orion Comprehensive/Auto-Traverse 用 EOG 付属品セット

Auto-Traverse / Comprehensive は、オプションで回転椅子のフレームの背面に内蔵アンプと併せて構成し、ENG 評価用の電極ケーブルを使用して検査します。

これは、独立した DataLink とは異なり、回転刺激検査にも使用できます。電極モンタージュと電極抵抗値の確認の手順については、第 3.5.3 章を参照してください。

ライセンス適用の場合、回転椅子用 ENG は以下の検査と互換性があります。

- 自発眼振検査
- 注視眼振検査
- 追跡眼球運動検査 (ETT)
- 急速眼球運動検査 (サッケード / ランダムサッケード)
- 視運動性眼振検査 (OKN)
- ステップ回転 (Step Rotation)
- 正弦波方式回転 (SHA)

ハードウェアのセットアップ

1. EOG ボードが Instacal に登録されていることを確認します。
2. 第 2.8 章の指示に従って、VisualEyes™ソフトウェアで EOG ボードを回転椅子用 ENG として登録します。 *Hardware registration and licensing*

注記：回転椅子用 ENG を登録する前に、VNG ゴーグルを登録してライセンスを適用しておく必要があります。

2.6.7.4 回転椅子のキャリブレーションと検証

回転椅子用の DAQ ハードウェアドライバーをインストールした後、OtoAccess®データベースと VisualEyes™ソフトウェアを起動します。

「構成」 > 「システムの初期設定」に移動し、左パネルで回転椅子を選択します。

プルダウンメニューから回転椅子のモデル (型番) を選択できます。検査者はコントローラーボードのステータスを確認でき、回転椅子のゼロ位置を調整することもできます。



図 2.6-30 : 回転椅子モデル (型番) の選択

設定確認の一環として、製品の検証とキャリブレーションを実行できます。設定が完了したら、製品の検証を行う必要があります。「定期保守」で「バリデーション (検証)」を選択すると、正弦波の検証を実行できます。

「正弦波のバリデーション」で「開始」をクリックします。回転椅子はゆっくりと前後に回転させてください。正弦波を確認します。2色の正弦波が1つの波形に重なり合っているはずですが、波形が一致している場合、キャリブレーションの必要はありません。

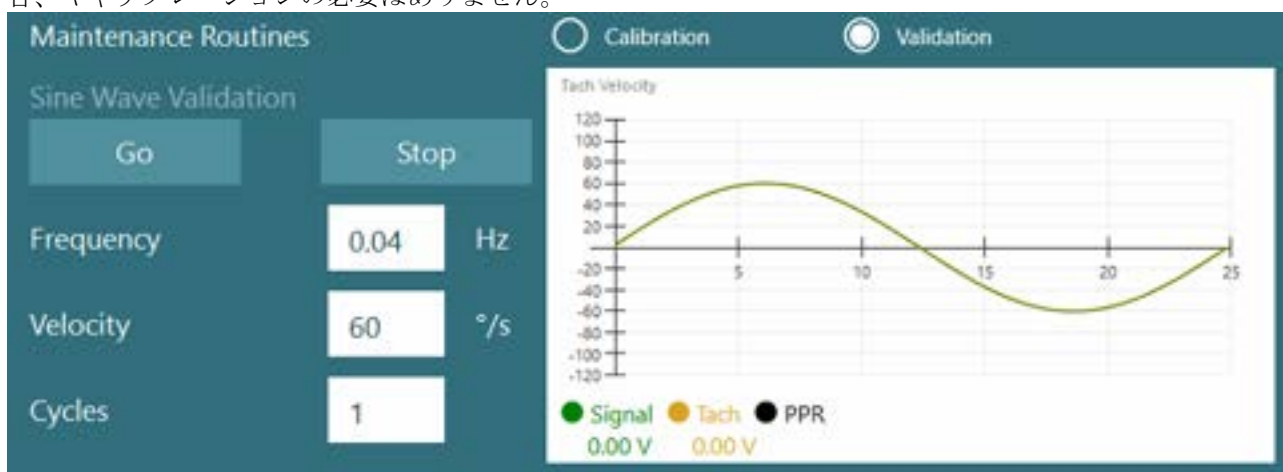


図 2.6-31 : 正弦波のバリデーション (検証)

波形が一致しない場合は、キャリブレーションの定期保守に切り替えます。「ドリフトキャリブレーション」で「開始」をクリックします。回転椅子は作動させず、停止した状態にしてください。回転椅子がゆっくりと動く場合は、ドリフトオフセットの左右矢印ボタンでドリフトを削除します。回転椅子の動作が止まったら、「停止」をクリックします。次に、「Tach 速度キャリブレーション」で「開始」をクリックします。回転椅子が時計回りに回転します。2本の線が表示され、最終的に重なります。キャリブレーションは自動的に停止します。



図 2.6-32 : ドリフトと Tach 速度キャリブレーション

2.6.7.5 Auto-Traverse/Comprehensive 設置の追加手順

耳石機能検査用に、0～7 cm のマイクロ遠心分離機のオプションがあります。チャイルドシートは、回転椅子座面中央に水平に配置する必要があります。スケールが中心から回転椅子が外れていることを示している場合は、「現在の水平方向の位置 (cm)」で現在の回転椅子の中心から外れた位置を入力し、回転椅子が中心から外れている方向 (左右) を選択します。「正中 水平方向」ボタンをクリックして、回転椅子を中央に移動します。

注意：回転椅子のフレームを押して水平方向に動かそうとすると、破損するおそれがあります。

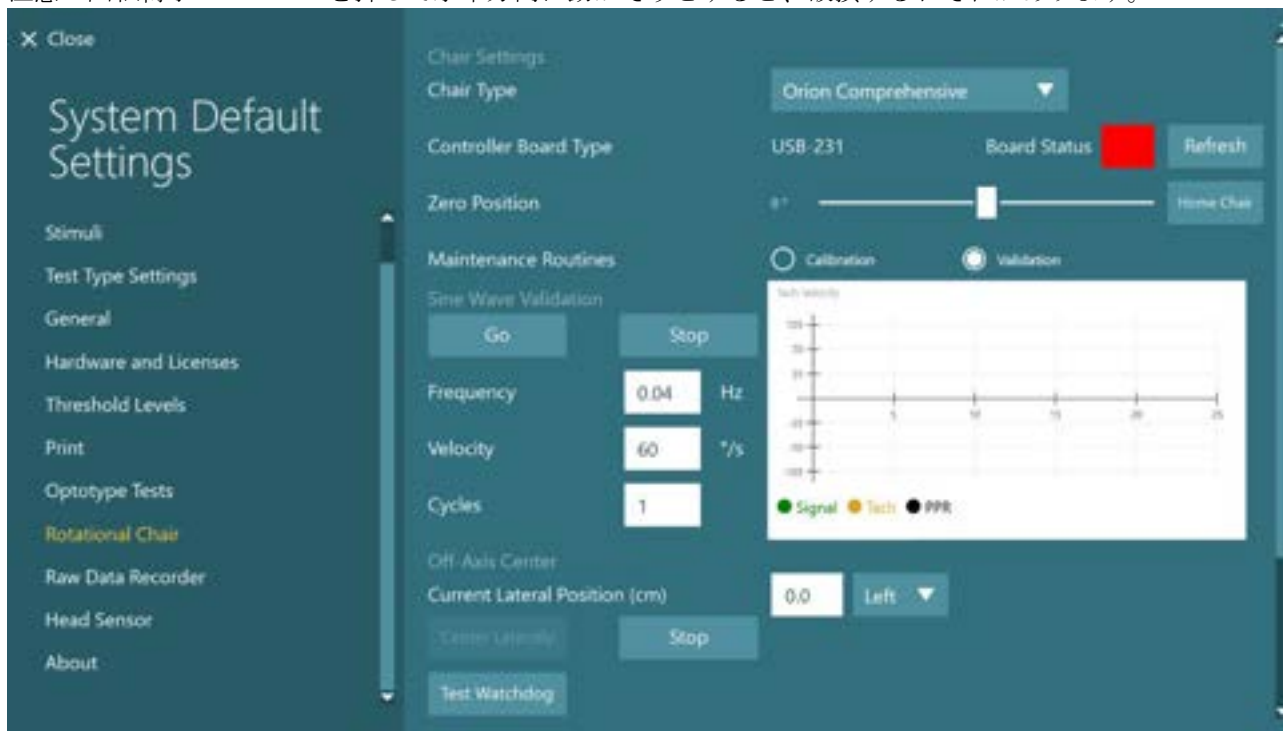


図 2.6-33 : Auto-Traverse/Comprehensive 「中央軸外 (Off-Axis 正中)」 の追加設定



レーザーの確認

刺激の種類として、プルダウンメニューから「レーザーとドラム」を選択します。「設定とキャリブレーション」で、「レーザー」を選択します。

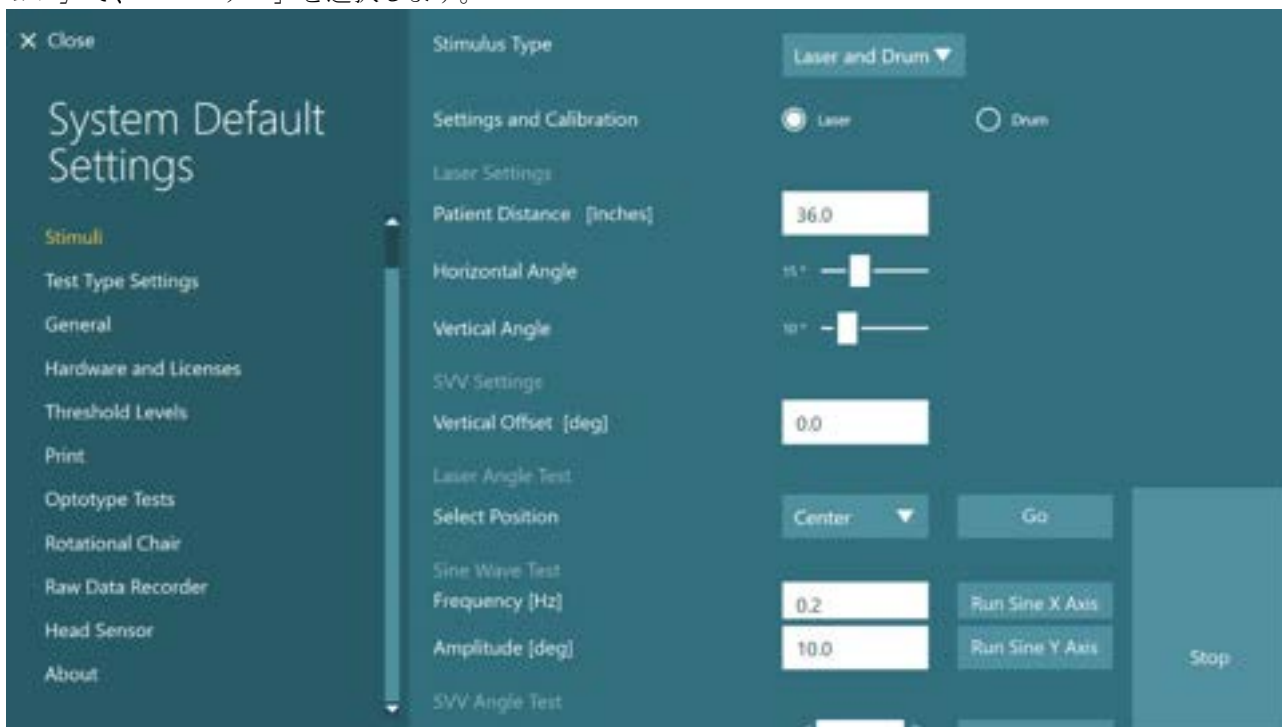


図 2.6-34 : Auto-Traverse/Comprehensive レーザー刺激の設定

レーザーの角度設定で「中央位置 (Center)」を選択し、「開始」をクリックします。レーザー光は、選択した位置 (中央、左 15、右 15、左 25、右 25 など) に応じて、ブースの壁に赤いターゲットを投影します。次に、「正弦波 X 軸の実行」または「正弦波 Y 軸の実行」で正弦波の検査を行い、レーザーが滑らかに動くことを確認します。「停止」をクリックして、正弦波の検査を停止します。

「SVV 角度設定」で「開始」をクリックして、SVV ラインがレンダリングされていることを確認します。左右矢印ボタンでラインの角度を調整し、ラインが滑らかに動くことを確認します。



OKN ドラムの確認

刺激の種類として、プルダウンメニューから「レーザーとドラム」を選択します。「設定とキャリブレーション」で「ドラム」を選択し、「バリデーション」を選択します。「正弦波のバリデーション」で「開始」をクリックして、正弦波の検証を実行します。OKN ランプが点灯し、ブースの壁に縞模様が表示されます。OKN ドラムは最初に一方向に回転させ、次に対称的な正弦波で反対の方向に回転させる必要があります。バリデーションの設定で指定したサイクル数を終了すると、OKN ドラムは自動的に停止します。



図 2.6-35 : Auto-Traverse/Comprehensive OKN ドラムの設定

正弦波に重なる波形が表示されない場合は、「キャリブレーション」を選択します。「ドリフトキャリブレーション」で「開始」をクリックして、左右矢印ボタンでドリフトを調整し、OKN ドラムの動作を停止します。「停止」をクリックします。次に、「Tach 速度キャリブレーション」で「開始」をクリックします。OKN ドラムが回転を始めます。方向が反時計回りであることを確認してください。2本の線が表示され、最終的に重なります。キャリブレーションは自動的に停止します。



図 2.6-36 : Auto-Traverser/Comprehensive OKN ドラムのドリフトキャリブレーションと Tach 速度キャリブレーション



安全性の確認

回転椅子で検査を開始する前に、以下のような安全性の検査を実行する必要があります。

Orion Auto-Traversal/Orion Comprehensive 安全性の確認

- 監視用タイマーの安全性：E ストップ（緊急停止）が解除されていることを確認してください。E ストップは、VisualEyes™ソフトウェアで「検査開始」をクリックするか、「システムの初期設定」>「回転椅子」に移動して「OrionA/C」を選択するまで、E ストップはオフのままです。VisualEyes™を終了すると、数秒後に E ストップのライトがオフになります。これによって監視用タイマーの安全性が確保されます。
- ブースドアの安全性：ブースのドアを開けた状態で「検査開始」をクリックします。検査を続行するには、ブースのドアを閉じる必要があることを警告するメッセージが表示されます。ブースのドアを閉め、回転刺激検査に進みます。安全性の確認リストが表示されます。検査を開始する前に、リストを確認する必要があります。

2.6.8 DataLink (オプション)

DataLink は、VNG 用 EOG 付属品セットによって VisualEyes™ 515/525 で使用できるようになります。VNG ゴーグルで検査できない被検者に対して ENG を実施するために使用します。DataLink は、被検者に貼り付けられた電極からの電位記録を介して眼球の位置を測定します。EOG 被検者用ケーブルは DataLink に、色分けされた電極ケーブルは EOG 被検者用ケーブルに接続して被検者に貼り付けた電極に取り付けます。電極モニターと電極抵抗値の確認の手順については、第 3.5.3 章を参照してください。

ライセンス適用の場合、DataLink は以下の検査と互換性があります。

注記 DataLink は回転刺激検査との互換性はありません。

注記 DataLink V-Link は VisualEyes 3.2 の機能をサポートしていません。

- 自発眼振検査
- 注視眼振検査
- 追跡眼球運動検査 (ETT)
- 急速眼球運動検査 (サッケード/ランダムサッケード)
- 視運動性眼振検査 (OKN)
- 頭位眼振検査
- 頭位変換眼振検査 (Dix Hallpike)
- カロリック検査 (冷温刺激)
- Saccadometry



図 2.6-37 : DataLink と EOG 被検者用ケーブル

ハードウェアのセットアップ

1. 9 ピン接続端子を EOG 被検者用ケーブルから DataLink 背面にある EOG 接続端子に接続します。
2. USB Type-B 接続端子を DataLink の背面にある USBPC ポートに接続し、もう一方の端を PC または USB ハブに接続します。DataLink の USB ポートの横にある A/D ステータス LED が緑色に点灯します。
3. 電源ケーブルを DataLink 背面にある主電源用の接続端子に接続します。



4. 背面の電源スイッチで DataLink の電源を入れます。DataLink 前面にある A/D ステータス LED が緑色に点灯します。
5. インストールします。
6. 第 2.8 章の指示に従って、VisualEyes™ソフトウェアで DataLink を「DataLink」として登録します。**Hardware registration and licensing**

注記： DataLink を登録する前に、VNG ゴーグルを登録してライセンスを適用しておく必要があります。

2.6.8.1 DataLink 設定—Orion Reclining/System 2000 Reclining/System 2000 Comprehensive

Orion Reclining、System 2000 Reclining、System 2000 Comprehensive と組み合わせて DataLink を構成する場合、DataLink ボード (minilab 1008) が最初に検出され、Instacal で Board#0 になることがあります。回転椅子と VisualEyes™ソフトウェア間の通信で競合する可能性があります。

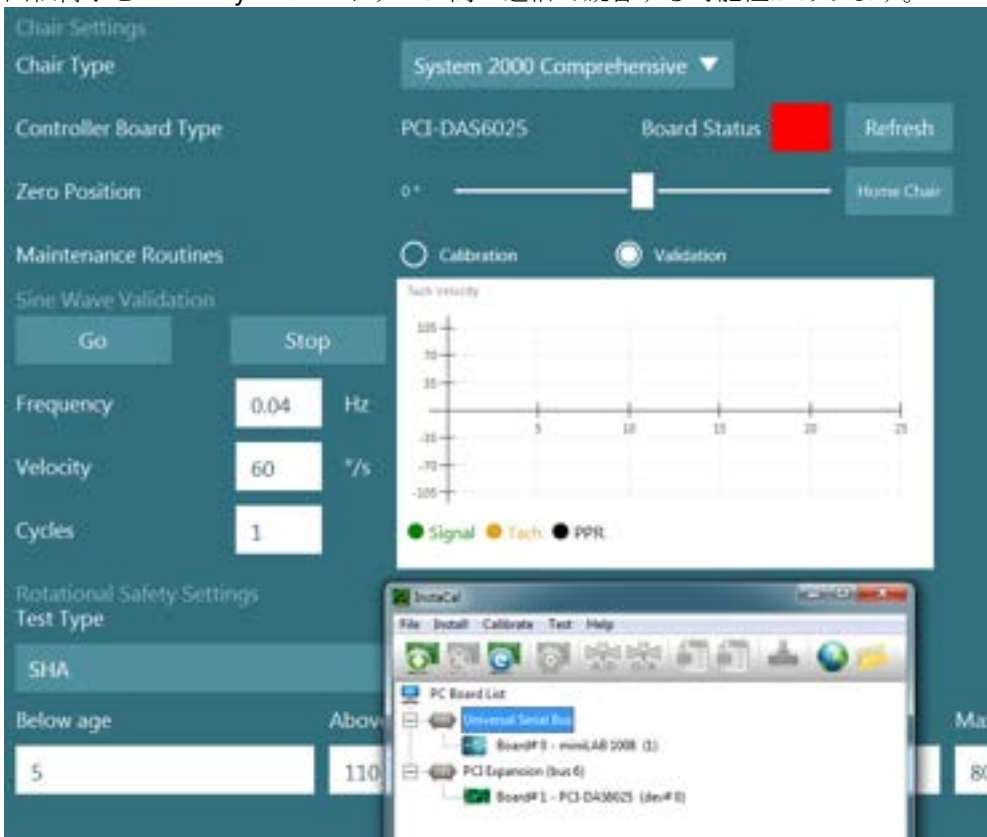


図 2.6-38 : System 2000 Comprehensive/Reclining DataLink ボード (minilab 1008) の Board#0 の不適切な検出

解決するには、Instacal でボードを右クリックし、「Board#...の変更」をクリックしてボード番号を変更します。

DataLink (miniLAB 1008) が Board#1、回転椅子 (USB-231 / PCI-DAS6025) が Board#0 になるように Instacal を構成します。



図 2.6-39 : System 2000 Comprehensive/Reclining DataLink ボード (minilab 1008) の適切な検出

2.6.9 TRV Chair (オプション)

TRV Chair は、USB 接続で VisualEyes™製品で使用できます。
TRV Chair の設置と使用方法については、別途説明書を参照してください。



図 2.6-39 : TRV Chair



2.7 回転椅子と DataLink 用 DAQ ハードウェアドライバーのインストール

回転椅子と DataLink では、ハードウェアコンポーネントからのデータを正常に取得するため、DAQ ハードウェアドライバーを追加でインストールする必要があります。関連するドライバーについては、以下の手順に従ってください。

注記

VisualEyes™ソフトウェアを古いバージョンからアップグレードする場合は、新しい VisualEyes™ソフトウェアのインストールで提供されるドライバーにドライバーを更新する必要があります。

DAQ ハードウェアドライバーのインストール—Orion/System 2000/DataLink

Windowsエクスプローラーを開きます。以下の場所に移動します。

C:\Program Files (x86)\Interacoustics\Micromedical VisualEyes™\Driverfiles

icalsetup.exeを実行します。

「セットアップ」をクリックして、InstaCalのインストールを開始します。

InstaCalの既定場所「C:\Program Files (x86)\Measurement Computing\DAQ\」にインストールするよう選択します。

インストールするプログラム機能を確認されたら、既定のオプションを選択して「Universal Library Examples」をインストールします。

インストール時に Windows セキュリティーによって、Measurement Computing ソフトウェアのインストール許可を要求されることがあります。「Measurement Computing のソフトウェアを常に信頼する」にチェックを入れて、「インストール」を選択します。InstaCal のセットアップが完了したら、PC を再起動する必要があります。

PC を再起動したら、InstaCal ソフトウェアを起動します。Instacal ソフトウェアを起動する前に、回転椅子の USB ケーブルが VisualEyes™製品に接続され、回転椅子の電源が入っていることを確認します。USB ケーブルを接続した後、すべてのハードウェアが自動検出されるまで数秒待ちます。InstaCal ソフトウェアは以下の場所にあります。

Windows®10 では、「スタート」 > 「すべてのアプリ」 > 「Measurement Computing」 > 「InstaCal」をクリックします。

Windows®11 では、「スタート」 > 「すべてのアプリ」 > 「Measurement Computing」 > 「InstaCal」をクリックします。

InstaCal ソフトウェアを起動すると、ソフトウェアは表 2.7-1 に記載のボードタイプとしてハードウェアを検出します（ハードウェアに電源が供給され、PC 接続している場合）。「OK」ボタンをクリックして、デバイスをプログラムに登録します。System 2000 Auto-Traverse の場合は、各ボードの「設定」ボタンをクリックし、「カウンター 1 クロックソース」のボード構成設定を「10MHz クロック」に変更します。

表 2.7-1：ハードウェアモデルに応じた InstaCal ソフトウェアのボードタイプ検出


ハードウェアモデル	ボードタイプ	ボードの枚数
Orion Reclining	USB-231	1
Orion Comprehensive	USB-231	2
Orion Auto-Traverse	USB-231	2
System 2000 Reclining	PCI-DAS6025	1
System 2000 Comprehensive	PCI-DAS6025	1
System 2000 Auto-Traverse	PCI-DAS6025	2
DataLink	miniLAB-1008	1




2.8 ハードウェアとライセンス

新しいハードウェアを VisualEyes™製品に接続する場合、正しく認識されるように VisualEyes™ソフトウェアに登録する必要があります。VNG 用/vHIT 用ゴーグルもライセンスを適用する必要があります。


新しいハードウェアを接続した状態で VisualEyes™ソフトウェアを起動すると、ソフトウェアは新しいハードウェアを自動的に検出し、以下の画面がポップアップ表示されます。接続しているハードウェアの一意のハードウェア番号を示しています。プルダウンメニューで接続しているハードウェアのタイプを指定する必要があります。VNG ゴーグルは、他のハードウェアよりも先に登録およびライセンス適用しておくことが重要です。

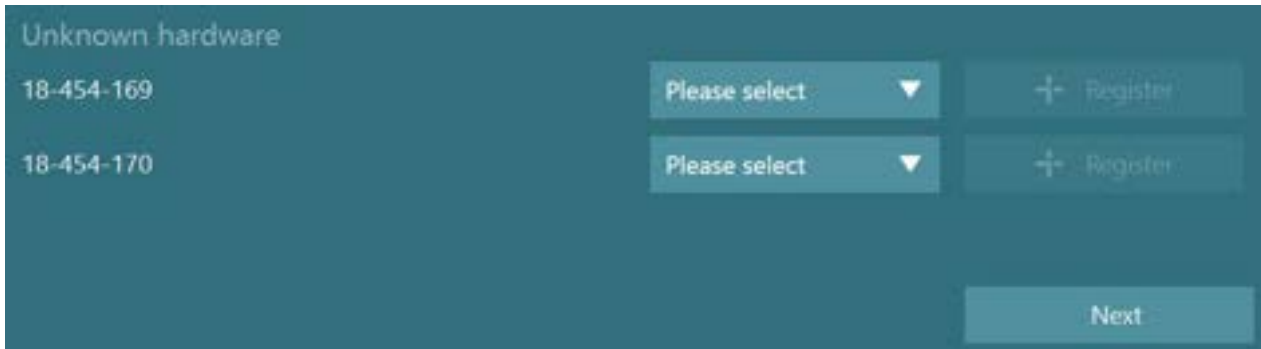

選択したハードウェアが両眼ゴーグルの場合、左側に別のプルダウンメニューが表示され、ペアリングするカメラを選択します。

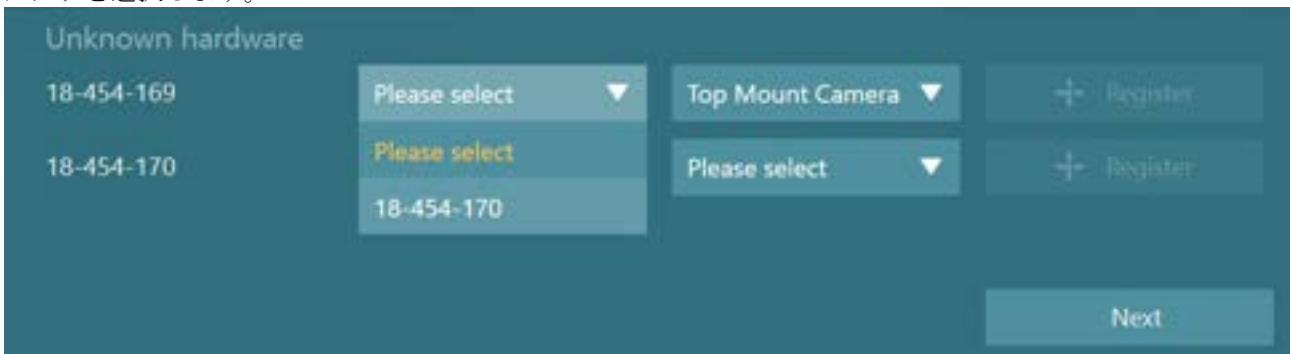

「登録」ボタンをクリックしてハードウェアを VisualEyes™製品へ保存し、「次へ」をクリックします。

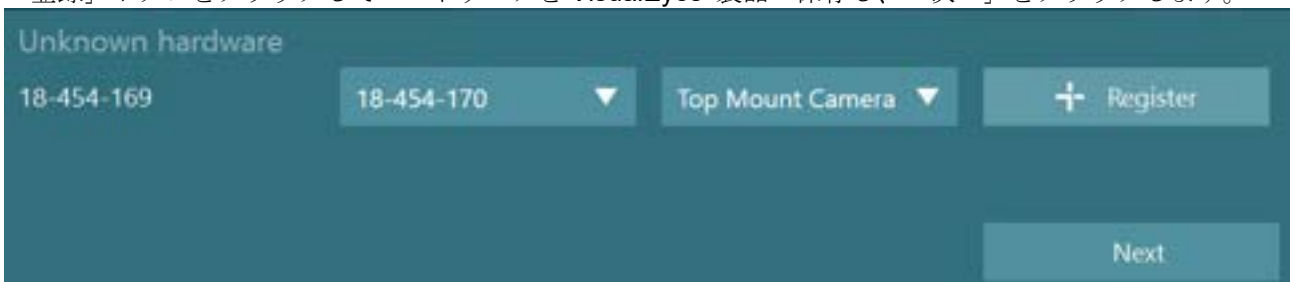

ライセンスキー入力用の別画面が表示されます。新しいハードウェアを登録した VisualEyes™製品のライセンスを入力します。

注記 : メインの VNG ゴーグルと EyeSeeCam ゴーグルのみライセンスを保持する必要があります。VisualEyes™製品で提供されるライセンスになります。その他のハードウェア (回転椅子用 ENG、DataLink、小児観察用カメラ、VORTEQ™ IMU) の場合、ライセンス欄を空欄のまま「閉じる」をクリックしてください。その後、これらのハードウェアは VNG ゴーグルと同じライセンスで機能します。



Enter new license keys

Hardware	Serial number	License key
Top Mount Camera	18-454-169	<input type="text"/>
	18-454-170	<input type="text"/>

Back Close

VNG ゴーグルの登録とライセンス適用後、追加のハードウェアを登録できます。これは、新しく追加したハードウェアを接続した状態で VisualEyes ソフトウェアを再起動することで実行できます。不明なハードウェアがあることを示す画面がポップアップ表示され、上記の手順に従って登録できます。

新しいハードウェアを接続して、「システムの初期設定」>「ハードウェアとライセンス」で設定する方法もあります。これによって登録したハードウェアと適用中のライセンスがすべて表示されます。不明なハードウェアがある場合は、画面の上部にも表示されます。プルダウンメニューからハードウェアのタイプを選択し、「登録」をクリックします。

System Default Settings

- Input
- Stimuli
- Test Type Settings
- General
- Hardware and Licenses**
- Threshold Levels
- Print
- Optotype Tests
- Rotational Chair
- Raw Data Recorder
- Head Sensor
- About

Registered hardware

18-280-865	18-280-866	Top Mount Camera	Unregister
00-000-015		VORTEQ 2nd Gen	Unregister
18-187-925		EyeSeeCam	Unregister

Registered licenses

- 525.vHIT.VORTEQ Assessments.VORTEQ Diagnostics license registered for Side Mount Binocular
- 525.vHIT.VORTEQ Assessments.VORTEQ Diagnostics license registered for Top Mount Camera

Remove license Remove license

+ Add new license

Spontaneous	Sinusoidal Harmonic Acceleration	Dix Hallpike Advanced
Gaze	VOR Suppression	Lateral Head Roll
Pursuit	Visual VOR	Ocular Counter Roll
Saccade	VORTEQ vHIT	vHIT



2.9 ディスプレイの構成

VisualEyesTM製品は、視覚刺激を正しく提示し、視線追跡を正しい角度にキャリブレーションするために、適切なモニターやプロジェクターを必要とします。したがって、刺激提示用モニターを使用する場合、以下の指示に従って正しく構成されていることを確認することが重要です。

2.9.1 テレビに関する考慮事項

モニター画面のサイズは、目標の角度で視覚刺激を提示するために十分な大きさであることが重要です。

接続距離が 7.5m を超えていて、ケーブルを壁の後ろに隠したり天井を通過したりする場合は、電源付き HDMI 延長ハブ/ケーブルを使用する必要があります。ワイヤレスの HDMI 接続には対応していません。

テレビの設定を行う場合、HDMI スケーリングやデジタル画像処理の補正により、提示される刺激信号が遅れる可能性があるため、テレビを「PC」または「ゲーム」モードに設定する必要があります。

テレビはフル HD (1080 ピクセル) を推奨します。

2.9.2 Windows のディスプレイ設定

ディスプレイは、「Windows の設定」 > 「システム」 > 「ディスプレイ」の Windows のディスプレイ設定で正しく設定する必要があります。

- ディスプレイは拡張ディスプレイとして設定する必要があり、PC モニターをメインディスプレイとして選択する必要があります。テレビまたはプロジェクターをメインディスプレイとして選択することはできません。
- テレビやプロジェクターのスケールは 100% に設定する必要があります。
- 解像度は 1920×1080 に設定する必要があります。
UHD 4K テレビを使用する場合、解像度を 1920 x 1080 に設定し、リフレッシュレートを 60Hz にする必要があります。

リフレッシュレートを 60Hz に設定するには、「ディスプレイの詳細設定」に移動し、ディスプレイを選択して、「ディスプレイ X のディスプレイアダプタのプロパティ」をクリックします。

Multiple displays

Multiple displays

Extend these displays

Make this my main display

Scale and layout

Change the size of text, apps, and other items


100%

Advanced scaling settings

Resolution



次に、画面上部の「モニター」タブを選択し、「画面のリフレッシュレート」のプルダウンメニューで「60Hz」を選択します。

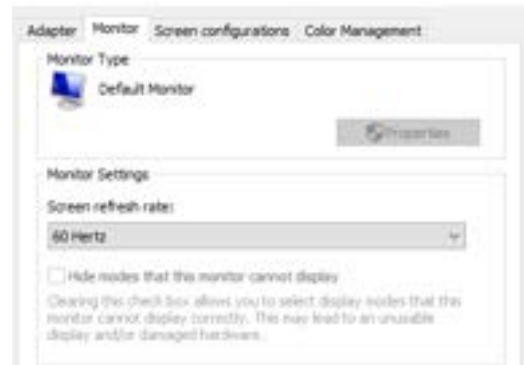

2.9.3 VisualEyes™ソフトウェアの設定


テレビと Windows の設定が正しく構成されたら、VisualEyes™ソフトウェアを起動し、以下の手順で VisualEyes™ソフトウェアでディスプレイを構成します。

注記：インストール時にチェックボックス「既存の VisualEyes™設定を移行する」を有効にした場合でも、ディスプレイのサイズを再測定することを強く推奨します。VisualEyes™のバージョンが異なれば、使用する測定方法も異なります。そのため、ディスプレイのサイズを検証することが重要です。

2.9.3.1 刺激

「システムの初期設定」に移動し、左パネルで「刺激」を選択します。

- テレビやプロジェクターを使用している場合は、刺激の種類としてテレビを選択します。
- サブモニターが「ON」に設定されていることを確認します。
- ページの下部で、刺激提示用モニターを選択します。モニターのサイズは、それぞれのピクセル解像度を基準にしています。
- 選択したモニターにグリッド線を表示するには、「境界の表示/非表示」をクリックします。

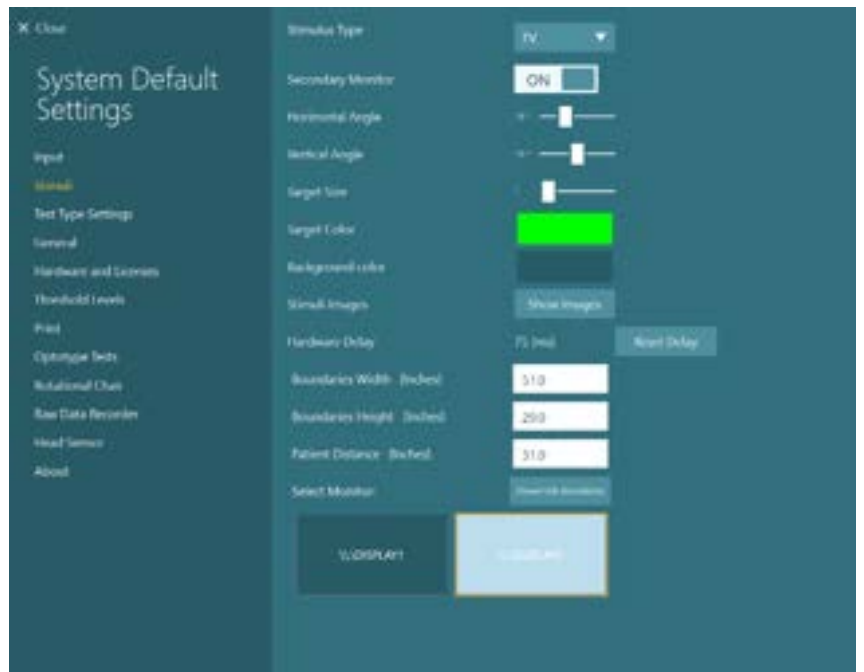




- 水平垂直方向のグリッド線の幅と高さを測定して入力します。
- 画面から被検者までの距離を測定して入力します。

注記：

VisualEyes™ソフトウェアで入力する単位は、Windows地域形式によって決定され、cm またはインチのどちらかになります。

- スライダーを使用して水平角と垂直角を調整し、視覚刺激に使用できる最大角度を決定します。

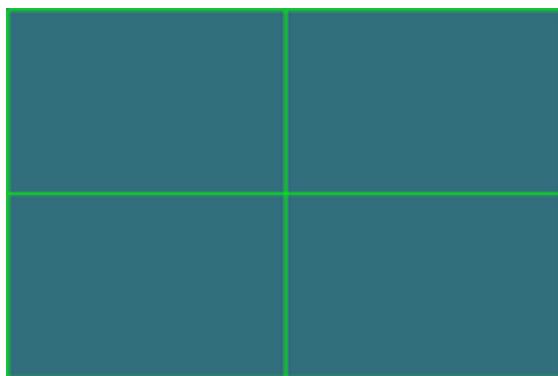

Boundaries Width [cm]	132,0
Boundaries Height [cm]	74,5
Patient Distance [cm]	100,0

Horizontal Angle	30°	<input type="range"/>
Vertical Angle	20°	<input type="range"/>
Target Size	1	<input type="range"/>


2.9.3.2 ハードウェアの遅延

接続したモニター画面に視覚刺激を提示するための潜在的な遅延を補正するために、ハードウェアの遅延を VisualEyes™ソフトウェアから調整できます。接続した刺激提示用モニターに対して正しく設定されていない場合、眼球運動検査の異常な潜時値につながる可能性があります。そのため、視覚刺激を使用する場合には、ハードウェアの遅延を調整することを推奨します。刺激提示用モニターを交換する場合は、再調整する必要があります。




ハードウェアの遅延に関して現在設定されている値は、「システムの初期設定」>「刺激」にあります。

「遅延のリセット」をクリックすると、ハードウェアの遅延が0msに設定されます。

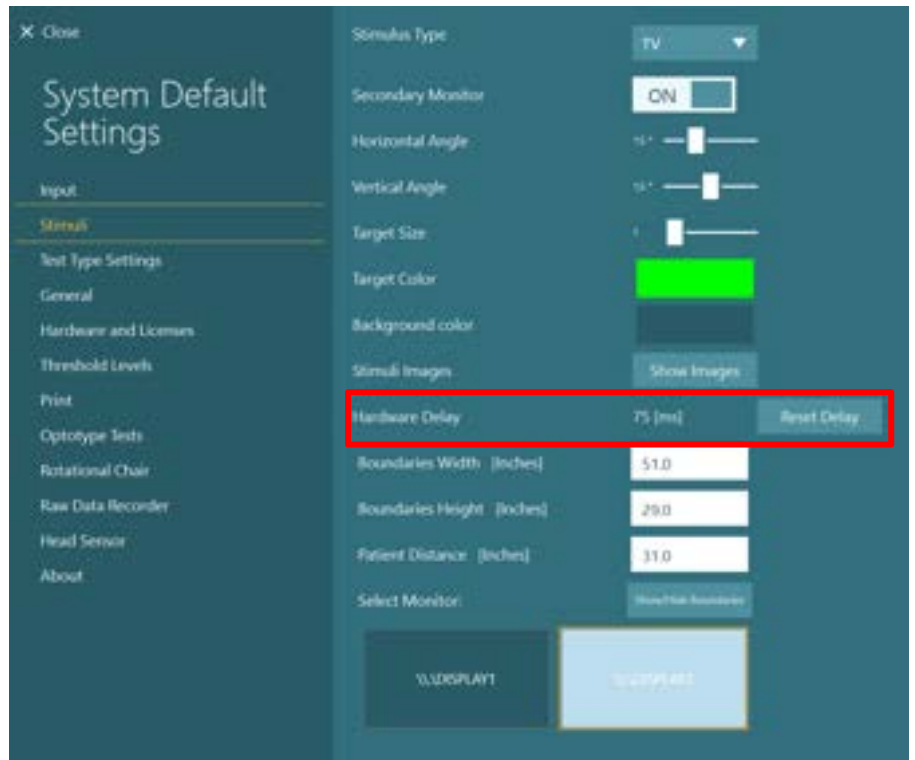

接続した刺激提示用モニターのハードウェア遅延を調整するには、以下の手順に従ってください。

1. 正常な反応を示すことを把握している被検者に対して追跡眼球運動検査を実施します。

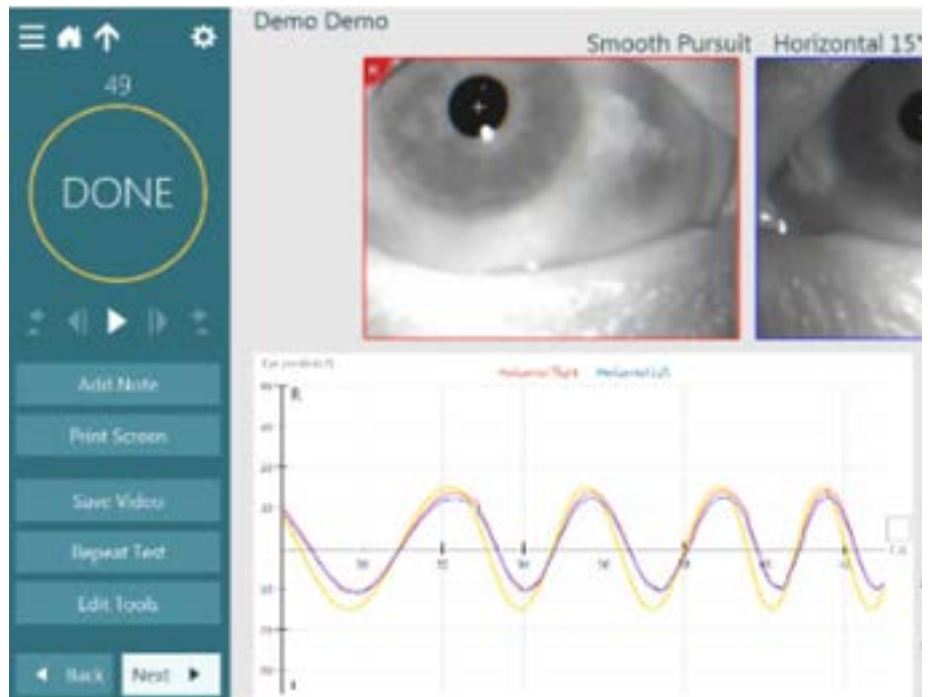




2. 検査終了後、下位検査をクリックします。



3. 「一時設定」へ移動します。



4. 「一時設定」から、左パネルの「ハードウェアの遅延」をクリックします。

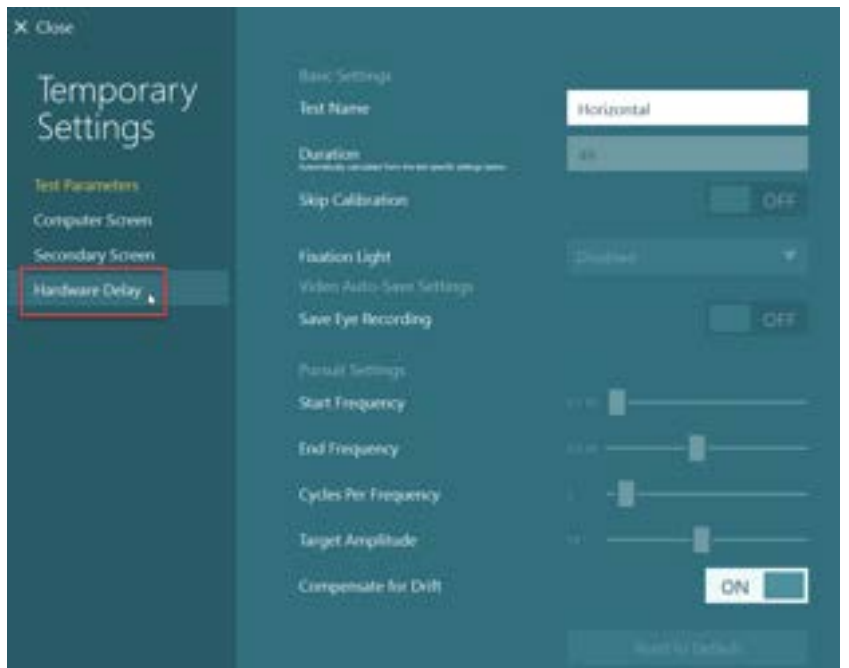

5. ハードウェア遅延の推奨調整は、現在の遅延として表示されます。「ハードウェア遅延の調整」をクリックすると、それに応じてハードウェアの遅延値が調整されます。





6. 「ハードウェア遅延の調整」をクリックすると、調整された値が「システムの初期設定」>「刺激」に表示されます。



7. ハードウェア遅延の新しい値を検証するために、正常な反応を示すことを把握している被検者に対して別の追跡眼球運動検査を実行します。

この場合、推奨調整値は 0ms に近い値になります



2.9.3.3 Optotype 設定

VORTEQ 評価モジュールがある場合、刺激は「システムの初期設定」>「Optotype 設定」で構成する必要があります。Optotype 設定画面では、DVA、GST、fvHIT™で使用する刺激に対して個別の画面測定値が表示されます。fvHIT™にはゲーミング高速モニターが推奨されます。モニター画面が Optotype 検査で使用するには大きすぎる場合は、PC のモニター画面を Optotype 提示用モニターとして選択できます。

Optotype 検査に使用するモニター画面を選択し、画面の測定値を確認します。PC の画面である可能性もあるため、選択した画面の境界線を入力する必要があります。被検者との距離の値が、選択した画面に対して適切ではない場合、optotype は可能な限り表示されますが、最小の logMAR 値では識別できないことがあります。



2.10 対応言語

VisualEyes™ソフトウェアの言語は、「システムの初期設定」>「一般」に移動し、プルダウンメニューから対象となる言語を選択することで設定できます（Figure 2.6-1 参照）。言語を変更した場合、VisualEyes™ソフトウェアを再起動する必要があります。

VisualEyes™ソフトウェアに対応している言語は以下のとおりです。

- 英語（米国）
- フランス語（フランス）
- ドイツ語（ドイツ）
- ギリシャ語（ギリシャ）
- イタリア語（イタリア）
- 日本語（日本）
- 韓国語（韓国）
- ポーランド語（ポーランド）
- ポルトガル語（ブラジル）
- ロシア語（ロシア）
- スロベニア語（スロベニア）
- スペイン語（スペイン）
- スウェーデン語（スウェーデン）
- トルコ語（トルコ）
- 中国語

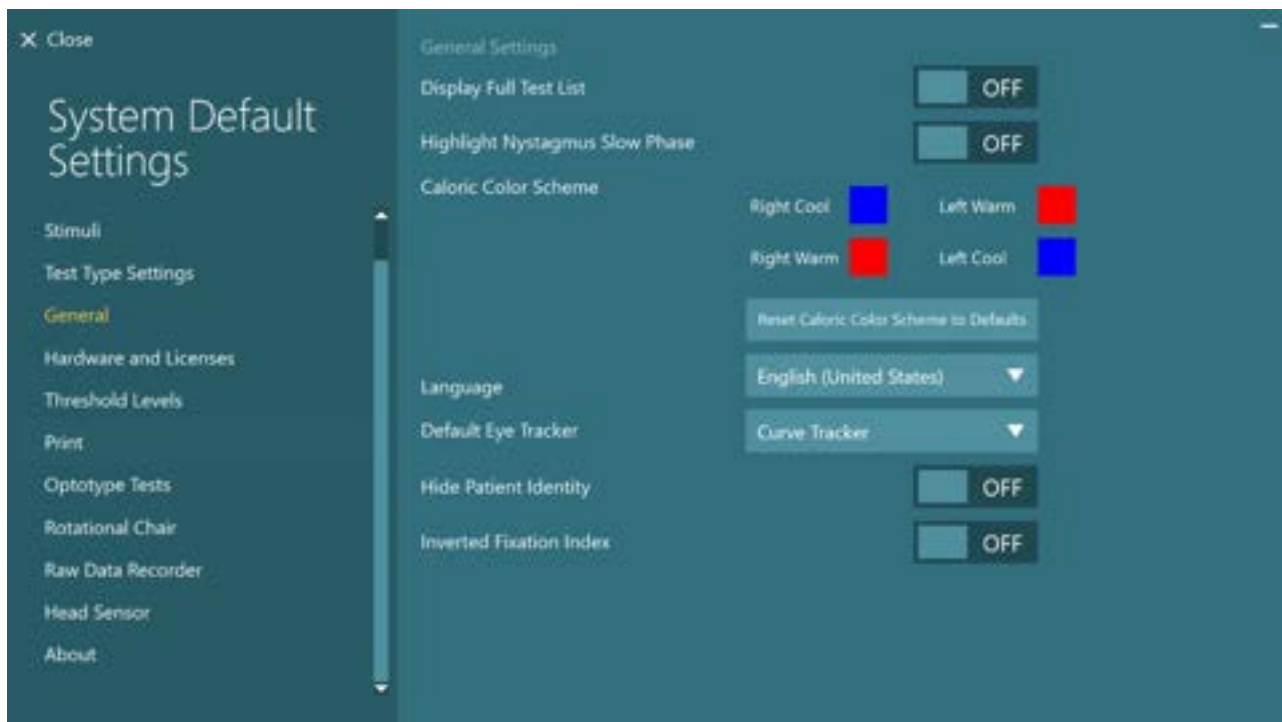


図 2.10-1 : 「システムの初期設定」から言語の設定

2.11 データとビデオの保存

2.11.1 検査データ

VisualEyes™では、OtoAccess®データベースを介して検査データを保存できます。VisualEyes™ソフトウェアをOtoAccess®データベースを介して開くと、検査データは自動的に保存され、データベースで選択した被検者に検査データが保存されます。


2.11.2 ビデオ記録

VisualEyes™では、VNG用/VHIT用ゴーグルだけでなく、外付け検査風景用カメラからもビデオ記録が可能です。ビデオ記録の動画ファイルは特定の被検者と検査にリンクされますが、OtoAccess®データベースには保存されません。動画ファイルの保存先は、「システムの初期設定」の「入力」で指定できます。

「参照」をクリックして、指定したフォルダーに移動します。

既定の場所は `C:\Users\Public\Videos\Micromedical VisualEyes™` です。

注記：VisualEyes™製品がサーバー/クライアント構成の場合、すべての構成でビデオ保存用に指定したパスへアクセスできることを確認してください。

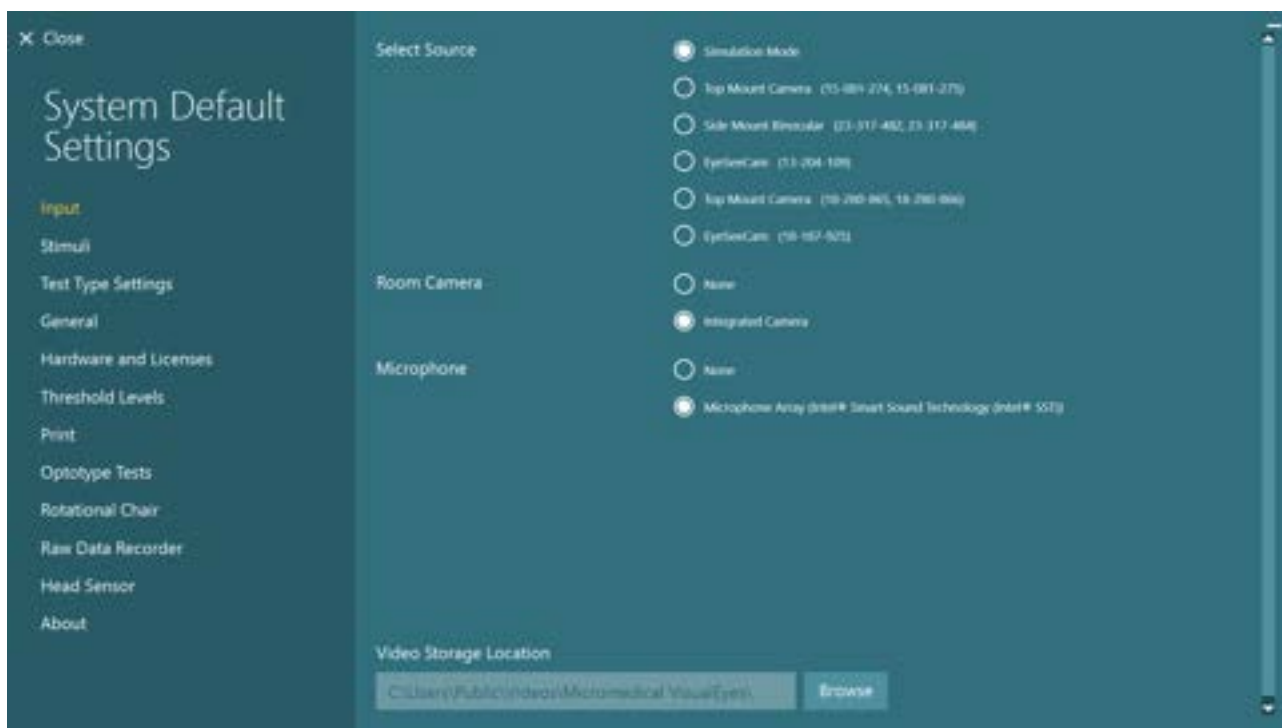

2.11.3 セッションレポート

データベースへの出力

OtoAccess® データベースでは、セッションレビューのために VisualEyes™ ソフトウェアを起動する必要なく、すばやく簡単にアクセスできるように、セッションレポートを PDF で保存できます。この機能を使用するには、セッションが完了するたびに、セッションレビューで「データベースへの出力」をクリックする必要があります。



PDF 作成

VisualEyes™ソフトウェアから直接 PDF 印刷を有効にして、OtoAccess®データベース外で PDF 印刷をアーカイブすることもできます。

これは、「システムの初期設定」>「印刷」の「PDF 出力設定」から可能です。ここで「PDF レポート出力」をオンに設定して「参照」をクリックして対象のフォルダーを選択することで、PDF レポートの保存先を指定します。PDF ファイル名は、「フィールド選択」プルダウンメニューからファイル名に含めるフィールドを選択することで、カスタマイズできます。フィールドは、指定したフィールド区切り文字によって PDF ファイル名で区切られます。

注記：VisualEyes™製品がサーバー/クライアント構成の場合、すべての構成で指定したデータ保存場所にアクセスできることを確認してください。



PDF Configuration

Save PDF Document ON

Data Location
C:\VisualEyes PDF Reports\

PDF Filename Configuration

Field Delimiter

Field Selections ▼

Last Name 3 Characters
First Name 3 Characters
Patient Identifier

図 2.11-1 : 「システムの初期設定」 > 「印刷」の「PDF 出力設定」

上記の手順に従うと、セッションが完了したときに、新しい「PDF 作成」ボタンがセッションレビューに表示されます。「PDF 作成」をクリックすると、選択したデータの保存先に、指定した PDF ファイル名で PDF レポートが生成されます。





3 操作方法

3.1 起動

VisualEyes™製品の起動時は、以下の指示に従ってください。

1. 電源をオンにします。
PC と USB ハブが電源接続されていることを確認します。構成品が絶縁トランスを介して接続されている場合、スイッチを使用して電源をオンにする必要があります。
2. 付属品をオンにします。
 - VNG 用/VHIT 用ゴーグル：
ゴーグルが USB ハブまたは回転椅子に接続されていることを確認します。
 - 回転椅子（オプション）：
回転椅子が電源に接続され、スイッチを使用して電源がオンになっていることを確認します。電源スイッチは、Orion の場合は回転椅子の底にあり、System2000 の場合は回転椅子のコントローラー背面にあります。
 - 緊急停止ボタンが解除されていることを確認します（時計回りに回してボタンを解除します）。
 - DataLink（オプション）：
DataLink が電源に接続され、USB 接続を介して PC に接続されていることを確認します。背面の電源スイッチで電源を入れます。
 - カロリック刺激装置（オプション）：
AirFx/AquaStim が電源に接続され、USB 接続を介して PC に接続されていることを確認します。操作方法の詳細については、カロリック刺激装置の取扱説明書を参照してください。
 - VORTEQ™ IMU 第 2 世代：
電源が入っていて、USB または Bluetooth で PC に接続されていることを確認します。
 - デジタルバーライト（オプション）：
USB 接続を介して PC に接続されていることを確認します。
3. PC の電源を入れる前に刺激をオンにします。
電源ボタンでテレビまたはプロジェクターの電源を入れます。次に、PC の電源を入れて、テレビまたはプロジェクターの刺激が拡張ディスプレイとして設定されていることを確認します。
4. OtoAccess®データベースを起動し、被検者情報を入力します。詳細については、OtoAccess®データベースの取扱説明書を参照してください。
5. OtoAccess®データベースから VisualEyes™ソフトウェアを起動します。



3.2 メイン画面

VisualEyes™ソフトウェアを起動すると、メイン画面で起動します（Figure 3.2-1 参照）。OtoAccess®データベースから取得した被検者情報は、検査風景用カメラ映像の下に表示されます。メイン画面に複数の項目があります。

1. 室内録画の開始：

「室内録画」の開始をクリックすると、外付け検査風景用カメラの録画を開始します。測定前にセッション情報を記録するために使用します。例：被検者のインタビュー。この記録は、選択した被検者にリンクされています。

2. プロトコルの選択：

プルダウンメニューは、検査で使用するプロトコルの設定に使用します。プロトコル管理の詳細については、第 3.4 章を参照してください。

3. 検査の開始：

「検査開始」をクリックすると、選択したプロトコルでセッションが開始されます。検査の詳細については、第 3.8 章と第 3.9 章を参照してください。

4. 検査結果の履歴：

過去の検査結果の履歴を確認でき、詳細情報の参照、エクスポート、印刷を実行できます。詳細については、第 3.11 章を参照してください。

5. ビデオデータ：

「ビデオデータ」をクリックすると、過去に記録したビデオ記録を参照できます。被検者インタビューと測定記録が含まれます。詳細については、第 3.12 章を参照してください。

6. ヘルプ：

「ヘルプ」ボタンをクリックすると、取扱説明書と詳細説明書（英語版）のドキュメントが開きます。これらのドキュメントは、Windows エクスプローラーで「C:\Program Files (x86)\Interacoustics\Micromedical VisualEyes™Operation Manual」に移動して確認することもできます。このフォルダーには、関連するクイックガイドも含まれています。

7. 設定：

設定メニューに移動します。プロトコル管理とシステムの初期設定が含まれます。

8. 終了：

「終了」ボタンで VisualEyes™ソフトウェアを終了します。

9. 最小化：


 メイン画面にある他のタスクへ一時的にアクセスするために、記号を使用して画面を最小化できます。



図 3.2-1: VisualEyes メイン画面



3.3 システムの初期設定

メイン画面から「設定」をクリックし、「システムの初期設定」を選択すると、Figure 3.3-1 に表示されるメニューに移動します。

このメニューは、製品の構成品と付属品の設定、言語やビデオの保存先など VisualEyes™ソフトウェアの一般的な設定に使用します。


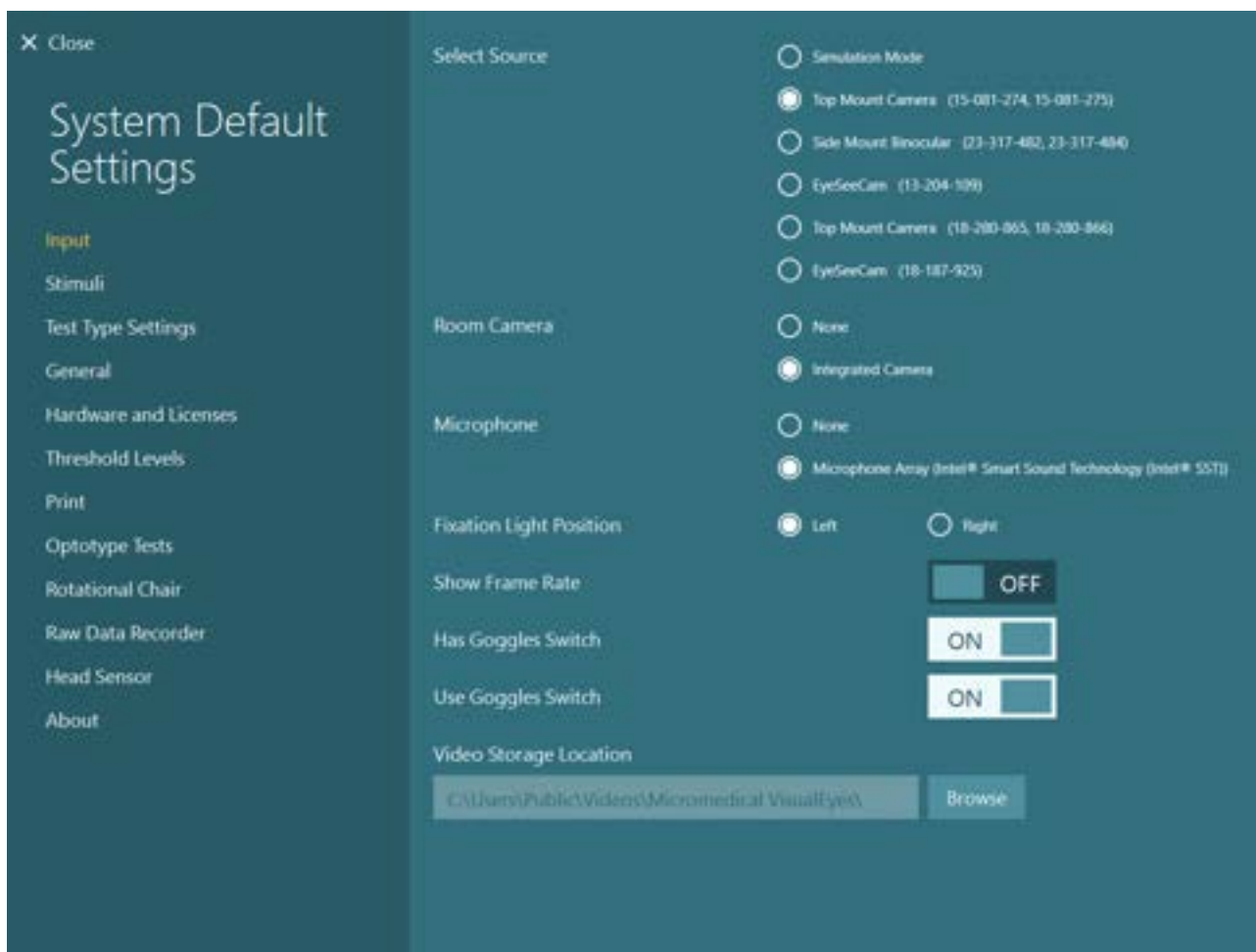


図 3.3-1 : 「システムの初期設定」メニュー

「システムの初期設定」には、画面の左パネルから選択したサブメニューがいくつか含まれています。メニューの詳細や設定については、*詳細説明書 (英語版)* を参照してください。

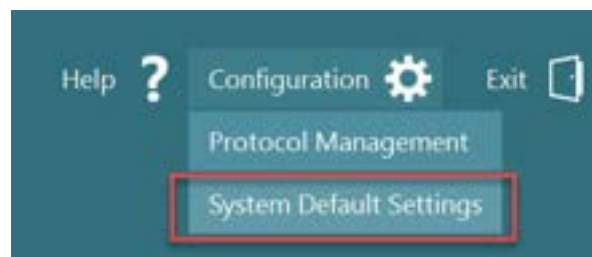

3.4 プロトコル管理

メイン画面から「設定」をクリックし、「プロトコル管理」を選択すると、Figure 3.4-1に表示されるメニューに移動します。

「プロトコル管理」メニューは、VisualEyes™のプロトコルを管理するために使用します。プロトコルは検査項目のリストで構成され、検査者や施設の好みによって特定の順序で実行されるように設定できます。メニューの詳細や設定については、[詳細説明書（英語版）](#)を参照してください。


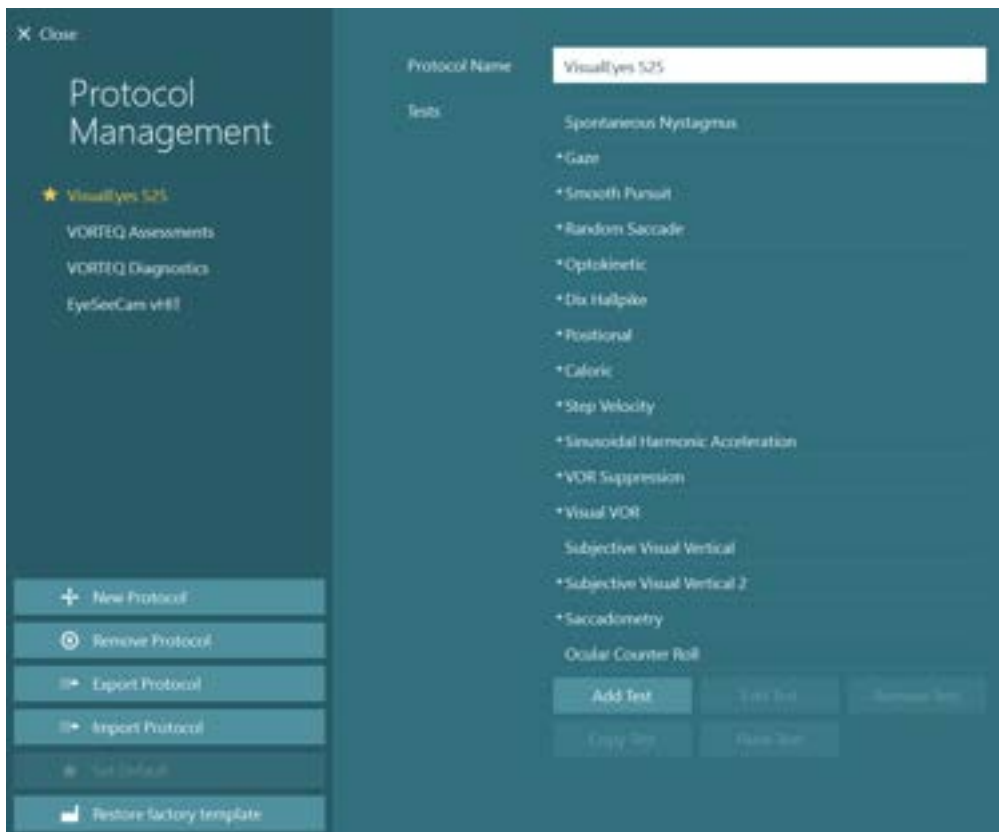


図 3.4-1 : 「プロトコル管理」メニュー

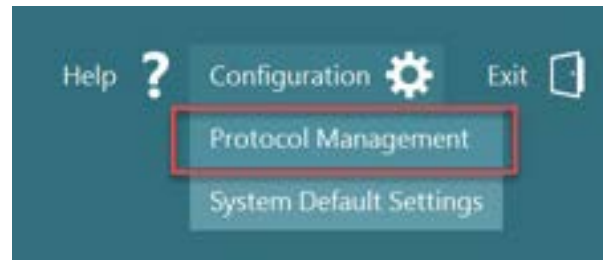

3.4.1 VisualEyes™製品搭載の標準プロトコル

VisualEyes™製品の構成部品を登録してライセンスを適用すると、VisualEyes™ソフトウェアは追加されたライセンスに応じて1つ以上のプロトコルを自動的に生成します。自動生成されたプロトコルの概要は、Table 1.4-1に表示されます。

VisualEyes™ 505 のプロトコルに含まれる頭位変換眼振検査 (Dix Hallpike) および頭振り眼振検査は、ビデオフレンツェル検査に基づいています。つまり、VisualEyes™ 505 のプロトコルで使用可能な頭位変換眼振検査 (Dix Hallpike) は、VisualEyes™ 515/525 のプロトコルで使用可能な頭位変換眼振検査—詳細 (Advanced Dix Hallpike) とは異なります。なお、これには視線追跡が含まれており、検査は座位と仰臥位で異なるセクションに分割できます。

表 3.4-1 : VisualEyes™製品搭載の標準プロトコル

VisualEyes™ 505	VisualEyes™ 515	VisualEyes™ 525	VORTEQ™ Assessments	VORTEQ™ Diagnostics	VisualEyes™ EyeSeeCam
<ul style="list-style-type: none"> 頭位変換眼振検査 (Dix Hallpike) 左* 頭位変換眼振検査 (Dix Hallpike) 右* 頭振り眼振検査* 自発眼振検査 	<ul style="list-style-type: none"> 自発眼振検査 頭位変換眼振検査 (Dix Hallpike) 頭位眼振検査 カロリック検査 Step Velocity** 正弦波方式回転 (SHA) ** VOR 抑制 (VOR Suppression) ** Visual VOR** 	<ul style="list-style-type: none"> 自発眼振検査 注視眼振検査 追跡眼球運動検査 (ETT) 急速眼球運動検査 (ランダムサッケード) 視運動性眼振検査 (OKN) 頭位変換眼振検査 (Dix Hallpike) 頭位眼振検査 カロリック検査 Step Velocity** 正弦波方式回転 (SHA) ** VOR 抑制 (VOR Suppression) ** Visual VOR** 	<ul style="list-style-type: none"> Dynamic Visual Acuity (DVA) Lateral Head Roll (LHR) 頭位変換眼振検査—詳細 (Advanced Dix Hallpike) GST (注視固定化検査) 	<ul style="list-style-type: none"> VORTEQ™ vHIT VORTEQ™ AHR 	<ul style="list-style-type: none"> 自発眼振検査 EyeSeeCam vHIT



VisualEyes™ 505	VisualEyes™ 515	VisualEyes™ 525	VORTEQ™ Assessments	VORTEQ™ Diagnostics	VisualEyes™ EyeSeeCam
		<ul style="list-style-type: none">自覚的視性垂直位 (SVV) **Saccadometry眼球反対回旋 (OCR)			

* カスタマイズしたビデオフレンツェル検査


** 関連する回転椅子を追加した場合にのみ表示



3.4.2 カスタマイズしたプロトコル

プロトコルは、任意の設定にカスタマイズできます。

「プロトコル管理」メニューの「プロトコルの新規作成」をクリックして、新しいプロトコルを生成できます。

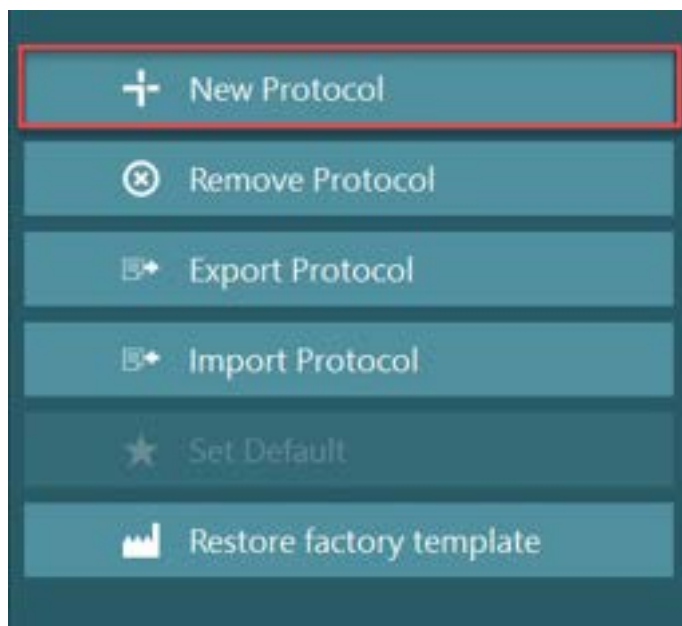

「プロトコルの新規作成」をクリックして、別画面の「はい」をクリックして現在選択しているプロトコルのコピーを作成する、または「いいえ」をクリックして新しい空のプロトコルを作成することができます。



検査項目リストの下にあるボタンで、検査を追加または削除することで、プロトコル実行順序を任意にカスタマイズできます。



リスト内の検査項目をクリックして長押ししたまま、その検査項目を目的の位置にドラッグして、検査の順序を変更することもできます。



検査を選択した状態で「検査の編集」をクリックすると、検査固有の設定が表示されます。

検査固有の設定は選択した検査によって異なり、実施するさまざまな下位検査の選択、検査時間、ターゲット設定、結果に表示されるグラフと値の設定が含まれます。各検査の設定の詳細については、[詳細説明書（英語版）](#)を参照してください。





3.5 被検者の準備



検査を開始する前に、検査者と被検者は以下の点に注意する必要があります。

全般：

1. ゴーグルが消毒されていることを確認します。サイドマウント式ゴーグルに使用する使い捨てのゴーグル用パッドは単回使用で、二次感染を避けるために、被検者ごとに交換する必要があります。第 4.1 章の指示に従って、製品を清掃・消毒する必要があります。**How to clean the VisualEyes™ system**
2. 検査前に被検者の臨床状態および病歴を考慮し、第 1.3 章に記載されている禁忌事項に従ってコンプライアンスを確保することが重要です。**Contraindications**
3. 被検者は、検査を開始する前にアイメイクを落とす必要があります。コスメティックタトゥーやアートメイクは視線追跡を妨げる可能性があるため、被検者は検査前に検査施設に知らせる必要があります。
4. 被検者は検査中に矯正眼鏡は使用できませんが、視力改善のために矯正コンタクトレンズを装着できます。
5. 検査を開始する前に、全般的な注意事項や副作用といった検査に関するあらゆる関連情報と、被検者や保護者が検査で期待できることを伝えておくことが非常に重要です。灌流刺激や頭位眼振検査（例：カロリック検査、回転刺激検査）については、特に注意が必要です。
6. ゴーグル装着中は、視界を確保するために遮眼カバーを外してください。
7. ゴーグルを被検者の顔に装着し、ストラップがぴったりフィットするように調整します。視覚遮断検査の場合、ゴーグルに遮眼カバーを再び取り付けます。光が漏れていないことを被検者に確認します。それでも光が見える場合は、必要に応じてゴーグルの位置やストラップの締め具合を調整してください。
8. ヘッドバンドストラップは、被検者ごとに最適にフィットしているかを確認する必要があります。ヘッドバンドストラップが固定されたままにならない場合は、交換する必要があります。交換用のヘッドバンドストラップは、製造元から入手できます。
9. 視覚遮断検査では、検査室を暗くすることを推奨します。
10. 被検者に適正な刺激動作のみ使用してください。

回転椅子に関する注意事項：

1. 検査者は、すべての緊急停止機能と安全機能を把握しておく必要があります。詳細については、第 1.6 章を参照してください。
2. 被検者が操作できる緊急停止機能について、確実に知らせてください。被検者は、検査に耐えられない場合、検査を中止することができます。
3. 乗り物酔いの病歴のある被検者には、検査項目に回転刺激検査が含まれている場合、通知する必要があります。また、検査中は被検者をさらに注意して観察する必要があります。被検者が不快感を感じた場合、検査者は、VisualEyes ソフトウェアの検査画面、または緊急停止ボタンを使用して回転椅子を停止し、検査を停止する必要があります。
4. 回転椅子を使用した検査を開始する前に、意図しない回転を避けるために回転椅子が所定の位置にロックされていることを確認してください。
5. 検査者は、回転椅子がリクライニングまたは回転中に妨害するような物が置かれていないことを確認する必要があります。



6. リクライニングした状態で回転椅子を回転させようとする場合、VisualEyes ソフトウェアからの警告に注意する必要があります。ただし、Orion Reclining/System 2000 Reclining の安全機能では、回転椅子をリクライニング位置で回転させることはできません。
7. Orion Auto-Traversal/Comprehensive を使用した検査を開始する前に、安全対策が講じられていることを確認するための一連の安全性の確認 (Figure 3.5-1) が VisualEyes™ソフトウェアに表示されます。検査を開始する前に、安全性の確認リストの各項目にチェックを入れる必要があります。

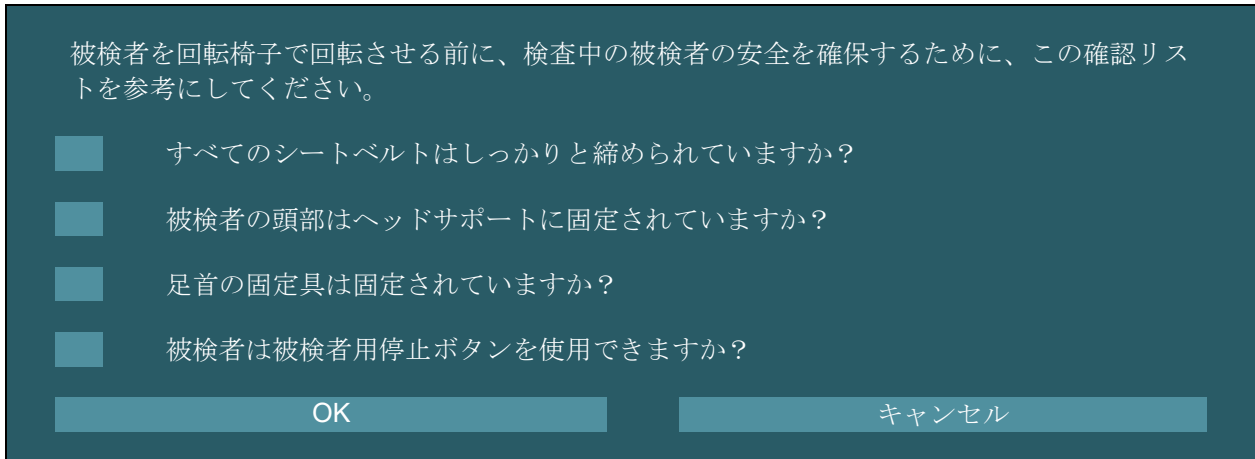


図 3.5-1 : Orion Auto-Traversal/Comprehensive 安全性の確認リスト

3.5.1 リクライニング式回転椅子への被検者の配置

回転椅子を検査に使用する場合、被検者は以下のように適切に着座する必要があります。

Orion Reclining : 回転椅子の作動を制御する電子ロック機構 (ELM) スイッチを使用して、回転椅子を回転させることができます (Figure 3.5-2 参照)。ELM スイッチを長押しすると ELM が解除され、被検者が着座しやすい位置まで回転椅子が回転します。片方のひじ掛けを持ち上げます。被検者を座らせるために横から誘導します (Figure 3.5-2 参照)。被検者に回転椅子周囲で脚を振ってもらうことで正面を向けさせ、脚をフットレストに乗せた状態で座らせます。被検者にシートベルトを締めてもらいます。ひじ掛けを下げます。**注記** : 必要に応じて、回転椅子のフレーム側面のリクライニングレバーで、座り心地をよくするために被検者が背もたれを部分的に倒すことができます。ただし、これは検査要件を考慮して検査者が決定します。フットレストは着座するときの踏み台としては使用しないでください。ELM スイッチを解除し、検査を開始するときに適切な位置にロックされるまで回転椅子を、手動またはソフトウェアを介して回転させます。VisualEyes ソフトウェアは、Orion の追加安全機能の検査を開始すると、自動的に回転椅子をロックします。

System 2000 Reclining : 被検者の座り方は Orion Reclining と同様ですが、System 2000 Reclining は自由に回転することができ、意図しない回転を防ぐためにフットブレーキを外して手動でロックできます。また。



図 3.5-2 Orion Reclining への被検者の着座手順を示す連続画像 (左から右へ)



3.5.2 Auto- Traverse/Comprehensive への被検者の配置

ブースのドアを開けます。ヘッドサポートのネジを外し、上に動かして邪魔にならないようにします。フットレストを避けて、回転椅子に身体を押し込むように被検者を座らせます (Figure 3.5-3 参照)。注記 フットレストは着座するときの踏み台としては使用しないでください。被検者が背もたれにもしっかりもたれた状態で、座位を調整します。必要に応じて、Orion のアームレスト下にある調整レバー、または System 2000 のアームレスト下にある調整つまみでアームレストを広げることができます。腰と肩のベルトを締めます。被検者が快適になるようにヘッドサポートを調整します。足首の固定具で被検者の足を固定します。



図 3.5-3 Orion/System 2000 Auto Traverse/Comprehensive への被検者の着座手順を示す連続画像 (左から右へ)

3.5.2.1 Auto- Traverse/Comprehensive への小児被検者の配置

ブースのドアを開けます。ヘッドサポートを緩めて取り外します。チャイルドシートの子供ベルトスロットにフックをスライドさせて、チャイルドシートの両側をフックで固定できるようにします。フックを回転椅子のフレームのアイボルトに取り付けて、チャイルドシートとフォームを回転椅子の座面に固定します。回転椅子の腰と肩のベルトは外したままにしておくことができます。被検児を着座させ、チャイルドシート用の装具で固定します (Figure 3.5-4 参照)。



図 3.5-4 A/C へのチャイルドシートの固定手順を示す連続画像 (左から右へ)

3.5.3 ENG—電極配置と電極抵抗値の確認

ENG など電極を使用する検査を実施する場合、適切な電極モニタージュを使用する必要があります。検査を実施するには、Orion/System 2000 AT/C チェアの一部として DataLink または ENG のオプションがなければなりません。

電極モニタージュには、両眼誘導と単眼誘導の 2 種類があります。一般的に、両眼誘導モニタージュが ENG では標準で使用されています。被検者が非共同性眼球運動を示す場合には、単眼誘導モニタージュを使用します。上記方法に基づき、VisualEyes™ソフトウェアには以下に示すように 4 種類の電極モニタージュの設定があります (Figure 3.5-5)。



図 3.5-5 ENG の電極モンタージュ

被検者には、選択した電極モンタージュの種類に応じて電極を配置する必要があります。検査者は、VisualEyes™ソフトウェアに表示される画像と照らし合わせて、電極の配置を確認できます。既定の電極モンタージュは、「設定」>「システムの初期設定」>「ENG」から設定できます。電極を配置する前に、被検者の皮膚をアルコールを含まない皮膚前処理パッドで擦り、乾燥させる必要があります。検査を開始する前に、「電極抵抗値確認」を実施して、適切な電極信号の受信を確認することが重要です。第 3.5.3 章または詳細説明書（英語版）を参照してください。許容範囲の電極抵抗値が得られたら、検査項目個別のキャリブレーションに進み、それから実際の検査を実施できます。

3.5.4 被検者へのゴーグル装着

被検者がゴーグルを使用して検査を受ける場合、ゴーグルを適切に装着する必要があります。ゴーグルを被検者の顔に装着するときは、ゴーグルカバーが外されていることを確認してください。ぴったりとフィットするようにストラップを調整します。視覚遮断検査の場合、ゴーグルに遮眼カバーを取り付けます。光が漏れていないことを被検者に確認します。それでも光が見える場合は、必要に応じてゴーグルの位置やストラップの締め具合を調整してください。

3.6 眼部の映像調整

被検者にゴーグルを装着した後、検査を実施する前に、カメラ映像が被検者の瞳孔を適切に追跡するように正しく設定されていることを確認することが重要です。

メイン画面の「検査開始」をクリックして、検査画面に移動します。眼部のカメラ映像が検査画面に表示されます。

3.6.1 眼部映像の中央揃え

被検者が正面を見ている状態で、瞳孔が映像画面の中央に配置するように調整します。

注記：映像が中央に最適に配置されていない場合、視線追跡装置は特定の位置での眼球運動を記録できない可能性があります。



サイドマウント式ゴーグル :

サイドマウント式ゴーグルを使用する場合は、第 2.6.1.1 章に記載のとおり、カメラ側面にあるミラー調整と調整つまみで垂直方向と水平方向の調整を行います。

トップマウント式ゴーグル :

トップマウント式ゴーグルを使用する場合は、第 3.6.3 章に記載のとおり、眼部ツールバーの「眼球の中央揃え」ボタンを使用して、VisualEyes™ソフトウェアから映像を中央に配置できます。

フロントマウント式ゴーグル :

フロントマウント式ゴーグルを使用する場合は、眼部ツールバーの「眼球の中央揃え」ボタンを使用して、ゴーグルビューポートでカメラを手動で調整します。カメラの「UP」ステッカーが上を向いていることを確認してください。

EyeSeeCam ゴーグル :

EyeSeeCam ゴーグルを使用する場合は、眼球が最終的に映像の中央に配置されるように、カメラを玉継手で回転させて位置を調整します。カメラは、yaw、pitch、roll の 3 方向に回転させることができます。カメラを一度に回転できるのは、この 3 方向のうちの 1 方向だけです。ある方向、例えば水平方向に眼球の中心を合わせた後、次の回転方向、例えば垂直方向を選択します。

想定される眼球の中央揃えの並び順を以下に示します。

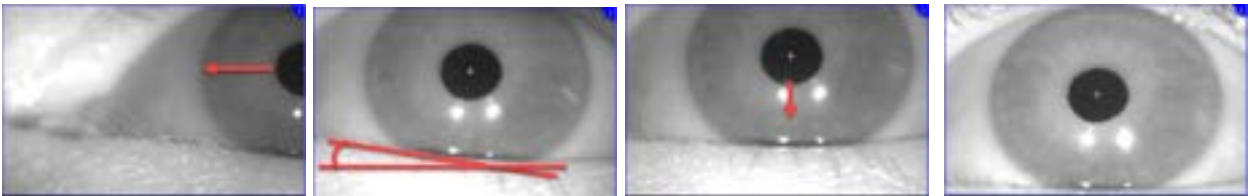


図 3.6-1 : EyeSeeCam ゴーグルのカメラ映像で瞳孔を中央に配置するために 3 回カメラを回転させた連続画像

3.6.2 カメラ映像のピント調整

瞳孔検出を最適化するには、カメラのピントを合わせる必要があります。第 2.6.1 章のゴーグルの説明、または Figure 3.5-6 で示したように、調整つまみやカメラレンズを回して調整します。検査画面の映像を確認しながら、調整つまみを時計回りまたは反時計回りに回します。眼の周囲がぼやけていても、瞳孔の輪郭と虹彩パターンが明瞭になったら、そこで調整を終えます。カメラのピントが最適な場合、赤外線反射は最小になります。両眼ゴーグルでは、各カメラを個別に調整する必要があります。

注記 : カメラ映像のピントが最適ではない場合、視線追跡装置が眼球運動を適切に記録できず、精度の低い結果となる可能性があります。



図 3.6-2 : VNG 用/WHIT 用ゴーグルのピント調整



3.6.3 眼部ツールバー

検査画面で眼の映像の上にタッチするか、マウスを置くと**眼部ツールバー**が表示されます。眼部ツールバーにはボタンが5個あります。

1. **右眼への切替え**：右眼の映像と視線追跡を有効/無効にします。
2. **眼の中央揃え**：眼部の映像を中央に配置します。トップマウント式/フロントマウント式ゴーグルでのみ使用できます。
3. **視線追跡の選択**：使用する視線追跡装置を選択できます。
4. **閾値スライダーの切替え**：表示されるスクロールバーで映像のコントラストを調整できます。被検者が中央や上下左右を見たときに、視線追跡の十字線が瞳孔の中央に表示されるようにコントラストを調整する必要があります。コントラストは既定で自動的に調整されます。また、各スライダーの下にある **A** アイコンをクリックして、自動閾値調整にリセットできます。
5. **左眼への切替え**：左眼の映像と視線追跡を有効/無効にします。



図 3.6-3：眼部ツールバー

3.7 キャリブレーション

視線追跡 (eye tracking) を含むすべての検査では、眼球の位置と眼振速度を正確に測定するためにキャリブレーションの実施を推奨します。キャリブレーションは、眼球運動が既知の位置または速度の特定の刺激 (例：サッケード、ETT、注視眼振) と比較される検査で特に重要です。

注記：ゴーグルやカメラを変更または移動するたびに、キャリブレーションを実施する必要があります。

VisualEyes™ 505/515/525 の場合、キャリブレーションを実施するには、刺激提示用モニターが必要です。。Orion Auto-Traverse/Comprehensive を使用する場合、キャリブレーションには内蔵レーザーが使用されます。EyeSeeCam の場合、常にゴーグルに取り付けられたレーザーを使用することを推奨します。

注記：検査にリクライニング式回転椅子を使用する場合、以下の点を確認してください。

- 回転椅子がモニター画面または投影画像の方を向いていること
- 被検者が刺激の正面中央にいること
- キャリブレーションを開始する前に、意図しない回転を避けるために回転椅子がロックされていること

VisualEyes™ 505/515 は、検査に視覚刺激を使用しません。そのため、校正の実施に必要なモニター画面がない場合があります。この場合、特定の検査パラメーターで「キャリブレーションをスキップ」を有効にすることで、検査のキャリブレーションのステップを無効にできます。検査パラメーターは、**プロトコル管理**に移動し、プロトコルで検査を選択して「検査の編集」をクリックすると確認できます。キャリブレーションをスキップした場合、既定のキャリブレーション値を使用します。



左パネルの「キャリブレーション」ボタンをクリックすると、キャリブレーション画面を開くことができます。「キャリブレーション」ボタンが白色で強調表示されている場合、フットスイッチまたはリモートコントローラーの右ボタンをクリックして、キャリブレーション画面に移動することができます。


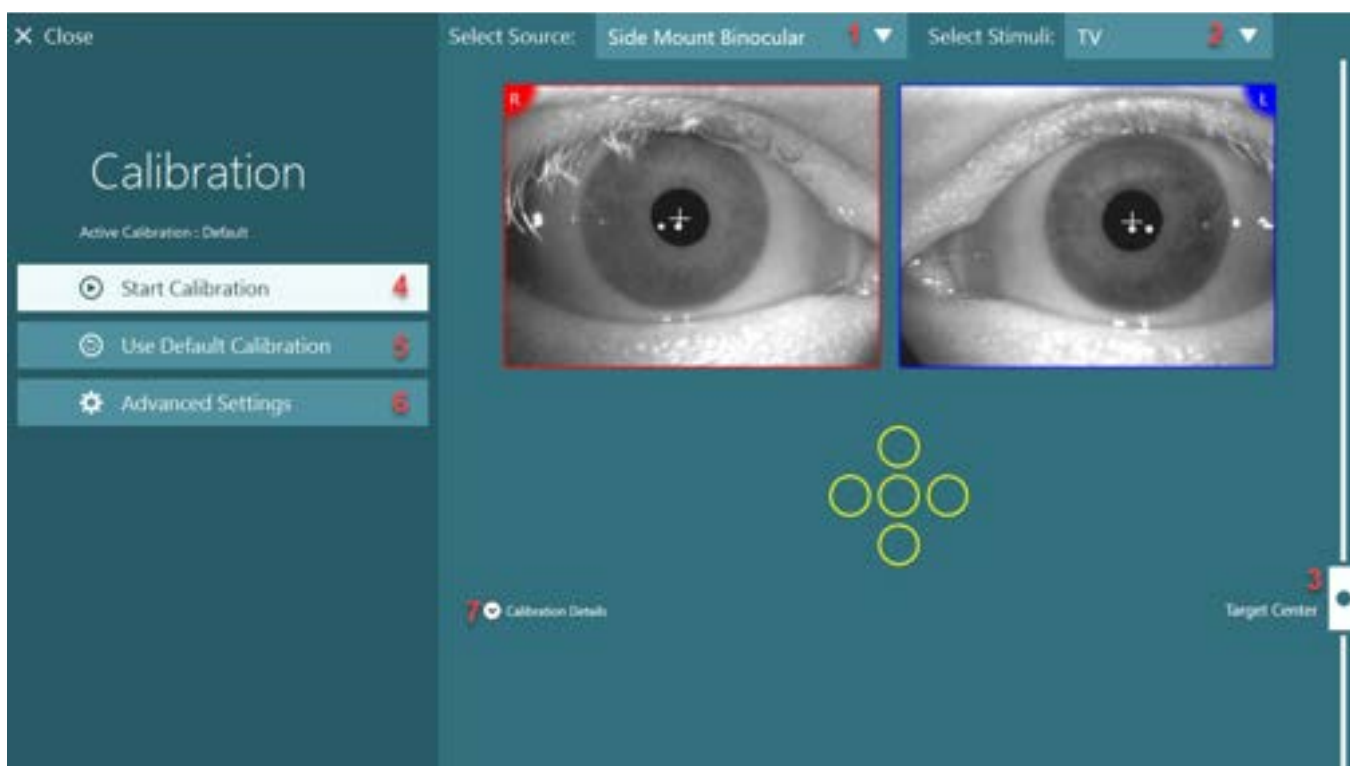


図 3.7-1：キャリブレーション画面

キャリブレーション画面では、ソースと刺激が適切に選択されていることを確認する必要があります。まず、プルダウンメニューでソースを選択し（Figure 3.7-1-1）、その後プルダウンメニューで刺激を選択します（Figure 3.7-1-2）。

ターゲットの中央配置スライダーで、被検者のキャリブレーション用の刺激を中央に配置します（Figure 3.7-1-3）。垂直検査では継続して画面の中央にターゲットが表示されますが、水平検査ではターゲットの中央配置スライダーで指定した中央位置にターゲットが表示されます。**Auto-Traverse/Comprehensive** を使用する場合、回転椅子の背面にあるレーザーを手動で調整することで、ターゲットを調整できます。

被検者との距離が「システムの初期設定」で設定した被検者との距離と異なる場合、詳細設定に移動して、特定のキャリブレーション用に迅速に調整することができます（Figure 3.7-1-6）。例えば、被検者が視覚障害者で既定のターゲットを見ることができない場合、ターゲットのサイズを調整することができます。

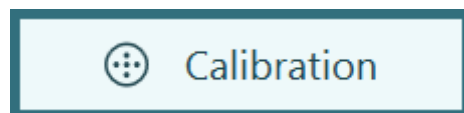

「キャリブレーションの開始」をクリックすると、キャリブレーションを開始できます (Figure 3.7-1-4)。キャリブレーションの手順については、第 3.7.1 章～第 3.7.5 章の指示を参照してください。

キャリブレーションを完了できない場合は、「既定のキャリブレーションの使用」をクリックして既定のキャリブレーションを使用してください (Figure 3.7-1-5)。これによって、おおよそのキャリブレーション値のみを提供する既定のキャリブレーション設定を使用するように設定されます。眼球運動検査や眼振速度の結果は、慎重に解釈する必要があることに注意してください。

「キャリブレーションの詳細」をクリックすると、キャリブレーションの詳細情報をグラフまたは表形式で表示できます (Figure 3.7-1-7)。

3.7.1 眼位キャリブレーション (標準)

眼位キャリブレーションは 5 点あり、被検者は頭部を刺激用画面に向けたまま、表示されるターゲット 5 点をそれぞれ見るように指示されます。キャリブレーション画面には、被検者が見ている現在のターゲットポイントを表す大きな黄色の点が表示されます。VisualEyes™ソフトウェアは既定で数秒後に固視点を自動的に取り込み、次のターゲットに移動します。一部の被検者では、自動固視検出が正常に実行されない場合があります。このような場合、キャリブレーション済みの眼のビデオ映像を確認し、キャリブレーション点が固定されている場合、「ポイントの適用」ボタンをクリックして手動で値を取り込み、次のターゲットに移動します。ターゲットが取り込まれると、特定のターゲット位置のキャリブレーション画面に黄色のチェックマークが表示されます。

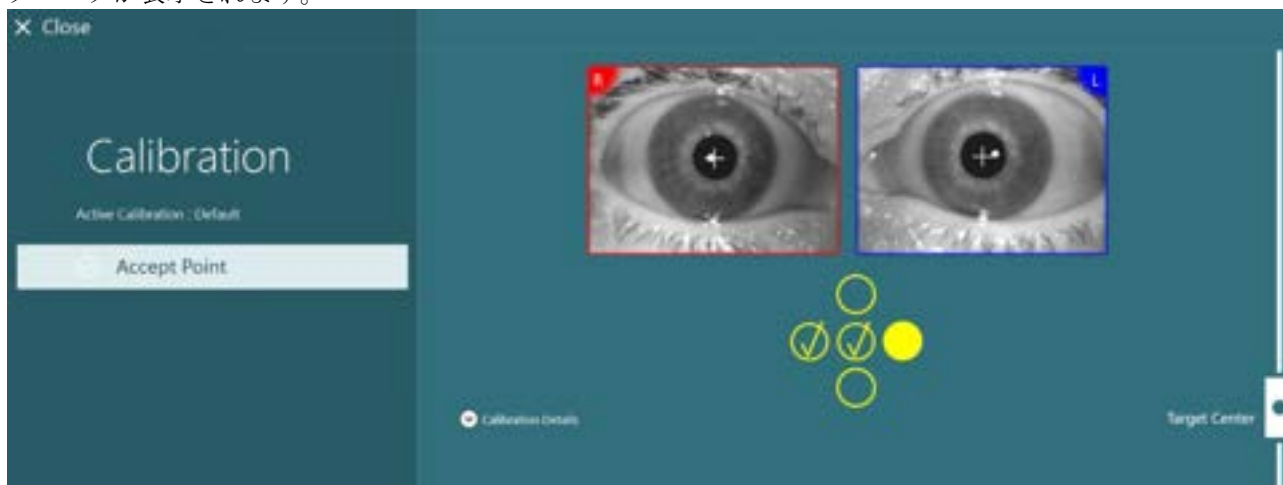


図 3.7-2 : 眼位キャリブレーションのキャリブレーション画面ターゲット位置が取り込まれると、黄色のチェックマークが表示されます。

キャリブレーション完了後、キャリブレーション値が許容範囲内であれば、チェックマークが緑色に変わります (Figure 3.7-3)。キャリブレーション値に問題があり、チェックマークが赤色に変わった場合は、該当する点のキャリブレーションを再度実行してください。

すべてのターゲットポイントが緑色になったら、「適用して閉じる」をクリックします。これでキャリブレーションが終了し、検査を実施する準備が整いました。

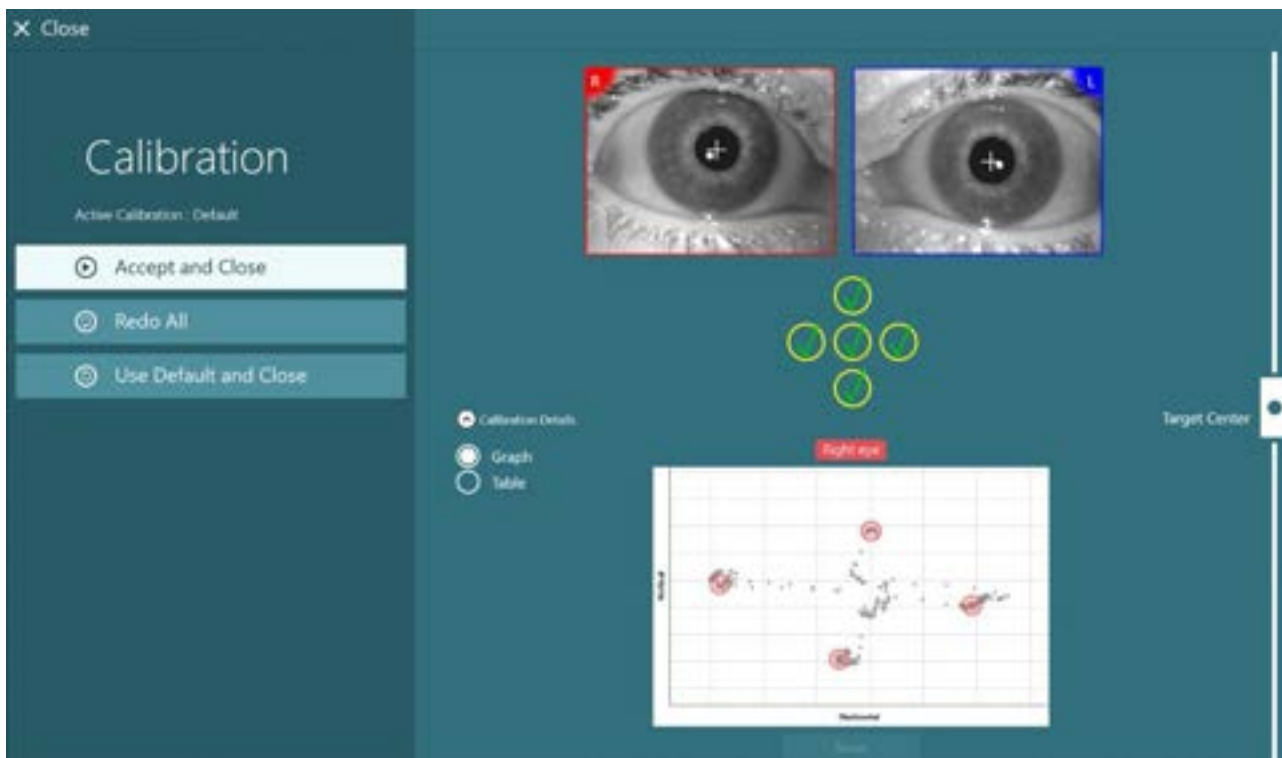


図 3.7-3 : 許容範囲内のキャリブレーション値で完了した眼位キャリブレーション

3.7.2 回旋キャリブレーション

回旋追跡を含む検査（例：頭位変換眼振検査－詳細（Advanced Dix Hallpike）、眼球反対回旋（OCR）、LHR（Lateral Head Roll））は、使用前に回旋キャリブレーションを実施する必要があります。これらの検査の場合、「回旋」ボタンがキャリブレーション画面に表示されます（Figure 3.7-4）。ボタンをクリックすると、回旋用キャリブレーション画面が開きます。

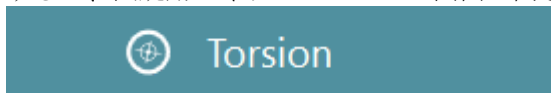


図 3.7-4 : キャリブレーション用「回旋」ボタン

被検者に正面を向いてもらい、「自動検出」ボタンをクリックします。VisualEyes™ソフトウェアは、回転を追跡するためにコントラストが良好な虹彩セグメントを選択します。追跡範囲は、眼の下のスライダーを使用して調整できます。

暗闇で瞳孔が開いた状態で回旋追跡装置を使用する場合、暗闇で瞳孔を開いた状態で回旋キャリブレーションを実施することが非常に重要です。可能であれば、被検者に少し上を向いてもらえると、虹彩が確認しやすくなります。

追跡範囲を示す白色の円が絶対に瞳孔を埋めないようにしてください。不安定な回旋追跡につながります（Figure 3.7-5）。

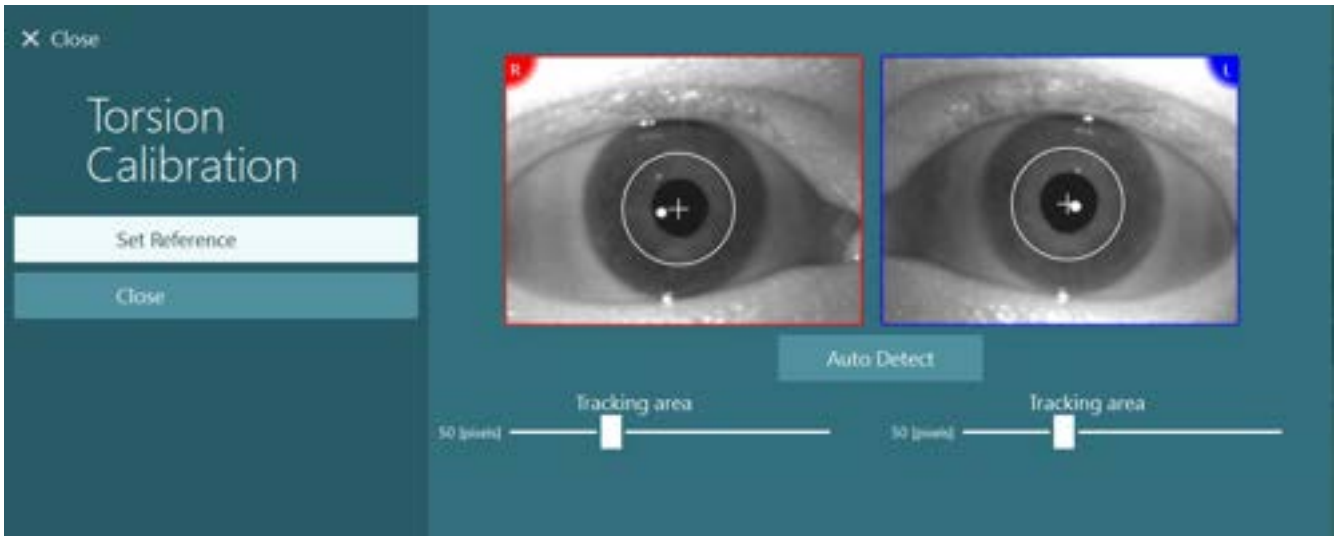


図 3.7-5 : 回旋用キャリブレーション画面で追跡範囲を調整します。

調整が完了したら、「参照設定」ボタンをクリックします。十字線を含む円が表示されます。回旋角が被検者の眼球運動に反応していることを確認します。そうでない場合は追跡範囲を調整し、「参照設定」をクリックして更新します。キャリブレーション設定に戻るには、「閉じる」ボタンをクリックします (Figure 3.7-6)。

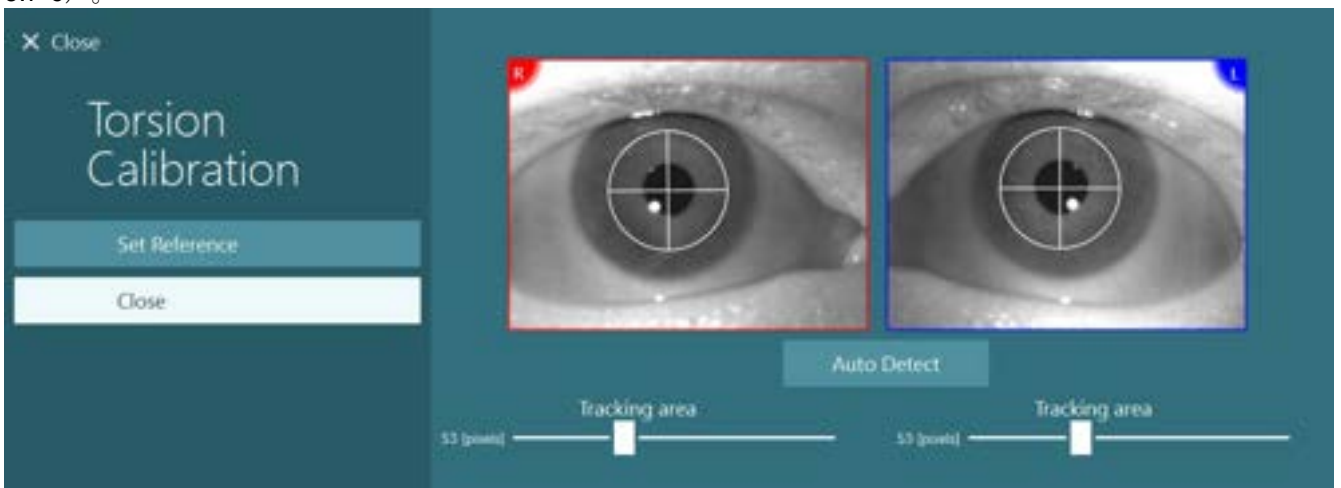


図 3.7-6 : 回旋用キャリブレーション画面で参照範囲が選択された回旋用十字線

3.7.3 EyeSeeCam 眼位キャリブレーション

EyeSeeCam ゴーグルの場合、まず眼位キャリブレーションを実施する必要があります。キャリブレーション画面を開き、入力項目として EyeSeeCam、刺激として EyeSeeCam レーザーを選択し、「キャリブレーションの開始」をクリックします。眼位キャリブレーションは、第 3.7.1 章の説明と同じ手順に従いますが、EyeSeeCam レーザーは常に 5 個の静止点を提示するため、毎回 1 点のみに焦点を合わせるように被検者に指示する必要があります。キャリブレーション画面の大きな黄色い点は、被検者に焦点を合わせるように指示する必要があるターゲットを示しています。



注記 : EyeSeeCam ゴーグルの場合、自動固視検出を使用できないため、左パネルの「ポイントの適用」をクリックして、点を手動で取り込む必要があります。



眼位キャリブレーションが完了した後は、頭位キャリブレーションを実施する必要があります。入力項目として EyeSeeCam を選択している場合は、常に「頭位キャリブレーション」ボタンが表示されず (Figure 3.7-7)。ボタンをクリックすると、頭位キャリブレーション画面が開きます。

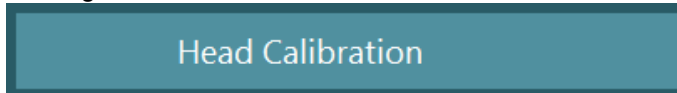


図 3.7-7 : EyeSeeCam キャリブレーションの「頭位キャリブレーション」ボタン

被検者に 1 点を固視してもらい、「開始」をクリックして頭位キャリブレーションを開始します。被検者の頭部を水平方向にゆっくりと振ります。頭部速度ガイドは、頭部の動作の正確な速度を示します。バーが緑色の場合、正しい速度が達成され、頭部の動作を追跡できるようになります。数秒後、垂直位のキャリブレーションへ移行します。今度は、被検者の頭位をゆっくりと垂直方向に動かします。

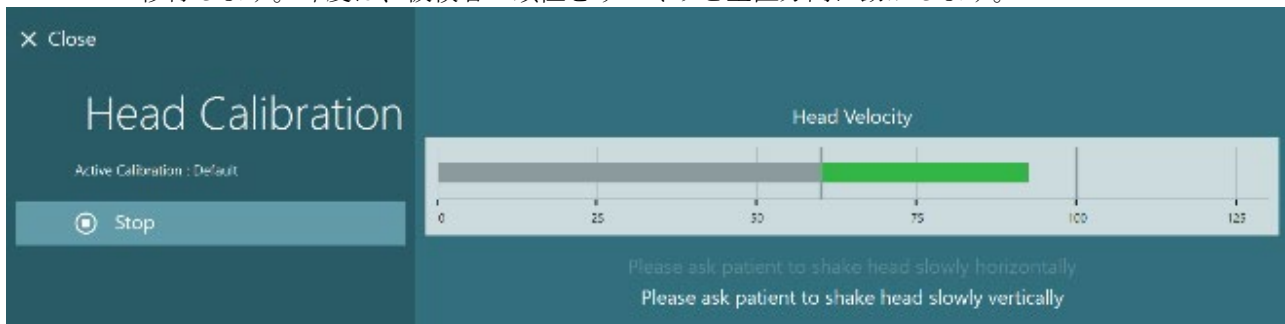


図 3.7-8 : EyeSeeCam 頭位キャリブレーション

両方の平面が完了すると、頭位キャリブレーションの結果が表示されます。グラフは、Figure 3.7-9 に示されているように、縦線と横線で十字を表します。その後、「適用して閉じる」で終了するか、キャリブレーションを再度実行することができます。「適用して閉じる」をクリックすると、検査の準備が整います。

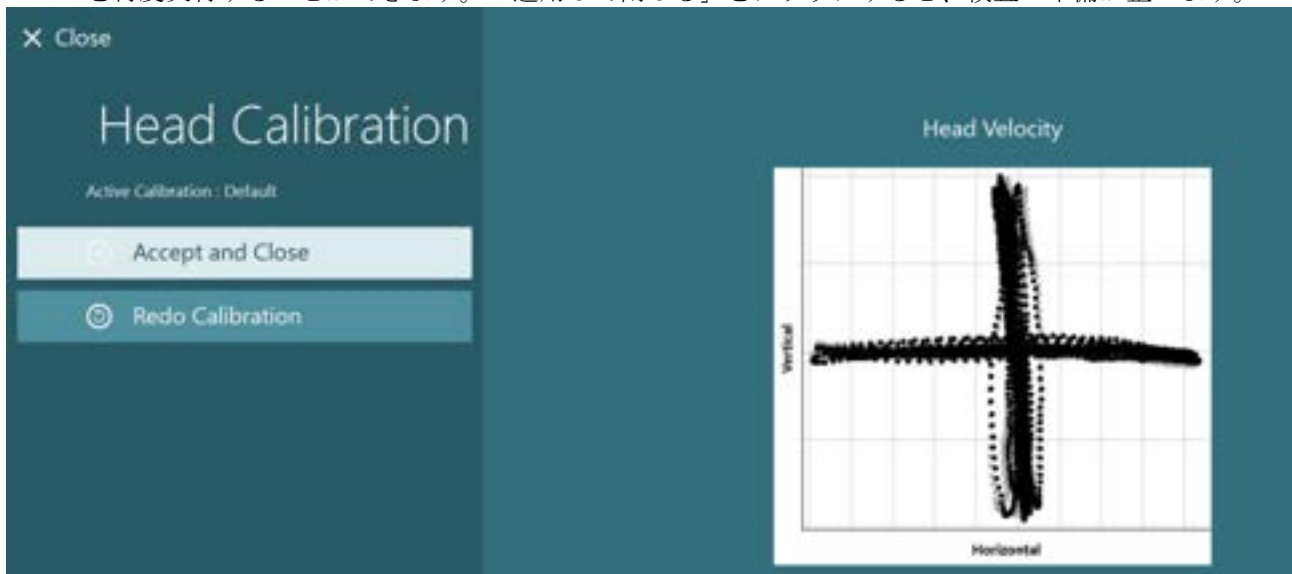


図 3.7-9 : EyeSeeCam 頭位キャリブレーションの結果



3.7.4 ENG キャリブレーションと電極抵抗値の確認

入力項目として、DataLink または回転椅子用 ENG を選択すると、「電極抵抗値確認」ボタンと「正中トレース」ボタンがキャリブレーション画面の左パネルに表示されます。「電極抵抗値確認」ボタンをクリックすると、電極抵抗値の確認画面が開きます (Figure 3.7-10)。電極抵抗値の確認は、「システムの初期設定」>「ENG」から実施することもできます。



電極抵抗値の確認画面では、プルダウンメニューから対象の電極モジュールを選択できます。画像は被検者に電極を配置する方法を説明しています。

「開始」ボタンをクリックすると、各電極を確認して電極抵抗値が表示されます。電極抵抗値が 10kOhm 以下の場合、電極は緑色で「良好」と表示されます。電極抵抗値が 11~15 kOhm の場合、電極は黄色で「中程度」と表示されます。電極抵抗値が 16~20 kOhm の場合、電極は赤色で「不良」と表示されます。明確な ENG 信号がない場合があります。この場合、黒色で「未接続」と表示されます。

電極抵抗値が良好 (緑色) または中程度 (黄色) の場合、「適用して閉じる」ボタンをクリックして、電極抵抗値の確認画面を終了し、次へ進みます。電極抵抗値が不良の場合、検査者は 1 分後に「すべて再実行」ボタンをクリックして検査を再度実行することができます。ただし、それでも悪い状態が続く場合は、電極を取り外し、再度皮膚を擦り、電極を貼付し直すことを推奨します。また、特定の電極をクリックすると、その電極だけの電極抵抗値を再測定できます。

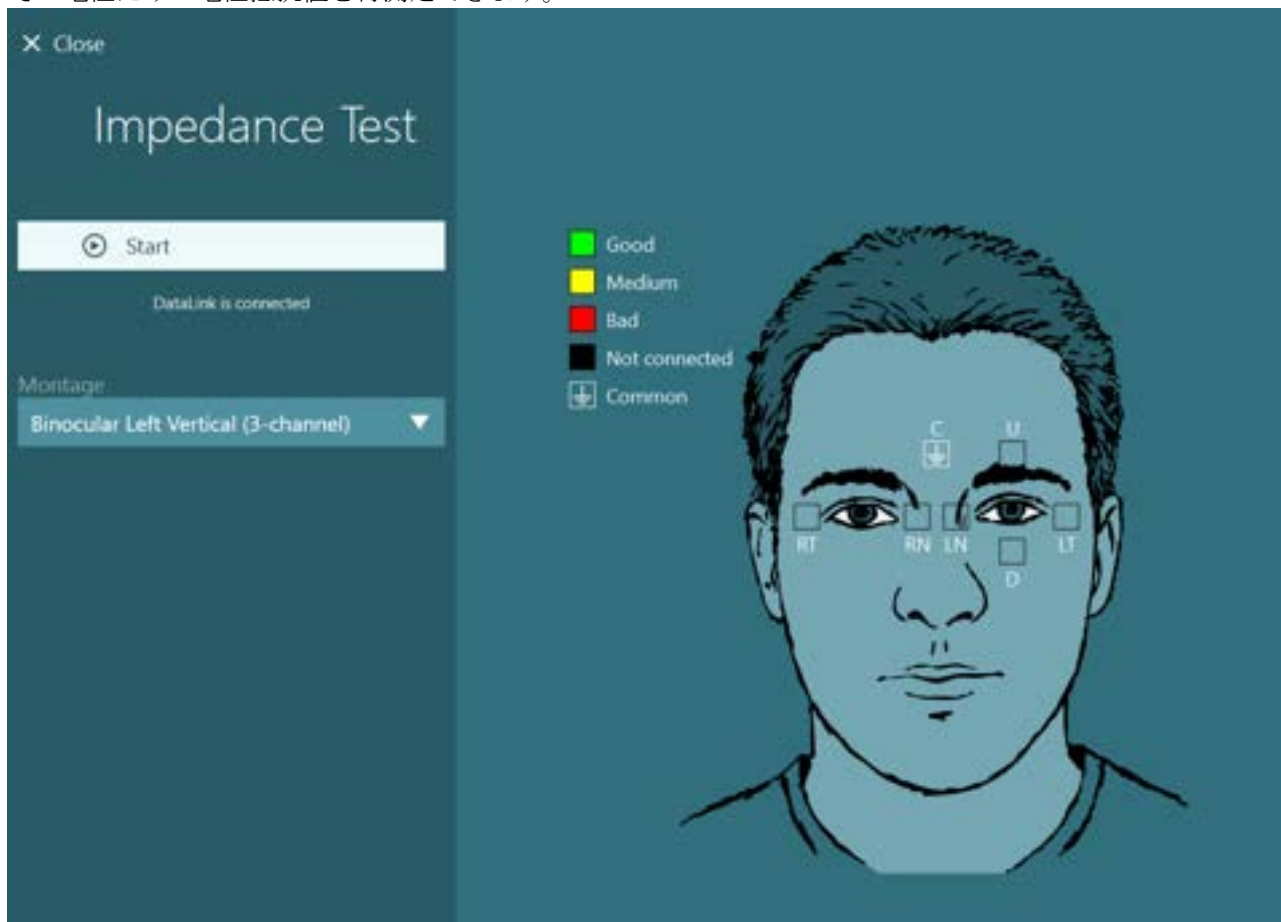


図 3.7-10 : 電極抵抗値の確認画面



電極抵抗値を確認した後、第 3.7.1 章の手順に従って眼位キャリブレーションを実施できます。

水平垂直方向の電極トレースにドリフトが確認される場合、「正中トレース」ボタンでトレースを手動で中央に配置できます。被検者の眼球運動が電極トレースに表示されていない場合、トレースの下でゲイン増幅を調整して、被検者の電極信号を強めることができます (Figure 3.7-11)。

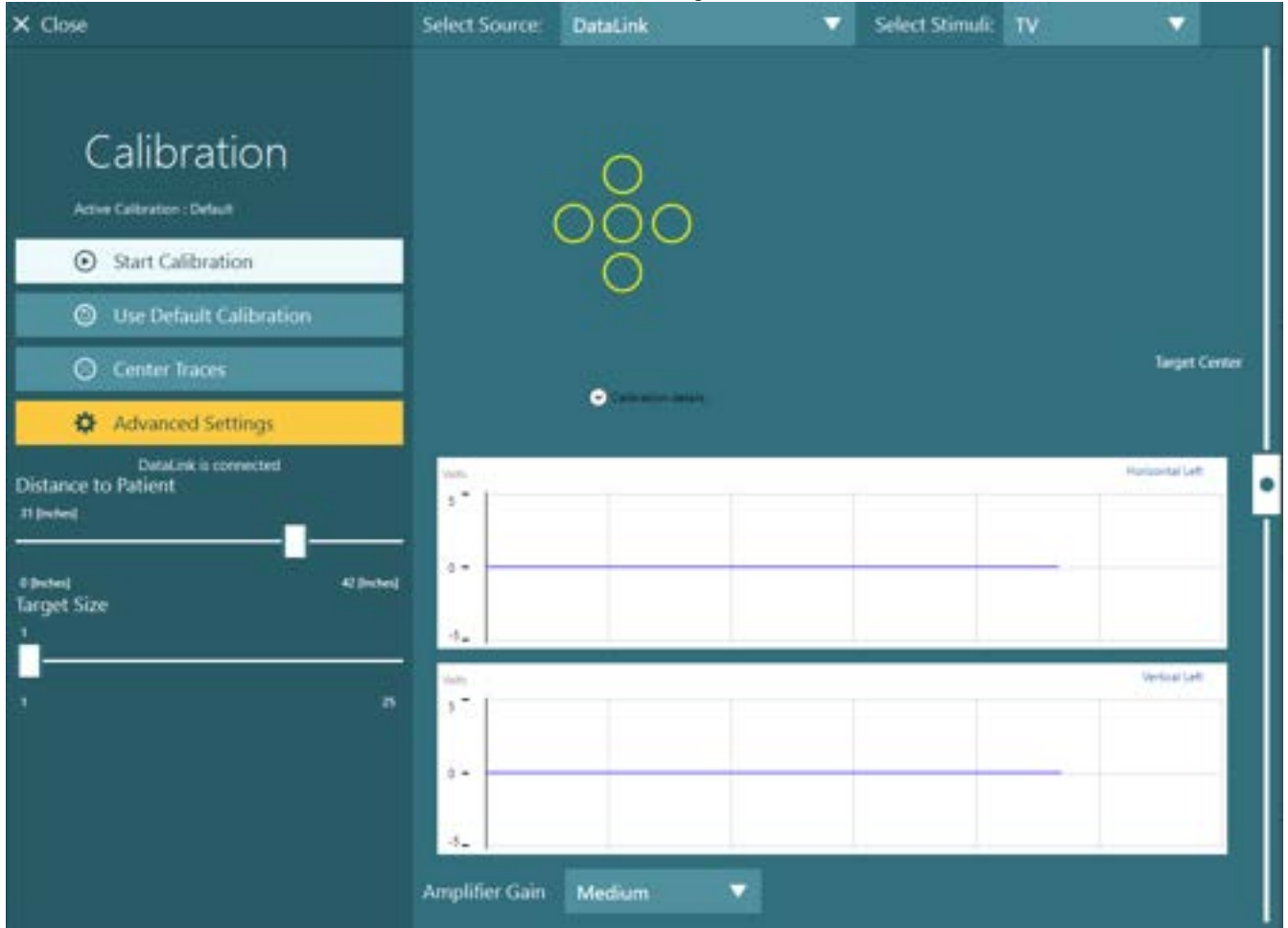


図 3.7-11 : ENG 眼位キャリブレーション



3.8 検査画面


検査画面の設定と被検者の準備が整ったら、検査を実施できます。セッションを開始するには、使用するプロトコルを選択し、メイン画面から「検査開始」をクリックします。





「検査開始」をクリックすると、選択したプロトコルの最初の検査から始まるセッションを開きます。同日の日付で、選択中の被検者に同一のプロトコルで既にセッションが存在する場合、直前のセッションの終了時点から続行します。

検査画面には、カメラ映像、検査時間カウンター、各検査のグラフや操作ボタンが表示されます。

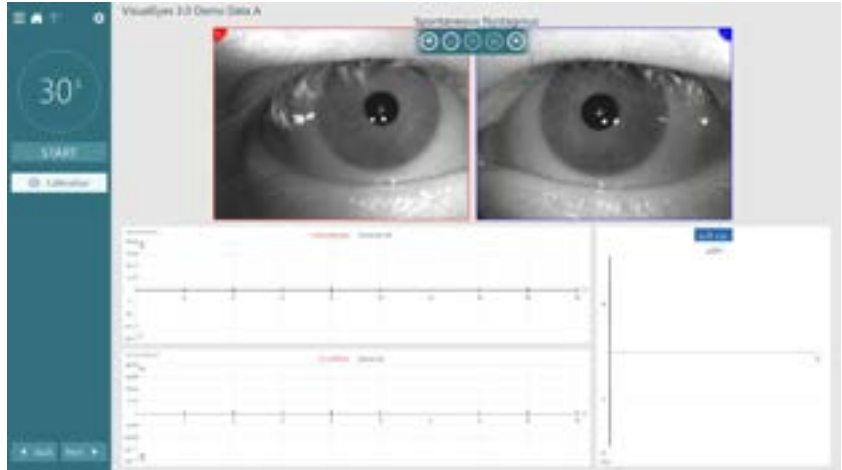

左パネルには、操作ボタンが配置されています。操作ボタンは、検査ごとに異なります。一般的な操作ボタンとして、以下のものがあります。

検査メニュー：セッションツリーを開き、現在のセッションを表示します。



ホームボタン：メイン画面に戻ります。



上矢印：現在の下位検査を終了し、各下位検査画面に移動します。



一時設定：特定の検査の一時設定を開き、検査パラメーターを一時的に変更できます。



戻ると次へ：プロトコルの検査項目リストの前または次の検査/下位検査に移動します。



開始：選択した検査を開始します。





タイマー：選択したカウント方式に基づいて残り/経過時間を表示します。



検査時間延長：カウンターの残り時間に 30 秒を追加します。



3.9 検査の実施

本章では、VisualEyes 製品で提供している検査の実施についてに説明します。詳細については、「*Additional Information (英語版)*」を参照してください。

3.9.1 VisualEyes 505/ 515/525

3.9.1.1 ビデオフレンツェル検査

VisualEyes 505 および VisualEyes 525 ではビデオフレンツェル検査が実施できます。ビデオフレンツェルは分析的な評価をせずに被検者の眼球運動を記録できる基本的な検査です。眼球の記録に時間制限はなく、検査を実施するためのキャリブレーション要件もありません。これは通常、手動解析に使用します。

3.9.1.2 自発眼振検査

自発眼振検査は、すべての VisualEyes 製品で実施できます。視覚遮断検査で、被検者はゴーグルにゴーグルカバーを取り付けた状態で正面を見ます。PC 画面、またはモニター画面で被検者の眼を確認することができます。検査が開始されると、眼球の位置を示すグラフが表示されます。眼振は、急速相の開始時に表示される三角形で示されます。著しい眼振が検出されると、平均緩徐相速度 (a.SPV) が眼位記録の右側の棒グラフに表示されます。検査が終了すると、眼振の緩徐相速度が緑色で色分けされます。

3.9.1.3 眼球運動検査

眼球運動検査には、注視眼振検査、追跡眼球運動検査 (ETT)、ランダムサッケード検査、Saccadometry、視運動性眼振検査 (OKN) が含まれます。これらの検査は、遮眼カバーを外した状態で実施します。そうすることで、被検者はモニター画面上にランダム表示されるターゲットを追跡できます。注視眼振検査では、被検者は中央や左右上下に配置される静止ターゲットを注視します。ランダムサッケード検査では、ターゲットが水平、垂直、または混合のパターンでランダムに移動し、被検者はそのターゲットを追跡します。追跡眼球運動検査 (ETT) では、画面上を正弦波パターンで移動するターゲットを追跡する能力を検査します。ターゲットの速度は、0.1Hz~0.5Hz の範囲で、0.1Hz 刻みで上昇します。視運動性眼振検査 (OKN) では、動く大きな格子模様または縞模様による刺激を与えたときの眼球運動を評価します。すべての眼球運動検査では、グラフィックデータがリアルタイムで表示され、各検査結果の解釈に役立ちます。


3.9.1.3.1 注視眼振検査

注視眼振検査では、被検者が静止したターゲットを注視している間に眼球運動が測定されます。検査では、被検者に異なるターゲットを既定の 10 秒間注視していただきます。検査開始時には、ターゲットが画面の中央に 2 秒間表示されます。その後、検査の設定によって指定された位置にターゲットが表示されます。既定の注視眼振検査では、以下の位置を検査します: 中央、左、右、上、下

「注視眼振検査」の詳細については、VisualEyes の Additional Information (英語版) をご参照ください。

3.9.1.3.1.1 Cervical Gaze

Cervical Gaze 検査は VisualEyes 525 の注視眼振検査プロトコルで利用可能です。この検査は、座った状態で体を 45 度回転させて行います。この検査では、VORTEQ IMU (IMU センサー) を使用して、頭部の 3D モデルが被検者を正しい頭の位置に導き、その位置を保ったまま眼球運動を記録することが推奨されています。

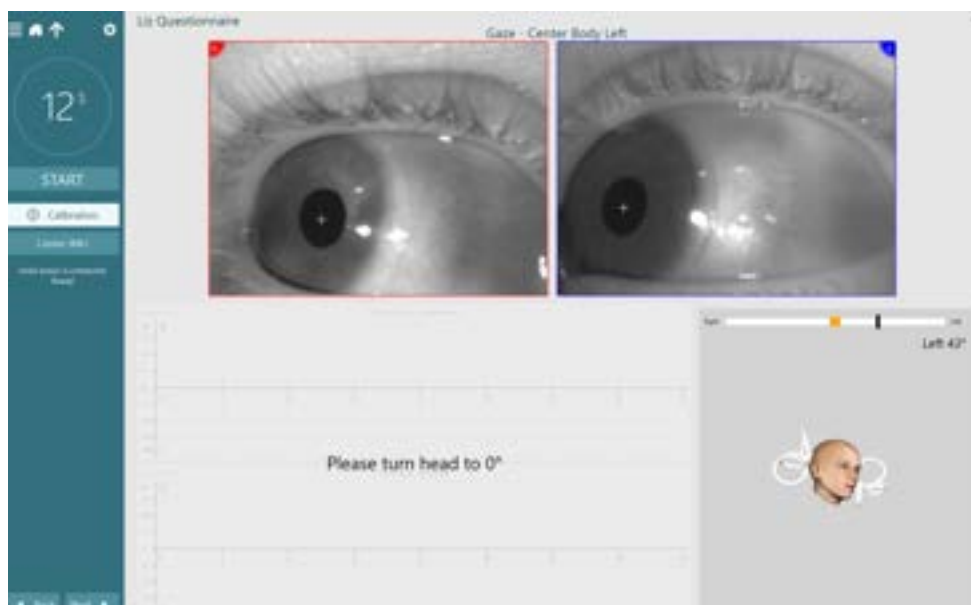

頭部を0度位置にむける

3.9.1.3.2 追跡眼球運動検査 (ETT)


追跡眼球運動検査 (ETT) では、被検者に画面上を行ったり来たりするターゲットを追跡する能力を検査します。ターゲット刺激の速度は、2 サイクルごとに上昇します。

「追跡眼球運動検査」の詳細については、VisualEyes の詳細説明 (英語版) をご参照ください。

3.9.1.3.2.1 SPNT (Smooth Pursuit Neck Torsion)

この検査は、VisualEyes 525 の追跡眼球運動検査プロトコルで利用可能です。

SPNT(Smooth Pursuit Neck Torsion)は、標準の水平追跡眼球運動検査から始まり、その後、首を右または左に45度回転させた状態での2つの検査条件を追加して検査します。この検査では、被検者の体位を一方に45度移動させ、同時に刺激の方向に頭と目を向ける必要があります。検査者は、VORTEQ センサーを利用して被検者を正しい頭位と体位に誘導できます。頸部の中立状態と頸部の伸展状態の間のゲインを比較し、それぞれの検査された周波数で SPNT ゲイン値を求めます。

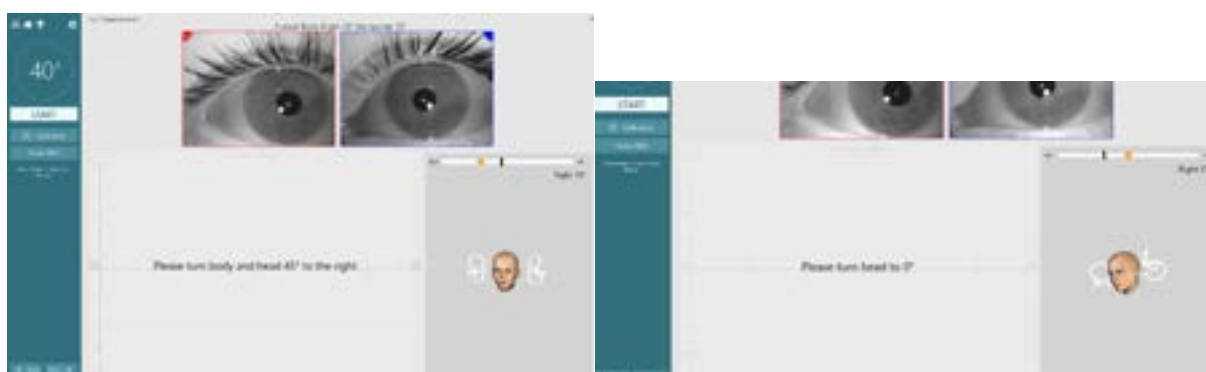

位置

ゼロ位置

3.9.1.3.3 ランダムサッケード


サッケードでは、被検者の目は端から端へとランダムに移動するターゲットを追跡する必要があります。既定のサッケードでは、ターゲットは水平にジャンプしますが、垂直および組み合わせの検査も用意されています。被検者はターゲットを注視し、次のターゲットに急速眼球運動 (サッケード) で視線を移す必要があります。理想的には、サッケードは次のターゲットに再注視するための単一の速い動きで構成されるようにします。



「ランダムサッケード検査」の詳細については、VisualEyesの詳細説明（英語版）をご参照ください。

3.9.1.3.4 Self-Paced Saccades

Self-Paced Saccades は、固定された時間内（規定値は 30 秒で 15 度）に行われる、2つの静止したターゲット間での自発的なサッケードから成る時間制限のある検査です。検査の時間と刺激の調整は検査者によってカスタマイズ可能です。この検査は水平方向または垂直方向での実施が可能です。

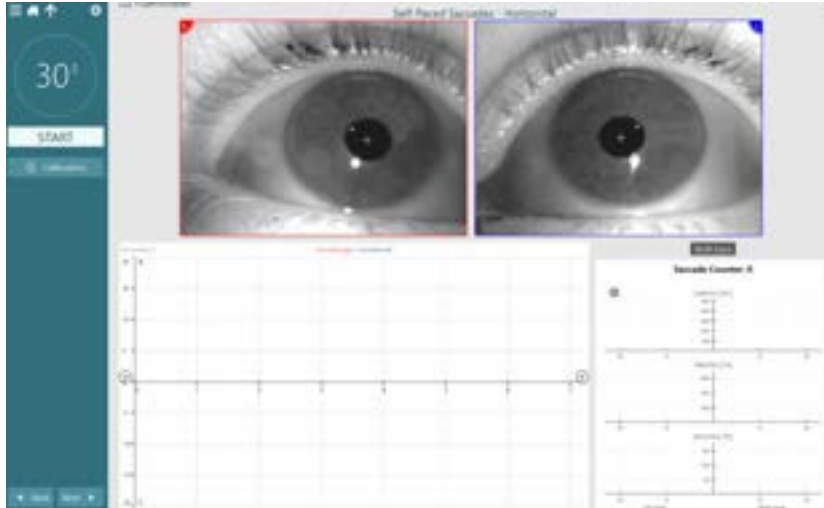

Self-Paced Saccades

「SPS 検査」の詳細については、VisualEyesの詳細説明（英語版）をご参照ください。

3.9.1.3.4.1 Saccadometry

Saccadometry は、被検者が提示されたターゲットを目で追跡する（Pro-saccade）と、提示されたターゲットとは反対の方向を見る（Anti-saccade）の反応を分析します。既定の検査には、10° で 100 回の Pro-saccade ジャンプをする検査と 10° で 60 回の anti-saccade ジャンプをする検査があります。それぞれの検査には 3つのターゲット位置があります。Saccadometry は長時間で反復的なため、被検者が検査中に不注意になったり疲れやすくなることがあります。

「サッカドメトリー検査」の詳細については、VisualEyesの詳細説明（英語版）をご参照ください。

3.9.1.4 視運動性眼振検査（OKN）

視運動性眼振検査（OKN）は、大きな動く模様の刺激を用いて眼球運動を評価します。VisualEyes 525 ソフトウェアは、モニターやプロジェクションスクリーン上を水平または垂直方向に動く様々な刺激模様を生成します。

「視運動検査」の詳細については、VisualEyesの詳細説明（英語版）をご参照ください。

3.9.1.5 眼球反対回旋（OCR）

眼球反対回旋（OCR）は被検者が頭部を傾けてその位置を保持した状態で行われます。カメラ搭載のサイドマウント式 / フロントマウント式 / トップマウント式ゴーグルが検査に使用できます。検査で VORTEQ™ IMU センサーの使用をご希望の場合は、センサーを取り付けることのできるサイドマウント式 / トップマウント式ゴーグルを使用します。被検者が背中をまっすぐ起こした姿勢で着座していることを確認します。検査を開始する前に臨床医は「校正」画面を開き、「回旋校正」に移動し、虹彩紋理を定める必要があります。検査では、被検者に頭部を中央に保持、次に頭部を左に回転して保持、次に右に回転して保持してもらいます。VORTEQ™ IMU と併せて検査を実施する場合、頭部の 3D モデルを使用して頭部の動きを追跡できます。

詳細については、詳細説明（英語版）をご参照ください。



3.9.1.6 頭位変換眼振検査 (Dix Hallpike 法)

専用の頭位変換眼振検査 (DixHallpike) が *VisualEyes 515* および *VisualEyes 525* で利用可能です。視覚遮断検査で、リクライニングチェア (検査台) で実施できます。

頭位変換眼振検査 (DixHallpike) では、一時停止するオプションがあり、アーチファクトを減らすために被検者が座位に戻るまで待つ、

録画を開始することができます。被検者が、背もたれを起してあるリクライニングチェアに座っている場合、**Orion** または **System 2000** のヘッドサポートを取り外して横に置いてください。**ELM** ボタン (**Orion**) を操作して椅子を解除するか、またはフットブレーキ (**System 2000**) を解除して椅子を必要に応じて回転させ、被検者と椅子の背もたれを完全に倒します。被検者にシートベルトを外してもらいます。被検者を標準的な頭位変換眼振検査 (DixHallpike) の姿勢に変更する際、頭部は椅子の端からはみ出して、検査者に支えられた状態になります。被検者の身長に応じて、支えられながら被検者の頭が椅子の端からはみ出すように位置を調整してください。快適であれば、被検者を座らせたまま、検査用の椅子の一方の端に両側に足を載せてバランスを取ってください。リクライニングハンドルを使用して椅子を仰臥位になるまで倒します。被検者は視覚を遮断するゴーグルを着用した状態で正面を見ます。被検者の頭とゴーグルを支えながら、頭位変換眼振検査 (DixHallpike) 姿勢に被検者の上半身を倒していきます。リモートコントローラー、フットスイッチ、またはサイドスイッチで眼球運動の記録を開始します。検査で被検者を座位に戻すように設定すると、ピープ音が2回鳴ります。リモートコントローラー、フットスイッチまたはサイドスイッチを使用すると、仰臥位が早く終了してピープ音が2回鳴り、必要に応じて検査を早く終了することができます。

VisualEyes 505/ 515/525 向けに利用可能な **VORTEQ** 評価モジュールでは、より詳細な検査を追加することができます。これには、適切な頭位に関するフィードバック、回旋眼球運動の記録が含まれます。「**頭位変換眼振検査—詳細 (Advanced Dix Hallpike)**」に関する詳細については、頭位変換眼振検査—詳細 (**Advanced Dix Hallpike**) の章を参照してください。



図 3.9-1 頭位変換眼振検査 (DixHallpike) 用に頭部サポートを取り外して仰向け位置にした椅子 (**Orion** および **System 2000**)

3.9.1.7 頭位眼振検査

視覚遮断検査で、検査台で実施します。検査にリクライニングチェアを使用する場合は、椅子に頭部サポートを取り付けます (**Orion** および **System 2000**)。 **System 2000** のリクライニングチェアを使用する場合は、フットブレーキで椅子をロックしてください。該当する場合は、この検査を行っている間は、被検者の頭部の位置が変わるため、頭部サポートの面ファスナストラップ (**Orion** および **System 2000**) をゴーグルから外したままにしてください。シートベルトは外します。検査者が椅子の重みを支えながら、背もたれを下げて椅子と被検者を仰臥位にしてください。各検査に進み、必要に応じて、被検者の頭部と体を新たな位置に誘導します。被検者の頭部や体を各位置に移動した後、リモートコントローラー、フットスイッチまたはサイドスイッチを使用して記録を開始します。検査が完了したら、被検者に仰向けになってもらい、その後椅子のリクライニングレバーを押し下げて、被検者と一緒に椅子を起こします。



図 3.9-2 仰臥位検査

3.9.1.8 温度刺激検査（カロリック検査）

温度刺激検査（カロリック検査）は、ゴーグルカバーを装着した状態で実施します。

注記：温度刺激検査（カロリック検査）を実施するために、回転椅子を水平から 30 度に背もたれを倒します。仰臥位の姿勢は、リクライニング回転椅子または頭を 30 度まで起こしたベッドの上で行うことができます。リクライニング回転椅子には、30 度の角度を示すゲージがついています。角度は VORTEQ センサーで測ることもできます。

温度刺激検査（カロリック検査）を選択すると、設定した温度でカロリック刺激装置を初期化します。カロリック刺激のステータスが左パネルに表示されます。適切な温度に達すると、ステータスが「準備完了」に変わり、ピープ音で通知します。記録を開始するには、AirFx / AquaStim の刺激プローブのボタンを押します。検査を中止するには、刺激プローブのボタンを 3 秒間長押しします。被検者が眼振を抑制するのを防ぐために、温度刺激検査（カロリック検査）に注意喚起のタスクを実施する必要があります。

自発眼振検査は、カロリック検査のサブテストとしても行うことができます。カロリック位置で自発眼振が認められる場合に推奨されます。自発眼振が検出された場合、左側のメニューパネルで「自発補正」オプションを切り替えて、平均緩徐相速度（a.SPV）を使用してカロリック概要設定を修正することができます。もし誤って検査する方でない耳や間違った温度で検査が行われた場合、検査の最後に検査に間違いがなかったかをたずねるメッセージが表示されます。このメッセージが表示されると、適切な耳や温度に切り替える選択ができます。必要な場合、設定を検査の後で変更することが可能です。

温度刺激検査（カロリック検査）では、眼位の追跡、ポッド図、オプションの棒グラフ、Freyss 図、Claussen グラフ、Haid Stoll グラフ、合計振幅、または結果表を表示することができます。UW（一側性機能低下）、DP（方向優位性）、および累積的な緩徐相速度（SPV）の情報が概要画面の右上に表示されます。

リクライニング式回転椅子を使用する場合、検査前に回転椅子が所定の位置にロックされていることを確認してください。操作手順は、使用する回転椅子の種類によって異なる場合があります。System 2000、および Orion Reclining については、以下の手順を参照してください。

椅子の種類	温度刺激検査（カロリック検査）前の手順
System 2000 リクライニング式回転椅子	フットブレーキをかけて、回転椅子が回転しないようにします。検査を実施する前に、座面下の角度マーカーを使用して回転椅子を水平から 30 度に倒します。
Orion リクライニング式回転椅子	検査を実施する前に、座面下の角度マーカーを使用して回転椅子を水平から 30 度に倒します。VisualEyes ソフトウェアから回転椅子をロックします。



図 3.9-3 カロリック角度マーカを使ってカロリック検査に向けて背もたれを倒した状態の椅子

3.9.1.9 回転刺激検査

VisualEyes 製品にオプションの回転椅子を使用すると、正弦波方式回転 (SHA)、ステップ回転 (Step Rotation)、VOR 抑制 (VOR Suppression)、および Visual VOR を含む追加の検査を実施できます。回転刺激検査は、視覚を遮断するためにゴーグルをつけたまま、またはブースの中で実施します。回転椅子は、背もたれを立てて回転刺激検査を実施します。System 2000 のリクライニングチェアを使用する場合は、フットブレーキが解除されていることを確認してください。被検者が眼振を抑制するのを防ぐために、SHA 検査およびステップテストに注意喚起のタスクを実施する必要があります。

SHA (正弦波方式回転) 検査

正弦波方式回転 (SHA) は、視覚を遮断した状態で行う検査です。この検査では、被検者は System 2000 および Orion の椅子で、0.01 Hz から 0.64 Hz までの Oct. 周波数で左右交互に正弦波パターンで回転されます。ゲイン、位相、および (非) 対称性のグラフと、眼球速度と眼位のトレースが表示されます。

速度ステップ検査

速度ステップ検査は視覚を遮断して行う検査です。被検者を一定の速度で数秒間ある方向に回転させ、その後記録を続けながら椅子を停止させます。同じプロセスで逆方向でも実施します。その後、ゲイン、時間定数、および (非) 対称性について 4 つのステップが観察されます。ステップ検査は、既定で 50°/秒および 180°/秒で行われ、標準オプションとして 100°/秒でも実施できます。さらに、10 から 200°/秒の間の速度で検査するオプションもあります。自発眼振の補正のために、ステップ検査のサブテストに自発眼振検査を追加することができ、基準となる眼振の値を提供します。眼球速度と眼位のトレースが表示されます。

VOR 抑制

VOR 抑制 (VOR Suppression) は、SHA と同様に実施できます。ただし、ゴーグル内の固視ライトを点灯させて、被検者が回転中のターゲットを固視できるようにすることで眼振を抑制できます。ゴーグルカバーはリクライニング式回転椅子すべてに取り付けられていますが、Orion/System 2000 AT/C の遮光ブース内で検査を実施する場合、ゴーグルカバーは常に外したままにします。Visual VOR も SHA と同様ですが、遮眼しません。被検者は、リクライニング式回転椅子の場合はモニター画面上のターゲット、Orion / System 2000 AT/C の場合はブースの壁に設置されたプロジェクター画面や固定した OKN ドラムの縞模様 (レーザー) に焦点を合わせるように指示されます。Visual VOR は通常、0.32Hz でのみ実施します。

Orion/System 2000 AT/C チェアには、前庭機能を測定する主観的視直線検査が含まれています。検査中、ゴーグルは椅子から取り外され、被検者の頭は頭部サポートに固定されます。静的 SVV 検査では、被検者はレーザーラインを回転させて、自分が感じる垂直方向にラインを合わせることで静的な視覚垂直値を確立します。動的 SVV 検査 (この検査はオートトラバース式椅子でのみ行うことができます) では、椅子は中心軸に合わせられた状態で 300 dps で回転します。その後、椅子を左に 4 cm 移動し、中心に戻し、次に右に 4 cm 移動させ、最後に椅子を中心に戻して停止させます。被検者は SVV リモートを使用して、各椅子の位置でレーザーラインを感じた垂直方向に合わせる必要があります。



3.9.2 VORTEQ 評価モジュール


VORTEQ 評価モジュールは、*VisualEyes 505/ 515/525* に追加することができ、以下の検査が含まれています：*DVA (Dynamic Visual Acuity)*、*頭位変換眼振検査—詳細 (Advanced Dix Hallpike)*、*LHR (Lateral Head Roll)*、*GST (Gaze Stabilization)* および *Functional Vision Head Impulse Test*。これらの検査には、すべて VORTEQ IMU™ (IMU センサー) が必要です。


DVA、GST、および fvHIT には、SVA (Static Visual Acuity) と

Visual Process Time Test を最初に実施する必要があります。詳細については、*詳細説明書 (英語版)* を参照してください。

3.9.2.1 SVA (静止視力) 検査


SVA (Static Visual Acuity) は DVA/GST/fvHIT の一部であり、検査の最初のステップとして実施されます。

この検査により、検査者は被検者が頭を動かさずに正しく識別できる最小の視標 (optotype)  を確立することができます。

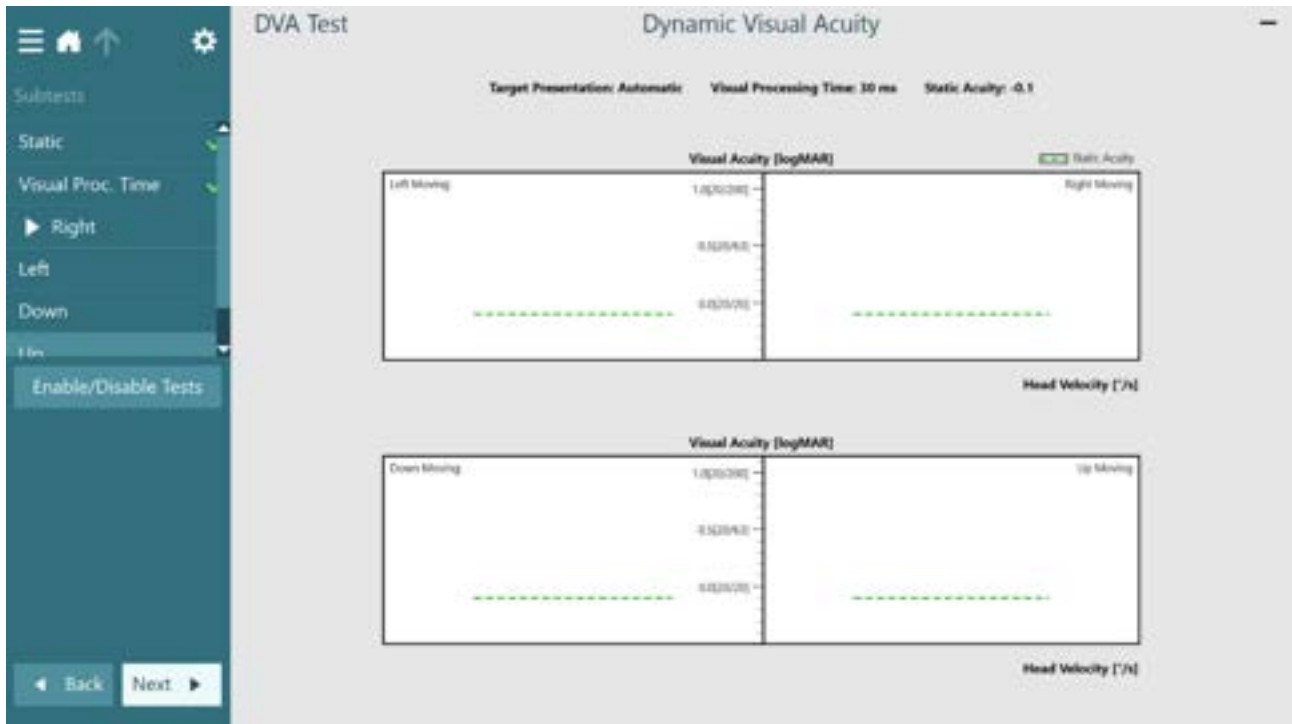

Visual Process Time Test


3.9.2.2 Visual Process Time Test

視覚処理時間検査は DVA/GST/fvHIT™の一部であり、検査の第 2 ステップとして行われます。この検査により、検査者は被検者が視標 (optotype)  をどれだけ速く見ることができるかを確認し、検査の妥当性を確保することができます。上図を参照



3.9.2.3 未完了メッセージ:

もし被検者の症状が悪く、DVA または GST 検査を完了できない場合、「未完了」のメッセージが表示されます。

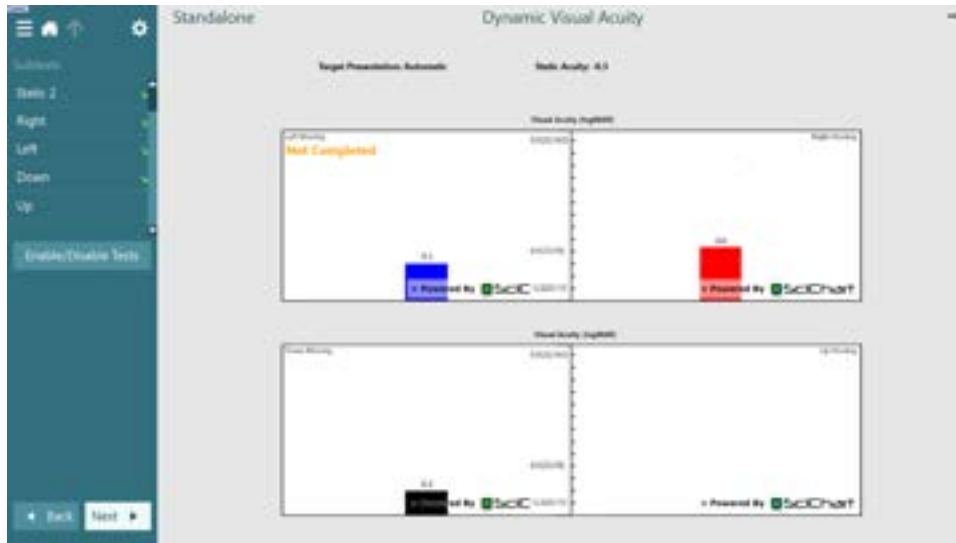


DVA (Dynamic Visual Acuity) 未完了メッセージ

3.9.2.4 DVA (Dynamic Visual Acuity)

まず SVA および Visual Process Time Test を実施します。結果を GST および fvHIT にコピーできます。

DVA (Dynamic Visual Acuity)にはゴーグルは不要です。DVA (注視固定化検査)では、VORTEQ™ IMU (IMU センサー) をヘッドバンドに取り付ける必要があります。被検者が着席していることを確認します。


注記: 被検者と検査画面の距離は、画面サイズに応じて最適化する必要があります。被検者との距離が離れすぎている場合、ソフトウェアから警告メッセージが表示されます。検査を始める前に、被検者は首を振らずに文字を正しく特定  することで、静的な視力を定めます。その後被検者がメトロノームの音に合わせて頭を振る間に、各方向の検査が進行します。横方向の検査では、被検者に頭を滑らかに左右に振ってもらいます。縦方向の検査では、頭を滑らかに上下に振ってもらいます。

3.9.2.5 GST (Gaze Stabilization)

まず SVA および Visual Process Time Test を実施します。結果を DVA および fvHIT にコピーできます。

GST (Gaze Stabilization) にはゴーグルは不要です。GST (Gaze Stabilization) では、VORTEQ™ IMU (IMU センサー) をヘッドバンドに取り付ける必要があります。この検査にはゴーグルや回転椅子は必要ありません。被検者は検査画面の前に着座する必要があります。回転椅子を使用する場合は、ロックされていることを確認します。


注記: 被検者と検査画面の距離は、画面サイズに応じて最適化する必要があります。被検者との距離が離れすぎている場合、ソフトウェアから警告メッセージが表示されます。

検査を始める前に、被検者は首を振らずに optotype (視標) の  の文字を正しく読むことで、静的な視力を定めます。GST では、視力表の大きさは変わりませんが、頭部速度が変わります。頭部速度は、1 秒あたりの度数で測定されます。結果は棒グラフで表示されます。詳細については、[詳細説明書 \(英語版\)](#) を参照してください。



3.9.2.6 Functional Vision Head Impulse Test (fvHIT)

まず SVA および Visual Process Time Test を実施します。結果を GST および DVA にコピーできます。fvHIT 検査にはゴーグルは不要です。この検査では、VORTEQ IMU (IMU センサー) をヘッドバンドに取り付ける必要があります。被検者が着席していることを確認します。**注記:** 被検者と検査画面の距離は、画面サイズに応じて最適化する必要があります。被検者との距離が離れすぎている場合、ソフトウェアから警告メッセージが表示されます。

fvHIT は、被検者が急速な頭部加速中に画面に一時的に表示される視標 (optotype)  を読む能力の測定です。検査を実施するために、検査者は被検者に対して急速な頭部回転刺激 (1000-7000 d/s) を与え、被検者はその後に表示された視標の方向を答えます。頭部の突発的な動きごとに、頭部の動きのピーク速度と被検者の回答が正解かどうか画面に表示されます。極座標プロットは、頭部の動きが発生する平面を表示します。VORTEQ センサーがそれぞれの頭部の加速を測定します。被検者の反応はリモートコントローラーを使用して記録するか、

臨床医が検査画面に回答を入力し、記録することもできます。データ収集後、頭部の突発的な動きごとに、それぞれの頭部加速度の正答率がグラフに表示されます。


fvHIT には次の 5 種類の検査があります：

SVA (Static Visual Acuity)
Visual Process Time
Lateral (右外側, 左外側)
LARP (左前方, 右後方) および
RALP (右前方, 左後方)

fvHIT™の詳細については、詳細説明 (英語版) をご参照ください。

3.9.2.7 頭位変換眼振詳細検査 (Advanced Dix Hallpike)

Dix Hallpike Advanced (頭位変換眼振詳細) 検査では、VORTEQ IMU (IMU センサー) をヘッドバンドに取り付ける必要があります。この検査は番号入力セクションで説明されている頭位変換眼振検査 (Dix Hallpike) と同様に実施されます。ですが、この検査ではさらに、眼球回旋運動を記録し、VORTEQ IMU によって頭部の 3D モデル表示による被検者の頭位のフィードバックを得て、被検者の頭部が適切な位置にあるかを確認できます。頭部の空間的な位置は、2 個の位置スライダーに黒色のバーで表示されます。位置スライダーの網掛け部分は、適切な頭位を示しています。目標の頭位になると、網掛け部分がオレンジ色から緑色に変わります。

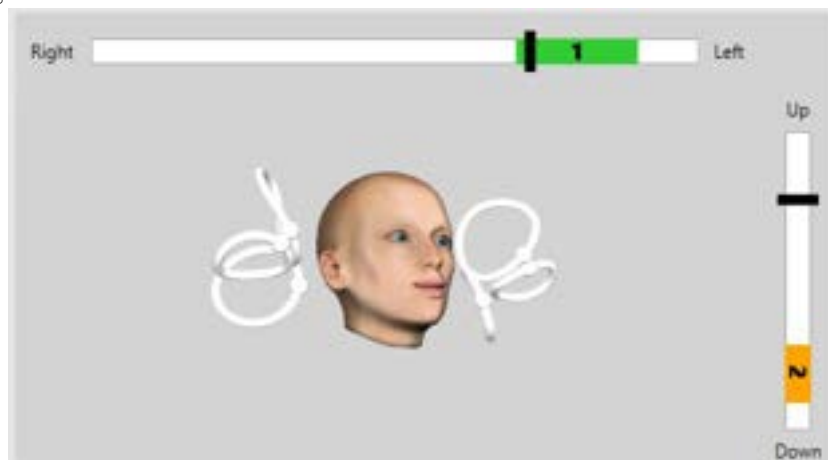




3.9.2.8 LHR (Lateral Head Roll)

LHR (Lateral Head Roll) では、外側半規管型 BPPV を評価することを目的とした検査で、検査中に適切な頭位を誘導する、頭部の 3D モデル表示を含みます。

VORTEQ IMU がゴーグルに取り付けられ、電源が入っていることを確認します。検査は、被検者が仰臥位（仰向け）の状態で行われます。

1. 被検者の頭部を右に 45 度回転させます。
2. 被検者の頭部を左に 45 度回転させます。

黒色のバーは頭部の動作を表しており、頭部が適切な位置に配置されると、網掛け部分が緑色に変わります。最初の位置に到達したら、最低 20 秒間記録します。その後、Enter キーを押して 2 番目のステップに進みます。さらに最低でも 20 秒間記録した後、検査を停止します。

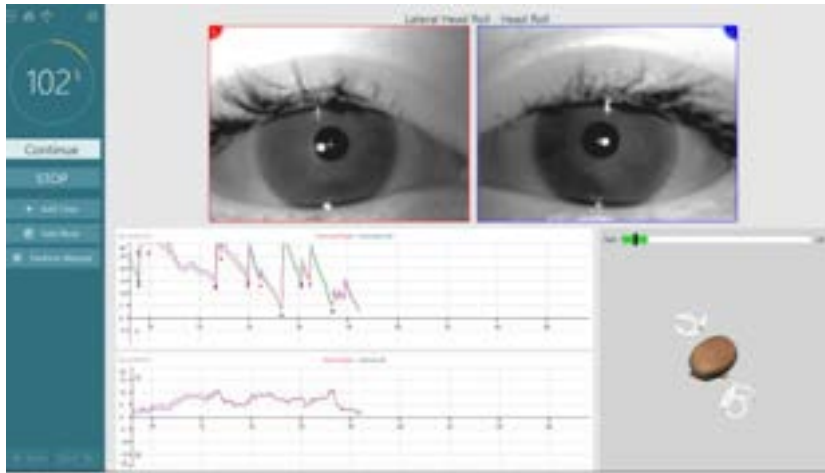

検査が完了すると、操作中に生成された眼振を表す棒グラフが概要画面に表示されます。6 ° /s を超える眼振は灰色で強調表示され、異常所見であることを示しています。



3.9.3 VORTEQ 評価モジュール

VORTEQ 評価モジュール (VORTEQ Assessment) は、*VisualEyes 505/ 515/525* に追加でき、*DVA (Dynamic Visual Acuity)*、*GST (GazeStabilityTest)* 検査が含まれます。これらの検査は、どれも VORTEQ™ IMU (IMU センサー) が必要です。

3.9.4 VORTEQ 診断モジュール

VORTEQ 診断モジュールは、*VisualEyes 525* に追加でき、*AHR (Active Head Rotation)* および *VORTEQ vHIT* が含まれます。これらの検査には、すべて VORTEQ™ IMU (IMU センサー) の使用が必要です。

3.9.4.1 VORTEQ vHIT

必ず被検者が体を起こして座った状態であることを確認してから回転椅子のヘッドレストを取り外すようにしてください。検査を開始する前に、キャリブレーションが完了していることを確認してください。この検査にはカメラ搭載の側面取り付け式 / 上部取り付け式ゴーグルが使用できます。検査開始前に、IMU が接続され、電源が入っていることを確認します。

3.9.4.2 AHR (Active Head Rotation)

被検者が着席していることを確認します。VORTEQ IMU (IMU センサー) を両眼ゴーグルに取り付けます。検査の始めに、被検者にはメトロノームの低い周波数の音に合わせて、10 秒間頭を振ってもらいます。これは検査前の練習として行います。横方向の検査では、被検者に頭を滑らかに左右に振ってもらいます。縦方向の検査では、頭を滑らかに上下に振ってもらいます。もし検査が誤った方向で実施された場合、ソフトウェアから検査者に警告メッセージが表示されます。

3.9.5 EyeSeeCam vHIT

vHIT 用ゴーグルを使用して検査を実施します。vHIT の下位検査項目として、*Lateral*、*RALP*、*LARP*、*SHIMP* の各検査が含まれます。レーザーの赤色の点が投影される壁から 1.5 メートル離れた場所で、被検者が直立した姿勢で着座していることを確認してください。検査を実施する前に、第 3.7.3 章に記載されている内容に従い、キャリブレーションを行います。

3.9.5.1 Lateral vHIT

Lateral vHIT は、外側半規管の機能を評価します。被検者の後ろに立ち、被検者の顎を保持します (図 3.9-4)。検査中、被検者は歯を食いしばる必要があり、手で押さえる力が被検者の頭部に伝わるようにします。記録を開始する前に、頭部刺激を数回練習します。これによって被検者は刺激に慣れることができます。ゲインの測定に影響するので、頭部刺激中にゴーグルに触れたり動かしたり しない ください。



図 3.9-4 *Lateral vHIT* における手の位置



3.9.5.2 Left Anterior Right Posterior (LARP) / Right Anterior Left Posterior (RALP) vHIT

LARP/RALP vHIT では、垂直方向の三半規管の機能を評価します。垂直方向の三半規管の機能を評価するために、LARP では左前半規管－右後半規管の平面では左下から右上に、RALP では右前半規管－左後半規管の平面では右下から左上に頭部を回転させます。また、頭部を右に 45 度回転させて LARP 検査、左に 45 度回転させて RALP 検査を実施することもできます（図 3.9）。被検者は常に正面を向いている必要があります。

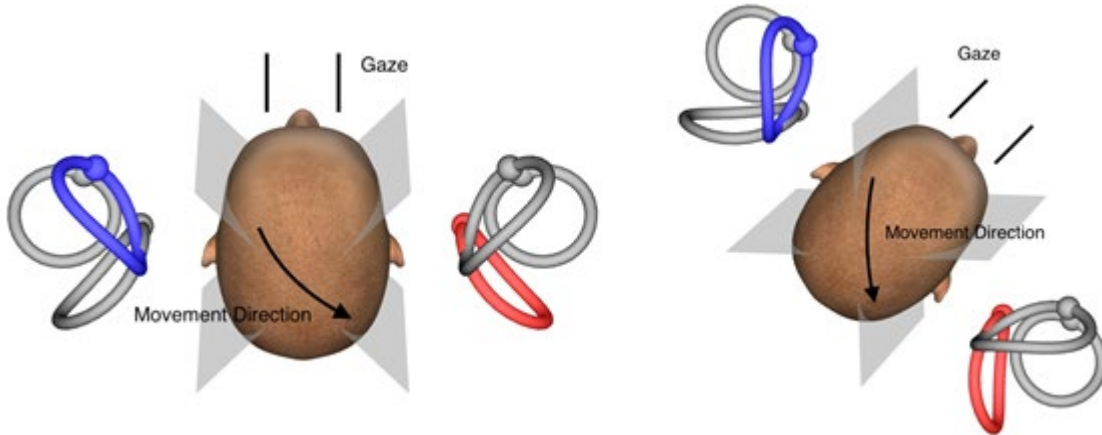


図 3.9-5 正面注視における vHIT と補正した正面注視における LARP

3.9.5.3 検査の実施

画面右上には、三半規管を示した頭部の 3D モデルが表示されます。EyeSeeCam 頭部センサーは、センサーが静止していると自動的にリセットされます。検査開始時には、被検者に正面を見て、頭部を動かさないようにしてもらいます。その後、EyeSeeCam 頭部センサーがリセットされ、頭部 3D モデルが前方に表示されます。vHIT を実施すると、アクティベートされた半規管のペアが、頭部刺激の方向に応じて青色と赤色で強調表示されます。

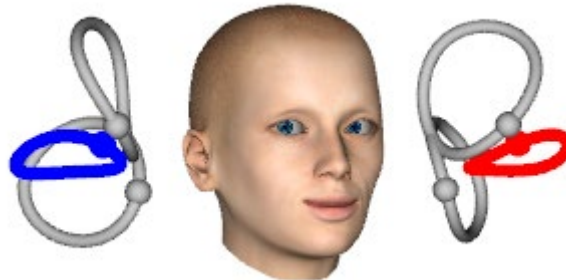


図 3.9-6 三半規管を強調表示した頭部 3D モデル

vHIT を実施すると、頭部刺激の方向に応じて、対象の頭部刺激グラフに頭部と眼球の動作が表示されます。頭部の動作が速度設定に適合している場合、頭部刺激が取り込まれ、頭部刺激グラフの右上に緑色のチェックマークが表示されます。頭部刺激が拒否されると、右上に赤色の×印が表示されます。

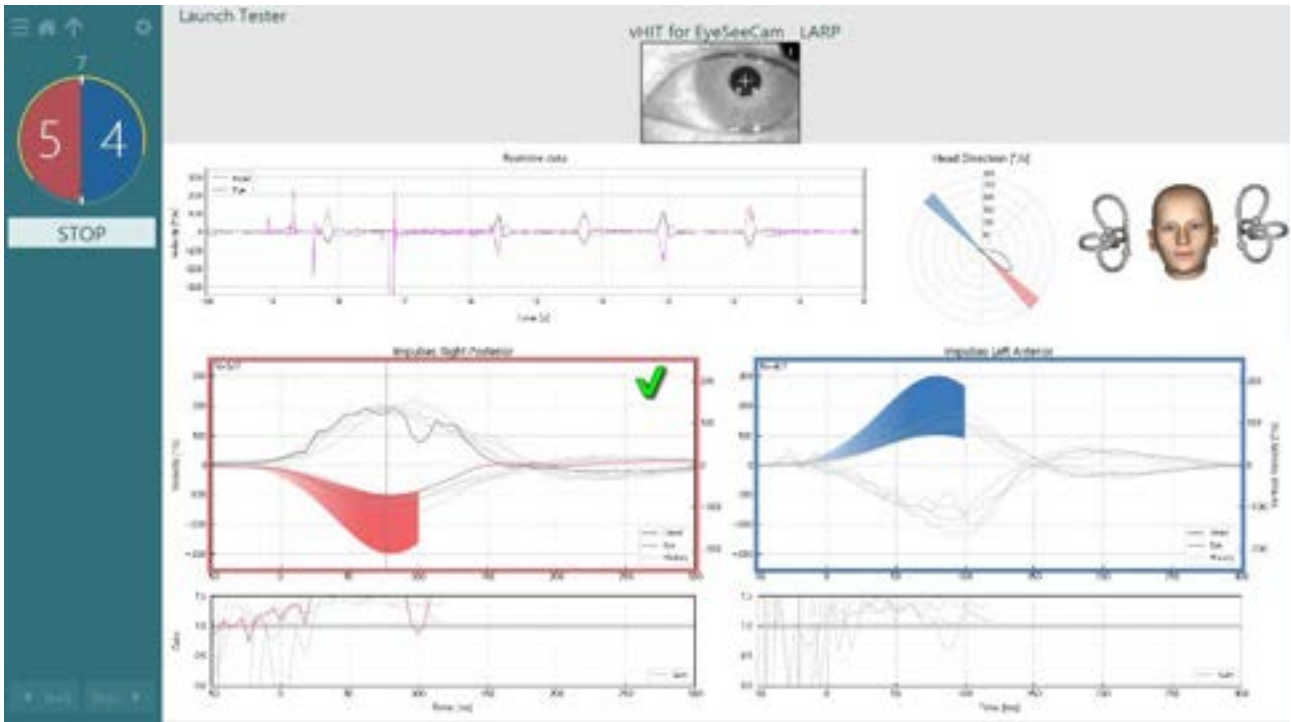


図 3.9-7 EyeSeeCam vHIT LARP 検査例—緑色のチェックマークが付いた状態

必要な数の頭部刺激が両方向で成功すると、検査は自動的に終了します。タイマーは、頭部刺激が分離され、成功した必要数の頭部刺激が上部にある頭部刺激カウンターに置き換えられます。検査者は、リモートコントローラーの Enter キー、画面上の「停止」ボタン、またはフットスイッチでいつでも検査を停止できます。

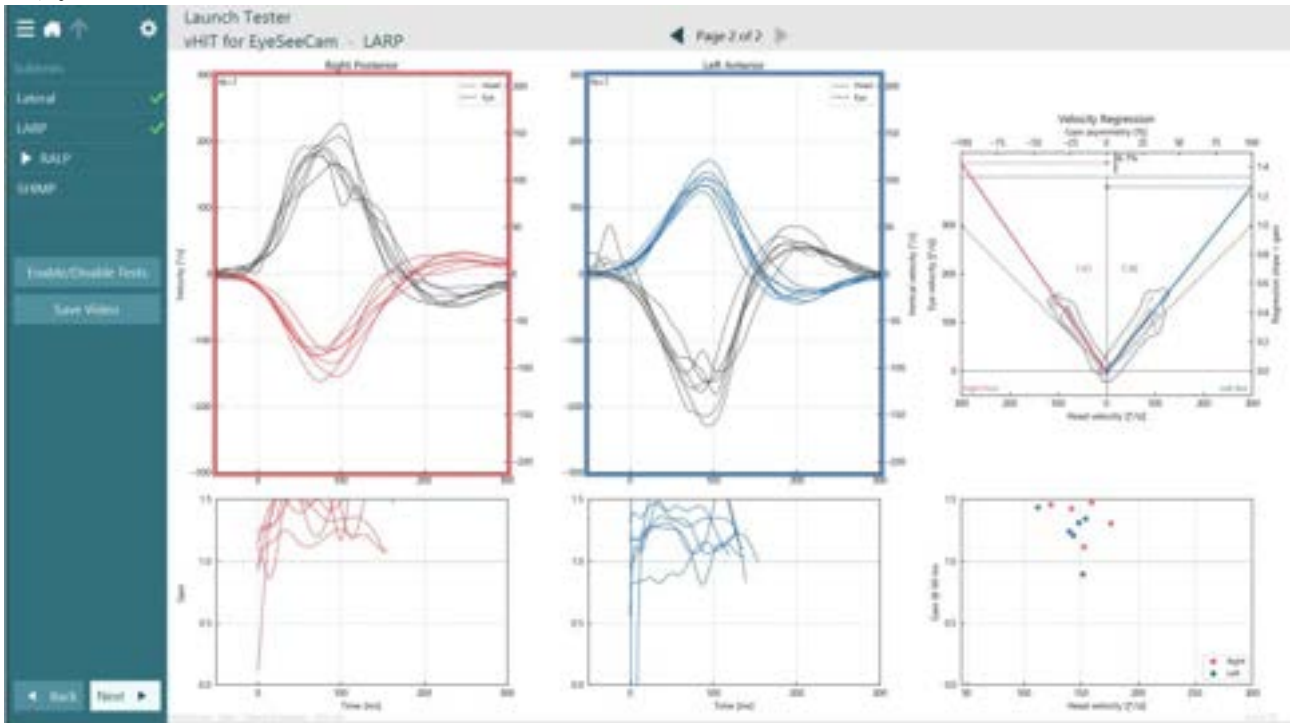


図 3.9-8 EyeSeeCam vHIT 解析

各検査が実施されると、各検査の解析結果を表示します。表示された解析結果は、画面上部のページナビゲーションによって定義されます。Lateral、LARP、RALP が実施されると、EyeSeeCam vHIT 検査結果の概要画面から EyeSeeSix レポートを作成できます。検査を再度実施する場合は、EyeSeeSix レポート上部のコンボボックスから対象の検査を選択できます。

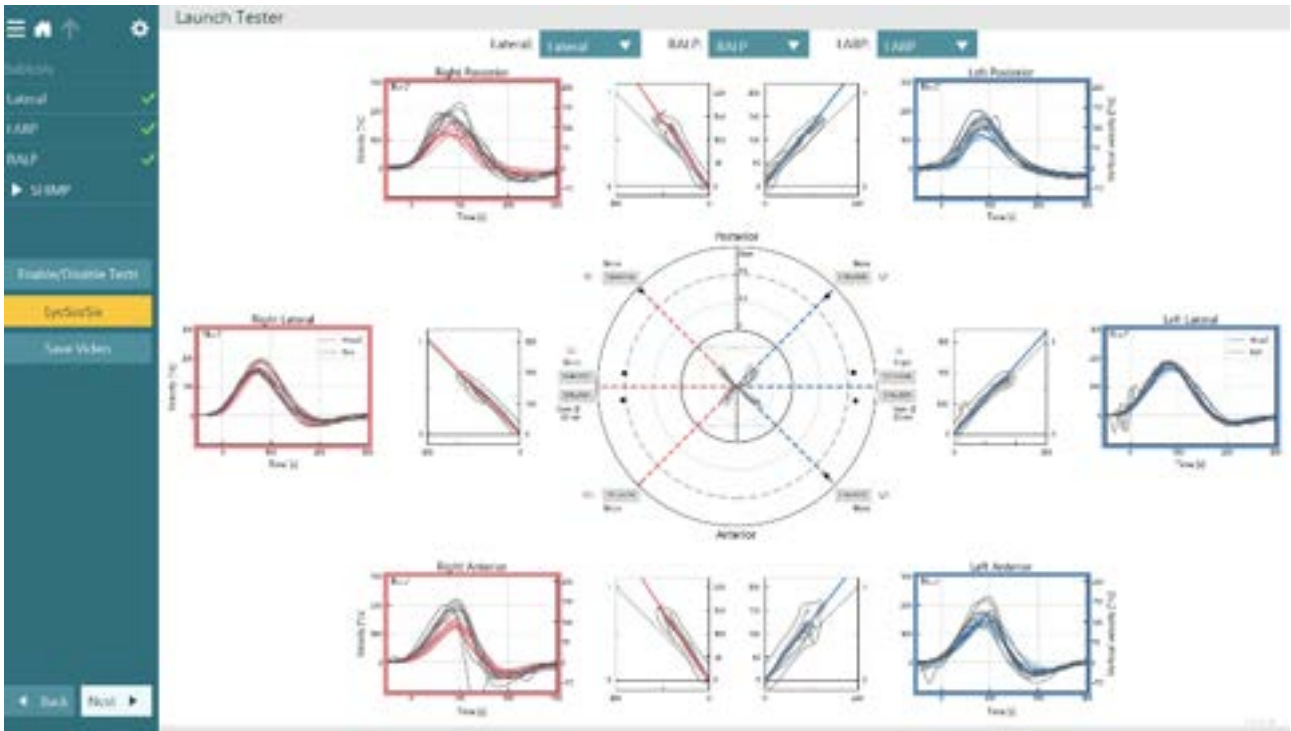


図 3.9-9 vHIT EyeSeeSix レポート



表形式で情報を表示するには、「数値結果」ボタンをクリックします。テキストは、コピー（クリック&ドラッグまたは Ctrl+A）して、Excel や他の表計算ソフトウェアに貼り付けることができます

Summary

Velocity Gain

	Right				Left			
	mean	std	median	iqr	mean	std	median	iqr
Gain @ 40 ms	0.71	0.05	0.71	0.08	0.96	0.08	0.96	0.12
Gain @ 60 ms	0.81	0.06	0.81	0.08	1.01	0.09	1.01	0.07
Gain @ 80 ms	0.90	0.05	0.90	0.07	1.02	0.02	1.02	0.02
Median 0-100 ms	0.89	0.05	0.89	0.07	1.02	0.07	1.02	0.10
Regression	0.09	0.00	0.09	0.01	1.03	0.04	1.03	0.08

Saccades

	Right			Left		
	1st Saccade	2nd Saccade	3rd Saccade	1st Saccade	2nd Saccade	3rd Saccade
Amplitude [°]	14.99 ± 093.52	-	-	13.38 ± 090.12	7.29 ± 092.12	-
Peak Velocity [°/s]	142.71 ± 104.12	-	-	138.81 ± 074.02	180.11 ± 092.21	-
Duration [ms]	181.50 ± 010.50	-	-	149.00 ± 011.00	83.00 ± 008.00	-
Latency [ms]	8.50 ± 010.50	-	-	22.00 ± 003.00	179.00 ± 024.00	-
Total	2	0	0	2	2	0

Data

Saccade Parameters

Dir/Dir	Head Impulse		1st Saccade				2nd Saccade				3rd Saccade			
	Peak Time [ms]	Peak Velocity [°/s]	Amplitude [°]	Peak Velocity [°/s]	Duration [ms]	Latency [ms]	Amplitude [°]	Peak Velocity [°/s]	Duration [ms]	Latency [ms]	Amplitude [°]	Peak Velocity [°/s]	Duration [ms]	Latency [ms]
1 right	18.00	138.81	14.27	149.71	179.00	-2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 left	95.00	180.08	14.10	132.64	137.00	25.00	9.78	283.84	91.00	802.00	-	-	-	-
3 right	82.00	181.11	15.90	133.10	196.00	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4 left	79.00	140.09	11.07	120.38	179.00	18.00	4.72	181.21	75.00	555.00	-	-	-	-

図 3.9-10 数値結果

「3D 波形」ボタンをクリックすると、3D 空間での波形表示が切り替わります (図 3.9-2)。

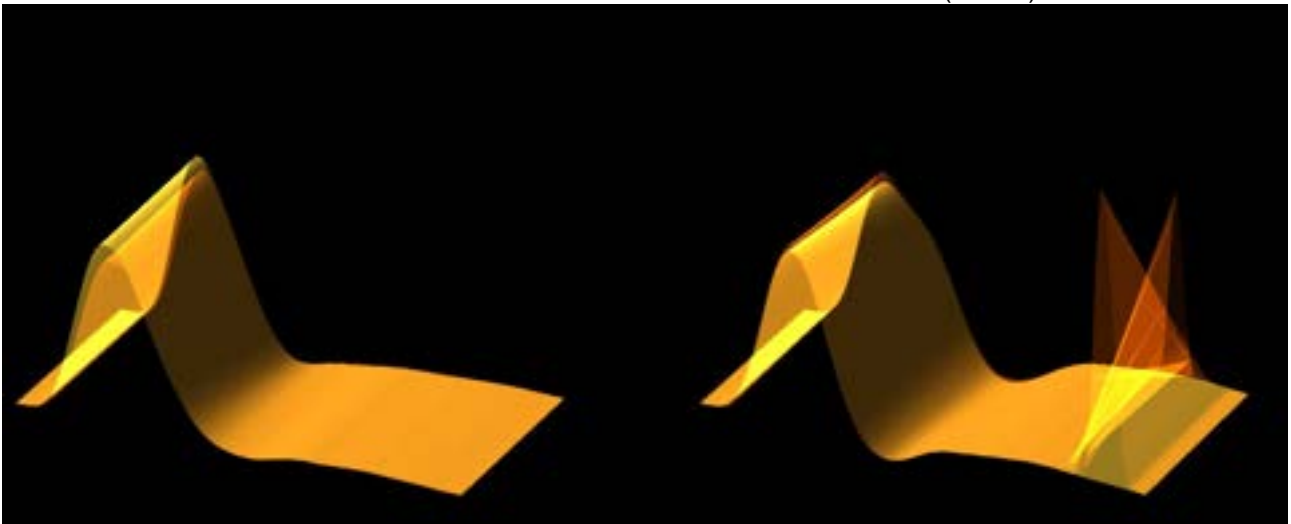


図 3.9-11 3D 空間でレンダリングされた眼球の動き

SHIMP (Suppression Head Impulse Paradigm)

vHIT や HIT とともに、SHIMP は残存した前庭機能を評価するのに役立ちます。HIMP は、Lateral vHIT と似た検査で、外側半規管を評価します。また、SHIMP ではレーザー投光によるターゲットを抑制媒体として使用します。

他の vHIT と同様に、vHIT 用ゴーグルを被検者の頭部に装着します。反射が瞳孔の下に配置されるように注意しながら、眼を表示領域の中央に配置します。被検者の準備、壁に固定されたレーザー点のキャリブレーションと中央への配置の完了後、SHIMP を開始します。

検査の準備：

頭部に固定されたレーザーは、キャリブレーションに使用する 5 点のパターンを壁に投光します。被検者は、固視するために中央の点に焦点を合わせるように指示され、壁に固定された点を中央に配置します (従来の vHIT の場合)。SHIMP は外側半規管に対して実施し、頭部を左右に高速で (事前設定数に応じて) 7 ~25 回、回転させます。



検査の実施：

1. まず、被検者には首の力を抜いて眼を大きく開き、5点のうち中央の点を固視してもらいます。
2. 次に、被検者の頭部を右または左に向けます。5点のレーザーパターンは頭部と一緒に移動するため、新しい位置に配置されます。
3. 被検者は中央の点を見続けるように指示されているので、頭部が動いても眼は新たに配置された中央のレーザー一点に焦点を合わせていなければなりません。

VOR ゲインは、vHIT と SHIMP で類似していなければなりません。しかし、生成されるサッケードのパターンは異なります。

vHIT では正常の場合、補償的なサッケードをほぼ生成されませんが SHIMP では正常の場合、頭位回転後の最後に大きな補償的なサッケードが生成されます(図 3.9-12)。これを「SHIMP サッケード」と呼びます。SHIMP 結果のパターンは、前庭障害のある被検者の場合とは真逆になります。VOR 機能に障害があると、vHIT における Catch-Up サッケード (CUS) が生じますが、補償的な SHIMP サッケードは生じません(あるいはごくわずかです)。検査画面と結果画面の例を以下に示します(図 3.9-12 および図 3.9-13)。

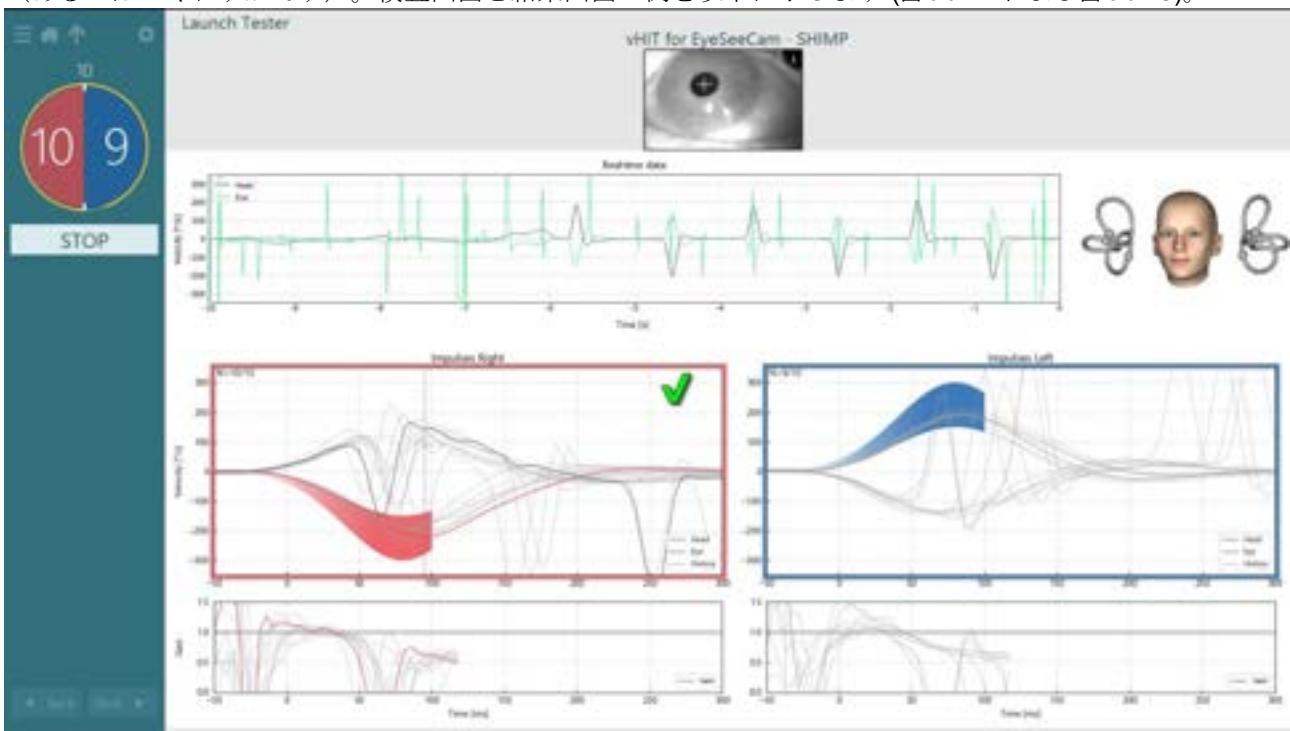


図 3.9-12 SHIMP 検査画面

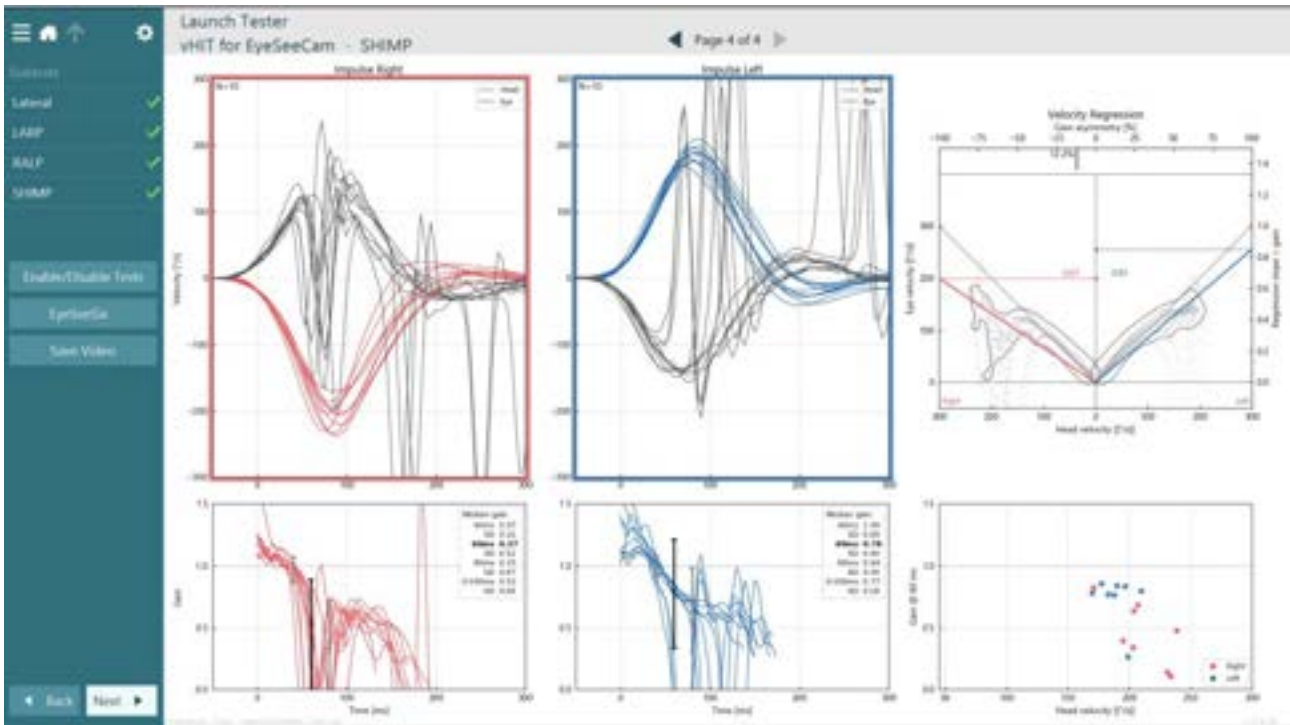


図 3.9-13 SHIMP 検査結果画面

3.10 検査レビュー画面

検査を終了すると、検査画面で検査中の被検者の反応を確認できます。検査レビュー画面 (Figure 3.10-1) には、再生メニュー、タイムライン、眼と検査風景のビデオ記録があります。検査レビュー画面で、眼の映像と検査風景用カメラの映像を同期して再生します。再生メニューの再生ボタンをクリックすると、再生が開始されます。検査が再生されると、タイムラインと再生タイマーの両方で、ビデオの再生状況が黄色い円で表示されます。この円をマウスでドラッグして移動すると、ビデオの他の時点にジャンプできます。サイズスライダーは検査レビュー中に使用でき、再生時に選択した映像にフォーカスするために、眼や検査風景用カメラの映像を動的に拡大できます。



図 3.10-1 : 検査レビュー画面



前のフレームに移動（長押しするとスローモーションで逆再生）



再生 / 一時停止



次のフレームに移動（長押しするとスローモーションで先送り）



10 秒戻って再生

3.10.1 編集ツール

ほとんどの検査項目において検査レビュー画面から編集ツールを使用できます。使用可能なツールは、検査項目によって大きく異なります。各検査項目の編集ツールの詳細については、詳細説明書（英語版）を参照してください。

3.11 過去のセッションレビュー

VisualEyes™製品では、選択した被検者の現在および過去のセッションを簡単に確認できます。対象の被検者を選択した後、VisualEyes™メイン画面から「セッション」ボタンを選択します。これによって選択した被検者の過去のセッションを確認できます。

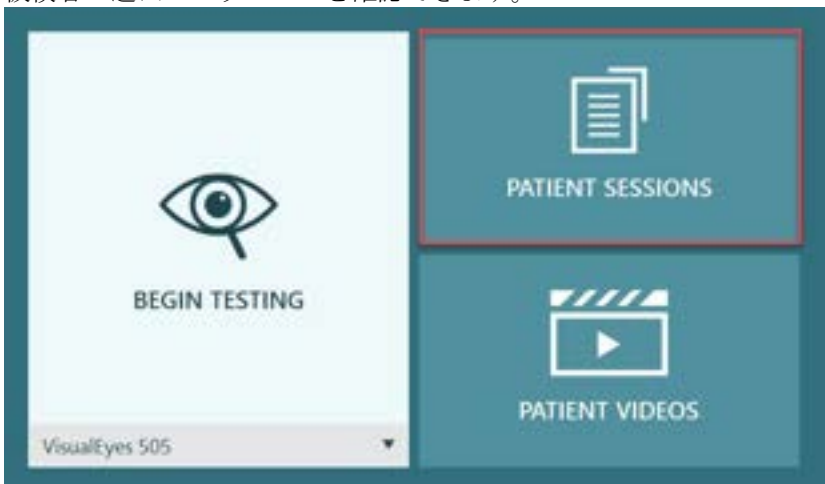


図 3.11-1 : 「セッション」ボタン

セッション画面（Figure 3.11-2）では、サイドパネルのメニューに過去のすべてのセッション履歴を表示します。特定のセッションの日付を選択すると、その日付に実施されたすべての検査が表示され、検査結果が完了（緑色のチェックマーク）したかどうかが表示されます。検査が完了し、閾値を超えている場合は、赤色のひし形が表示されます。

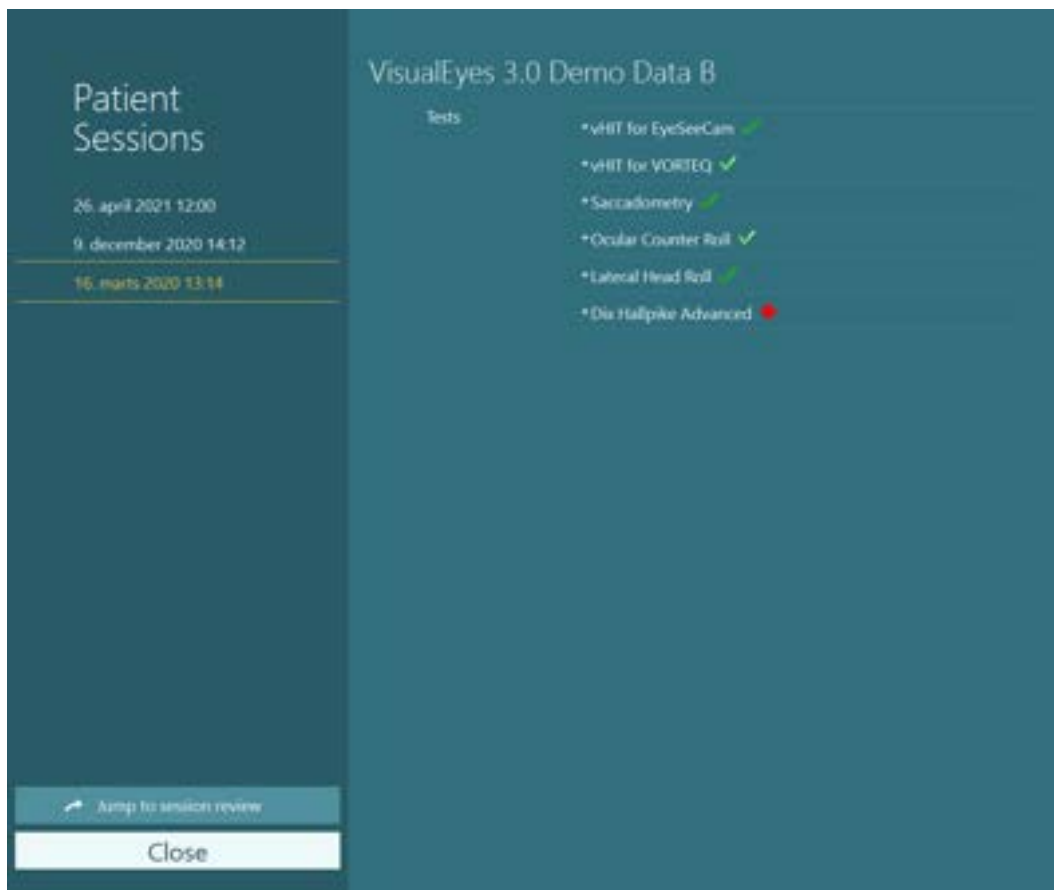


図 3.11-2 「セッション」画面

リストからセッションを選択した後、「セッションレビューに移動」ボタンをクリックして、セッションレビュー画面に移動します。データのエキスポート、セッションの印刷、印刷プレビュー、データベースへの出力などの機能があります。

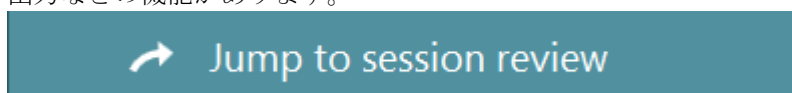


図 3.11-3 「セッションレビューに移動」ボタン

3.11.1 セッションレビュー

検査画面の左上にある検査メニューボタンを選択すると、検査画面から検査結果を確認できます。



プルダウンメニューが表示され、下部に「セッションレビュー」ボタンが表示されます。



図 3.11-4 「セッションレビュー」ボタン

セッションレビューでは、プロトコル内で完了または未完了の検査が一覧表示されます (Figure 3.11-5)。完了した検査名の横に、検査結果が閾値内の結果 (緑色のチェックマーク) であるか、閾値外の結果 (赤色のひし形) であるかを示す記号が表示されます。セッションレビュー画面では、検査結果、臨床報告の作成、検査結果の印刷を行うことができます。

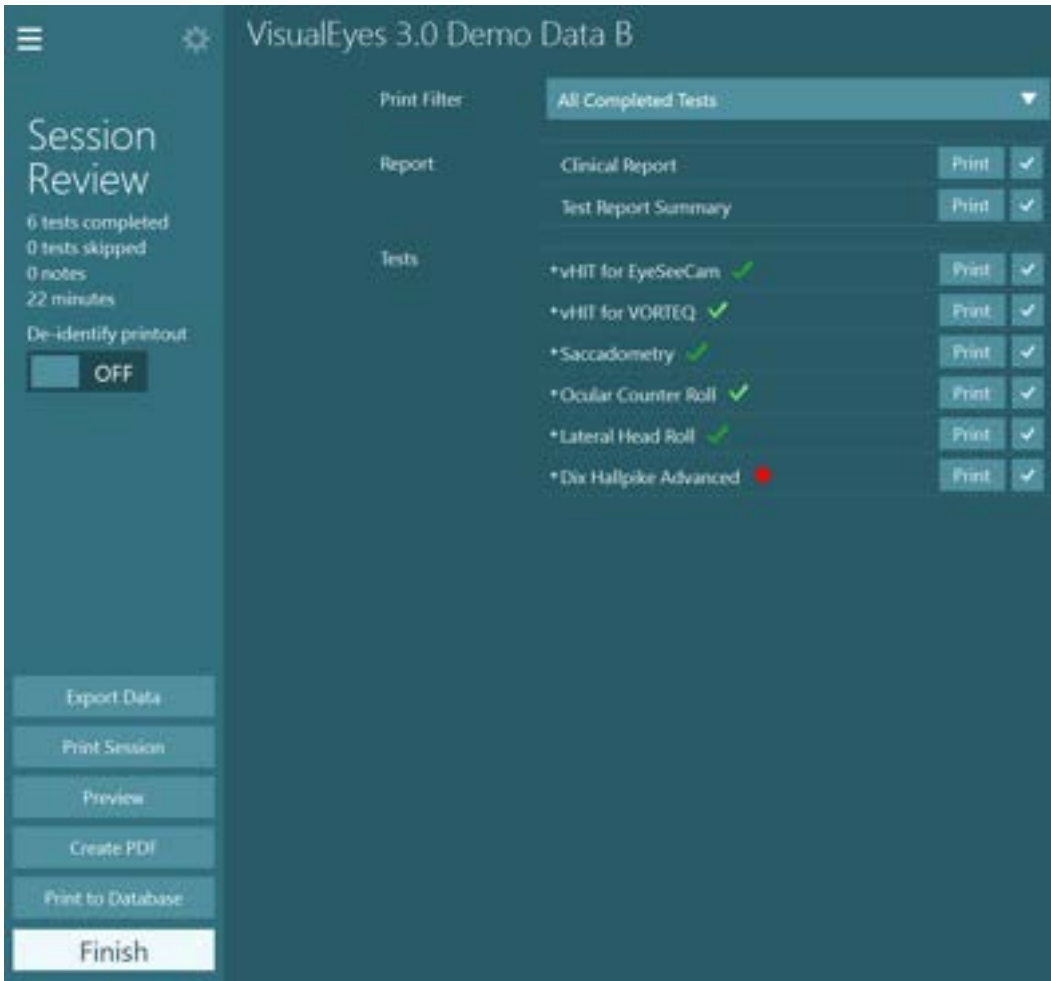


図 3.11-5 セッションレビュー画面

セッションレビュー画面の左下にある「終了」ボタンをクリックすると、メイン画面に戻ります。

3.12 ビデオデータの参照

セッションでビデオ記録が可能な場合、検査後に映像を確認できます。記録された映像は、メイン画面のビデオデータメニューから確認することができます (Figure 3.12-1)。

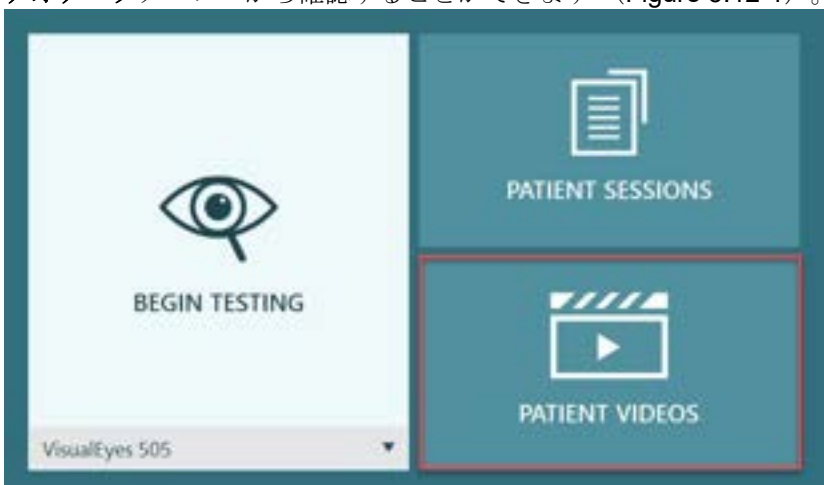


図 3.12-1 : 「ビデオデータ」ボタン



デオデータメニューでは、ビデオは日付と検査項目によって分類されています。

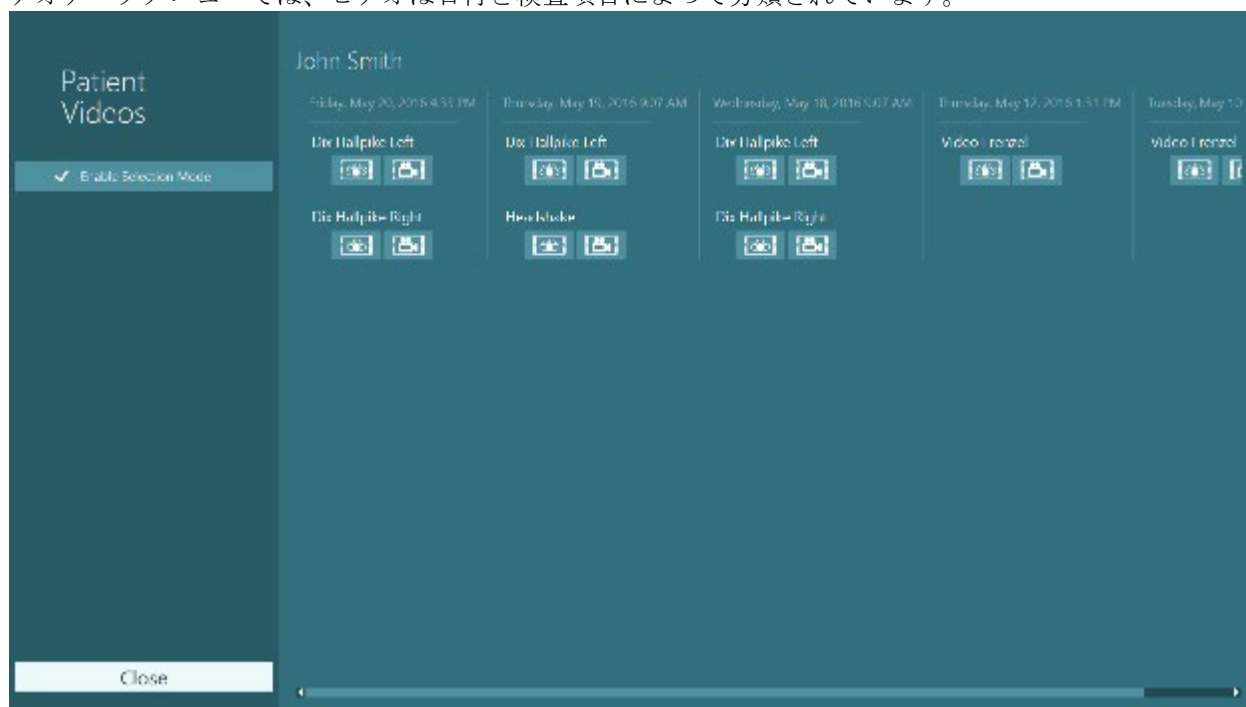


図 3.12-2：日付と検査項目によって分類されたビデオデータの表示

ビデオを再生するには、対象のビデオをクリックします。対応するビデオプレーヤーで起動します。



眼のビデオ記録（生データなし）。



検査風景のビデオ記録

左パネルで**選択モードの有効化**を選択すると、削除またはエクスポートするビデオを選択できます。

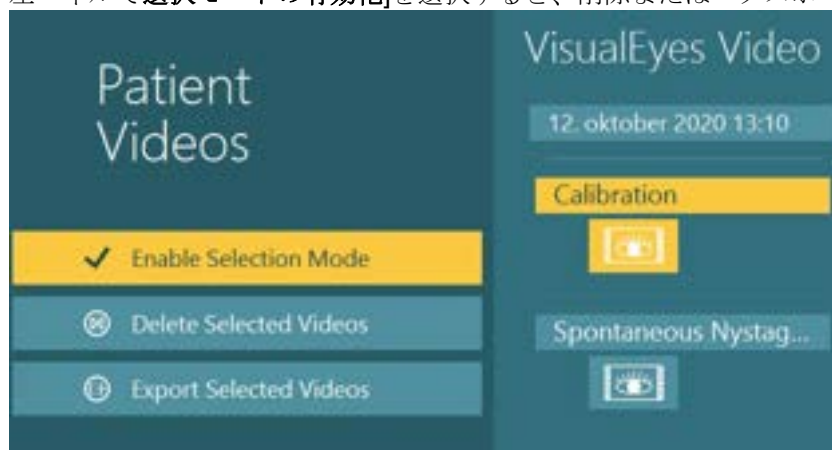


図 3.12-3：ビデオデータの選択モード

同一セッションの眼と検査風景の両方の映像を選択してエクスポートする場合、「選択したビデオのエクスポート」をクリックすると表示される「ビデオのエクスポート」メニューの「眼球映像と検査風景の映像を一つのファイルに合成」にチェックマークを入れることで、これらを1つのビデオにまとめることができます。

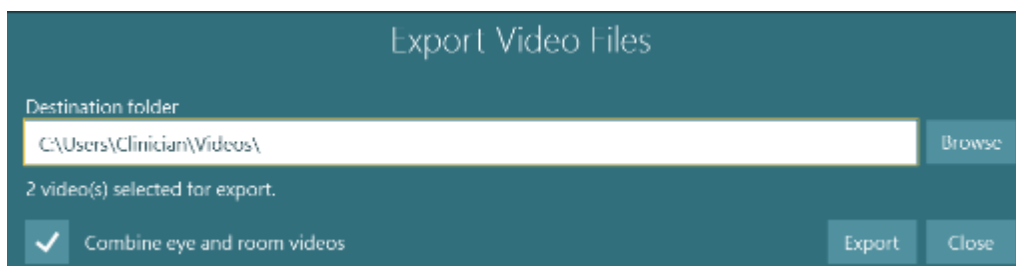


図 3.12-4 : 「ビデオのエクスポート」メニュー。エクスポート先のフォルダー選択、眼と検査風景の映像の合成も可能。

3.13 リサーチモジュール

リサーチモジュールは、以下のような研究者のための専門的な機能です。

3.13.1 眼振設定

リサーチモジュールでは、眼振検出設定の編集や、カスタマイズした独自の検査プロトコルを作成できます。メニューの詳細や設定については、[詳細説明書（英語版）](#)を参照してください。

3.13.2 データのエクスポート

検査が完了したら、検査結果の概要画面で、眼球運動の生データをさらに解析するために **Excel** スプレッドシートのプログラムで、読み取り可能な **CSV** ファイルにエクスポートすることを選択できます。

リサーチモジュールでは、大量のデータを素早くエクスポートして、記録された眼球運動のカスタマイズ解析を行うこともできます。メニューの詳細や設定については、[詳細説明書（英語版）](#)を参照してください。

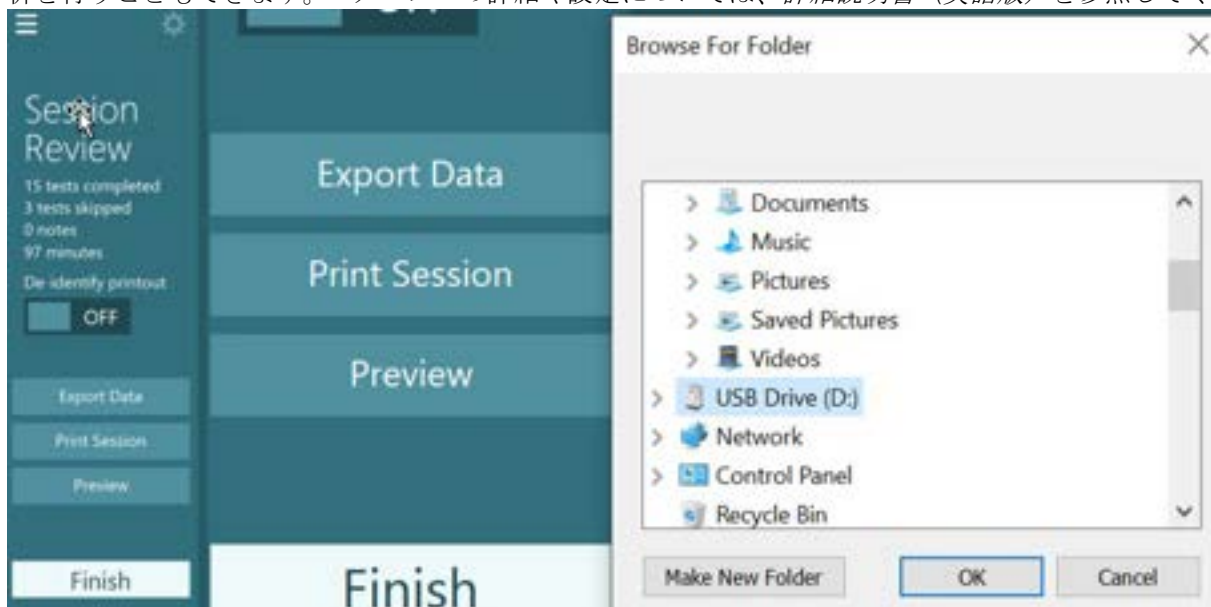


図 3.13-1 データのエクスポート機能



3.14 シャットダウン

- **PCの電源オフ**

メイン画面に戻って「終了」ボタンを選択し、VisualEyes™ソフトウェアを終了します。OtoAccess®データベースを終了します。「スタート」>「シャットダウン」でPCをシャットダウンします。

- **刺激提示用モニターの電源オフ**

テレビまたはプロジェクターの電源を切ります。

- **付属品の電源オフ**

Orion Reclining を使用している場合、回転椅子の底にある電源スイッチで電源を切ります。VORTEQ™ IMU を使用している場合、電源を切ります。System 2000 を使用している場合、コントローラー背面の電源スイッチで、回転椅子コントローラーの電源を切ります。DataLink を使用している場合、背面の電源スイッチで電源を切ります。AirFx/AquaStim を使用している場合、刺激装置がスタンバイ状態になっていることを確認し、装置背面の電源スイッチで電源を切ります。Orion Auto-Traversal/Comprehensive の観察用カメラを使用している場合、観察用モニターの電源を切ります。

- **電源オフ**

USB ハブのボタンまたは、USB ハブに電源供給している電源を切って、USB ハブの電源を切る必要があります。

これによってカメラを使用していないときには、カメラの電源を切ることができます。他の機器の電源を切った後、電源スイッチで絶縁トランスの電源を切る必要があります。



4 清掃とメンテナンス

4.1 製品の清掃手順

清掃前：



- 清掃前に製品の電源を切り、電源から切断してください。
- 製品の構成部品に液体が侵入しないようにしてください。
- 製品または付属品を加圧滅菌、滅菌、液体に浸漬しないでください。
- 硬い物や先の尖った物で製品または付属品を清掃しないでください。

清掃手順：

推奨の洗浄液 / 消毒液

レンズ用清掃布（マイクロファイバー）、水拭きクロス、除菌シート

手順：

- ゴーグルとゴーグルストラップは、検査使用後から次の検査使用までの間に除菌シートで清掃する必要があります。
- ゴーグルミラー、カメラレンズ、IR コートミラーは、マイクロファイバーのレンズ用清掃布で定期的に汚れやほこりを落とし、映像に影が出ないようにしてください。
- サイドマウント式ゴーグルのゴーグルストラップは、通常の洗濯用洗剤を使用して 40°C で洗濯機で洗うことができます。タンブラー乾燥はしないでください。洗濯を 10 回以上繰り返すと伸縮性が低下することがあります。その場合はストラップを交換してください。
- サイドマウント式ゴーグルに使用されているゴーグル用パッドは、二次感染を避けるため、被検者ごとに交換する必要があります。ゴーグル用パッドの交換方法については、2.6.1.1 を参照してください。
- PC のタッチスクリーンは、モニターの電源が切れているときにマイクロファイバーのレンズ用清掃布で清掃できます。タッチスクリーンをさらに清掃する必要がある場合は、除菌シートで表面を清掃します。PC とモニターの電源を入れる前に、洗浄液を完全に乾かしてください。
- 製品や付属品のその他の外部および露出した表面は、湿らせた柔らかい布で定期的に清掃してください。これには、回転椅子、ブースの壁、プロジェクター、キーボード、マウス、マウスパッド、リモートコントローラー、緊急停止ボタンなどが含まれます。

4.2 保証とアフターサービス

■ 製品保証

製造元は、以下を保証します。

- 通常の使用で製造元が製造販売元に納品した日から 24 か月間（販売代理店より購入した場合は 12 か月間）は、通常使用および保守の範囲内で、本製品に材質および製造上の瑕疵がないこと。
- 付属品は、通常使用および保守の範囲内で、材質および製造上の瑕疵がないこと（製造元が最初の購入者に納品した日から 90 日間）。

当該保証期間中に構成部品のアフターサービスが必要になった場合、購入者は販売代理店に直接連絡し、適切な修理施設を決定してください。修理・交換は、この保証の条件に従い、製造元の費用負担で実施します。当該製品は、適切に梱包し、送料元払いで速やかに返送してください。なお、製造元への返送に伴い発生した損失または損害は、購入者の責任となります。製造元の製品購入または使用に関する偶



発的、間接的、または必然的ないかなる損害に対し、いかなる場合も製造元は責任を負わないものとします。本製品の保証の適用対象は、最初の所有者に限られます。

その後の所有者（保持者）は適用対象外となります。また、以下のうちいずれかに該当する製造元の製品購入または使用に関して生じたいかなる損失にも、本保証は適用されず、かつ製造元は責任を負わないものとします。

- 製造元の正規サービス業社以外の者が修理した製品
- 安定性または信頼性に悪影響を及ぼすと製造元が判断した何らかの改造を施した製品
- 誤用、過失、または事故を経たか、シリアル番号またはロット番号が変更、消去、除去された製品
- 製造元の指示に従わず、不適切に使用または保守した製品

本保証は、明示的、黙示的を問わず他のあらゆる保証に代わるものであり、かつ製造元に関する他のあらゆる義務または責任に代わるものです。製造元の代わりに他のあらゆる責任を負わせるための権限が製造元の製品販売に関して製造元から直接または間接的に付与されることは、何人に対してもありません。

その他のあらゆる保証（商品性の保証、特定の目的や用途に適合する機能の保証など）は、明示的、黙示的を問わず、製造元は拒否します。

製品の修理・点検

製造元は以下の場合にのみ、CE マーク適合、製品の安全性、信頼性、性能への影響に関して責任を負います。

- 組立作業、機能の拡張、再調整、改良、修理が専門のサービス業者によって行われた場合
- 1年の保守点検間隔が守られている場合
- 該当する部屋の電気設備が当該要件を満たしている場合
- 製品が製造元発行の取扱説明書の指示どおりに認定者によって使用されている場合

購入者は販売代理店に相談の上、製品使用場所での点検・修理ができるかどうかを判断してください。購入者が販売代理店を通して製造元へ点検・修理のために構成部品および製品を返送する際には、毎回 **RETURN REPORT（返送報告書）** に必要事項を記入してください。日本では販売代理店または製造販売元にお問合せください。

4.3 回転椅子のエラーメッセージ

■ 回転椅子の速度エラー（Orion/System 2000）

回転椅子が以前にキャリブレーションされていない場合、回転椅子の Tach メーターと信号トレースが合わず、回転椅子の回転が意図したよりも遅くなったり速くなったりします。以下のエラーメッセージが表示されます。「システムの初期設定」でキャリブレーションを実行する必要があります。

回転椅子の速度エラーが発生しました。
(> 20 d/s) 「システムの初期設定」でキャリブレーションを実行してください。

■ 被検者の安全性に関するエラー（回転椅子の全モデル）

被検者の年齢が回転刺激検査の実施対象の年齢範囲外の場合、速度または周波数が被検者の年齢の許容限度を超えると、被検者が検査を実施できないことを示す以下のエラーを表示します。



速度は 100 に設定されており、5 歳未満の被検者の推奨値を超えています。

- **緊急停止エラー (Orion/System 2000)**

回転刺激検査中に検査者が緊急停止ボタンを押すと回転椅子が停止し、以下のエラーメッセージが表示されます。検査者は、緊急停止を解除して検査を再度実行することで、回転刺激検査を再開できます。

緊急停止ボタンが押されたか、回転椅子コントローラーの電源が切れました。回転刺激検査を実施するには、回転椅子コントローラーの電源を入れ、緊急停止を解除してください。

- **回転椅子のサーボエラー状態エラー (Orion/System 2000)**

Orion Reclining/System2000 Reclining が、障害物、回転椅子のブレーキ (System 2000)、またはハードウェア障害のために回転して故障した場合、最初に緊急停止エラーとしてエラーが検出され、検査を再度実行すると、回転椅子のサーボエラー状態メッセージを表示します。検査者は、スイッチのライトが消えるまで (約 20 秒) 緊急停止ボタンを押すことで、Orion で回転刺激検査を再度実行できます。これで緊急停止が解除され、検査を再開できます。回転椅子の電源を約 20 秒切ってから、電源を入れて検査を再度実行することで、System2000 Reclining を使用した回転刺激検査を再開できます。

サーボエラーの状態のため回転椅子が作動しません。スイッチの赤色点灯が消えるまで緊急停止ボタンを押してください。その後、再度実行してください。

- **回転椅子の配置エラー (Orion Reclining/System 2000 Reclining)**

回転刺激検査中に Orion Reclining/System2000 Reclining がリクライニングされた場合、以下のエラーメッセージが表示されます。回転椅子を直立させて検査を再度実行することで、回転刺激検査を再開できます。

回転椅子がリクライニングしているか、電源が切れています。回転椅子を直立させ、回転椅子の電源が入っていることを確認してください。

- **ブースドアの開放エラー (Orion Auto-Traverse/Comprehensive)**

Orion Auto-Traverse/Orion Comprehensive ブースのドアが検査前または検査中に開いていた場合、検査を再開するためにはドアを閉じる必要があることを示す以下のエラーメッセージを表示します。

ブースのドアが開いています。ドアを閉めて検査を続行してください。

- **被検者の安全スイッチエラー (Orion Auto-Traverse/Comprehensive)**

Orion Auto-Traverse/Comprehensive に付属する緊急停止スイッチを押すと以下のメッセージが表示され、回転椅子、レーザー、OKN ドラムを停止します。検査者が被検者の懸念に対処した後、検査を再開できます。



被検者が安全スイッチを押します。

▪ **回転椅子のコントロールボードエラー (Orion Auto-Traversal/Comprehensive)**

検査中に Orion Auto-Traversal の USB ケーブルが切断された場合、回転椅子、レーザー、OKN ドラムの電源が切れ、徐々に停止します。回転椅子の USB ケーブルを再接続して、検査を再開してください。このエラーは、回転椅子の電源が入っていない場合にも発生します。

回転椅子のコントロールボードが検出されませんでした。設定とケーブル接続を確認してから、再度実行してください。

▪ **監視用タイマーのタイムアウトエラー (Orion Auto-Traversal/Comprehensive)**

Orion Auto-Traversal/Comprehensive を備えた装置が応答を停止すると、緊急停止回路が作動し、回転椅子、レーザー、OKN ドラムの電源が切れ、徐々に停止します。続いて、検査を終了するか、メイン画面に移動する必要があります。検査を再開すると、監視用タイマーがリセットされます。このとき、緊急停止ライトが再び点灯します。

4.4 カメラの接続解除

カメラの映像が消えて戻らない、USB デバイスが接続されない、VisualEyes™ソフトウェアが期待通りに作動しないなどの異常動作が発生した場合は、以下の手順で回復させてください。

- VisualEyes™ソフトウェアを完全に終了します。
- PC からすべての USB デバイスを切断し、20 秒間放置します。
- USB デバイスを PC に接続し直します。
- すべての USB デバイスが初期化されたら、VisualEyes™ソフトウェアを再起動します。



5 製品仕様

5.1 PCの推奨最小要件

デスクトップPC : PCI Expressカード 1枚使用可能 (FireWire®製品のみ)

USBポート 必須 (USBハブで拡張)

2.5GHz以上 Intel i5プロセッサ (第5世代以降) 最小4コア (4スレッド)

最小8GB以上 RAM

最小空き容量 250GB 以上 ハードディスクドライブ

1366×768 ピクセル以上 ディスプレイ (高解像度推奨)

タッチモニター/タッチスクリーン PC の推奨

オペレーティングシステム :

Windows® 10 64-bit

Windows® 11 64-bit

5.2 Standards

IEC 60601-1:2005, AMD1: 2012	医用電気機器 – 第1部: 基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項
IEC 60601-1-2: 2014	医用電気機器 – 第1-2部: 基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 - 副通則: 電磁両立性 (EMC) – 要求事項及び試験
ANSI S3.45:2009	基本的な前庭機能検査の標準手順

製品はAC100~240V、周波数50/60Hzで作動します。接地プラグは、ユーザーの地域で使用が意図された電圧、周波数、ソケット形状で使用できます。付属の電源ケーブル以外は使用しないでください。回転椅子と一緒に使用する場合は、主電源から構成部品に電力を供給するために絶縁トランスを使用します。



5.3 ゴーグル



サイドマウント (2D-VOGFW)

製品概要	サイドマウント式ゴーグル (カメラ搭載) 汎用性が高く、FireWire または USB 接続、単眼または両眼のいずれかで設定できるため、大抵の臨床における使用に適しています。	
製品仕様：		
規格：	装着部：IEC 60601-1 タイプ BF	
作動環境：	温度：	15～35° C
	相対湿度	30～90%
輸送・保管環境：	輸送温度	-20～50° C
	保管温度	0～50° C
	相対湿度	30～80% (結露なし)
インターフェース：	FireWire / USB 2.0	
ケーブル長：	4.5m (Orion Reclining 3m)	
カメラ構成：	単眼 / 両眼	
ゴーグルカバー (取外し可能)	○	
眼球運動の解像度：	0.22°	
ダイナミックレンジ：	±30° 水平方向	
	±35° 垂直方向	
画像解像度 (各カメラ)：	640x480 @100fps	
ビデオ解像度：	単眼：320x240 @25fps	
	両眼：640x240 @25fps	
寸法 (L x W x H)：	302 x 216 x 131 mm	
重量	単眼：240g (カバー込み 320g)	
	両眼：305g (カバー込み 385g)	
デュアル IR LED 赤外線照明：	940nm @ 65mW/sr	
フェイスクッション：	使い捨てのゴーグル用パッド	
VORTEQ™ 互換性：	○	
最大 DC 磁場：	1210μT	



トップマウント (BG4.0USB)

製品概要	トップマウント式ゴーグル (カメラ搭載) 両眼ゴーグルには、VisualEyes™ソフトウェア制御による映像中央揃え機能に加え、ゴーグルに開始/停止ボタンがあります。 アジア人向けフェイスプレート (BG4.0KUSB) でも使用できます。	
製品仕様：		
規格：	装着部：IEC 60601-1 タイプ BF	
作動環境：	温度：	15～35° C
	相対湿度	30～90%
輸送・保管環境：	輸送温度	-20～50° C
	保管温度	0～50° C
	相対湿度	30～80% (結露なし)
インターフェース：	USB 2.0	
ケーブル長：	4.5m (Orion Reclining 3m、Orion Auto-Traversal/Comprehensive 0.9m)	
カメラ構成：	両眼	
ゴーグルカバー (取外し可能)	○	
眼球運動の解像度：	0.33°	
ダイナミックレンジ：	±45° 水平方向 ±25° 垂直方向	
画像解像度 (各カメラ)：	320x240 @100fps	
ビデオ解像度：	両眼：640x240 @25fps	
寸法 (L x W x H)：	165 x 165 x 89 mm	
重量	345g (カバー込み)	
シングル IR LED 赤外線照明：	950nm @ 1.5mW/cm ²	
ゴーグルの開始/停止ボタン	○	
映像の中央揃え：	○	
フェイスクッション：	ソフトラバー	
VORTEQ™ 互換性：	○	
最大 DC 磁場：	90μT	



フロントマウント (USBM2.1A)

製品概要	フロントマウント式ゴーグル (カメラ搭載) 単眼ゴーグルには、右眼と左眼で簡単に交換できるカメラが付属していません。 小型の小児用バージョン (USBM2.1P) としても使用可能です。	
製品仕様 :		
規格 :	装着部: IEC 60601-1 タイプ BF	
作動環境 :	温度 :	15~35° C
	相対湿度 :	30~90%
作動環境 :	温度 :	15~35° C
	相対湿度 :	30~90%
輸送・保管環境 :	輸送温度	-20~50° C
	保管温度	0~50° C
	相対湿度	30~80% (結露なし)
インターフェース :	USB 2.0	
ケーブル長 :	4.5m (回転椅子 3m)	
カメラ構成 :	単眼 (右眼と左眼で交換可能)	
ゴーグルカバー (取外し可能)	○	
眼球運動の解像度 :	0.31°	
ダイナミックレンジ :	±20° 水平方向 ±20° 垂直方向	
画像解像度 (各カメラ) :	640x480 @50fps	
ビデオ解像度 :	単眼 : 320x240 @25fps	
寸法 (L x W x H) :	165 x 165 x 89 mm	
デュアル IR LED 赤外線照明 :	950nm @ 1mW/cm ²	
フェイスクッション :	ソフトラバー	
VORTEQ™ 互換性 :	×	
最大 DC 磁場 :	160μT	



EYEESEECAM vHIT

製品概要	EyeSeeCam ゴーグル (vHIT 用単眼軽量ゴーグル) カメラは右眼と左眼で交換できます。 小児と成人の両方の顔にフィットします。 アジア人向けゴーグルフレーム (EyeSeeCam vHIT Asia) でも使用できます。	
製品仕様 :		
規格 :	装着部 : IEC 60601-1 タイプ BF	
作動環境 :	温度 :	15~35° C
	相対湿度 :	30~90%
	作動気圧 :	98~104 kPa
作動環境 :	温度 :	15~35° C
	相対湿度 :	30~90%
	作動気圧 :	98~104kPa
輸送・保管環境 :	輸送温度 :	10~50° C
	保管温度 :	10~35° C
	相対湿度 :	30~80%
インターフェース :	USB 2.0	
ケーブル長 :	2.95m	
カメラ構成 :	単眼 (右眼と左眼で交換可能)	
画像解像度 :	376x120 @220fps	
ビデオ解像度 :	188x120 @25fps	
寸法 (L x W x H) :	ゴーグル : 139 x 60 x 56 mm カメラ : 48 x 42 x 35 mm ゴーグル+カメラ : 139 x 82 x 81	
重量	ゴーグル : 40g カメラ : 32g ゴーグル+カメラ : 72g	
頭部センサー :	IMU (6自由度の慣性計測装置)	
レーザー :	クラス 1	
フェイスクッション :	シリコン (清掃可能)	
最大 DC 磁場 :	150μT	



5.4 付属品



VORTEQ™ IMU (第2世代)

製品概要	IMU : 頭部動作や頭位を追跡するための慣性計測装置 VORTEQ™ IMU は、VORTEQ™ Assessment/VORTEQ™ Diagnostic のオプションモジュールで使用し、サイドマウント式/トップマウント式ゴージャルに対応しています。
製品仕様 :	
インターフェース :	ワイヤレス / USB 2.0
速度範囲 :	±500° /s
感度 :	65.5LSB/(° /s)
寸法 (ケーブルを除く) (L x W x H) :	5.0 x 2.8 x 2.2 cm
重量 (ケーブルを除く) :	0.02 kg
電源 :	5VDC (PC の USB から供給)

DataLink と回転椅子用 ENG



製品概要	EOG/ENG 測定に使用されるアンプ VNG 用 EOG 付属品セットを介した DataLink として使用、または Orion C/AT 用 EOG 付属品セットを介した Orion Auto-Traverse/Orion Comprehensive Chair に内蔵されています。
製品仕様 :	
規格 :	装着部 : IEC 60601-1 タイプ BF、保護クラス : IEC 60601-1 クラス II
インターフェース :	USB 2.0
チャンネル数 :	2 / 3
寸法 (L x W x H) :	25 x 29.5 x 5.1 cm
重量	1.9 kg
内部ノイズ	<4μV RMS 入力短絡、帯域幅 DC-40Hz
入力 DC 耐性 :	300mW
プログラム可能なゲイン :	1250、2500、5000、10000
コモンモード除去 :	>100dB 以上 (10Hz、5k 不均衡で測定)
絶縁モード除去 :	>130dB (10 Hz で測定)
電極抵抗値の測定 :	20kΩ までの個別電極のインピーダンス試験回路
電源 :	110-220VAC、50-60 Hz、1000W



デジタルバーライト



製品概要	眼球運動検査用の視覚刺激を提示するデジタルバーライト
製品仕様：	
インターフェース：	USB 2.0
寸法 (L x W x H)：	83.8 x 8.9 x 4.4 cm
重量	1.2 kg
電源：	5VDC (PC の USB から供給)



5.5 TRV Chair



TRV Chair		
製品概要	2 軸 360° 回転の診断用の特殊な椅子 すべての三半規管における良性発作性頭位めまい症 (BPPV) の診断と治療に使用できます。	
製品仕様 :		
規格 :	装着部 : IEC 60601-1 タイプ B	
作動環境 :	温度 :	5~40° C
	相対湿度	30~90%
輸送・保管環境 :	輸送温度	-15~40° C
	保管温度	-15~40° C
	相対湿度	30~80%
回転制御 :	機械制御	
インターフェース :	USB	
被検者の最大体重 :	150kg	
寸法 (L x W x H) :	160 x 120 x 190 cm	
重量	640kg	
被検者の固定 :	身体 4 点固定 ショルダーサポート レッグストラップ レッグストラップ ヘッドストラップ付きヘッドサポート	
自由度 :	2 軸 360°	
配送情報 :	木製梱包箱の寸法 (L x W x H) :	193 x 183 x 165 cm
	配送重量 :	1100 kg



5.6 回転椅子



Orion Reclining

製品概要	カロリック検査、頭位変換眼振検査（Dix Hallpike）、頭位眼振検査用リクライニング式回転椅子	
製品仕様：		
規格：	装着部：IEC 60601-1 タイプ B、保護クラス：IEC 60601-1 クラス I	
作動環境：	温度：	15～35° C
	相対湿度	30～80%
輸送・保管環境：	輸送温度	0～50° C
	保管温度	0～50° C
	相対湿度	30～80%（結露なし）
回転制御：	ソフトウェア制御	
実施可能な回転刺激検査 （VisualEyes™製品の標準検査に追加）：	ステップ回転（最大 200° /s） 正弦波方式回転（SHA）（0.01～0.64Hz） VOR 抑制（VOR Suppression）（0.01～0.64Hz）	
インターフェース：	USB	
USB ケーブル長：	3m	
電源ケーブル長：	2.5m	
回転椅子 最高速度：	200° /s	
回転椅子 最大加速度：	100° /s ²	
被検者の最大体重：	160kg	
寸法（L x W x H）：	直立：94 x 69 x 183 cm リクライニング：198 x 69 x 152 cm	
重量	170 kg	
被検者の固定：	身体用安全ベルト ヘッドストラップ（トップマウントゴーグルのみ）	
ヘッドレスト：	○（頭位変換眼振検査では取外し可能）	
フットレスト：	○	
緊急停止：	○	
リクライニング範囲：	90°（直立）～0°（フラット） w/ 30° カロリック刺激の表示ラベル	
配送情報：	木製梱包箱の寸法（L x W x H）：	123 x 100 x 180 cm
	配送重量：	323kg
電源：	110VAC、220VAC は付属の絶縁トランスを介して 110VAC にステップダウン	



Orion Auto-Traverse/ Comprehensive

製品概要	<p>OKN ドラム（レーザー内蔵） ブース内の回転椅子 オプション付属品を使用すると、回転椅子で ENG を実施したり、小児被検者に検査を実施したりできます。 Orion Auto-Traverse を使用すると、動的 SVV の軸外回転を行うこともできます。</p>
------	---

製品仕様：

規格：	装着部：IEC 60601-1 タイプ B、保護クラス：IEC 60601-1 クラス I	
作動環境：	温度：	15～35° C
	相対湿度	30～80%
輸送・保管環境：	輸送温度	0～50° C
	保管温度	0～50° C
	相対湿度	30～80%（結露なし）
回転制御：	ソフトウェア制御	
実施可能な回転刺激検査 （VisualEyes™製品の標準検査に追加）：	ステップ回転（最大 350° /s） 正弦波方式回転（SHA）（0.01～1.28 Hz） VOR 抑制（VOR Suppression）（0.01～1.28Hz） 静的 SVV 動的 SVV（Auto-Traverse のみ）	
インターフェース：	USB 2.0	
回転椅子 最高速度：	350° /s	
回転椅子 最大加速度：	200° /s	
被検者の最大体重：	180kg	
寸法（L x W x H）：	回転椅子：61 x 61 x 165 cm ブース：206 x 206 x 239 cm	
最小天井高：	245cm	
重量	回転椅子：	170kg
	ブース：	295kg
被検者の固定：	身体用安全ベルト アンクルベルト ヘッドストラップ	
ヘッドレスト：	○	
フットレスト：	○	
緊急停止：	○	
レーザー：	クラス：	2
	波長：	680nm
	ビーム発散：	0.35mrad
	パルスパターン：	パルス状ではなく安定した状態
	最大出力：	<1mW
EOG 内蔵：	付属品の DataLink（EOG/ENG）の製品仕様を参照してください。	
水平方向の移動：	-7cm～+7cm（Auto-Traverse のみ）	
水平方向の移動速度：	0.8 cm/sec（Auto-Traverse のみ）	
配送情報：	木製梱包箱の寸法（L x W x H）：	ブース用木箱：236 x 118 x 133 cm



		回転椅子用木箱 : 119 x 175 x 100 cm 付属品用パレット : 122 x 60 x 115 cm
電源 :	110VAC、220VAC は付属の絶縁トランスを介して 110VAC にステップダウン	

5.7 Orion Auto-Traverse/Comprehensive 付属品

小児観察用カメラ



製品概要	Orion Auto-Traverse / Comprehensive に取付け可能 一脚に取付けたカメラ ゴーグルを装着できない小児の検査で使用できます。	
製品仕様 :		
インターフェース :	デュアル USB2.0	
ケーブル長 :	1.8m	
画像解像度 :	640x480 @50fps	
ビデオ解像度 :	320x240 @25fps	
寸法 (L x W x H) :	カメラ : 54 x 69 x 62 mm 一脚 : 978 x 84 x 79 mm	
IR LED 赤外線照明 :	940nm @ 252.6mW/sr	

5.8 カロリック刺激装置

AquaStim/AirFx については、別のデータシートを参照してください。



5.9 電磁適合性 (EMC)

本章は、すべての種類のゴーグルを含む VisualEyes 製品に適用されます。

本製品は、電磁障害の強度が高い、-使用中の HF 外科用器具-近傍および MRI システムの RF 遮蔽室以外の病院および臨床環境での使用に適しています。

注記：製品の基本性能 (Essential Performance) は製造元によって以下のように規定されています。本製品には、基本性能は存在しません。基本性能の欠如または喪失は、受容できないリスクを引き起こすことはありません。
最終診断は、臨床的な知識に基づいて行ってください。

他の製品の近くに置いた状態で製品を使用したりすると、不適切な動作を引き起こすおそれがあるため、そのような状況では使用しないでください。そのような状況で使用しなければならない場合は、その構成で正常に動作していることを確認してください。

付属品およびケーブルは、製品の製造元による指定または提供以外の機器を使用すると、製品の電磁エミッションの増大や電磁イミュニティの低下もたらし、不適切な動作を引き起こすおそれがあります。付属品およびケーブルのリストについては、本章を参照してください。

携帯型の RF 通信機器 (アンテナケーブルおよび外付けアンテナなどの周辺機器を含む) は、製品のどの部分 (製造元が指定するケーブルを含む) に対しても、30 cm 以内で使用することのないようにしてください。従わない場合、製品の性能が低下するおそれがあります。

本製品は、IEC60601-1-2:2014、放射クラス B グループ 1 に準拠しています。

注記：副通則からの逸脱および適用した許容条件はありません。

注記：EMC に関するコンプライアンスを維持するために必要な説明はすべて、本書のメンテナンスの章に記載されています。記載されている以外の手順は不要です。

注記：非医用電子機器 (一般的な IT 機器) が取り付けられている場合、検査者の責任において、この機器が該当する規格に準拠し、システム全体が EMC 要件に準拠していることを確認してください。EMC 検査用 IT 機器および同様の機器¹における一般的に適用される規格は以下のとおりです。

エミッション試験

EN 55032 (CISPR 32)

EN 61000.3.2

EN 61000.3.3

マルチメディア機器の電磁両立性 - エミッション要求事項

電磁両立性 (EMC) - 高調波エミッションの限度値

(AC 電源のみ、機器の入力電流は 1 相あたり 16A 以下)

電磁両立性 (EMC) - 限度値 - 公共の低電圧供給システムにおける電圧変化、

電圧変動、フリッカーの限度値 (AC 電源のみ、機器の入力電流は 1 相あたり

16A 以下)

イミュニティ試験

EN 55024 (CISPR 24)

IT 機器 - イミュニティ特性 - 限度値と測定法

製品には、パーソナルコンピュータ、PC、タブレット、ラップトップ、ノートブック、モバイルデバイス、PDA、イーサネットハブ、ルーター、WiFi、コンピュータ周辺機器、キーボード、マウス、プリンター、プロッタ、USB ストレージ、ハードドライブストレージ、ソリッドステートストレージなどが含まれます



IEC 60601-1-2 に定められた EMC 要求事項への適合性を確実にするために、使用する付属品は以下の製品のみとしてください。

製品	製造元	モデル
ゴーグル (2D-VOGfw)	Interacoustics	2D-VOGfw
ゴーグル (BG4.0USB)	Interacoustics	BG4.0USB
ゴーグル (USB2.1A)	Interacoustics	USB2.1A
ゴーグル (USB2.1P)	Interacoustics	USB2.1P
緊急スイッチ	Interacoustics	緊急スイッチ
ゴーグル (EyeSeeCam USB)	Interacoustics	EyeSeeCam

本製品に機器を追加接続した場合は、当事者が責任を持って、その構成を IEC 60601-1-2規格に適合させてください。

IEC 60601-1-2 に定められた EMC 要求事項への適合性をより確実にするために、ケーブルのタイプおよび長さは以下を推奨します。

説明	長さ	シールドケーブル
ゴーグル (2D-VOGfw)	4.5	○
ゴーグル (BG4.0USB)	1.8	○
ゴーグル (USB2.1A)	1.8	○
ゴーグル (USB2.1P)	1.8	○
ゴーグル (EyeSeeCam USB)	2.9	○
ゴーグル (単眼 USB) 成人用マスク、□ 小児用マスク	1.8	○
緊急スイッチ	4.4	×



ガイドランスと製造元による宣言—電磁エミッション

本製品 (Orion) は、以下に指定する電磁環境での使用を意図したものです。被検者や検査者は、この環境で製品を使用することを確認してください。

エミッション試験	準拠	電磁環境—ガイドランス
RF エミッション CISPR 11	グループ 1	本製品は、内部機能のためだけに RF エネルギーが使用されています。 そのため、RF エミッションは非常に低く、付近の電子機器を妨害する可能性は小さいと言えます。 本製品は、商業環境、産業環境、事務環境、住宅環境のいずれにおける使用にも適しています。
RF エミッション CISPR 11	クラス B	
高調波エミッション IEC 61000-3-2	該当 クラス A 分類	
電圧変動/ フリッカーエミッション IEC 61000-3-3	該当	

携帯型/移動型の RF 通信機器と (Orion) 製品との間の推奨分離距離

本製品は、放射 RF 妨害が制御されている電磁環境での使用を意図したものです。電磁妨害を防ぐため、被検者や検査者は、携帯型の RF 通信機器 (送信機) と製品 (Orion) との間に最小限必要な距離を保ってください。送信機の最大定格出力電力に基づく推奨分離距離を以下に示します。

送信機の最大定格出力電力 (W)	送信機の周波数に基づく分離距離 (m)		
	150 kHz~80MHz $d = 1.17\sqrt{P}$	80 MHz~800 MHz $d = 1.17\sqrt{P}$	800 MHz~2.7 GHz $d = 2.23\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.37	0.37	0.74
1	1.17	1.17	2.33
10	3.70	3.70	7.37
100	11.70	11.70	23.30

送信機の最大定格出力電力が上記に該当しない場合の推奨分離距離 d (m) は、送信機の周波数に対応する上記の式で概算してください。各式の P は、送信機の最大定格出力電力 (W、当該送信機メーカーによる公表値) です。

注 1 : 80 MHz か 800 MHz の場合は、高い方の周波数範囲を適用します。

注 2 : 本ガイドラインでは対応できない場合もあります。電磁波伝搬は、建物や物体、人体による吸収・反射に左右されます。



ガイドランスと製造元による宣言—電磁エミッション


本**製品(Orion)**は、以下に指定する電磁環境での使用を意図したものです。被検者や検査者は、この環境で**製品**を使用することを確認してください。

イミュニティ試験	IEC 60601 試験レベル	準拠	電磁環境—ガイドランス
静電放電(ESD) IEC 61000-4-2	+8 kV (接触) +15 kV (空中)	+8 kV (接触) +15 kV (空中)	床材は、木材、コンクリート、または陶製タイルとしてください。床材が合成物質で覆われている場合は、相対湿度が 30%より高いことを条件としてください。
RF 無線通信機器からの近接場に対するイミュニティ IEC 61000-4-3	スポット周波数 385～5.785 MHz 表 9 で定義されているレベルと変調	表9で定義された通り	RF 無線通信機器は、 製品 のいかなる部分に近接することがないように使用してください。
電氣的ファーストトランジェント/バースト IEC61000-4-4	+2kV (電源ライン用) +1kV (入出力ライン用)	+2kV (電源ライン用) +1kV (入出力ライン用)	電源は、典型的な商業または住宅環境用の品質としてください。
サージ IEC 61000-4-5	+1 kV (線間) +2 kV (線対接地間)	+1 kV (線間) +2 kV (線対接地間)	電源は、典型的な商業または住宅環境用の品質としてください。
電源入力ラインにおける、電圧ディップ、瞬停、および電圧変動 IEC 61000-4-11	0% UT (100% ディップ UT 時) 0.5 サイクル間、0、45、90、135、180、225、270、315° 0% UT (100% ディップ UT 時)1 サイクル間 40% UT (60% ディップ UT 時)5 サイクル間 70% UT (30% ディップ UT 時)25 サイクル間 0% UT (100% ディップ UT 時)250 サイクル間	0% UT (100% ディップ UT 時) 0.5 サイクル間、0、45、90、135、180、225、270、315° 0% UT (100% ディップ UT 時)1 サイクル間 40% UT (60% ディップ UT 時)5 サイクル間 70% UT (30% ディップ UT 時)25 サイクル間 0% UT (100% ディップ UT 時)250 サイクル間	電源は、典型的な商業または住宅環境用の品質としてください。停電中も 製品 の継続稼働が必要な場合は、無停電電源装置またはバッテリーから、 本体 に電源を供給することを推奨します。
電源周波数 (50/60Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	電源周波数磁界は、典型的な商業または住宅環境における典型的な場所での特性レベルとしてください。
近接した放射界—イミュニティ試験 IEC 61000-4-39	9 kHz～13.56 MHz 以下で定義された周波数、レベル、変調 AMD 1: 2020 表 11	AMD 1:2020 の表 11 で定義された通り 2020	製品 に磁気に敏感な構成部品または回路が含まれている場合、近接磁界は、表 11 で指定されている試験レベルを超えないようにする必要があります。
注記：UT は試験レベルを適用する前の AC 電源電圧です。			



ガイドランスと製造元による宣言—電磁イミュニティ

本**製品(Orion)**は、以下に指定する電磁環境での使用を意図したものです。被検者や検査者は、この環境で**製品**を使用することを確認してください。

イミュニティ試験	IEC/EN 60601 試験レベル	適合性レベル	電磁環境-ガイドランス
伝導 RF IEC/EN 61000-4-6	3Vrms 150kHz~80MHz	3Vrms	携帯型 RF 通信機器は、 製品 のどの部分（ケーブルを含む）に対しても、送信機の周波数に対応する式で計算した推奨分離距離より近づけて使用することのないようにしてください。 推奨分離距離： $d = \frac{3,5}{V_{rms}} \sqrt{P}$
放射 RF IEC/EN 61000-4-3	6Vrms ISM 帯域（および在宅医療環境ではアマチュア無線帯域）で。 3 V/m 80 MHz~2.7 GHz	6Vrms 3 V/m	
	10 V/m 80 MHz~2.7 GHz 在宅医療環境の場合のみ	10 V/m (在宅医療の場合)	$d = \frac{3,5}{V/m} \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz} - 800 \text{ MHz}$ $d = \frac{7}{V/m} \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz} - 2,7 \text{ GHz}$ 各式のうち、 P は送信機の最大定格出力電力（ W 、当該送信機メーカーによる公表値）であり、 d は推奨分離距離（ m ）です。 電磁界の現地調査によって得られる、固定 RF 送信機からの電磁界強度 ^a は、各周波数範囲における適合性レベル未満としてください。 ^b 以下の記号が表示されている機器の近傍では妨害が生じる可能性があります。 

注 1 : 80 MHz か 800 MHz の場合は、高い方の周波数範囲を適用します。

注 2 : 本ガイドラインでは対応できない場合もあります。電磁波伝搬は、建物や物体、人体による吸収・反射に左右されます。

(a) 無線（携帯、コードレス）電話や陸上移動無線の基地局、アマチュア無線、AM/FM ラジオ放送、TV 放送等に用いる機器などの固定 RF 送信機からの電磁界強度を正確に予測することは、理論上不可能です。固定 RF 送信機による電磁環境を評価するには現地調査を検討してください。**製品**の使用場所で検査した電磁界強度が上記の対応 RF 適合性レベルを超える場合は、**製品**が正常に動作するかどうか確認してください。異常な動作が認められた場合は、**製品**の向きや設置場所を変えるなどの追加措置が必要な場合があります。

(b) 周波数範囲が 150 kHz~80 MHz の場合、電磁界強度は 3 V/m 未満としてください。



6 返送手順

製品に不具合や損傷があった場合は、請求書、シリアル番号および、問題の詳細と併せて速やかに販売代理店へ連絡してください。製品を製造元に返品する必要があると判断した場合は、問題の詳細を記入してください。梱包箱および本書の裏面の「Return Report (返送報告書)」欄に問題の詳細記入欄があります。(日本は非サポート)

「Return Report (返送報告書)」を使用してください(日本は非サポート)

専門のサービス業者の作業を容易にしお客様に満足していただくため、問題に関してできるだけ多くの関連情報を返送報告書に記入してください。

製造元に返送する際には、必ずこの手順に従ってください。日本では販売代理店または製造販売元にお問合せください。

Return Report – Form 001



Opr. dato: 2014-03-07 af: EC Rev. dato: 30.01.2023 af: MHNG Rev. nr.: 5

Company: _____

Address: _____

Phone: _____

e-mail: _____

Address
DGS Diagnostics Sp. z o.o.
Rosówek 43
72-001 Kolbaskowo
Poland

Mail:
rma-diagnostics@dgs-diagnostics.com

Contact person: _____ Date: _____

Following item is reported to be:

- returned to INTERACOUSTICS for: repair, exchange, other: _____
- defective as described below with request of assistance
- repaired locally as described below
- showing general problems as described below

Item: _____ **Type:** _____ **Quantity:** _____

Serial No.: _____ Supplied by: _____

Included parts: _____

Important! - Accessories used together with the item must be included if returned (e.g. external power supply, headsets, transducers and couplers).

Description of problem or the performed local repair:

Returned according to agreement with: Interacoustics, Other : _____

Date : _____ Person : _____

Please provide e-mail address to whom Interacoustics may confirm reception of the returned goods: _____

The above mentioned item is reported to be dangerous to patient or user ¹

In order to ensure instant and effective treatment of returned goods, it is important that this form is filled in and placed together with the item.
Please note that the goods must be carefully packed, preferably in original packing, in order to avoid damage during transport. (Packing material may be ordered from Interacoustics)

¹ EC Medical Device Directive rules require immediate report to be sent, if the device by malfunction deterioration of performance or characteristics and/or by inadequacy in labelling or instructions for use, has caused or could have caused death or serious deterioration of health to patient or user.