

Science made smarter

AS608 / AS608e

Screening
auditivo con
rapidez real



Software Diagnostic Suite
(sólo AS608e)




Interacoustics

Audiómetro
~~~~~

Timpanometría

PEA

OAE

Adaptación de Audífonos

Diagnóstico del equilibrio

# Portátil y fácil de usar

**El audiómetro portátil AS608 / AS608e es el equipo perfecto para realizar pruebas rápidas en colegios, fábricas o centros de asistencia primaria. Fácil de utilizar; el especialista apenas requiere formación para su uso. Entre sus características, incluye calibración de tonos puros y tonos warble en una gran variedad de frecuencias.**

#### **Audiómetro portátil**

El audiómetro AS608 / AS608e incluye un ligero maletín de transporte para el equipo, los auriculares y las hojas de audiometría.

#### **Baterías o fuente de alimentación**

El equipo funciona con 3 pilas AA estándar o mediante fuente de alimentación externa con aprobación médica. Las pilas tienen una duración de seis (6) meses.

#### **Integración con PC (sólo AS608e)**

El AS608e ofrece integración con PC a través de un cable USB mediante el software Diagnostic Suite Windows® para la transferencia de datos audiométricos al PC.

The diagnostic suite offers features such as:

- Asistente de impresión
- Página avanzada de informes
- Gestión de sesión
- Almacenamiento en base de datos: compatible con Noah y OtoAccess™

#### **Umbral automático (Sólo AS608e)**

El AS608e incluye el procedimiento de prueba de tono puro automático Hughson Westlake. Al finalizar la prueba, es posible recuperar los resultados de la memoria interna de la unidad con gran facilidad y visualizarlos en el software Diagnostic Suite PC.


#### **Características:**

- Material sólido y robusto
- 11 frecuencias: desde 125Hz a 8kHz
- Selección de frecuencias personalizadas
- Salida: desde -10dB a 100dBHL
- Tonos puro, warble y pulsado
- Interruptores silenciosos
- Indicador de nivel de batería
- Maletín de transporte
- Pulsador respuesta paciente (incluido con el AS608e)
- Fuente de alimentación externa (opcional)
- Carcasa sonoreductora (opcional)
- Micrófono transmisor (sólo AS608e)
- Integración con PC (sólo AS608e)
- Procedimiento de prueba de tono puro automático
- Hughson Westlake (sólo AS608e)


Portátil  
(peso total inferior  
a 1,6 kg)



Maletín de transporte

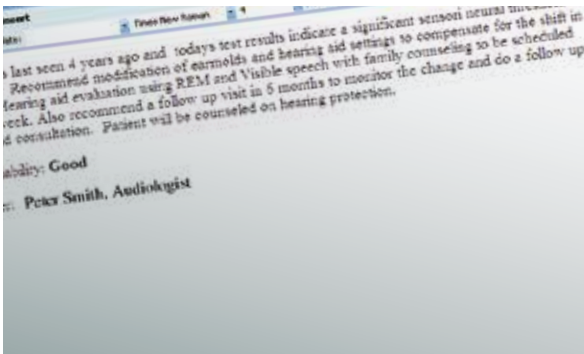

Página de informes del Diagnostic Suite  
(sólo AS608e)

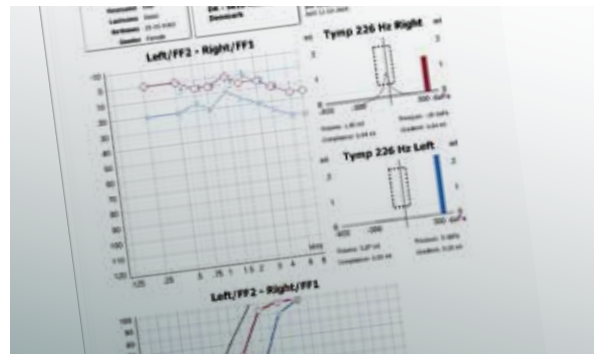

Diseño de impresión del Diagnostic Suite  
(sólo AS608e)

# Science made smarter

## Interacoustics es más que soluciones de vanguardia

Nuestra misión está clara. Queremos ser líderes en audiología y equilibrio traduciendo la complejidad en claridad:

- Desafíos convertidos en soluciones claras
- Conocimiento práctico
- Condiciones médicas invisibles hechas tangibles y tratables

Nuestra tecnología avanzada y nuestras soluciones sofisticadas facilitan las vidas de los profesionales de la salud.

Continuaremos estableciendo el estándar para todo un sector. No por el bien de la ciencia. Sino para capacitar a los profesionales para que puedan ofrecer un tratamiento excelente para millones de pacientes en todo el mundo.

[Interacoustics.com](http://Interacoustics.com)

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1  
5500 Middelfart  
Dinamarca

+45 6371 3555  
[info@interacoustics.com](mailto:info@interacoustics.com)

[interacoustics.com](http://interacoustics.com)

Vaya a la página web para explorar nuestra gama de productos completa

## Familia de Productos



**MT10**  
Timpanometro de mano



**AD226**  
Audiometro de diagnóstico



**Viot™**  
Videostoscopio

### Descripción técnica de nuestros productos

Todas las especificaciones técnicas de nuestros productos pueden ser descargadas desde nuestra página web.



**Interacoustics**