


Science **made** smarter\*

# MT10

La Tympanométrie  
devient portable

Le Tympanomètre  
MT10 est rapide et  
simple d'utilisation  
et permet l'obtention  
de résultats objectifs,  
qui ne pourraient être  
obtenus par simple  
otoscopie

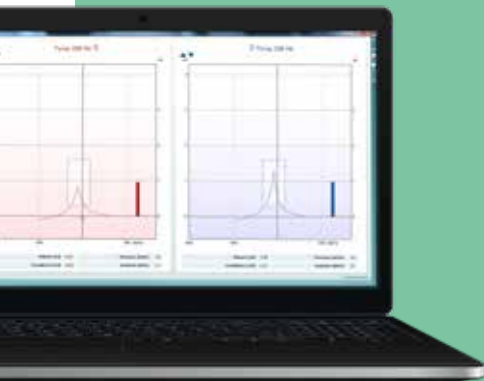

\*Et la science devient tout simplement plus facile

  
**Interacoustics**


Audiométrie

Tympanométrie  



PEA

OEA Adaptation des aides auditives Explorations vestibulaires

# Dépistage ultra facile avec le MT10

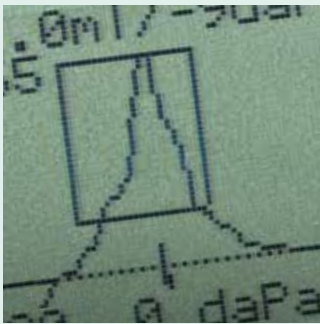

Une oreille moyenne saine conduit à un tympanogramme de ce type. Le pic se trouvera dans la zone de validation.

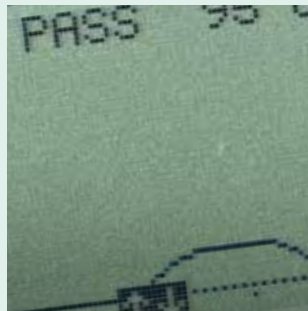

Les réflexes acoustiques (option) peuvent être mesurés en complément du diagnostic. Le résultat Pass/Refer (Valide/Non Valide) se lit immédiatement.



Dans la médecine moderne, il est primordial que les tests soient rapides et fiables. Le MT10 vous offre ces possibilités avec une configuration simple et économique.

#### Tympanogrammes simples et rapides

Les résultats sont obtenus rapidement et facilement sans intervention du patient. Ceci est particulièrement intéressant lorsque celui-ci est difficile à tester, ou s'il s'agit d'un jeune enfant. En outre, le MT10 permet de diagnostiquer rapidement une otite moyenne, cause majeure de perte auditive, temporaire ou permanente, chez l'enfant.

#### Application clinique


Le MT10 se destine également à des mesures diagnostiques telles que les tympanogrammes et les réflexes optionnels sont enregistrés de manière très détaillée. Avec le MT10 vous pouvez détecter les otites moyennes, les perforations tympaniques, les cholestéatomes et certains troubles neurologiques. Vous pouvez également vérifier les drains tympaniques et assurer le suivi d'un traitement médical.

#### Facilement transportable


- Léger
- Maniable
- Transfert des données pour impression
- Mallette de transport, imprimante thermique et adaptateur USB infrarouge en option

Le MT10 permet  
de diagnostiquer  
rapidement  
une otite


Mallette de  
transport en  
option

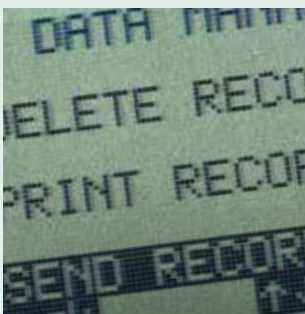

Facile de supprimer, imprimer ou envoyer les enregistrements vers le PC (nécessite un adaptateur USB en option pour le transfert ou l'impression des données).

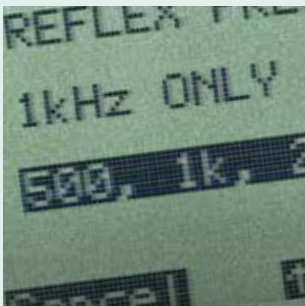

MT10 propose 4 fréquences de réflexe

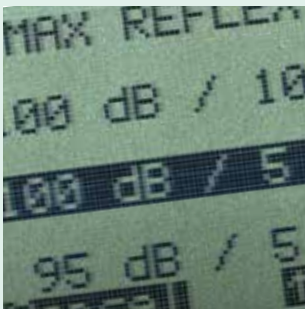

4 niveaux de réflexe sont disponibles dans le test réflexe en option (85-100dB).

#### Réflexe Acoustique Ipsilatéral

- Quatre tests de réflexe différents peuvent être réalisés par oreille, en sélection manuelle ou automatique de l'intensité. Le test est réalisé au niveau de pression correct et les caractéristiques du réflexe mesuré sont affichés à l'écran pour permettre la visualisation et l'interprétation par l'opérateur. 4 fréquences (500, 1000, 2000, 4000 Hz)
- Recherche de seuil en dB pour des niveaux simples ou multiples
- Détection automatique de seuil

#### 30 patients en mémoire

Le MT10 peut mémoriser les dossiers de 30 patients. Cela permet de nombreuses mesures qui seront imprimées ultérieurement.

#### Intégration PC

Le MT10 peut être relié à un PC pour fonctionner avec le logiciel Diagnostic Suite Windows® pour le transfert des données.

Diagnostic suite vous permet :

- le transfert des données tympanométriques
- une mise en page des impressions
- des rapports personnalisés et combinés
- de gérer les sessions patient
- de profiter d'une base de données en intégration PC : OtoAccess® et compatible Noah

#### Points essentiels du MT10

- -400 à +200 daPa
- Réflexes Ipsilatéraux en option
- Mémoire pour 30 patients
- Rapide et fiable



Exemple d'impression via l'imprimante thermique (en option).

# Science made smarter\*

## Interacoustics, bien plus que des solutions à la pointe de la technologie

Notre mission est claire. Nous voulons ouvrir la voie en matière d'audiologie et d'équilibre en traduisant la complexité en clarté :

- Des défis transformés en solutions claires
- Un savoir rendu concret
- Des pathologies invisibles qui deviennent tangibles et curables

Notre technologie avancée et nos solutions sophistiquées simplifient la vie des professionnels de santé.

Nous continuerons à ouvrir la voie à toute l'industrie. Pas seulement pour l'amour de la science, mais afin de permettre aux professionnels de fournir des traitements d'excellence à leurs millions de patients à travers le monde.

\*La science devient tout simplement plus facile

Interacoustics.fr

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1  
5500 Middelfart  
Danemark

+45 6371 3555  
info@interacoustics.com

interacoustics.com

Rendez-vous  
en ligne pour  
explorer notre  
gamme complète  
de produits

Pour  
compléter  
la gamme



**AT235**  
Tympanomètre diagnostique



**AD226**  
Audiomètre diagnostique



**Viot™**  
Vidéo-otoscope

### Spécifications du produit

Toutes les spécifications techniques et matérielle relatives à nos produits peuvent être téléchargées à partir de notre site internet.

  
**Interacoustics**